


ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے اس پورے رہنما کو دھیان سے پڑھیں۔
یہ ٹیسٹ ان ٹیسٹوں سے مختلف ہو سکتا ہے جو آپ نے پہلے استعمال کیے ہیں۔

SureScreen SARS-CoV-2

اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) کے لیے آپ کا قدم بہ قدم رہنما

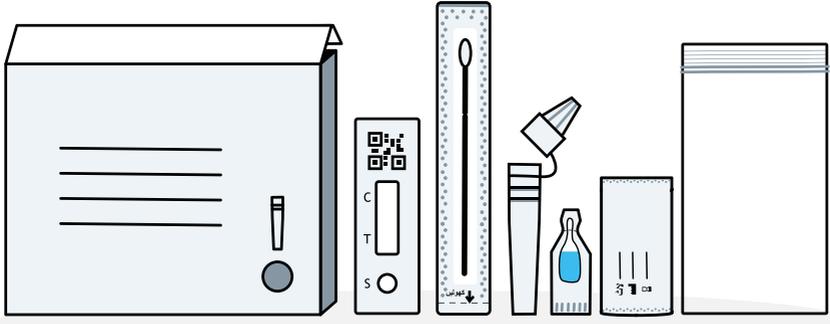

یہ ہدایات SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) کے لیے ہیں، پروڈکٹ کوڈ: COVID19AGVCGS7۔
یہ رہنما وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ COVID-19 کے مدنظر کس طرح خود کا، اپنے بچے کا یا دوسرے فرد کا ٹیسٹ کیا جائے، اور اپنے نتائج کی رپورٹ کس طرح کی جائے۔

متبادل زبان میں ورژن اور ویڈیو مظاہرے یہاں دستیاب ہیں:

gov.uk/covid19-self-test-help

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں

آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے



آپ کا قدم بہ قدم رہنما

مکمل ہدایات کو پڑھیں اور درست ترتیب میں اقدامات پر عمل کریں۔ ہر ٹیسٹ کو ترتیب دینے میں لگ بھگ 15 منٹ لگتے ہیں اور نتائج 10 منٹ پر تیار ہو جائیں گے۔

- 1 اپنے ٹیسٹ کی جگہ تیار کریں اور اپنے ٹیسٹ کٹ کے مشمولات کی پڑتال کریں صفحہ 6
- 2 اپنا ٹیسٹ ترتیب دیں صفحہ 8
- 3 اپنے سویب کا نمونہ لیں صفحہ 10
- 4 سویب کے نمونے پر کارروائی کریں صفحہ 12
- 5 اپنا نتیجہ پڑھیں صفحہ 14
- 6 اپنے نتیجے کی رپورٹ کریں صفحہ 15
- 7 آپ کے نتائج کا کیا مطلب ہے صفحہ 16
- 8 ٹیسٹ کی کارکردگی صفحہ 17
- 9 اپنا ٹیسٹ بحفاظت ضائع کریں صفحہ 17

COVID-19 میں مبتلا تقریباً 3 افراد میں سے 1 کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہے۔

یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں

ٹیسٹ کرنے کے بارے میں مشورہ

ذخیرہ اندوزی اور سنبھالنے سے متعلق رہنمائی

- پیکج کے مطابق بی کمرے کے درجہ حرارت (2-30°C) پر رکھیں۔ منجمد نہ کریں۔
- کٹ کو کمرے کے درجہ حرارت (15°C تا 30°C) پر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کٹ کو ٹھنڈی جگہ (15°C سے کم) پر اسٹور کیا گیا ہو تو استعمال کرنے سے پہلے اسے 20 منٹ تک کمرے کے معمول کے درجہ حرارت پر رکھیں۔
- ہر فرد کے لیے علیحدہ ٹیسٹ کٹ استعمال کریں۔ ٹیسٹ کٹ میں موجود سارے آئٹم صرف ایک بار استعمال ہو سکتے ہیں۔ آئٹم کو دوبارہ استعمال مت کریں۔ آپ کو ہر فرد کے نتیجے کی رپورٹ کرنی ہوگی۔
- اگر آپ کو اپنے ہاتھوں یا بینائی میں مسائل درپیش ہوں تو آپ کو سویب لینے اور ٹیسٹنگ کی کارروائی میں اپنی اعانت کے لیے کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- اگر آپ نے ناک چھدوایا ہے تو ٹیسٹ کرنے سے پہلے پیئرسنگ کو ہٹا دیں۔
- ان نمونوں کا استعمال کرنے سے گریز کریں جن میں خون لگا ہو۔ اگر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر آپ کی ناک سے خون بہا ہو تو ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ کو 24 گھنٹے انتظار کرنا چاہیے۔
- سویب کو سنبھالتے وقت سویب کے سرے کو نہ چھوئیں۔
- ٹیسٹ کٹ اور نتائج کے ونڈو والے حصے کو جہاں پر نمونہ ڈالا گیا ہے چھونے سے احتراز کریں۔

انتباہ

- اختتامی تاریخ کے بعد استعمال نہ کریں۔ براہ کرم باکس پر دی گئی اختتامی تاریخ پر عمل کریں۔
- کیسٹ کو استعمال کے لیے تیار ہونے تک مہر بند پاؤچ میں ہی رہنے دینا چاہیے۔
- یہ ٹیسٹ کٹس صرف انسانی استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں۔
- ٹیسٹنگ سے 15 منٹ پہلے ناک والا کوئی اسپرے استعمال نہ کریں۔
- یہ پروڈکٹ فطری ربر لیٹیکس سے نہیں بنایا گیا ہے تاہم، اصل صارف کو جس طرح یہ پروڈکٹ ڈیلیور کیا گیا ہے اس میں فطری ربر لیٹیکس کی موجودگی یا سراغ کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا جا سکتا۔

ان ہدایات پر احتیاط سے عمل کریں، یہ ٹیسٹ ان ٹیسٹوں سے مختلف ہوسکتا ہے جو آپ نے پہلے استعمال کیے ہیں۔

اس ٹیسٹ کے بارے میں

آپ کو از خود ٹیسٹ کیوں کرنا چاہیے

یہ COVID-19 از خود ٹیسٹ کٹ ناک کے لیے ایک سویب ٹیسٹ ہے۔ اسے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں کوئی علامت نہیں ہے، تاہم آپ کو ملکی رہنما خطوط پر عمل کر کے یہ چیک کرنا چاہیے کہ کس قسم کا ٹیسٹ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔

اگر COVID-19 کے لیے آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے:

- بیماری کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں تعاون کریں، آپ اور آپ کے گھرانے کو حکومت کے حالیہ رہنما خطوط پر عمل کرنا چاہیے: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- اپنی علامات شروع ہونے کے پہلے پچھلے 48 گھنٹوں میں یا اگر کوئی علامت نہیں ہے تو ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ دکھائی دینے کے دن سے آپ جن لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں یا جن مقامات پر گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ممکنہ COVID-19 کے انفیکشن کے لیے ٹیسٹ کر وایا جاسکے۔ مقامی اور ملکی رہنما خطوط پر ہمیشہ عمل کریں۔

اگر COVID-19 کے مدنظر آپ کی جانچ منفی ہے

اس امر کا امکان ہے کہ ٹیسٹ کیے جانے کے وقت آپ متعدی نہیں تھے۔ تاہم، ٹیسٹ کا منفی نتیجہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ میں کورونا وائرس نہیں ہے۔ آپ کو حکومت کے رہنما خطوط پر عمل کرنا جاری رکھنا چاہیے۔

مشورہ

اگر آپ کو فکر لاحق ہو تو مدد حاصل کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اپنے وجدان پر بھروسہ کریں۔

اگر آپ کو COVID-19 کی علامات ہوں یا COVID-19 کی زد میں آئے ہوں تو، براہ کرم NHS کی رہنمائی پر عمل کریں: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)

اگر آپ کو COVID-19 کی علامات ہوں، اور آپ کی کیفیت بگڑ جائے، یا سات دنوں کے بعد آپ کی طبیعت بہتر نہ ہو تو، NHS 111 کی آن لائن کورونا وائرس سروس کا استعمال کریں 111.nhs.uk

اگر آپ کی رسائی انٹرنیٹ تک نہیں ہے تو **NHS 111** کو کال کریں۔

طبی ایمرجنسی کے لیے **999** ڈائل کریں۔

آپ بچوں میں COVID-19 کی علامتوں کے بارے میں مزید مشورہ اس پر حاصل کر سکتے ہیں: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/)


یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے

یہ ٹیسٹ کس کے لیے موزوں ہے




12 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے

12 سال سے کم عمر کے بچوں کا ٹیسٹ کسی بالغ فرد کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ بچے کا ٹیسٹ کرنے میں پُر سکون محسوس نہیں کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ نہ کریں۔ اگر بچہ کوئی نمایاں درد یا تکلیف محسوس کرتا ہے تو ٹیسٹ جاری نہ رکھیں۔

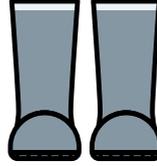

12-17 سال کی عمر کے جوان کے لیے

بالغ فرد کی نگرانی میں خود سے ٹیسٹ کریں اور رپورٹ کریں۔ بالغ فرد بھی ضروری ہونے پر ٹیسٹ کر سکتا ہے۔

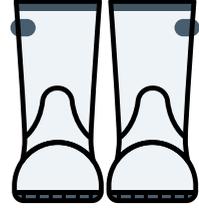

18+ سال کی عمر کے بالغان کے لیے

اگر ضرورت ہو تو اعانت لے کر، خود سے ٹیسٹ کریں اور رپورٹ کریں۔

کتنی مرتبہ ٹیسٹ کرنا ہے

آپ کو کتنی بار ٹیسٹ کرنا چاہیے یہ آپ کے حالات اور موجودہ ملکی یا مقامی رہنما خطوط پر انحصار کرتے ہوئے مختلف ہو سکتا ہے۔

اضافی مدد کہاں سے تلاش کریں

از خود ٹیسٹ کی مزید معلومات یہاں سے حاصل کریں: gov.uk/covid19-self-test-help

یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے، پروڈکٹ کوڈ: COVID19AGVCGS7۔

پروڈکٹ کوڈ: COVID19AGVCGS7

1. اپنے ٹیسٹ کی جگہ تیار کریں

اہم



کٹ کو کمرے کے درجہ حرارت (15°C تا 30°C) پر استعمال کرنا چاہیے۔
اگر کٹ کو ٹھنڈی جگہ (15°C سے کم) پر اسٹور کیا گیا ہو تو استعمال کرنے سے
پہلے اسے 20 منٹ تک کمرے کے معمول کے درجہ حرارت پر رکھیں۔

آپ کو ضرورت ہوگی: ایک ٹائمر (جیسے کہ
گھڑی یا دیوار گھڑی)، ٹشو، ہینڈ سینیٹائزر یا
صابن اور گرم پانی۔


15
منٹ



ٹیسٹنگ سے 15 منٹ پہلے
ناک والا کوئی اسپرے
استعمال نہ کریں

اس ہدایاتی رہنما کو بغور پڑھیں۔

1

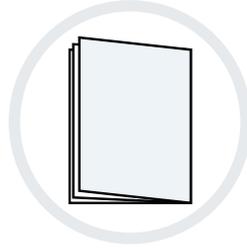

ٹیسٹ شروع کرنے سے عین قبل ایک چپٹی سطح
کو صاف کریں، اس کی صفائی کریں اور اسے
خشک کریں۔

2



صابن اور گرم پانی، یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر کے،
20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔

3




یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں


اپنی کٹ کے مشمولات کی پڑتال کریں

4

آپ کے ٹیسٹ باکس میں درج ذیل اشیاء ہونی چاہئیں:

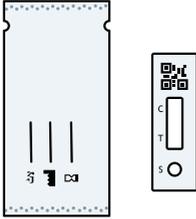

مہر بند پاؤچیز میں ٹیسٹ کیٹ

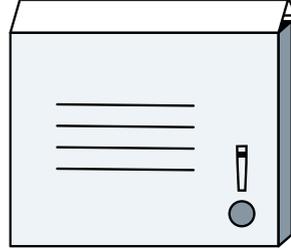

ٹیوب ہولڈر کے ساتھ باہری باکس



سویب



پلاسٹک کے فضلے
والے بیگ



استعمال کے لیے
ہدایات (یہ کتابچہ)



استخراجی ٹیوب



مانع والے ساٹھے
(استخراجی بفر وانلز)

مشورہ

اگر کوئی چیز خراب، ٹوٹی ہوئی یا غائب ہو تو، کیا کریں

اگر آپ کو کوئی چیز خراب شدہ، ٹوٹی ہوئی یا غائب نظر آتی ہے تو، براہ کرم ٹیسٹ کٹ استعمال نہ کریں۔ آپ کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر پر کال کر کے فیڈ بیک فراہم کر سکتے ہیں۔ لائنیں روزانہ، 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔

کال کریں: **119** (موبائل اور لینڈ لائنوں سے مفت)۔

ہم 200 زبانوں نیز برطانوی اشاراتی زبان میں تعاون پیش کرتے ہیں۔

اگر آپ کو ڈیوائس سے کوئی ضرر پہنچتا ہے، تو یہاں رپورٹ کریں:


coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. اپنا ٹیسٹ ترتیب دیں


5 ٹیسٹ کیسٹ کو مہر بند پاؤچ سے باہر نکالیں اور صاف چپٹی سطح پر اسے رکھیں۔

انتباہ

کھل جانے پر، 1 گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں، ورنہ ٹیسٹ باطل ہو جائے گا۔ اس کیسٹ اور پاؤچ کے مشمولات کو ضائع کر دیں جو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک مہر بند پاؤچ سے باہر رہے ہیں۔

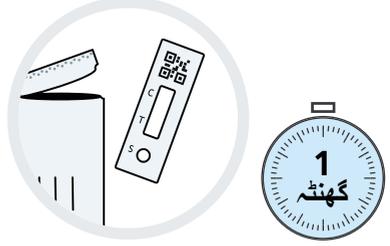

6 استخراجی ٹیوب کو استخراجی ٹیوب بولڈر (باکس کے ڈھکن پر سوراخ کردہ مدور حصہ) میں رکھیں تاکہ سیال ٹپکنے سے بچایا جائے۔

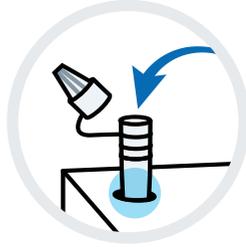

7 مائع والے سائے کو کھینچ کر کھولنے کے لیے احتیاط سے موڑیں۔ اسے اپنے چہرے سے دور رکھ کر کھولیں اور دھیان رکھیں کہ ذرا بھی مائع باہر نہ چھلکے۔

انتباہ

استخراجی بفر میں ایسا مواد ہوتا ہے جو چہرے یا جلد کے ساتھ رابطے میں آنے پر جلن پیدا کر سکتا ہے۔ اگر محلول کا جلد یا آنکھ سے رابطہ ہوتا ہے تو، خوب پانی سے دھوئیں۔ اگر جلد میں جلن پیدا ہوتی ہے تو براہ کرم طبی توجہ حاصل کریں۔



8 استخراجی ٹیوب کھولیں اور سائے سے تمام مائع آپستگی سے ٹیوب کے اندر نچوڑ دیں۔

دھیان رکھیں اور خالی مائع سائے کو فراہم کردہ پلاسٹک کے فضلے والے بیگ میں رکھیں۔



یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں

9 ٹشو میں آہستگی سے اپنی ناک صاف کریں اور اسے بند کوڑے دان میں پھینک دیں۔

اگر آپ کسی اور کی مدد کر رہے ہیں یا بچے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کی ناک صاف کرنے میں ان کی مدد کریں اور ٹشو کو کسی بند کوڑے دان میں پھینک دیں۔



10 صابن اور گنگنا پانی استعمال کر کے دوبارہ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں یا سینیٹائزر استعمال کریں۔


اگر آپ کسی دوسرے شخص کی مدد کر رہے ہیں یا کسی بچے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ دھلانے میں ان کی مدد کریں۔



11 اپنے سامنے مہر بند ریپر میں سویب کو تلاش کریں۔ نرم، فیبرک والے سرے کی پہچان کریں۔

اہم

سویب کے نرم، فیبرک والے سرے کو مس نہ کریں۔ اگر سویب کے فیبرک والے سرے کو مس کر دیا گیا ہے تو سویب کو ضائع کر دیں۔

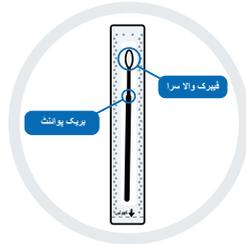

12 آرام سے ادھیڑ کر سویب کی پیکینجنگ کو دوسرے سرے سے کھولیں، صرف اسی وقت جب آپ استعمال کے لیے تیار ہوں۔



3. اپنے سویب کا نمونہ لیں


اگر آپ کسی اور کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو براہ کرم صفحہ 11 پر دی گئی ہدایات کو دیکھیں۔

اجم

صرف ناک والا نمونہ استعمال کر کے ہی ٹیسٹ انجام دیا جانا چاہیے۔


13 سویب کے فیبرک والے سرے کو ایک نتھنے میں ڈالیں (آپ کی ناک میں لگ بھگ 1.5 سنٹی میٹر اوپر)۔

13

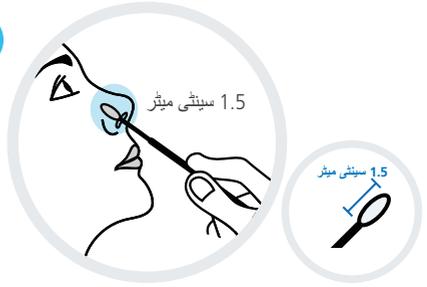

14 اپنے نتھنے کے اندر چاروں طرف مدور حرکت میں 5 بار کم سے کم 5 سیکنڈ کے لیے سویب سے آہستگی سے پونچھیں۔


14

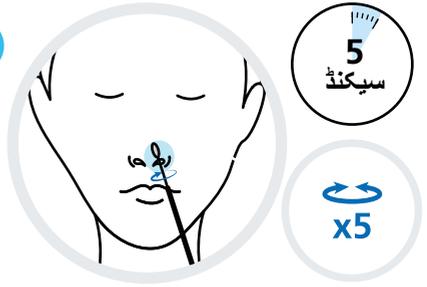

اسے آہستگی سے نکالیں۔ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اپنے نتھنے میں کافی اندر تک نہیں دھکیلنا ہے۔ سویب کو واپس اصل پیپر پیکجنگ میں نہ ڈالیں۔

15 وہی سویب استعمال کر کے، سویب کے فیبرک والے سرے کو دوسرے نتھنے میں ڈالیں (جو آپ کی ناک میں لگ بھگ 1.5 سنٹی میٹر اوپر ہوتا ہے)۔

15

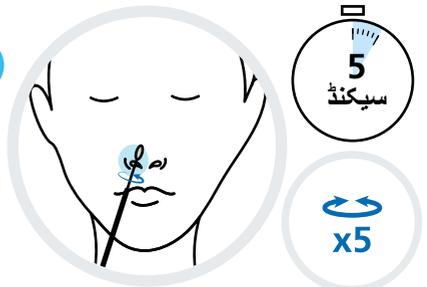

اپنے نتھنے کے اندر چاروں طرف مدور حرکت میں 5 بار کم سے کم 5 سیکنڈ کے لیے سویب سے آہستگی سے پونچھیں۔

یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں


کسی دوسرے پر ٹیسٹ کرنا

مشورہ

12 سال سے کم عمر کے بچوں کا ٹیسٹ کسی بالغ فرد کو کرنا چاہیے۔ تیاری اور بچے کا ٹیسٹ کرنے کے طریقے سے متعلق ذیل کی رہنمائی پر عمل کریں۔ آپ ایک نمائشی ویڈیو [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) پر دیکھ سکتے ہیں۔


اگر آپ کسی بچے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو، انہیں ٹیسٹ کٹ دکھائیں اور ان سے بات کریں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو، انہیں کسی کی گود میں بٹھائیں یا کسی سے ان کے ہاتھوں کو پکڑوائیں۔

13

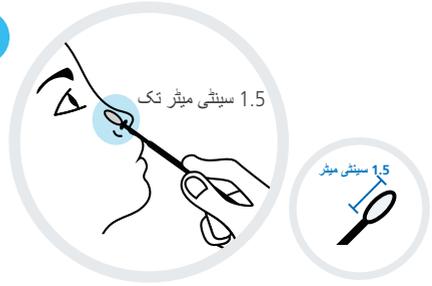


سویب کے فیبرک والے سرے کو ان کے نتھنوں میں (1.5 سینٹی میٹر تک) ڈالیں یا یہاں تک کہ آپ کو کچھ مزاحمت محسوس ہو۔ ان کے نتھنے کے اندر چاروں طرف مدور حرکت میں 5 بار کم سے کم 5 سیکنڈ کے لیے سویب سے آہستگی سے پونچھیں۔ اسے آہستگی سے نکالیں۔ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ان کے نتھنے میں کافی اندر تک نہیں دھکیلنا ہے۔ سویب کو واپس اصل پیپر پیکجنگ میں نہ ڈالیں۔

14

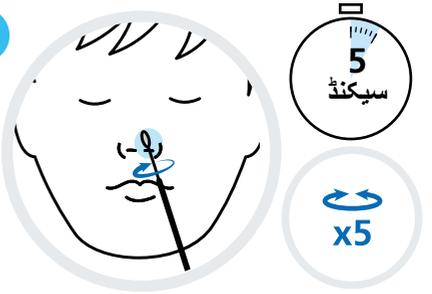

وہی سویب استعمال کرتے ہوئے، سویب کا فیبرک والا سرا ان کے دوسرے نتھنے میں (1.5 سینٹی میٹر تک) ڈالیں یا یہاں تک کہ آپ کو کچھ مزاحمت محسوس ہو۔

15

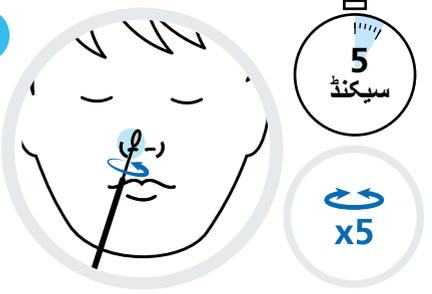


ان کے نتھنے کے اندر چاروں طرف مدور حرکت میں 5 بار کم سے کم 5 سیکنڈ کے لیے سویب سے آہستگی سے پونچھیں۔

4. سویب کے نمونے پر کارروائی کریں

مشورہ

بہترین کارکردگی کے لیے، اپنا نمونہ لینے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سویب ٹیسٹ کریں۔


16 استخراجی ٹیوب لیں اور سویب کے فیبرک والے سرے کو استخراجی ٹیوب کے اندر ڈالیں تاکہ یہ مائع کے اندر ہو۔
اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کی مدد سے ٹیوب کے نچلے حصے کو بھینچ کر سویب کے سرے کو ٹیوب باڈی کے اندرونی حصے کے ساتھ مضبوطی سے دبائیں۔
بھینچتے ہوئے سویب کو کم از کم 10 سیکنڈ تک گھمائیں۔

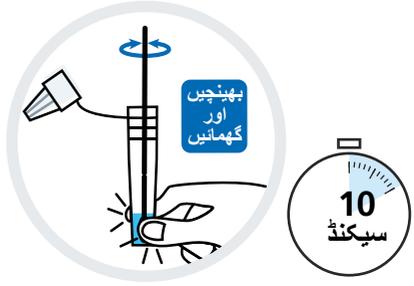

17 ناک والے سویب کو تھوڑا سا اٹھائیں پھر سویب کو "بریک پوائنٹ" پوزیشن پر توڑ دیں۔ سویب کے سرے کو استخراجی ٹیوب میں چھوڑ دیں۔
سویب بینڈل کو فراہم کردہ پلاسٹک کے فضلہ والے بیگ میں رکھیں۔



18 ڈراپر کیپ کو استخراجی ٹیوب کے اوپر مضبوطی سے فٹ کریں۔

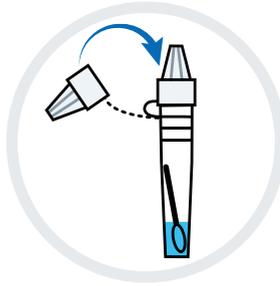


یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں


یقینی بنائیں کہ ٹیسٹ کیسٹ صاف اور سپاٹ
سطح پر ہو۔
ٹیسٹ کے دوران کیسٹ کو نہ ہلائیں۔

19

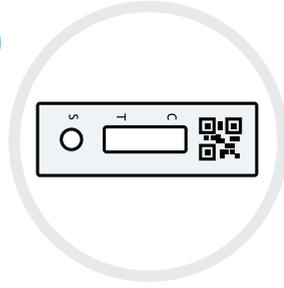

استخراجی ٹیوب کو آرام سے دبا کر مائع کے 3
قطرے ٹیسٹ اسٹریپ پر سیمپل ویل (S) کے اندر ڈالیں۔
یقینی بنائیں کہ آپ ہوا کا بلبلہ نہیں بلکہ، مائع ٹپکا
رہے ہیں۔
استخراجی ٹیوب کو پلاسٹک کے فضلہ والے بیگ میں
رکھیں۔


20

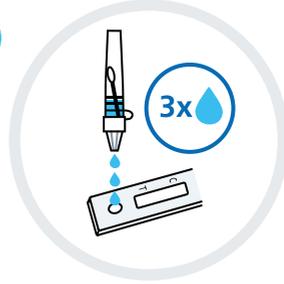

ٹائمز شروع کریں اور نتیجہ پڑھنے سے قبل 10 منٹ
انتظار کریں۔

21

ٹیسٹ ہو رہا ہو تو حرکت نہ کریں۔ 10 منٹ کے بعد
نتیجے کی وضاحت کریں۔ 20 منٹ کے بعد نہ پڑھیں۔
آپ کے ٹیسٹ کا نتیجہ آپ کے پڑھ پانے سے قبل آپ
کو پورے 10 منٹ تیاری کے وقت کا انتظار کرنا
ضروری ہے۔

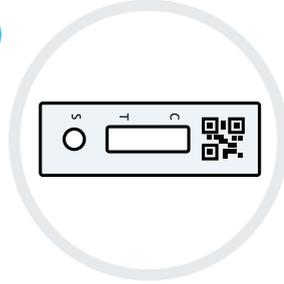

5. اپنا نتیجہ پڑھیں

اہم

ٹیسٹ کو 20 منٹ سے زیادہ دیر تک تیار ہونے کے لیے مت چھوڑیں۔ اس سے نتیجہ باطل ہو جائے گا۔




نتیجہ پڑھنے کے لیے 10 منٹ انتظار کریں۔



مثبت نتیجہ

دو لکیریں نمودار ہوتی ہیں۔ ایک رنگین لکیر کنٹرول لائن والے حصہ (C) میں ہونی چاہیے، اور دوسری رنگین لکیر ٹیسٹ لائن والے حصہ (T) میں ہونی چاہیے۔


دو لائنیں، ایک C سے آگے اور ایک T سے آگے، حتیٰ کہ دھندلی لائنیں ظاہر کرتی ہیں کہ ٹیسٹ مثبت ہے۔

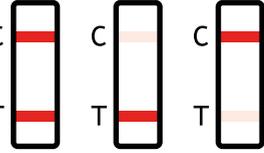

اہم

اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ خود کو انسولیٹ کریں، آپ کے گھرانے کو چاہیے کہ خود کو انسولیٹ کرنے سے متعلق حکومت کے رہنما خطوط پر عمل کریں:


[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

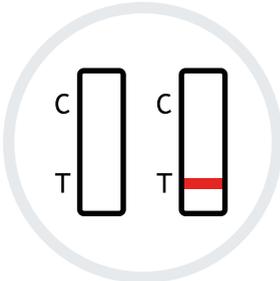

باطل نتیجہ



کنٹرول لائن (C) نمودار ہونے میں ناکام ہوتی ہے۔

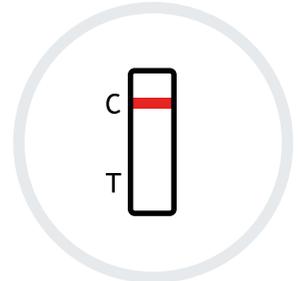

منفی نتیجہ



ایک رنگین لکیر کنٹرول لائن والے حصہ (C) میں نمودار ہوتی ہے۔ ٹیسٹ لائن والے حصہ (T) میں کوئی لکیر نمودار نہیں ہوتی ہے۔

یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے


اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں

6. اپنے نتیجے کی رپورٹ کریں

آپ کو چاہیے کہ NHS کو اپنے مثبت، منفی یا باطل نتائج کی رپورٹ کریں

تمام ٹیسٹ کے نتائج کو ریکارڈ کرنے سے سائنس دانوں کو وائرس کی نئی ابتلاء کا پتہ لگانے اور اس پر جوابی اقدام کرنے کا طریقہ بتانے میں مدد ملتی ہے۔

اگر لوگ صرف مثبت نتیجے کی ہی رپورٹ کریں تو، کیسز کی سطحیں اس سے زیادہ نظر آتی ہیں جتنی واقعتاً وہ ہیں۔ لہذا یہاں تک کہ آپ کا نتیجہ منفی یا باطل ہو تو، آپ NHS کی معلومات درست رہنے کو یقینی بنائیں گے۔ آپ کو اپنے نتیجے کی رپورٹ کرنے کے لیے QR کوڈ، یا اس کے نیچے موجود ID نمبر درکار ہوتا ہے۔

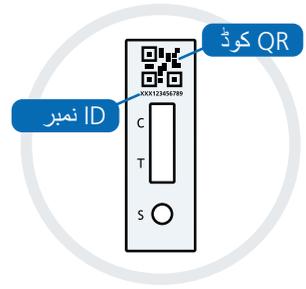

آن لائن رپورٹ کریں (جلد سے جلد)۔
اگر آپ انگلینڈ، ویلز یا شمالی آئرلینڈ میں رہتے ہیں تو ملاحظہ کریں gov.uk/report-covid19-result

اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں تو ملاحظہ کریں covidtest.scot



یا بذریعہ ٹیلیفون رپورٹ کریں۔

اگر آپ اپنے نتیجے کی آن لائن رپورٹ نہیں دے سکتے تو 119 پر کال کریں (موبائل اور لینڈ لائنوں سے مفت)۔

لاٹینیں روزانہ کھلی رہتی ہیں۔ 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک۔



پروٹکٹ کوڈ: COVID19AGVCS7

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں

7. آپ کے نتائج کا کیا مطلب ہے

آپ نے اپنا ٹیسٹ صرف اسی وقت مکمل کیا ہے جب آپ نے اپنے نتیجے کی رپورٹ کر دی ہو

مثبت نتیجہ +

اگر آپ کو مثبت نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو، اس کا امکان ہے کہ آپ فی الحال COVID-19 سے متاثر ہیں اور دوسروں کو متاثر کرنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ آپ کو خود کو آئسولیٹ کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے نتیجے کی رپورٹ دیں گے، تو آپ کو اگلے مراحل انجام دینے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔

انتباہ

آپ کو، اور کوئی بھی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے ان کو موجودہ ملکی اور مقامی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے۔ اسے یہاں سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

منفی نتیجہ -

اگر آپ کو منفی نتیجہ ملتا ہے تو، اس امر کا امکان ہے کہ ٹیسٹ کیے جانے کے وقت آپ متعدی نہیں تھے۔ تاہم، ٹیسٹ کا منفی نتیجہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ میں COVID-19 نہیں ہے۔

اگر آپ کا ٹیسٹ منفی ہے تو، آپ پر لازم ہے کہ ملکی اور مقامی اصولوں اور رہنما خطوط پر عمل کرتے رہیں، جس میں باقاعدگی سے ہاتھ دھونا، سماجی دوری بنانا اور ضرورت پڑنے پر فیس کورنگ پہننا شامل ہے۔

اگر آپ میں علامات فروغ پاتی ہیں تو آپ کو خود کو آئسولیٹ کرنا چاہیے اور یہاں سے موجودہ تجویز کردہ ٹیسٹ حاصل کرنا چاہیے: gov.uk/get-coronavirus-test یا 119 پر کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر کو کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ لائنیں روزانہ 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔

آپ کو اور آپ کے گھرانے کو قومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

باطل نتیجہ



اگر آپ کو باطل نتیجہ ملتا ہے تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ صحیح سے نہیں ہوا ہے اور یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ کیا گیا تھا تو کیا آپ کو وائرس تھا۔ آپ کو جلد از جلد پیک سے دوسرا ٹیسٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ٹیسٹ سے کسی بھی چیز کا دوبارہ استعمال نہ کریں، اور مرحلہ 1 سے ٹیسٹ کا طریقہ کار شروع کریں۔

اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو، ٹیسٹ کٹ کا استعمال فوری طور پر روک دیں۔
[gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) کو ملاحظہ کر کے، NHS COVID-19 ایپ کا استعمال کر کے یا کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر کو 119 پر کال کر کے ٹیسٹ کٹ کے نئے پیک کا آرڈر کریں۔ لائنیں روزانہ 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔

8. ٹیسٹ کی کارکردگی

اگر کسی کو اعلیٰ درجے کا کورونا وائرس (COVID-19) ہے تو ٹیسٹ سے مثبت نتیجہ ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایسے لوگوں کا پتہ لگنے کا سب سے زیادہ امکان ہے جو فی الحال متعدی ہیں اور جنہیں فوری طور پر خود کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

9. اپنا ٹیسٹ بحفاظت تلف کریں



آپ کا ٹیسٹ مکمل ہو جانے پر، استعمال شدہ تمام مواد فراہم کردہ فضلہ والے بیگ میں ڈالیں اور اپنے عمومی گھریلو کچرے میں ڈالیں۔

تلف کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔

اس کتابچے میں مذکور معلومات (29 ستمبر 2021) تک درست ہیں۔

پروڈکٹ کوڈ: COVID19AGVCS7

پروڈکٹ کا نام: SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیٹ (ناک کا سویب) (گولڈ)

اپنے ٹیسٹ کے نتائج کا ایک نوٹ بنائیں

یہ آپ کے اپنے ریکارڈ کے لیے ہے۔ آپ کو اب بھی NHS کو اپنے نتیجے کی رپورٹ کرنی چاہیے (معلومات کے لیے صفحہ 15 دیکھیں)۔
ملاحظہ کریں: gov.uk/report-covid19-result

اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں تو ملاحظہ کریں covidtest.scot

ٹیسٹ کس نے کیا ہے	تاریخ	وقت	ٹیسٹ کا نتیجہ

آپ کی کٹ درج ذیل اشیاء پر مشتمل ہے

7-پیک	آئٹم
1	استعمال کے لیے ہدایات (یہ کتابچہ)
7	مہر بند پاؤچیز میں ٹیسٹ کیسٹ
7	مانع والے سائے (استخراجی ہفر وائلز)
7	استخراجی ٹیوب
7	سویب
7	پلاسٹک کے فضلے والے بیگ

مزید معلومات کا خلاصہ

<p>gov.uk/covid19-self-test-help</p>	<p>از خود ٹیسٹنگ میں اضافی تعاون متبادل زبان کے ورژن اور ویڈیو مظاہرے تیاری کرنے اور بچے کا ٹیسٹ کرنے کے لیے رہنمائی</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/</p>	<p>سیلف انسولیشن پر رہنمائی اور معالجاتی معلومات</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19</p>	<p>COVID-19 پر NHS کی رہنمائی</p>
<p>111.nhs.uk یا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو NHS 111 پر کال کریں</p>	<p>اگر آپ کو COVID-19 کی علامات ہوں، اور آپ کی کیفیت بگڑ جائے، یا سات دنوں کے بعد آپ کی طبیعت بہتر نہ ہو تو، NHS 111 کی آن لائن کورونا وائرس سروس کا استعمال کریں:</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children</p>	<p>بچوں میں COVID-19 کی علامات</p>
<p>coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</p>	<p>اگر آپ کو ڈیوائس سے کوئی ضرر پہنچتا ہے، تو یہاں رپورٹ کریں</p>
<p>gov.uk/report-covid19-result</p>	<p>نتیجے کی آن لائن رپورٹ کریں (انگلینڈ، ویلز یا شمالی آئرلینڈ):</p>
<p>covidtest.scot</p>	<p>نتیجے کی آن لائن رپورٹ کریں (اسکاٹ لینڈ):</p>
<p>gov.uk/get-coronavirus-test</p>	<p>حالیہ تجویز کردہ ٹیسٹ کا آرڈر کریں</p>
<p>119 پر کال کریں</p>	<p>کوئی چیز خراب ہے، ٹوٹی ہوئی ہے یا غائب ہے زبان میں تعاون (بشمول برطانوی اشاراتی زبان) اپنے نتیجے کی اطلاع دیں (اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے)</p>

یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج NHS کو رپورٹ کریں

اس ڈیوائس کی سپلائی کی صرف NHS ٹیسٹ اینڈ ٹریس پروگرام کے تحت ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر (DHSC) کی تعیناتی کے حصے کے بطور اجازت ہے۔



مینوفیکچرر

SureScreen Diagnostics

1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
Derby, DE1 3QB, United Kingdom (یونائیٹڈ کنگڈم)



سویب کی معلومات:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020 Taizhou,
Zhejiang, People's Republic of China (چین)
یا



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (چین)



علامات

پیکج خراب ہونے
پر پروڈکٹ استعمال
مت کریں

عمومی رہنمائی اور
تنبیہ کے لیے ٹیسٹ
کرانے کے بارے میں
مشورہ والے سیکشن
سے رجوع کریں



مینوفیکچرر



ایٹھلین ڈائی آکسائیڈ کا
استعمال کر کے جراثیم
سے پاک کیا ہوا

STERILEEO

2 - 30°C
پر اسٹور کریں



ان ویٹرو ڈائگنوسٹک
میڈیکل ڈیوائس



اختتامی تاریخ



لاٹ نمبر



دوبارہ استعمال
مت کریں



7 ٹیسٹ کے لیے
کافی ہے



ہدایات برائے
استعمال سے
رجوع کریں



کیٹلاگ نمبر



ورژن 5 مؤثر تاریخ 29/09/2021

یہ ہدایات برائے استعمال SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہیں،
مینوفیکچرر: SureScreen Diagnostics اور پروڈکٹ کوڈ: COVID19AGVCS7

یہ ہدایاتی کتابچہ صرف SureScreen SARS-CoV-2 اینٹیجین ریپڈ ٹیسٹ کیسٹ (ناک کا سویب) (گولڈ) سے متعلق ہے