

તમે ટેસ્ટ શરૂ કરો તે પહેલાં આખી માર્ગદર્શિકા ધ્યાનથી વાંચો.

તમે અગાઉ જેનો ઉપયોગ કર્યો છે તેના કરતાં આ પરીક્ષણ અલગ હોઈ શકે છે.

Orient Gene રેપિડ Covid-19 (એન્ટિજન) સેલ્ફ-ટેસ્ટ માટે તમારી સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ગાઈડ



ઉપયોગ માટેની આ સૂચનાઓ Orient Gene રેપિડ Covid-19 (એન્ટિજન) સેલ્ફ-ટેસ્ટ (GCCOV-502a-H70GE) સાથે જ સંબંધિત છે.

COVID-19 માટે તમારો પોતાનો અને અન્ય વ્યક્તિનો ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવો અને NHSને પરિણામો અંગે જાણ કેવી રીતે કરવી તે આ માર્ગદર્શિકા સમજાવે છે.

વેલ્શ સહિતનાં **વૈકલ્પિક ભાષા** સંસ્કરણો અને વિડીયો ડેમોન્સ્ટ્રેશન્સ [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) પર ઉપલબ્ધ છે

તમારા ટેસ્ટનાં બધાં પરિણામો NHSને જણાવો

તમારે શું કરવાનું છે

તમારી સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ માર્ગદર્શિકા

સૂચનાઓ વાંચો અને યોગ્ય ક્રમમાં પગલાંઓને અનુસરો. પ્રત્યેક ટેસ્ટ સેટ અપ કરવામાં લગભગ 15 મિનિટ લાગશે અને પરિણામો વધુ 15 મિનિટ બાદ તૈયાર હશે.

15
મિનિટનો
સેટ અપ

આ પુસ્તિકાની વિષયવસ્તુ

વિભાગ	શીર્ષક	પાન
1	તમારા ટેસ્ટનો વિસ્તાર તૈયાર કરો	6
	તમારી ટેસ્ટ કિટની સામગ્રી ચકાસો	7
2	તમારું ટેસ્ટ સેટ અપ કરો	8
3	તમારો સ્વેબ સામ્પલ લો	10
	કોઈ અન્ય માટે ટેસ્ટ કરવો	11
4	સ્વેબ નમૂના પર પ્રક્રિયા કરો	12
5	તમારું પરિણામ વાંચો	14
6	તમારા પરિણામ અંગે જાણ કરો	15
7	તમારા પરિણામનો શો અર્થ છે	16
8	ટેસ્ટનો દેખાવ	17
9	તમારી ટેસ્ટ કિટનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરો	17
	તમારા ટેસ્ટનાં પરિણામોની નોંધ બનાવો	18

COVID-19 જેમને હોય એવા 3માંથી 1 લોકોને ખબર હોતી નથી કે તેમને આ રોગ છે.

નિયમિત સેલ્ફ-ટેસ્ટથી આપણે ફેલાવો ધીમો કરી શકીએ છીએ અને આપણાં કુટુંબો અને સમાજોમાં સૌથી વધુ કમજોર લોકોનું રક્ષણ કરવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ.

ટેસ્ટ કરાવવા વિશે સલાહ

તમને સહાયતા કરવા માટે સમગ્ર માર્ગદર્શિકામાં ઉપયોગી ટિપ્સ, સલાહ અને ચેતવણીનાં ખાનાંઓ છે. આ સૂચનાઓનું કાળજીપૂર્વક સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પાલન કરવાથી તમને વિશ્વસનીય પરિણામ મળવાની સંભાવનામાં વધારે રહેશે.

સામાન્ય માર્ગદર્શન અને ચેતવણીઓ

- જો તમને સ્વેબિંગ દરમિયાન નાકમાંથી લોહી નીકળે તો કૃપા કરીને સ્વેબિંગ અટકાવી દો. સ્વેબનો ટેસ્ટ કરી શકાશે નહિ.
- આ પ્રોડક્ટને કુદરતી રબર લેટેક્સ વડે બનાવવામાં આવી નથી, પરંતુ છેવાડાના વપરાશકર્તાને ડિલિવર કર્યા મુજબ પ્રોડક્ટમાં કુદરતી રબર લેટેક્સની હાજરી કે તેના અંશો હોવાની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી શકાય નહિ.
- ટેસ્ટ કિટ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.
- એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ હોલ્ડરને બાદ કરતાં કિટના બધા ઘટકો એક વખતના ઉપયોગની વસ્તુઓ છે. એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ હોલ્ડરને બાદ કરતાં સ્વેબ અથવા એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ જોવા કિટના કોઈ પણ વપરાયેલા ઘટકોનો ફરીથી ઉપયોગ કરશો નહિ.
- કિટનાં અલગ-અલગ બોક્સમાંથી ઘટકોને મિક્સ કરશો નહિ. માત્ર આ કિટમાં પૂરા પાડેલા કિટના ઘટકોનો જ ઉપયોગ કરો.
- ટેસ્ટ કેસેટ ઘરમાં સફાઈ માટેનાં ઉત્પાદો (ખાસ કરીને બ્લીચ)ના સંપર્કમાં આવેલ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરશો નહિ, કારણ કે તેનાથી ખોટું પરિણામ મળી શકે છે.
- સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં ટેસ્ટ કરશો નહિ, કારણ કે આનાથી ખોટું પરિણામ મળી શકે છે.
- આ કિટ માત્ર માણસો માટે જ બનાવવામાં આવી છે.
- એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ હોલ્ડરનો નિકાલ કરશો નહિ, તેનો બધા ટેસ્ટ માટે ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સલાહ

- ટેસ્ટ કિટનો ઓરડાના સામાન્ય તાપમાને અથવા ઠંડી સૂકી જગ્યાએ (2°C થી 30°C) સંગ્રહ કરો.
- તેને સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકશો નહિ અથવા ફ્રીઝરમાં સંગ્રહ કરશો નહિ.
- કિટનો ઉપયોગ રૂમના તાપમાને (15°C થી 30°C) કરવો જોઈએ. જો કિટનો સંગ્રહ 15°C થી ઓછા તાપમાનવાળી જગ્યાએ કરવામાં આવ્યો હોય તો તેનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં 30 મિનિટ માટે તેને ઓરડાના સામાન્ય તાપમાને મૂકી રાખો.

શા માટે તમારે સેલ્ફ-ટેસ્ટ કરવો જોઈએ

આ રેપિડ COVID-19 (એન્ટિજન) સેલ્ફ-ટેસ્ટ કિટ એ તમે ચેપગ્રસ્ત થયા છો કે કેમ તે તપાસવા માટેનો એક સ્વેબ ટેસ્ટ છે. તે એવા લોકો માટે છે જેઓને લક્ષણો હોય તેમજ એવા લોકો જેમને લક્ષણો ન હોય. જોકે, તમારા માટે કયા પ્રકારનો ટેસ્ટ યોગ્ય છે તે ચેક કરવા માટે તમારે રાષ્ટ્રીય નિર્દેશોનું પાલન કરવું જોઈએ.

જો COVID-19 માટે તમારો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે તો:

- તમારે રોગનો ફેલાવો મર્યાદિત કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ, તમારે અને તમારા ઘરના લોકોએ હાલના સરકારી નિર્દેશોનું પાલન કરવું જોઈએ: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
- તમારાં લક્ષણો શરૂ થયાં તે અગાઉ છેલ્લા 48 કલાકમાં અથવા જો કોઈ લક્ષણો હાજર ન હોય તો પોઝિટિવ ટેસ્ટ પરિણામ આવ્યાના દિવસથી તમે જેઓની સાથે ઘનિષ્ટ સંપર્કમાં આવ્યા હો એવા લોકો અને જે સ્થળોની મુલાકાત લીધી હોય તે અંગે લોકોને જાણ કરો અને સંભવિત COVID-19 ચેપ માટે ટેસ્ટ કરાવવાનું કહો. હંમેશાં સ્થાનિક અને રાષ્ટ્રીય નિર્દેશોનું પાલન કરો.

જો તમારો COVID-19 માટેનો ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે તો

એ શક્ય છે કે ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય તે સમયે તમે ચેપગ્રસ્ત ન હો. જોકે, નેગેટિવ ટેસ્ટ પરિણામથી એવી કોઈ ખાતરી મળતી નથી કે તમને કોરોનાવાઇરસ નથી. તમારે સરકારી નિર્દેશોનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.


સલાહ

જો તમને અથવા તમારા બાળક/બાળકોને કોરોનાવાઇરસનાં (COVID-19) લક્ષણો હોય અથવા કોરોનાવાઇરસનો (COVID-19) ચેપ લાગ્યો હોય તો કૃપા કરીને ઓનલાઇન NHSના નિર્દેશો જુઓ: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

જો તમને અથવા તમારાં બાળક/બાળકોને કોરોનાવાઇરસનાં (COVID-19) લક્ષણો હોય અને પરિસ્થિતિ વધારે બગડે તો અથવા તમને/તમારા બાળકને/બાળકોને 7 દિવસો બાદ સારું ન થાય તો NHS **111** ઓનલાઇન સેવા પર જાઓ: 111.nhs.uk. જો તમારી પાસે ઇન્ટરનેટની સુવિધા ન હોય તો કૉલ કરો NHS **111**. તબીબી કટોકટી માટે ડાયલ કરો **999**.

જો તમને ચિંતા થતી હોય તો મદદ મેળવવામાં મોડું કરશો નહિ. તમને પોતાને વધારે ખબર હોય છે.

આ ટેસ્ટ કોના માટે યોગ્ય છે

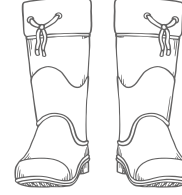

18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુખ્ત લોકો

સેલ્ફ-ટેસ્ટ અને રિપોર્ટ, જરૂર જણાય તો મદદ સાથે.



12થી 17 વર્ષના કિશોરો

સેલ્ફ-ટેસ્ટ કરો અને પુખ્ત વ્યક્તિના નિરીક્ષણ સાથે રિપોર્ટ કરો. જરૂર પડે તો પુખ્ત વ્યક્તિ ટેસ્ટ કરી શકે છે.



12 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોને

12 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનો ટેસ્ટ કોઈ પુખ્ત વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવવો જોઈએ. જો તમને બાળકનો ટેસ્ટ કરવામાં આત્મવિશ્વાસ જણાતો ન હોય તો આ ટેસ્ટ કરશો નહિ. જો બાળકને દુખાવો થાય તો ટેસ્ટ ચાલુ રાખશો નહિ.

- દૃષ્ટિની નબળાઈ ધરાવતા લોકો હજીયે અમારી ટેસ્ટ કિટ્સનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ તેઓને સહાયતાની જરૂર પડી શકે છે.
- જેઓને નાકમાંથી રક્તસ્રાવ થવાનું જોખમ હોય અથવા જેઓએ છેલ્લા 6 મહિનામાં ચહેરા કે માથાની ઈજા માટે શસ્ત્રક્રિયા કરાવી હોય એવા લોકો માટે આ ટેસ્ટ યોગ્ય નથી.

ટેસ્ટ કેટલી વખત કરવો

તમારે કેટલી વખત ટેસ્ટ કરવો જોઈએ તેમાં તમારા સંજોગો અને હાલના રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક નિર્દેશોના આધારે ફેરફારો થઈ શકે છે.

વધારાની સહાયતા ક્યાંથી મેળવવી

સેલ્ફ-ટેસ્ટ માટે વધુ માહિતી આ લિંક પરથી મેળવો: gov.uk/covid19-self-test-help

1. તમારા ટેસ્ટનો વિસ્તાર તૈયાર કરો

તમારી કિટની સામગ્રી ચેક કરો


તમારે જોઈશે:

- ઘડિયાળ કે કલોક જેવું ટાઇમર
- ટિશ્યુ
- અરીસો
- સરફેસ ક્લીનર
- હેન્ડ સેનિટાઇઝર અથવા સાબુ અને ગરમ પાણીની સુવિધા

4 તમારા ટેસ્ટ બોક્સમાં તમારી પાસે નીચેની વસ્તુઓ હોવી જોઈએ:



સીલ કરેલા રેપરમાં
જંતુમુક્ત સ્વેબ (x7)

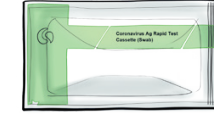

સીલ કરેલા પાઉચમાં
ટેસ્ટ કે સેટ (x7)



ઝિપલોક બેગ (x7)
કચરાની બેગ તરીકે ઉપયોગ કરો



બફર સાથે એક્સ્ટ્રેક્શન
ટ્યૂબ (x7)



નોઝલ કેપ (x7)



એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ હોલ્ડર
(x1 ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય તેવું)
(ફેંકી દેશો નહિ)

સલાહ


કશુંક નુકસાન પામ્યું હોય, તૂટી ગયું હોય કે ગુમ થયું હોય તો શું કરવું

જો તમને કંઈ પણ નુકસાન પામેલું, તૂટેલું કે ખૂટતું જણાય તો કૃપા કરીને આ ટેસ્ટ કિટનો ઉપયોગ કરશો નહિ. તમે અમારા ગ્રાહક સંપર્ક કેન્દ્રને કોલ કરીને અભિપ્રાય આપી શકો છો. લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહે છે.

કોલ કરો: **119** (મોબાઇલ અને લેન્ડલાઇનમાંથી મફત).

અમે 200 ભાષાઓમાં તેમજ બ્રિટિશ સાઇન લેન્ગ્વિજમાં પણ સહાયતા આપીએ છીએ.

જો તમને કોઈ સાધન દ્વારા નુકસાન થયું હોય તો તે અંગે જાણ કરવાથી અન્યોને મદદ મળી શકે તો કૃપા કરીને આ લિંક પર જાઓ: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

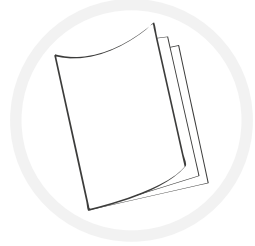

- 1 આ સૂચના માર્ગદર્શિકા કાળજીપૂર્વક વાંચો. જો તમને વધુ સહાયતા જોઈતી હોય તો તમે ઓનલાઇન પણ સ્વેબ ટેસ્ટનો વિડીયો જોઈ શકો છો: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help




- 2 ટેસ્ટ શરૂ કરતાં પહેલાં તરત સપાટ સપાટીને ખાલી કરો, સ્વચ્છ કરો અને કોરી કરો, જેથી તેના પર ટેસ્ટ કિટ મૂકી શકાય. ટેસ્ટને પ્રદૂષિત થતો ટાળવા માટે આમ કરવામાં આવે છે.



20
સેકન્ડ

- 3 સાબુ અને ગરમ પાણી અથવા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરીને 20 સેકન્ડ માટે તમારા હાથ બરાબર ધુઓ. જો તમે એકથી વધુ વ્યક્તિનો ટેસ્ટ કરી રહ્યા હો અથવા વોઇડ ટેસ્ટ ફરીથી કરી રહ્યા હો તો પ્રત્યેક ટેસ્ટની વચ્ચે સપાટી અને તમારા હાથ ફરીથી ધુઓ. ટેસ્ટને પ્રદૂષિત થતો ટાળવા માટે આમ કરવામાં આવે છે.

2. તમારું ટેસ્ટ સેટ અપ કરો

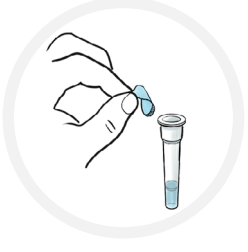

ચેતવણી

એકસ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબની સીલ ફિલ્મ પર બચકું ભરશો નહિ. એકસ્ટ્રેક્શન બફરને તમારી ત્વચાના સંપર્કમાં આવતી અટકાવો.

- 5 ટ્યૂબને તમારા ચહેરાથી દૂર રાખીને હળવેથી એકસ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ પરની સીલિંગ ફિલ્મ છોલી કાઢો, જેથી કોઈ પણ પ્રવાહી ઢોળાતું ટાળી શકાય.

ચેતવણી

એકસ્ટ્રેક્શન બફરમાં પ્રિઝર્વેટિવ્ઝ હોય છે, જેનાથી કેટલાક લોકોમાં એલર્જિક પ્રતિક્રિયા થઈ શકે છે. જો આ દ્રાવણ ત્વચા કે આંખના સંપર્કમાં આવે તો પુષ્કળ પાણી વડે ધુઓ. જો ત્વચામાં ચચરાટ થાય તો તબીબી સારવાર લો.



- 6 બફર ધરાવતી એકસ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબને એકસ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ હોલ્ડરમાં મૂકો.




- 7 હળવેથી ટિશ્યૂમાં તમારા નાકને ખંખેરો અને તમારા ઘરની સામાન્ય કચરાપેટીમાં ટિશ્યૂને ફેંકી દો. આ એટલા માટે છે, જેથી તમે વધારાની લીંટ દૂર કરી શકો. જો તમે બાળક/આશ્રિત વ્યક્તિનો ટેસ્ટ કરી રહ્યા હો તો જરૂર પડે તે પ્રમાણે તેને પોતાનું નાક ખંખેરવામાં મદદ કરો.



20
સેકન્ડ


- 8 નાક ખંખેર્યા બાદ સાબુ અને પાણી અથવા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરીને 20 સેકન્ડ માટે તમારા હાથ બરાબર ધુઓ. ટેસ્ટને પ્રદૂષિત થતો ટાળવા માટે આમ કરવામાં આવે છે. જો તમે બાળક/આશ્રિત વ્યક્તિને તેમનું નાક ખંખેરવામાં મદદ કરો તો, તમારે બંનેએ 20 સેકન્ડ માટે પૂરેપૂરા હાથ ધોવાના રહેશે અથવા હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

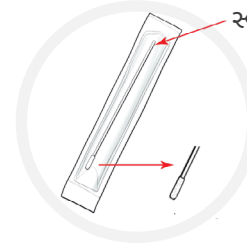

સ્વેબનું હેન્ડલ

સ્વેબની ટોચ

- 9 સીલ કરેલા રેપરમાં જંતુમુક્ત સ્વેબ શોધો. સ્વેબની નરમ, રેશમી ટોચ ઓળખો.

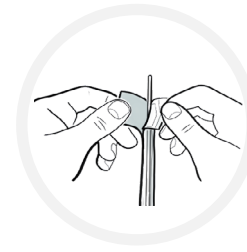

- 10 સ્વેબ પેકેજ ફાડો અને હળવેથી સ્વેબ બહાર કાઢો.

ચેતવણી

તમારા હાથ વડે ક્યારેય સ્વેબની રેશમી ટોચને અડશો નહિ અથવા કોઈ પણ સપાટીઓને અડશો નહિ.


3. તમારો સ્વેબ સામ્પલ લો

ચેતવણી

કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે નાકનાં બધાં છુંદણાંઓ અથવા સમાન ઘરેણાંઓ સ્વેબિંગ પૂર્વે દૂર કરવામાં આવે.

જો 12 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળક અથવા જેને મદદની જરૂર હોય એવી વ્યક્તિનો ટેસ્ટ કરતા હો તો પાન 11 પરનાં પગલાંઓને અનુસરો.

પોતાનો ટેસ્ટ કરવો

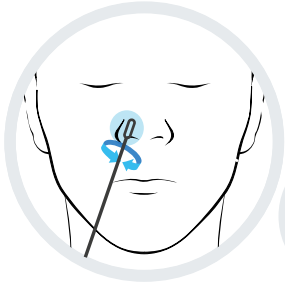

10


પ્રથમ નસકોરું

સ્વેબની રેશમી ટોચને એક નસકોરાની (આશરે 2.5 સેમી) અંદર મૂકો, ખાતરીકરો કે સ્વેબની રેશમી ટોચ પ્રથમ નસકોરાની 2.5 સેમી અંદર મૂકાયેલ હોય.

વર્તુળાકાર ગતિમાં તમારા નસકોરાની અંદરના ભાગ ફરતે 5 વખત સ્વેબ હળવેથી ફેરવો. સ્વેબની રેશમી ટોચ અને નસકોરાની અંદરના ભાગની વચ્ચે સારો સંપર્ક હોય તેની ખાતરી કરો.

કોઈ બળ કરવું જરૂરી નથી અને તમારે તમારા નસકોરામાં અંદર દૂર સુધી ધકેલવાની જરૂર નથી.

x5

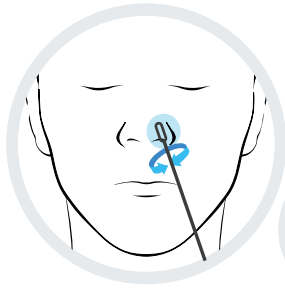

11

બીજું નસકોરું

એ જ સ્વેબનો ઉપયોગ કરો, સ્વેબની રેશમી ટોચને બીજા નસકોરાની (આશરે 2.5 સેમી) અંદર મૂકો, ખાતરી કરો કે સ્વેબની રેશમી ટોચ બીજા નસકોરાની 2.5 સેમી અંદર મૂકાયેલ હોય.

વર્તુળાકાર ગતિમાં તમારા નસકોરાની અંદરના ભાગ ફરતે 5 વખત સ્વેબ હળવેથી ફેરવો. સ્વેબની રેશમી ટોચ અને નસકોરાની અંદરના ભાગની વચ્ચે સારો સંપર્ક હોય તેની ખાતરી કરો.

x5

ચેતવણી

જો તમને સ્વેબિંગ દરમિયાન નાકમાંથી લોહી નીકળે તો કૃપા કરીને સ્વેબિંગ અટકાવી દો. સ્વેબનો ટેસ્ટ કરી શકાશે નહિ. જો રક્તસ્રાવ ચાલુ રહે તો તમારા ડોક્ટર સાથે પરામર્શની ભલામણ કરવામાં આવે છે.


આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રેપિડ Covid-19 (એન્ટિજન) સેલ્ફ-ટેસ્ટ: GCCOV-502a-H70GEno જ ઉલ્લેખ કરે છે.

કોઈ અન્ય માટે ટેસ્ટ કરવો

12 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોનું ટેસ્ટ કોઈ પુખ્ત વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવવું જોઈએ. જેને સહાયતાની જરૂર હોય એવા બાળકને અથવા વ્યક્તિને કેવી રીતે તૈયાર કરવા અને ટેસ્ટ કરવો તે અંગે નીચેના નિર્દેશોનું પાલન કરો. તમે આ લિંક પર ડેમો વિડીયો જોઈ શકો છો:

gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

જો તમે બાળકનો ટેસ્ટ કરી રહ્યા હો તો તેઓને ટેસ્ટ કિટ બતાવો અને તમે શું કરવા જઈ રહ્યા છો તે વિશે તેમની સાથે વાત કરો. જો શક્ય હોય તો તેને કોઈના ખોળામાં બેસાડો અથવા કોઈને તેનો હાથ પકડવાનું કહો. બાળકને ટિશ્યુમાં પોતાનું નાક ખંખેરવાનું કહો. બંધ કચરાપેટીમાં ટિશ્યુ મૂકો.

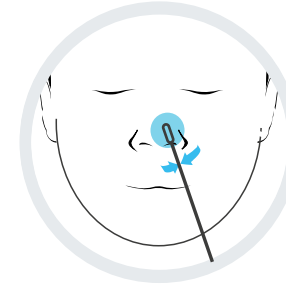


10

પ્રથમ નસકોરું

સ્વેબની રેશમી ટોચને તમે જેનો ટેસ્ટ કરી રહ્યા હો તે બાળક/વ્યક્તિના એક નસકોરાની બરાબર અંદર મૂકો.

વર્તુળાકાર ગતિમાં તેઓના નાકની અંદરના ભાગ ફરતે 5 વખત સ્વેબ હળવેથી ફેરવો. કોઈ બળની જરૂર નથી અને તમારે નસકોરામાં છેક અંદર સુધી ધકેલવાની જરૂર નથી, ખાતરી કરો કે સ્વેબની રેશમી ટોચ અને પ્રથમ નસકોરાની અંદરના ભાગની વચ્ચે સારો સંપર્ક થાય.

x5

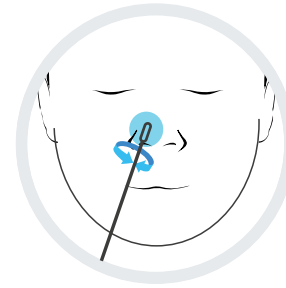

11

બીજું નસકોરું

એ જ સ્વેબનો ઉપયોગ કરો, સ્વેબની રેશમી ટોચને તમે જેનો ટેસ્ટ કરી રહ્યા હો તે બાળક/વ્યક્તિના અન્ય નસકોરાની બરાબર અંદર મૂકો.

તેમના નસકોરાની અંદર 5 વખત **ગોળાકાર ગતિમાં** હળવેથી સ્વેબને લૂછી લો, ખાતરી કરો કે સ્વેબની રેશમી ટોચ અને બીજા નસકોરાની અંદરના ભાગ વચ્ચે સારો સંપર્ક થયેલો હોય.


x5

ચેતવણી

તમે જેનો સ્વેબ લઈ રહ્યા હો એ વ્યક્તિને નાકમાંથી રક્તસ્રાવનો અનુભવ થાય તો કૃપા કરીને સ્વેબિંગ બંધ કરો. સ્વેબનો ટેસ્ટ કરી શકાશે નહિ. જો રક્તસ્રાવ ચાલુ રહે તો તેઓના ડોક્ટર સાથે પરામર્શની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રેપિડ Covid-19 (એન્ટિજન) સેલ્ફ-ટેસ્ટ: GCCOV-502a-H70GEno જ ઉલ્લેખ કરે છે.

4. સ્વેબ નમૂના પર પ્રક્રિયા કરો

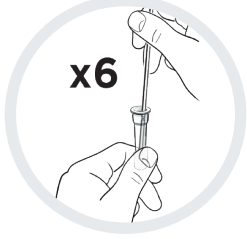

- 12** કૃપા કરીને એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબના પ્રવાહીમાં સ્વેબની રેશમી ટોચ મૂકો.
ટોચને બળ સાથે એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબની ધાર સામે દબાવો, જે દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 6 વખત માટે ટ્યૂબની ફરતે તેને ફેરવો.



- 13** સ્વેબને એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબમાં રાખી મૂકો, ટાઇમર સેટ કરો અને 1 મિનિટ માટે રાખી મૂકો.




- 14** એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબમાંથી સ્વેબ પાછો લઈ લો.



- 15** સ્વેબને પ્લાસ્ટિકની ઝિપ-લોક બેગમાં મૂકો.

સલાહ

એકલદોકલ ઝિપ-લોક બેગનો કચરાની બેગ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાશે.

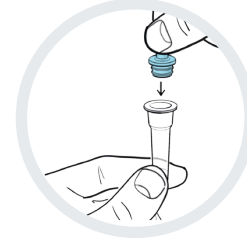

- 16** નોઝલ કેપને ચુસ્તપણે એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ પર દબાવો, જેથી કોઈ પણ લીકેજ ટાળી શકાય.
એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબને એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબ હોલ્ડરમાં પરત મૂકો.



- 17** સીલ કરેલા પાઉચમાં સમાપ્તિની તારીખ (EXP) ચેક કરો. સીલ કરેલા પાઉચમાંથી ટેસ્ટ કેસેટ કાઢો અને તેને સ્વચ્છ સમતલ સપાટી પર મૂકો.

ચેતવણી

30 મિનિટથી વધુ સમય માટે સીલ કરેલા પાઉચની બહાર રહેલી ટેસ્ટ કેસેટને ફેંકી દેવી જોઈએ. અંદરની ડેસિકન્ટ બેગને સુરક્ષિત રીતે ફેંકી દો અને પ્લાસ્ટિકની કચરાની બેગ/ઝિપ-લોક બેગમાં પાઉચ કરો.



- 18** પ્રવાહીનાં 4 ટીપાં ટેસ્ટ સ્ટ્રિપ પર સ્પેસિમેન વેલ (S અંકિત કરેલ) પર મૂકવા માટે એક્સ્ટ્રેક્શન ટ્યૂબને હળવેથી દબાવો.

સલાહ

ખાતરી કરો કે તમે ટેસ્ટ કેસેટ એકદમ સપાટ અને સમતલ સપાટી પર મૂકો. ટેસ્ટ દરમિયાન ટેસ્ટ કેસેટને ખસેડશો નહિ. નમૂનામાં ધીમેથી ટીપાં ઉમેરો. વધારે ભરશો નહિ.



- 19** ટાઇમર સેટ કરો. તમારું પરિણામ વાંચવા માટે 15 મિનિટ રાહ જુઓ.

5. તમારું પરિણામ વાંચો


અગત્યનું

ટેસ્ટને વિકસવા માટે 20 મિનિટથી વધુ સમય માટે રાખી મૂકશો નહિ, કારણ કે તેનાથી પરિણામ અમાન્ય થશે.



+ પોઝિટિવ પરિણામ



બે લાઇનો દેખાશે. એક રંગીન લાઇન કન્ટ્રોલ લાઇનના વિસ્તારમાં (C) હોવી જોઈએ અને અન્ય રંગીન લાઇન ટેસ્ટ લાઇનના વિસ્તારમાં (T) હોવી જોઈએ. Cની પાસેની એક લાઇન અને Tની પાસેની એક લાઇન, એમ બે લાઇનો, ઝાંખી લાઇનો પણ સૂચવે છે કે ટેસ્ટ પોઝિટિવ છે.

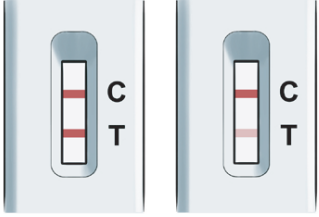

અગત્યનું

જો તમારો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે તો તમારે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જોઈએ અને તમારા ઘરના લોકોએ સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવા વિશે સરકારી નિર્દેશોનું પાલન કરવું જોઈએ:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

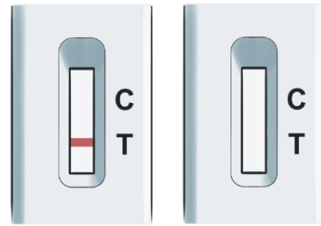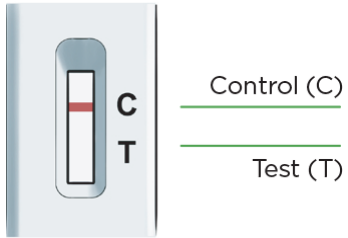

- નેગેટિવ પરિણામ


એક રંગીન લાઇન કન્ટ્રોલ લાઇનના વિસ્તારમાં (C) દેખાય છે. ટેસ્ટ લાઇનના વિસ્તારમાં (T) કોઈ લાઇન દેખાતી નથી.

⊘ અમાન્ય પરિણામ

કન્ટ્રોલ લાઇન (C) દેખાઈ શકતી નથી.

6. તમારા પરિણામ અંગે જાણ કરો

તમારે તમારાં પોઝિટિવ, નેગેટિવ અને અમાન્ય પરિણામો અંગે NHSને જાણ કરવી જોઈએ.

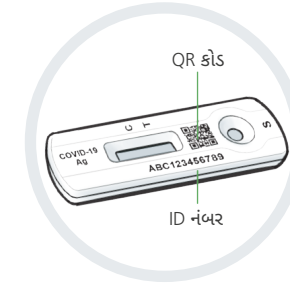

ટેસ્ટનાં બધાં પરિણામોને રેકૉર્ડ કરવાથી વૈજ્ઞાનિકોને વાઇરસની નવી મહામારીઓ શોધવામાં અને કેવી રીતે પ્રતિસાદ આપવો તેની સલાહ આપવામાં મદદ મળે છે. જો લોકો પોઝિટિવ પરિણામ અંગે જ જાણ કરે તો કેસનાં સ્તરો ખરેખર હોય તેના કરતાં વધારે લાગે છે.

તેથી, તમારું પરિણામ નેગેટિવ અથવા અમાન્ય હોય તો પણ તમે ખાતરી કરશો કે NHSની માહિતી ચોક્કસ રહે.

તમારા પરિણામ અંગે જાણ કરવા માટે તમારે તેની નીચે એક QR કોડ, અથવા ID નંબરની જરૂર પડશે.



ઓનલાઇન રિપોર્ટ કરો (સૌથી ઝડપી)

જો તમે ઇંગ્લેન્ડ, વેલ્સ અથવા ઉત્તર આયર્લેન્ડમાં રહેતા હો તો આ લિંક પર જાઓ:

[gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)


જો તમે સ્કોટલેન્ડમાં રહેતા હો તો આ લિંક પર જાઓ:

[covidtest.scot](https://www.covidtest.scot)

અથવા ટેલિફોનથી રિપોર્ટ કરો

119 પર કોલ કરો

લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહે છે, (મોબાઇલ અને લેન્ડલાઇનમાંથી મફત)

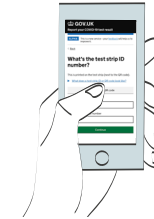

7. તમારાં પરિણામનો શો અર્થ છે

તમે તમારો ટેસ્ટ ત્યારે જ પૂરો કરશો, જ્યારે તમે તમારા પરિણામ અંગે જાણ કરી હોય

+ પોઝિટિવ પરિણામ

જો તમારું પોઝિટિવ પરિણામ આવે તો એવી સંભાવના છે કે તમે COVID-19થી હાલમાં ચેપગ્રસ્ત થયા છો અને અન્ય લોકોને ચેપ લગાડો એવું જોખમ છે. તમારે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જોઈએ. જ્યારે તમે પોતાના પરિણામ અંગે જાણ કરો ત્યારે તમને હવે પછી ક્યાં પગલાં લેવાં તે અંગે વધુ માહિતી આપવામાં આવશે.

ચેતવણી

તમારે તથા તમારી સાથે રહેતી કોઈ પણ વ્યક્તિએ હાલના રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક નિર્દેશોનું પાલન કરવું જોઈએ. આ નિર્દેશો આ લિંક પરથી મળી શકશે:
[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/)

- નેગેટિવ પરિણામ

જો તમને નેગેટિવ પરિણામ મળે તો એ શક્ય છે કે ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય તે સમયે તમે ચેપગ્રસ્ત ન હો. જોકે, નેગેટિવ ટેસ્ટ પરિણામથી એવી કોઈ ખાતરી મળતી નથી કે તમને COVID-19 નથી.

જો તમારો ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે તો તમારે નિયમિત હાથ ધોવા, સામાજિક અંતર રાખવું અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં માસ્ક પહેરવા સહિતના રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક નિયમો અને નિર્દેશોનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.

જો તમને લક્ષણો જણાય તો તમારે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જોઈએ અને હાલનો ભલામણ કરાયેલો ટેસ્ટ આ લિંક પર કરાવવો જોઈએ: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) અથવા ગ્રાહક સંપર્ક કેન્દ્રને 119 પર કોલ કરવો જોઈએ. લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહે છે. તમારે અને તમારા ઘરના લોકોએ રાષ્ટ્રીય નિર્દેશોનું પાલન કરવું જોઈએ.

⊘ અમાન્ય પરિણામ

જો તમને અમાન્ય પરિણામ મળે તો તેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો ત્યારે તમને વાઇરસ લાગેલો હતો કે નહિ તે કહેવું શક્ય નથી. તમને કોરોનાવાઇરસ છે કે કેમ તે ચેક કરવા માટે શક્ય તેટલી જલ્દી વધુ એક ટેસ્ટ કરાવો. પ્રથમ ટેસ્ટમાંથી કોઈ વસ્તુનો ફરીથી ઉપયોગ કરશો નહિ અને પગલા 1થી ટેસ્ટની કાર્યપ્રણાલી શરૂ કરો.

જો સમસ્યા ચાલુ રહે તો

જો સમસ્યા ચાલુ રહે તો ટેસ્ટ કિટ્સનો તાત્કાલિકપણે ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો. જો તમારી પાસે બીજો એક ટેસ્ટ ઉપલબ્ધ ન હોય તો તમે NHS COVID-19 એપ દ્વારા અથવા નીચેની લિંક પર જઈને અલગ પ્રકારનો ટેસ્ટ કરાવી શકો છો:
[gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) અથવા 119 પર ગ્રાહક સંપર્ક કેન્દ્રને કોલ કરી શકો છો. લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહે છે.

8 ટેસ્ટનો દેખાવ

જો કોઈ વ્યક્તિના શરીરમાં કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)નાં ઉચ્ચ સ્તરો હોય તો ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ પરિણામ આવે એવી સંભાવના વધારે હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે જેઓ હાલમાં ચેપગ્રસ્ત હોય અને તાત્કાલિકપણે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જેમના માટે જરૂરી હોય એવા લોકોની ઓળખ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે.

9 તમારી ટેસ્ટ કિટનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરો

એક વખત તમારો ટેસ્ટ પૂરો થયા બાદ તમામ વપરાયેલી ટેસ્ટ કિટની સામગ્રી પૂરી પાડેલી કચરાની બેગમાં મૂકો, સિવાય કે પ્લાસ્ટિક ટ્યૂબ હોલ્ડર અને તેને તમારા ઘરના સામાન્ય કચરામાં મૂકો. નિકાલ બાદ તમારા હાથ બરાબર ધુઓ.

સલાહ

એકલદોકલ ઝિપ-લોક બેગનો કચરાની બેગ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાશે.

NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ પ્રોગ્રામ હેઠળ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ સોશિયલ કેર (DHSC) ડિપ્લોયમેન્ટના ભાગરૂપે જ આ સાધનનો સપ્લાય કરવાની પરવાનગી છે.



Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd
સરનામું: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (ચીન ગણરાજ્ય)
ટેલિફોન: +86-572-5226111 ફેક્સ: +86-572-5226222
વેબસાઇટ: www.orientgene.com
quality@orientgene.com



CE 0123



SENSUS GROUP LTD
સરનામું: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook,
Herts, CM23 4BD United Kingdom (યુનાઇટેડ કિંગડમ)



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
સરનામું: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (જર્મની)



સ્વેબની માહિતી:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
સરનામું: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (ચીન ગણરાજ્ય)

CE 0197



Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (જર્મની)
ઇમેલ: info@llins-service.com

ઉપયોગમાં લેવાયેલી સંજ્ઞાઓ



2 – 30°C પર
સંગ્રહ કરો



ઇથીલીન ઓક્સાઇડનો
ઉપયોગ કરીને
જંતુમુક્ત કરાયું



ઉત્પાદક



જ્યારે પેકેજને
નુકસાન થયેલ હોય
ત્યારે ઉત્પાદનનો
ઉપયોગ કરશો નહિ



લોટ ક્રમાંક



સમાપ્તિ તારીખ



કાયની અંદરનું નિદાનાત્મક
તબીબી સાધન



સૂર્યપ્રકાશથી
દૂર રાખો



ઉત્પાદનની તારીખ



ફરીથી ઉપયોગ
કરશો નહિ



ચેતવણી, કૃપા
કરીને સૂચના વાંચો



કોરું રાખો



ઉપયોગ માટે
સૂચનાઓ જુઓ



પેકમાં યૂનિટ્સની
સંખ્યા (7)



UKમાં જવાબદાર
વ્યક્તિ



લેટેક્સ રહિત



કેટલોગ નંબર



ફરીથી જંતુમુક્ત
કરશો નહિ



યૂરોપીયન અધિકૃત
પ્રતિનિધિ

સંસ્કરણ B22088-03 અમલી તારીખ 2021/10/04



GCCOV-502a-H70GE

આ પુસ્તિકા માત્ર Orient Gene રેપિડ Covid-19 (એન્ટિજન) સેલ્ફ-ટેસ્ટ: GCCOV-502a-H70GEનો જ ઉલ્લેખ કરે છે.

તમારા ટેસ્ટનાં બધાં પરિણામો NHSને જણાવો