


پیش از آغاز تست، این راهنمای کامل را با دقت بخوانید.  
این تست ممکن است با تستی که قبلاً انجام داده‌اید متفاوت باشد.

# راهنمای گام به گام شما برای خودتست سریع کووید-19 Orient Gene (آنتی ژن)

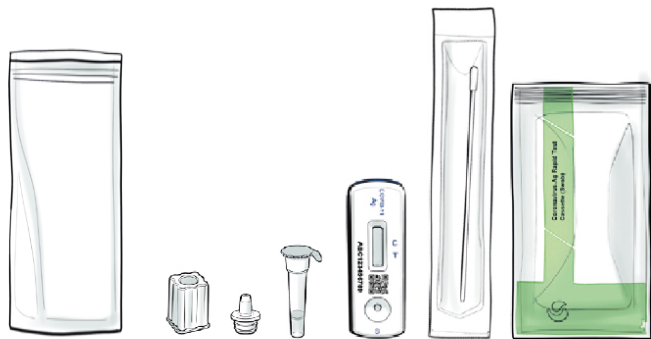

این دستورات، فقط برای استفاده برای خودتست سریع کووید-19 از Orient Gene (آنتی ژن) (GCCOV-502a-H7OGE) هستند.

این راهنما، چگونگی انجام تست کووید-19 توسط خودتان یا شخص دیگر و گزارش کردن نتایج به NHS را شرح می‌دهد.

زبان‌های دیگر از جمله زبان ولزی و توضیحات ویدیویی، در وبسایت [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) موجودند.

همه نتایج خود را به NHS گزارش کنید

## محتویات این کتابچه

دستورات را به طور کامل بخوانید و مراحل را با ترتیب درست دنبال کنید. تنظیم هر تست حدود 15 دقیقه زمان می‌برد و نتایج پس از 15 دقیقه دیگر آماده خواهند بود.



## محتویات این کتابچه

بخش	عنوان	صفحه
1	محوطه تست خود را آماده کنید	6
	محتویات بسته تست خود را کنترل کنید	7
2	تست خود را تنظیم کنید	8
3	نمونه سواب خود را بردارید	10
	انجام تست روی یک نفر دیگر	11
4	نمونه‌گیری با سواب را انجام دهید	12
5	نتیجه خود را بخوانید	14
6	نتیجه خود را گزارش کنید	15
7	معنی نتیجه تست شما	16
8	کارایی تست	17
9	بسته تست خود را به صورت بی‌خطر دور بیندازید	17
	نتایج تست خود را یادداشت کنید	18

## توصیه درباره انجام تست

در سراسر کتابچه، و برای کمک به شما، قسمت‌های مربوط به نکات مفید، توصیه‌ها و هشدارها وجود دارند. با دنبال کردن دقیق و گام به گام این دستورات، فرصت بهتری برای دستیابی به یک نتیجه مطمئن خواهید داشت.

## راهنمایی عمومی و هشدارها

- اگر در هنگام نمونه‌برداری با سواب دچار خونریزی بینی شدید، لطفاً نمونه‌برداری را متوقف کنید. تست سواب ممکن نیست.
- این محصول از لاتکس لاستیک طبیعی ساخته نشده است، با این حال وجود یا آثار لاتکس لاستیک طبیعی در این محصول در هنگام تحویل به مشتری نهایی را نمی‌توان با اطمینان رد کرد.
- بسته تست را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- همه اجزای بسته یکبار مصرف هستند، به جز نگهدارنده لوله جاذب. از هیچ‌کدام از اجزا مانند سواب‌ها یا لوله‌های جاذب، دوباره استفاده نکنید، غیر از نگهدارنده لوله جاذب.
- از اجزای ترکیبی از بسته‌های متفاوت استفاده نکنید. فقط از اجزایی که در این بسته ارائه شده‌اند استفاده کنید.
- اگر قاب تست در معرض محصولات شوینده خانگی بوده است (به‌ویژه سفیدکننده)، از آن استفاده نکنید چون ممکن است منجر به نتیجه نادرست شود.
- تست را در نور مستقیم آفتاب انجام ندهید، چون ممکن است به نتیجه نادرست منجر شود.
- این بسته‌ها فقط برای استفاده انسانی طراحی شده‌اند.
- نگهدارنده لوله جاذب را دور نیندازید، چون برای همه تست‌ها دوباره استفاده می‌شود.

### توصیه

- بسته تست را در دمای عادی اتاق یا در یک محل خشک و سرد (2 تا 30 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.
- در نور مستقیم آفتاب نگذارید و در فریزر نگهداری نکنید.
- بسته باید در دمای اتاق (15 تا 30 درجه سانتیگراد) استفاده شود. اگر بسته در جایی با دمای پایین‌تر از 15 درجه سانتیگراد نگهداری شده باشد، پیش از استفاده از آن به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق بگذارید.

از هر 3 نفر مبتلا به کووید-19، 1 نفر نمی‌داند که به آن مبتلا است.

با خودتست معمول می‌توانیم سرعت گسترش بیماری را کاهش دهیم و به محافظت از بیشتر افراد آسیب‌پذیر در خانواده‌ها و جوامع‌مان کمک کنیم.

## چرا باید خودتان را تست کنید

این بسته خودتست سریع کووید-19 (آنتیژن)، یک تست سواب برای بینی است تا بررسی شود شما به ویروس مبتلا شده‌اید یا نه. این تست هم برای افرادی است که نشانه‌های بیماری را دارند و هم آنهایی که نشانه‌ها را ندارند. با این حال، باید دستورات کشوری را دنبال کنید تا ببینید چه نوع تست برای شما مناسب است.

### اگر نتیجه تست کووید-19 شما مثبت باشد، شما باید:

- به محدود کردن گسترش بیماری کمک کنید. شما و خانوادتان باید دستورالعمل‌های معتبر دولت را دنبال کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- به افرادی که در 48 ساعت گذشته پیش از آغاز نشانه‌های بیماری‌تان یا در صورت نبود نشانه‌ها، از روزی که نتیجه مثبت تست آشکار شده است، تماس نزدیک داشته‌اید و محل‌هایی که در آنها بوده‌اید، توصیه کنید احتمال ابتلای خود به کووید-19 را تست کنند. همیشه دستورالعمل‌های محلی و کشوری را دنبال کنید.

### اگر نتیجه تست شما منفی باشد

احتمالا در زمانی که تست گرفته شده است، به ویروس مبتلا نبوده‌اید. با این حال، یک نتیجه منفی تست، تضمین نمی‌کند که به ویروس مبتلا نشده‌اید. همچنان باید دستورات دولت را رعایت کنید.

### توصیه

اگر شما یا فرزندان شما نشانه‌های ویروس کرونا (COVID-19) را داشته باشید یا به ویروس کرونا (COVID-19) مبتلا شده باشید، لطفاً به راهنمای آنلاین NHS مراجعه کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

اگر شما یا فرزندان شما نشانه‌های ویروس کرونا (COVID-19) را داشته باشید و شرایط بدتر شود، یا شما/فرزند/فرزندان شما پس از 7 روز بهتر نشوید، به خدمات آنلاین NHS 111 مراجعه کنید: [nhs.uk](https://nhs.uk) 111 اگر به اینترنت دسترسی ندارید، به NHS 111 تلفن کنید. در شرایط اضطراری پزشکی، با 999 تماس بگیرید.

اگر نگرانی داشته باشید، برای دریافت کمک معطل نکنید. به غریز خود اعتماد کنید.

## این تست برای چه کسی مناسب است




### کودکان زیر 12 سال

کودکان زیر 12 سال باید از سوی یک بزرگسال تست شوند. اگر برای انجام تست یک کودک احساس راحتی ندارید، آن را انجام ندهید. اگر کودک درد احساس کند، تست را ادامه ندهید.



### نوجوانان 12 تا 17 سال

خودتست و گزارش با نظارت بزرگسال. فرد بزرگسال در صورت نیاز می‌تواند تست را انجام دهد.

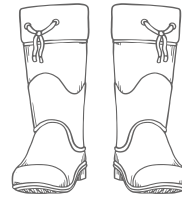

### بزرگسالان بالای 18 سال

اگر ضرورت ہو تو اعانت لے کر، خود سے ٹیسٹ کریں اور رپورٹ کریں۔

- افراد دارای مشکل بینایی هم می‌توانند از بسته‌های تست ما استفاده کنند و ممکن است به کمک نیاز داشته باشند.
- این تست برای افرادی که مستعد خونریزی بینی هستند، یا افرادی که در 6 ماه گذشته جراحی سر یا صورت داشته‌اند مناسب نیست.

### تست چند وقت یکبار باید انجام شود

دفعات انجام تست، بسته به شرایط شما و دستورالعمل‌های جاری کشوری و محلی ممکن است متفاوت باشد.

### از کجا می‌توان کمک بیشتر دریافت کرد

اطلاعات بیشتر درباره خودتست را از اینجا بگیرید: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://gov.uk/covid19-self-test-help)

# 1. محوطه تست خود را آماده کنید

# محتویات بسته خود را کنترل کنید


## شما باید:

- یک تایمر مانند ساعت
- دستمال کاغذی
- آینه
- تمیزکننده سطوح
- تمیزکننده دست یا صابون و دسترسی به آب گرم داشته باشید

## 4 ارقام زیر در جعبه تست شما باید موجود باشند:



کیسه زیپدار (7 عدد) به عنوان کیسه زباله استفاده کنید

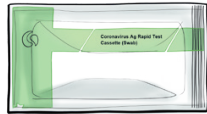

قاب تست در کیسه مهر و موم شده (7 عدد)



سواب استریل در پوشش سر بسته (7 عدد)



نگهدارنده لوله جاذب (1 عدد قابل استفاده دوباره) (دور نیندازید)



درپوش نازل (7 عدد)



لوله جاذب با بافر (7 عدد)

## توصیه

اگر چیزی آسیب دیده، شکسته یا گم شده باشد، چه کار باید کرد  
اگر متوجه شدید چیزی آسیب دیده، شکسته یا گم شده است، لطفاً از بسته تست استفاده نکنید. می‌توانید با تماس با مرکز تماس مشتریان، نظر خود را اعلام کنید. خطوط تلفن هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز هستند.


شماره تماس: **119** (رایگان از تلفن‌های همراه و خطوط ثابت)  
ما به 200 زبان و نیز زبان اشاره انگلیسی، خدمات ارائه می‌کنیم.

اگر وسیله‌ای به شما آسیب زده باشد، گزارش کردن آن می‌تواند به دیگران کمک کند. لطفاً به این وبسایت بروید: [coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

## 1

این راهنما را با دقت بخوانید. همچنین، اگر به کمک بیشتر نیاز دارید، می‌توانید ویدیوی تست سواب را به صورت آنلاین تماشا کنید:

[gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

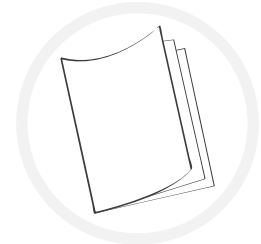

## 2

درست پیش از آغاز تست، یک سطح تمیز و خشک را مرتب کنید تا بسته تست را روی آن بگذارید. این امر برای پرهیز از آلودگی تست است.



## 3

دست‌های خود را با استفاده از صابون و آب گرم، یا ضدعفونی‌کننده دست، به طور کامل به مدت 20 ثانیه بشویید.

اگر بیش از یک نفر را تست می‌کنید یا یک تست نامعتبر را تکرار می‌کنید، سطح را تمیز کنید و بین تست‌ها دست‌های خود را بشویید. این امر برای پرهیز از آلودگی تست است.



20  
ثانیه

## 2. تست خود را آماده کنید



5

با دور نگه داشتن لوله از صورت خود، لایه محافظ روی لوله جاذب را به آرامی جدا کنید تا از پاشش مایع جلوگیری کنید.

### هشدار

بافر جاذب دارای نگهدارنده‌هایی است که ممکن است در برخی افراد، واکنش‌های آلرژیک ایجاد کنند. اگر محلول با پوست یا چشم تماس پیدا کرد، با آب فراوان بشویید. اگر پوست تحریک شد، مراقبت پزشکی دریافت کنید.

### هشدار

لایه محافظت لوله جاذب را گاز نگیرید. از تماس بافر جاذب با پوست خود پرهیز کنید.



6

لوله جاذب حاوی بافر را در داخل نگهدارنده لوله جاذب قرار دهید.



7


**بینی خود را به آرامی در یک دستمال خالی کنید و آن را در یک سطل زباله خانگی بیندازید.** این کار برای خلاص شدن از خلط اضافی است. اگر یک کودک یا فرد نیازمند را تست می‌کنید، به آنها کمک کنید، در صورت نیاز، بینی خود را خالی کنند.



8


پس از تمیز کردن بینی‌تان دست‌های خود را با استفاده از صابون و آب، یا تمیزکننده دست به طور کامل به مدت 20 ثانیه بشویید. این کار برای پرهیز از آلودگی تست است.

اگر در تمیز کردن بینی به یک کودک یا فرد ناتوان کمک کنید، هر دو شما باید دست‌هایتان را به طور کامل به مدت 20 ثانیه، یا با تمیزکننده دست بشویید.

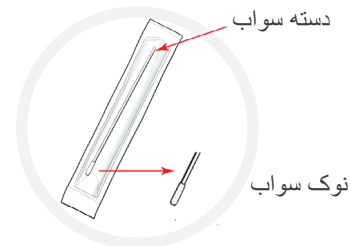

9

سواب استریل را می‌توانید در ظرف سر بسته پیدا کنید. نوک نرم و پارچه‌ای سواب را پیدا کنید.

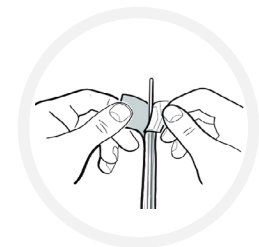

10

بسته‌بندی سواب را بکنید و سواب را به آرامی در بیاورید.

### هشدار

هرگز نوک پارچه‌ای سواب را با دست‌های خود لمس نکنید یا به هیچ جا نزنید.

## 3. نمونه سواب خود را تهیه کنید

## انجام تست روی یک نفر دیگر


### هشدار

پیش از کار با سواب، لطفا مطمئن شوید همه زیورآلات بینی یا جواهرات مشابه برداشته شده باشند.

اگر یک کودک زیر 12 سال یا یک فرد نیازمند کمک را تست می‌کنید، مراحل مذکور در صفحه 11 را دنبال کنید.

### تست کردن خودتان

#### سورخ نخست بینی

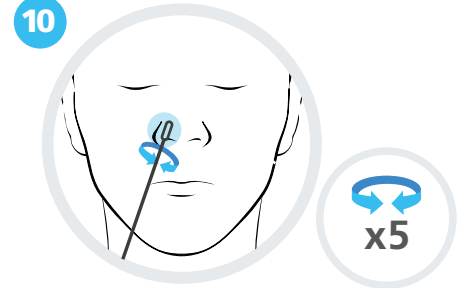


نوک پارچه‌ای سواب را درست در داخل یکی از سوراخ‌های بینی (حدود 2،5 سانتیمتر) فرو کنید و مطمئن شوید که نوک پارچه‌ای سواب در 2،5 سانتیمتری داخل سوراخ نخست بینی قرار گرفته است.

سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی‌تان با یک حرکت دایره‌ای 5 بار بچرخانید. مطمئن شوید که یک تماس خوب میان نوک پارچه‌ای سواب و داخل سوراخ بینی وجود داشته باشد.

نیازی به اعمال زور نیست و لازم نیست زیاد به داخل سوراخ بینی‌تان فشار دهید.

#### سورخ دوم بینی

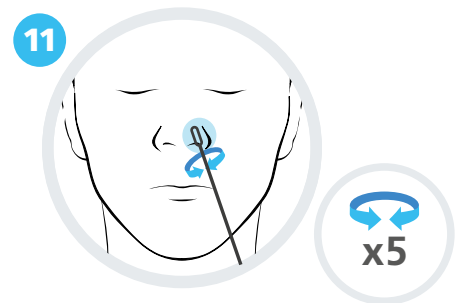

نوک پارچه‌ای همان سواب را درست در داخل یکی از سوراخ‌های بینی (حدود 2،5 سانتیمتر) فرو کنید و مطمئن شوید که نوک پارچه‌ای سواب در 2،5 سانتیمتری داخل سوراخ دوم بینی قرار گرفته است.

سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی‌تان با یک حرکت دایره‌ای 5 بار بچرخانید. مطمئن شوید که یک تماس خوب میان نوک پارچه‌ای سواب و داخل سوراخ بینی وجود داشته باشد.

### هشدار


اگر در هنگام نمونه‌برداری با سواب دچار خونریزی بینی شدید، لطفا نمونه‌برداری را متوقف کنید. سواب نمی‌تواند تست شود. اگر خونریزی ادامه یابد، توصیه می‌شود با پزشک خود مشورت کنید.

بچه‌های زیر 12 سال، باید از سوی یک بزرگسال تست شوند. برای آماده‌سازی و تست یک کودک یا شخصی که به کمک نیاز دارد، راهنمایی‌های زیر را دنبال کنید. یک فیلم نمونه را می‌توانید در اینجا ببینید:

[gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

اگر تست را روی یک کودک انجام می‌دهید، به او بسته تست را نشان دهید و درباره کاری که می‌کنید توضیح دهید. ترجیحا، او را روی پاهای یک نفر بنشانید یا یک نفر دست او را بگیرد. از کودک بخواهید بینی‌اش را در یک دستمال تمیز کند. دستمال را در یک سطل سر بسته بیندازید.


#### سورخ نخست بینی

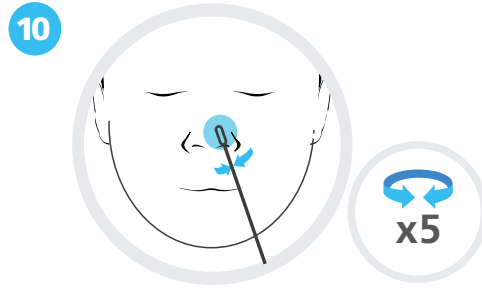

نوک پارچه‌ای سواب را درست در داخل سوراخ بینی کودک/فرد تست شونده قرار دهید.

سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی‌تان با یک حرکت دایره‌ای 5 بار بچرخانید. نیازی به اعمال زور نیست و لازم نیست زیاد به داخل سوراخ بینی فشار دهید. مطمئن شوید که تماس خوب میان نوک پارچه‌ای سواب و داخل سوراخ بینی وجود دارد.

#### سورخ دوم بینی

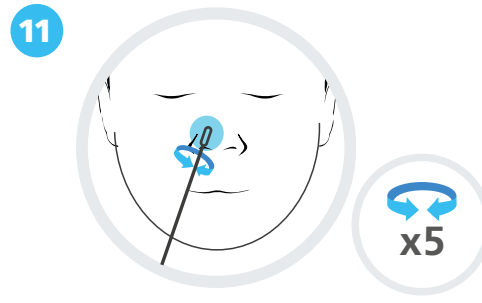

از همان سواب استفاده کنید و نوک پارچه‌ای سواب را درست در داخل سوراخ دیگر بینی کودک/فرد تست شونده قرار دهید.

به آرامی سواب را در اطراف داخل بینی او به صورت حرکت دایره‌ای 5 بار بچرخانید، و مطمئن شوید که تماس خوبی میان نوک پارچه‌ای سواب و داخل سوراخ دوم وجود دارد.


### هشدار

اگر شخصی که نمونه‌گیری با سواب را روی او انجام می‌دهید دچار خونریزی بینی شود، لطفا کار با سواب را متوقف کنید. سواب نمی‌تواند تست شود. اگر خونریزی ادامه یابد، توصیه می‌شود با پزشک او مشورت کنید.

# 4. نمونه سواب را آماده کنید

**16** درپوش نازل را محکم روی لوله جاذب فشار دهید تا از هرگونه نشست جلوگیری کنید.

لوله جاذب را دوباره در نگهدارنده لوله جاذب قرار دهید.

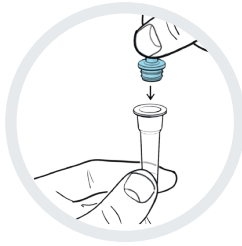

**17** تاریخ انقضاء (EXP) را روی کیسه سربسته کنترل کنید. قاب تست را از کیسه سربسته بیرون بیاورید و آن را در داخل سطح صاف تمیز قرار دهید.

### هشدار

یک قاب تست که به مدت بیش از 30 دقیقه بیرون از کیسه سربسته مانده باشد، باید دور انداخته شود. کیسه خشککن داخلی و کیسه را به صورت بی‌خطر در یک کیسه زباله/کیسه زیپدار دور بیندازید.



**18** به آرامی لوله جاذب را بچلانید تا 4 قطره از مایع را در حفره نمونه (با علامت S) در قاب تست بریزید.

### توصیه

مطمئن شوید که قاب تست را روی یک سطح صاف و افقی قرار دهید. در طول تست، قاب تست را برندارید. قطره‌ها را به آرامی به نمونه اضافه کنید. بیش از حد پر نکنید.




**19** یک تایمر را تنظیم کنید. برای خواندن نتیجه خود، 15 دقیقه صبر کنید.




**12** نوک پارچه‌ای سواب را در داخل مایع لوله جاذب قرار دهید.


نوک سواب را روی لبه لوله جاذب محکم فشار دهید، در همان حال آن را در اطراف لوله دست کم 6 بار فشار دهید.

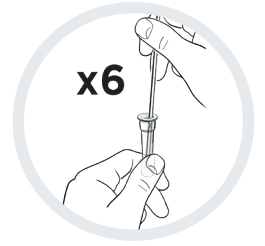

**13** سواب را در لوله جاذب بگذارید، یک تایمر را تنظیم کنید و به مدت 1 دقیقه بگذارید بماند.

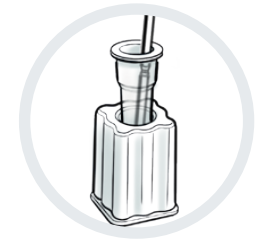


**14** سواب را از لوله جاذب بیرون بیاورید.

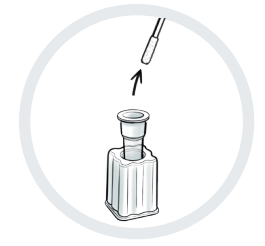

**15** سواب را در داخل کیف زیپدار بگذارید.

### توصیه

از کیف زیپدار تکی می‌توانید به عنوان کیسه زباله استفاده کنید.

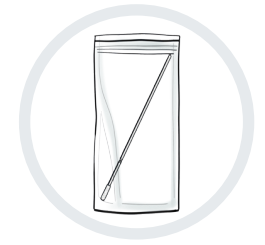

## 5. نتیجه خود را بخوانید

## 6. نتیجه خود را گزارش کنید


مهم



تست را بیش از 20 دقیقه به حال خود رها نکنید، چون این کار ممکن است باعث باطل شدن نتیجه شود.

### نتیجه مثبت

دو خط ظاهر می‌شود. یک خط رنگی باید در ناحیه خط کنترل (C) و خط رنگی دیگر باید در ناحیه خط تست (T) باشد. دو خط، یکی کنار C و دیگری کنار T، حتی خطوط خفیف، نشان‌دهنده مثبت بودن تست است.

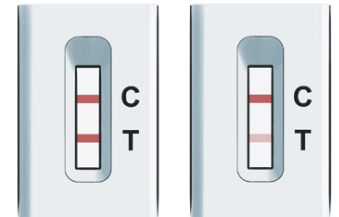

مهم

اگر نتیجه تست‌تان مثبت باشد، باید خود را قرنطینه کنید و خانواده‌تان باید دستورالعمل‌های دولت را برای قرنطینه دنبال کنند:


[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

شما باید نتیجه مثبت، منفی و نتایج نامعتبر خود را به NHS گزارش کنید.

ثبت همه نتایج تست، به دانشمندان کمک می‌کند موج‌های جدید گسترش ویروس را شناسایی کند و نوع واکنش را توصیه کنند. اگر افراد فقط نتیجه مثبت را گزارش کنند، سطح ابتلاها بالاتر از سطح واقعی آنها به نظر می‌رسد.


بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا نامعتبر باشد، حتما اطلاعات دقیق را به NHS بفرستید.

برای گزارش کردن نتیجه خود، باید از QR کد یا شماره کارت شناسایی خود استفاده کنید.

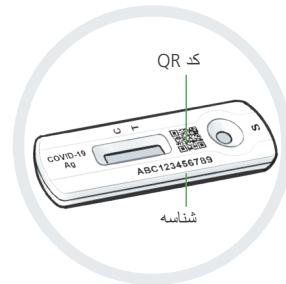

### گزارش کردن آنلاین (سریع‌ترین)

اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می‌کنید، به این وبسایت بروید: [gov.uk/report-covid19-result](https://gov.uk/report-covid19-result)

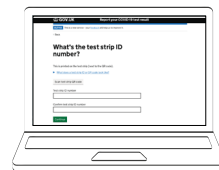

اگر در اسکاتلند زندگی می‌کنید به اینجا بروید: [covidtest.scot](https://covidtest.scot)

### یا گزارش تلفنی


تماس بگیرید 119

خطوط تلفن، هر روز از 7 تا 11 شب باز هستند (رایگان از تلفن همراه و خطوط ثابت)




### نتیجه نامعتبر

خط کنترل (C) ظاهر نمی‌شود.

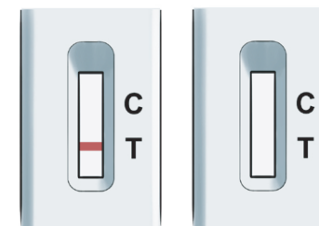

### نتیجه منفی

یک خط رنگی در ناحیه خط کنترل (C) ظاهر می‌شود. در ناحیه خط تست (T)، خطی ظاهر نمی‌شود.

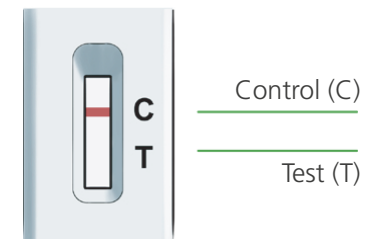



## شما تنها زمانی تست خود را کامل می‌کنید که نتیجه خود را گزارش کرده باشید

### نتیجه مثبت

اگر نتیجه‌تان مثبت باشد، احتمالاً در حال حاضر مبتلا به کووید-19 هستید و خطر مبتلا کردن دیگران وجود دارد. باید خود را قرنطینه کنید. اگر نتیجه خود را گزارش کنید، اطلاعات بیشتری درباره مراحل ضروری بعدی به شما داده خواهد شد.

#### هشدار

شما و همه افرادی که با شما زندگی می‌کنند باید دستورالعمل‌های کشوری و محلی را دنبال کنید. آنها را می‌توانید در اینجا ببابید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/)

### نتیجه منفی

اگر نتیجه شما منفی باشد، احتمالاً در زمان انجام تست مبتلا به ویروس نبوده‌اید. با این حال، نتیجه منفی تست تضمین نمی‌کند که به کووید-19 مبتلا نیستید.

اگر نتیجه تست شما منفی باشد، باید همچنان دستورالعمل‌های کشوری و محلی را دنبال کنید، از جمله شستن مرتب دست‌ها، فاصله‌گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک صورت در هر کجا که لازم باشد.

اگر نشانه‌های بیماری در شما ظاهر شوند، باید خود را قرنطینه کنید و تست معتبر توصیه شده را از [gov.uk/get-coronavirus-test](https://gov.uk/get-coronavirus-test) یا با تماس مرکز تماس مشتریان به شماره 119 دریافت کنید.

خطوط تلفن هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز هستند. شما و خانواده شما باید دستورالعمل‌های کشوری را دنبال کنید.

### نتیجه نامعتبر

اگر نتیجه تست نامعتبر باشد، این یعنی اگر تست انجام شده باشد، نمی‌توان گفت شما به ویروس مبتلا بودید. برای کنترل ابتلا به ویروس، هر چه زودتر یک تست دیگر انجام دهید. هیچ کدام از اجزای تست نخست را دوباره استفاده نکنید و فرایند تست را از مرحله 1 آغاز کنید.

### اگر مشکل همچنان ادامه یابد

اگر مشکل همچنان ادامه یابد، دیگر از بسته‌های تست استفاده نکنید. اگر تست دیگری در اختیار ندارید، می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن کووید-19 متعلق به NHS یا مراجعه به وبسایت [gov.uk/get-coronavirus-test](https://gov.uk/get-coronavirus-test) یا با تماس با مرکز تماس مشتریان به شماره 119، از یک نوع تست دیگر استفاده کنید. خطوط تلفن هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز هستند.

### 8 کارآیی تست

اگر کسی به میزان بالا ویروس کرونا (COVID-19) داشته باشد، نتیجه تست به احتمال زیاد مثبت خواهد بود.

یعنی این تست با احتمال بالا افرادی را که در حال حاضر مبتلا هستند و به قرنطینه فوری نیاز دارند شناسایی خواهد کرد.

### 9 بسته تست را به صورت بی‌خطر دور بیندازید

هنگامی که تست به پایان رسید، همه محتویات بسته تست استفاده شده را، به جز نگهدارنده لوله پلاستیک، در کیسه زباله داده شده قرار دهید و آن را در سطل زباله‌های خانگی خود بیندازید.

پس از دور انداختن، دست‌های خود را بشویید.

#### توصیه

از کیف زیپ‌دار تکی می‌توانید به عنوان کیسه زباله استفاده کنید.





CE 0123

تأمین این وسیله، فقط به عنوان بخشی از استقرار اداره مراقبت و سلامت اجتماعی (DHSC) تحت برنامه تست و ردیابی NHS مجاز است.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd  
نشانی: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,  
(چین) Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China  
تلفن: +86-572-5226111 فاکس: +86-572-5226222  
وبسایت: www.orientgene.com  
quality@orientgene.com



SENSUS GROUP LTD

UK RP

The Barn, Tednambury Farm, Tednambury,  
Spellbrook, Herts, CM23 4BD  
(بریتانیا) United Kingdom

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
نشانی: (آلمان) Eiertstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

اطلاعات سواب:

CE 0197

Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD  
نشانی: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,  
(چین) Yangzhou, Jiangsu 225109, China



Llins Service & Consulting GmbH

EC REP

Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (آلمان)  
ایمیل: info@llins-service.com

نشانه‌های به کار رفته

اگر بسته‌بندی آسیب  
دیده از محصول  
استفاده نکنید باشد



شرکت سازنده



استریل شده با  
اکسید اتیلن

STERILE EO

در دمای 2-30  
درجه سانتیگراد  
نگهداری کنید



وسيله پزشکی  
تشخیص آزمایشگاهی

IVD

تاریخ انقضاء



شماره سری

LOT

هشدار، لطفاً به  
راهنما مراجعه کنید



دوباره استفاده نکنید



تاریخ تولید



دور از نور آفتاب  
نگه دارید



تعداد قطعات در  
بسته‌بندی (7)

Σ 7

به دفترچه راهنما  
مراجعه کنید



خشک نگه دارید



دوباره استریل نکنید



شماره کاتالوگ

REF

بدون لاتکس



شخص مسئول  
در بریتانیا

UK RP

دوباره استریل نکنید.

EC REP

نسخه B22088-03 معتبر از 2021/10/04

GCCOV-502a-H7OGE

REF

این کتابچه فقط به خودتست سریع Orient Gene برای کوید-19 (انتیژن) مربوط است: GCCOV-502a-H7OGE

همه نتایج خود را به NHS گزارش کنید