


Przed rozpoczęciem testu należy uważnie przeczytać całą instrukcję.  
Ten test może różnić się od tego, z którego korzystałeś(-aś) wcześniej.

# Twoja instrukcja krok po kroku do Wykonywanego samodzielnie testu Orient Gene – Szybki test (antygeny) Covid-19

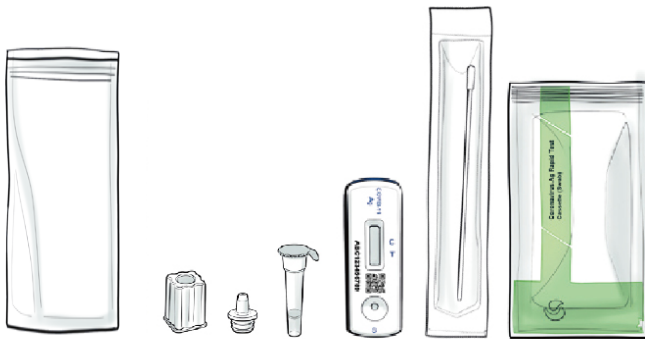

Ta broszura dotyczy wyłącznie Wykonywanego samodzielnie testu Orient Gene – Szybki test antygeny Covid-19 (GCCOV-502a-H7OGE).

Ta instrukcja wyjaśnia, jak wykonać na sobie lub innej osobie test na COVID-19 i zgłosić wyniki do NHS.


**Alternatywne wersje językowe** włącznie z Walijską a także prezentacja wideo są dostępne na stronie [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

**Przeznacz wszystkie wyniki swoich testów do NHS**

# Co trzeba zrobić

## Instrukcja krok po kroku

Przeczytaj te instrukcje i wykonaj kroki we właściwej kolejności. Przygotowanie każdego testu zajmuje około 15 minut a wyniki będą gotowe po kolejnych 15 minutach.

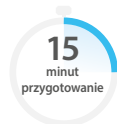

## Spis treści broszury

Sekcja	Tytuł	Strona
<b>1</b>	Przygotuj miejsce do testu	6
	Sprawdź zawartość zestawu z testem	7
<b>2</b>	Przygotuj test	8
<b>3</b>	Pobierz próbkę wymazu	10
	Przeprowadzenie testu u kogoś innego	11
<b>4</b>	Zbadaj próbkę wymazu	12
<b>5</b>	Odczytaj swój wynik	14
<b>6</b>	Zgłoś swój wynik	15
<b>7</b>	Co oznacza Twój wynik	16
<b>8</b>	Wykonanie testu	17
<b>9</b>	Bezpieczna utylizacja zestawu do testu	17
	Zanotuj wynik swojego testu	18

## W przybliżeniu, co 3 osoba zakażona wirusem COVID-19 nie wie, że się zaraziła.

Regularnie powtarzając samodzielnie wykonywane testy możemy spowolnić rozprzestrzenianie się wirusów i chronić najsłabszych członków naszych rodzin i społeczności.

## Porady dotyczące wykonania testu

W instrukcji zawarto przydatne wskazówki, porady i ostrzeżenia, które mogą Ci pomóc. Przestrzeganie tych instrukcji krok po kroku, znacząco zwiększa szansę na uzyskanie wiarygodnych wyników.

### Ogólne wskazówki i ostrzeżenia

- Jeżeli podczas pobierania wymazu wystąpi krwawienie z nosa, należy przerwać pobierania próbki. Wymazówka nie nadaje się wówczas do testu.
- Produkt nie został wykonany z lateksu naturalnego, jednak nie można całkowicie wykluczyć obecności lub śladowych ilości lateksu naturalnego w produkcie dostarczonym użytkownikowi końcowemu.
- Zestaw testowy należy przechowywać z dala od dzieci.
- Wszystkie elementy zestawu są przeznaczone do jednorazowego użytku, z wyjątkiem uchwytu do próbek ekstrakcyjnych. **Nie używaj ponownie** użytych elementów zestawu, takich jak wymazówki lub próbki ekstrakcyjne, z wyjątkiem uchwytu do próbek ekstrakcyjnych.
- **Nie** mieszaj elementów z różnych pudełek z zestawem. Należy używać wyłącznie elementów dostarczonych w tym zestawie.
- **Nie** używaj kasety testowej, jeśli została wystawiona na działanie środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym (zwłaszcza wybielaczy), ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego wyniku.
- **Nie** wykonuj testu w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego wyniku.
- Te zestawy są przeznaczone wyłącznie do użytku przez ludzi.
- **Nie** wyrzucaj uchwytu do próbek ekstrakcyjnych, używa się go przy wszystkich testach.

### Porady

- Przechowuj zestaw testowy w normalnej temperaturze pokojowej lub w suchym i chłodnym miejscu (od 2° do 30°C).
- Nie pozostawiaj na słońcu i nie przechowuj w zamrażarce.
- Zestaw należy stosować w temperaturze pokojowej (od 15° do 30°C). Jeśli zestaw był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, przed użyciem należy go pozostawić w normalnej temperaturze pokojowej na 30 minut.

# O tym teście

## Dlaczego przeprowadzić samodzielnie wykonywany test?

Ten wykonywany samodzielnie szybki test na antygeny COVID-19, zawiera wymazówkę, którą należy wprowadzić do nosa, aby sprawdzić czy jesteś zarażony(-a). Test mogą przeprowadzić zarówno osoby, u których wystąpiły objawy, jak bez objawów. Należy jednak postępować zgodnie z krajowymi wytycznymi, i sprawdzić jaki rodzaj testu jest odpowiedni w danej sytuacji.

### W razie pozytywnego wyniku testu na COVID-19 należy:

- pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie choroby i rozpocząć izolację swoją i całego gospodarstwa domowego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- poinformować osoby, z którymi byłeś(-aś) w bliskim kontakcie i miejsca, które odwiedziłeś(-aś) w ciągu ostatnich 48 godzin przed wystąpieniem objawów, lub przed pozytywnym wynikiem testu, jeśli nie masz żadnych objawów, aby mogli sprawdzić czy się nie zaraziłi COVID-19. Zawsze stosuj się do lokalnych i krajowych wytycznych.

### W razie negatywnego wyniku testu na COVID-19

Jest prawdopodobne, że w czasie wykonywania testu nie zarażałeś(-aś) innych. Negatywny wynik testu nie gwarantuje jednak, że nie masz koronawirusa. Nadal należy przestrzegać wytycznych rządowych.


#### Porady

Jeśli Ty lub Twoje dziecko/dzieci macie objawy koronawirusa (COVID-19) lub zaraziłście się koronawirusem (COVID-19), zapoznajcie się z wytycznymi NHS na stronie: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

Jeśli Ty lub Twoje dziecko/dzieci macie objawy koronawirusa (COVID-19), a stan się pogarsza lub stan Twój/dziecka nie poprawia się po 7 dniach odwiedź serwis internetowy NHS **111: 111.nhs.uk**. Jeśli nie masz dostępu do internetu, zadzwoń pod numer NHS **111**. W nagłych wypadkach medycznych zadzwoń pod nr **999**.

**Jeśli masz obawy, nie zwlekaj ze zwróceniem się o pomoc. Zaufaj instynktowi.**

## Dla kogo ten test jest odpowiedni?

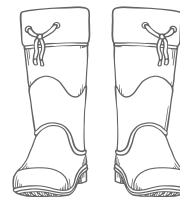

### Dorośli - ukończone 18 lat

Samodzielny test i zgłoszenie, w razie potrzeby z pomocą.



### Młodzież - 12-17 lat

Samodzielny test i zgłoszenie pod nadzorem dorosłego. W razie potrzeby test może przeprowadzić dorosły.



### Dzieci poniżej 12 roku życia

Test u dzieci poniżej 12 roku powinna wykonywać osoba dorosła. Nie przeprowadzaj tego testu, jeśli nie czujesz się pewnie wykonując go u dziecka. Nie kontynuuj testu, jeśli dziecko odczuwa ból.

- Osoby niedowidzące/niewidome mogą korzystać z naszych zestawów testowych, ale mogą potrzebować pomocy.
- Ten test nie jest odpowiedni dla osób podatnych na krwawienia z nosa lub osób, które przeszły operację urazu twarzy lub głowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

### Jak często przeprowadzać ten test

To jak często należy przeprowadzać ten test zależy od okoliczności i aktualnych wytycznych krajowych lub lokalnych.


### Gdzie można znaleźć dodatkowe wsparcie

Więcej informacji na temat samodzielnego testu znajdziesz na: [gov.uk/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid-19-self-test-help)

# 1. Przygotuj miejsce do testu

## Będziesz potrzebować:

- minutnik, taki jak zegarek lub zegar
- chusteczki
- lustro
- środek do czyszczenia powierzchni
- środek do dezynfekcji rąk lub mydło oraz dostęp do ciepłej wody

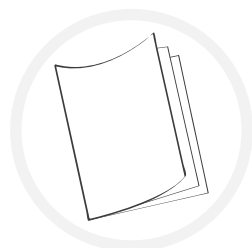

- 1** Przeczytaj uważnie tę instrukcję. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, możesz również obejrzeć online film pokazujący wykonanie testu wymazowego: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)



- 2** Bezpośrednio przed rozpoczęciem testu opróżnij, wyczyść i osusz płaską powierzchnię, aby rozłożyć zestaw testowy. Ma to na celu uniknięcie zanieczyszczenia testu.



**20**  
sekund


- 3** Myj ręce starannie przez 20 sekund, używając mydła i ciepłej wody lub środka do dezynfekcji rąk. Jeśli wykonujesz test u więcej niż jednej osoby lub powtarzasz nieudany test, czyść powierzchnię i powtarzaj mycie rąk między poszczególnymi testami. Ma to na celu uniknięcie zanieczyszczenia testu.

# Sprawdź zawartość zestawu

- 4** W pudełku testowym powinny się znaleźć:



Sterylna wymazówka w szczelnie zamkniętym opakowaniu (x7)

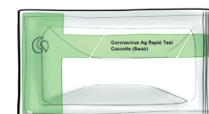

Kaseta testowa w hermetycznym opakowaniu (x7)



Worek zapinany na zamek (x7)  
Użyj jako worka na odpady



Probówka ekstrakcyjna z buforem (x7)



Nasadka dyszy (x7)



Uchwyt na probówkę ekstrakcyjną (x1 wielokrotnego użytku)  
(Nie wyrzucać)

## Porady

### Co zrobić, jeśli coś jest uszkodzone, zepsute lub czegoś brakuje

Jeśli zauważysz, że coś jest uszkodzone, zepsute lub czegoś brakuje nie używaj zestawu testowego. Możesz zgłosić problem, dzwoniąc do centrum kontaktu z klientem. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00.

Zadzwoń pod nr: **119** (połączenie bezpłatne z telefonów komórkowych i stacjonarnych). Oferujemy wsparcie w 200 językach, a także w brytyjskim języku migowym.

Jeśli urządzenie wywoła obrażenia, zgłaszając to możesz pomóc innym, wejdź na: [coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

## 2. Przygotuj test



- 5 Trzymając probówkę ekstrakcyjnego z dala od twarzy, delikatnie zdejmij z niej folię uszczelniającą, aby uniknąć rozlania płynu.

### Ostrzeżenie

Nie otwieraj zębami folii uszczelniającej probówkę ekstrakcyjną. Unikaj kontaktu probówki ekstrakcyjnej ze skórą.

### Ostrzeżenie

Bufor ekstrakcyjny zawiera środki konserwujące, które u niektórych osób mogą powodować reakcję alergiczną. Jeśli roztwór wejdzie w kontakt ze skórą lub oczami, przemyj dużą ilością wody. Jeżeli dojdzie do podrażnienia skóry należy zwrócić się o pomoc lekarską.



- 6 Umieść probówkę ekstrakcyjną zawierającą bufor w uchwycie probówki ekstrakcyjnej.




- 7 **Delikatnie wydmuchaj nos** w chusteczkę i wyrzuć ją do zwykłych domowych odpadów. Ma to na celu pozbycie się nadmiaru śluzu. W razie przeprowadzania testu u dziecka, w razie potrzeby, należy pomóc mu wydmuchać nos.



20  
sekund


- 8 **Myj starannie dłonie** przez 20 sekund **po wydmuchaniu nosa**, używając mydła i wody lub środka do dezynfekcji rąk. Ma to na celu uniknięcie zanieczyszczenia testu. Jeśli pomożesz dziecku/podopiecznemu wydmuchać nos, **oboje musicie starannie myć ręce** przez 20 sekund lub użyć środka do dezynfekcji rąk.

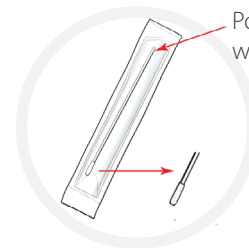

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi wymazówki

Końcówka wymazówki

- 9 Znajdź sterylną wymazówkę w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Zidentyfikuj miękką, materiałową końcówkę wymazówki.

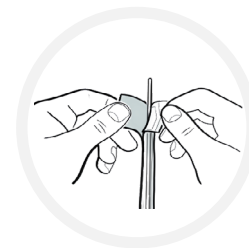

- 10 Otwórz opakowanie wymazówki i starannie ją wyciągnij.

### Ostrzeżenie

Nigdy nie dotykaj materiałowej końcówki wymazówki ręką ani niczym innym.


## 3. Pobierz próbkę wymazu

### Ostrzeżenie

Upewnij się, że wszystkie kolczyki w nosie i podobna biżuteria zostały usunięte przed pobraniem wymazu.

**W razie wykonywania testu u dziecka w wieku poniżej 12 lat, lub u osoby wymagającej pomocy, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie 11.**

### Samodzielne wykonanie testu u siebie

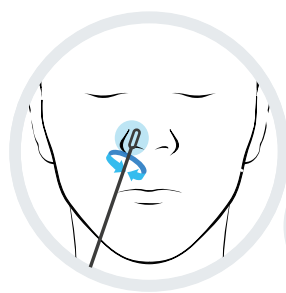

10

#### Pierwsze nozdrze


Umieść materiałową końcówkę wymazówki dokładnie w jednym nozdrzu (na około 2,5 cm), upewnij się, że materiałowa końcówka wymazówki jest wprowadzona na 2,5 cm do pierwszego nozdrza.

Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej stronie nozdrza **5 razy okrężnymi ruchami**.

Upewnij się, że materiałowa końcówka wacika dobrze przylega do wnętrza nozdrza.

Nie trzeba używać siły ani wciskać wymazówki zbyt głęboko w nozdrze.

x5

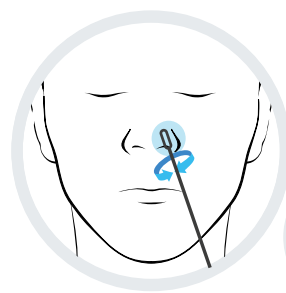

11

#### Drugie nozdrze

Umieść materiałową końcówkę tej samej wymazówki dokładnie w drugim nozdrzu (na około 2,5 cm), upewnij się, że materiałowa końcówka wymazówki jest wprowadzona na 2,5 cm do drugiego nozdrza.

Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej stronie nozdrza **5 razy okrężnymi ruchami**.

Upewnij się, że materiałowa końcówka wacika dobrze przylega do wnętrza nozdrza.


x5

### Ostrzeżenie

Jeżeli podczas pobierania wymazu wystąpi krwawienie z nosa, należy przerwać pobierania próbki. Wymazówka nie nadaje się do testu. Zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli krwawienie nie ustąpi.

## Przeprowadzenie testu u kogoś innego

W wykonaniu testu u dziecka poniżej 12 roku życia powinna pomóc osoba dorosła. Zastosuj się do poniższych wskazówek przygotowania i wsparcia dziecka lub innej osoby. Film demonstracyjny można obejrzeć pod adresem: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help). Jeżeli przeprowadzasz test u dziecka, pokaż mu zestaw testowy i porozmawiaj z nim o tym, co będziesz robić. W miarę możliwości poproś dziecko by usiadło Ci na kolanach lub by ktoś przytrzymał je za rękę. Poproś dziecko, aby wydymuchało nos w chusteczkę. Umieść chusteczkę w zamkniętym pojemniku na odpad.

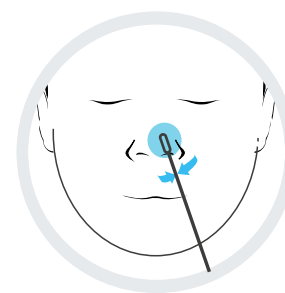


10

#### Pierwsze nozdrze

Umieść materiałową końcówkę wymazówki dokładnie w jednym nozdrzu dziecka/osoby, u której przeprowadzasz test.

Delikatnie przetocz wymazówkę po wewnętrznej stronie nozdrza **5 razy okrężnymi ruchami**. Nie trzeba używać siły ani wciskać wymazówki głęboko do nozdrza, upewnij się, że jest dobry kontakt między materiałową końcówką wymazówki, a wnętrzem pierwszego nozdrza.

x5

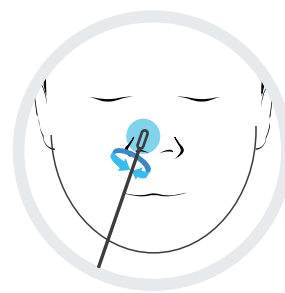

11

#### Drugie nozdrze

Umieść materiałową końcówkę tej samej wymazówki dokładnie w drugim nozdrzu dziecka/osoby, którą testujesz.


Delikatnie potrzyj wymazówkę wewnątrz nozdrza tej osoby **5 razy okrężnymi ruchami**, upewnij się, że jest dobry kontakt między końcówką wacika a wnętrzem drugiego nozdrza.

x5

### Ostrzeżenie


Jeśli u osoby, od której pobierasz wymaz, wystąpi krwawienie z nosa, przestań pobierać wymaz. Wymazówka nie nadaje się do testu. Zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli krwawienie nie ustąpi.

## 4. Zbadaj próbkę wymazu

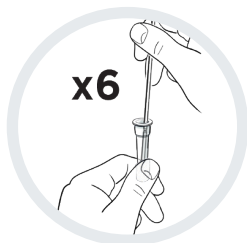


- 12** Umieść materiałową końcówkę wymazówki w płynie próbki ekstrakcyjnej.


Stanowczo dociśnij końcówkę do krawędzi próbki ekstrakcyjnej, obracając ją wokół próbki przez **co najmniej 6 sekund**.

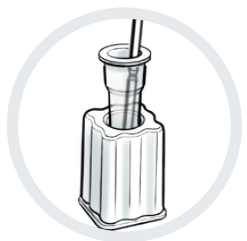

- 13** Pozostaw wymazówkę w próbce ekstrakcyjnej, **ustaw minutnik** i zostaw wymazówkę na **1 minutę**.

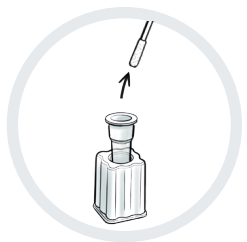


- 14** Wyciągnij wymazówkę z próbki ekstrakcyjnej.

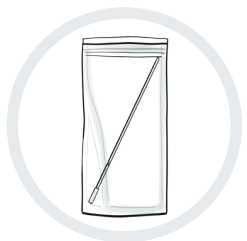

- 15** Umieść wymazówkę w plastikowej torebce zapinanej na zamek.

### Porady

Pojedyncza torba zapinana na zamek może służyć jako worek na odpady.

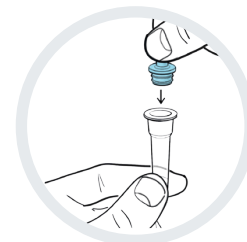

- 16** **Wciśnij** nasadkę dyszy szczelnie na próbkę ekstrakcyjną aby zapobiec wyciekom.


**Umieść próbkę ekstrakcyjną z powrotem w uchwycie próbki ekstrakcyjnej.**



- 17** **Sprawdź datę ważności (EXP)** na hermetycznym opakowaniu. Wyjmij kasetę testową z hermetycznego opakowania i umieść ją na wyczyszczonej, płaskiej powierzchni.

### Ostrzeżenie


Kasetę testową, która znajdowała się poza hermetycznym opakowaniem dłużej niż 30 minut, należy wyrzucić. Bezpiecznie wyrzuć wewnętrzną saszetkę ze środkiem osuszającym i włóż do plastikowego worka na odpady/torby z zamkiem.

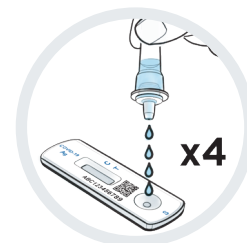

- 18** **Delikatnie** ściśnij próbkę ekstrakcyjną, aby umieścić **4 krople** płynu w dołku próbki (oznaczonym jako **S**) na kasecie testowej.

### Porady

Upewnij się, że kaseca testowa leży na **płaskiej i równej powierzchni**. Nie przesuwaj kasety testowej podczas testu. Powoli dodawaj krople do próbki. Nie przepelniać.

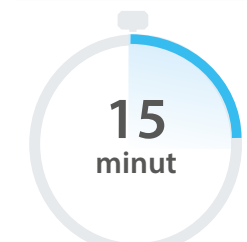


- 19** **Ustaw minutnik.** Odczytaj wynik po upływie **15 minut**.



## 5. Odczytaj swój wynik


### Ważne

Nie pozostawiaj testu na dłużej niż 20 minut, ponieważ unieważni to wynik.

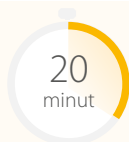


### + Wynik pozytywny

Pojawiają się dwie linie. Jedna kolorowa linia powinna być w obszarze linii kontrolnej (C), a druga kolorowa linia powinna znajdować się w obszarze linii testowej (T). Dwie linie, jedna obok C i jedna obok T, nawet jeśli są słabe, wskazują pozytywny wynik testu.

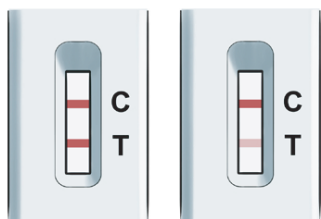


### Ważne

Jeśli wynik testu jest pozytywny, należy się izolować, a całe gospodarstwo domowe powinno się zastosować do rządowych wytycznych dotyczących samoizolacji: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

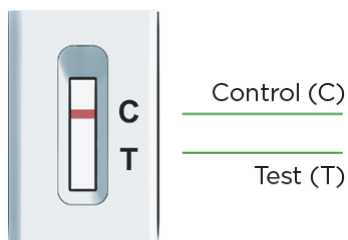

### - Wynik negatywny

W obszarze linii kontrolnej (C) pojawia się jedna kolorowa linia. W obszarze linii testowej (T) nie pojawia się żadna linia.

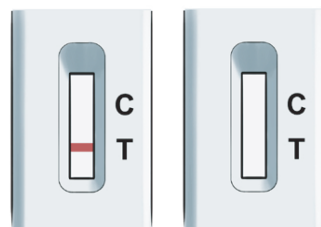


### ⊘ Wynik nieważny

Nie pojawia się linia kontrolna (C).

## 6. Zgłoś swój wynik

Należy zgłosić wynik do NHS, niezależnie czy jest pozytywny, negatywny czy nieważny.

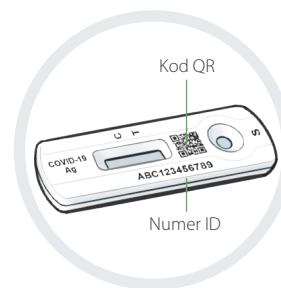

Rejestrowanie wszystkich wyników testów pomaga naukowcom wykrywać nowe epidemie wirusów i doradzać, jak zareagować. Kiedy ludzie zgłaszają tylko pozytywne wyniki, poziom zakażeń sprawia wrażenie wyższego niż w rzeczywistości.

Więc nawet jeśli Twój wynik jest negatywny lub nieważny, upewnij się, że NHS otrzyma dokładne informacje.

Do zgłoszenia wyniku potrzebny jest kod QR lub znajdujący się pod nim numer identyfikacyjny.



### Zgłoś online (najszybsze)

Jeśli mieszkasz w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej, wejdź na: [gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)

Jeśli mieszkasz w Szkocji, wejdź na: [covidtest.scot](https://www.covidtest.scot)

### Lub zgłoś telefonicznie

Zadzwoń pod nr **119**

Linie są czynne codziennie od 7:00 do 23:00 (połączenie bezpłatne z telefonów komórkowych i stacjonarnych)





# 7. Co oznacza Twój wynik

## Test uważa się za ukończony dopiero po zgłoszeniu wyniku

### Wynik pozytywny

Jeśli masz wynik pozytywny, prawdopodobnie jesteś zarażony(-a) wirusem COVID-19 i możesz zarażać innych. Powinieneś/powinnaś się izolować. Kiedy zgłosisz swój wynik, otrzymasz dalsze informacje na temat kolejnych kroków, które należy podjąć.

#### Ostrzeżenie

Ty i każdy, kto mieszka z Tobą powinien stosować się do aktualnych wytycznych krajowych i lokalnych. Można je znaleźć na: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

### Wynik negatywny

Jeśli wynik testu jest negatywny, prawdopodobne jest, że w czasie wykonywania testu nie zarażałeś(-aś) innych. Negatywny wynik testu nie gwarantuje jednak, że nie jesteś nosicielem COVID-19.

Jeśli wynik testu jest negatywny, należy nadal przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów i wytycznych, włącznie z regularnym myciem rąk, dystansem społecznym i noszeniem maseczki, jeśli jest to wymagane.

Jeśli pojawia się u Ciebie objawy powinieneś/powinnaś rozpocząć samodzielną izolację i zamówić aktualnie zalecany test na: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) można to też zrobić telefonicznie, dzwoniąc do centrum kontaktu z klientem pod nr 119. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00. Wraz z innymi członkami gospodarstwa domowego należy przestrzegać wytycznych krajowych.

### Wynik nieważny

Wynik nieważny oznacza, że nie można powiedzieć, czy podczas wykonywania testu miałeś(-aś) wirusa. Aby sprawdzić, czy masz koronawirusa, jak najszybciej wykonaj kolejny test. Nie używaj ponownie żadnych elementów pierwszego zestawu i rozpocznij procedurę testową od kroku 1.

## Jeśli problem nie ustąpi

Jeśli problem będzie się powtarzał, zaprzestań używania zestawów testowych. Jeśli nie masz dostępu do innego testu, możesz wykonać inny rodzaj testu za pośrednictwem aplikacji NHS COVID-19 lub wchodząc na: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) bądź dzwoniąc do centrum kontaktu z klientem pod nr 119. Linie czynne są codziennie od 7:00 do 23:00.

## 8 Wykonanie testu

Pozytywny wynik testu jest bardziej prawdopodobny, jeśli ktoś ma wysoki poziom koronawirusa (COVID-19).

Oznacza to, że najbardziej prawdopodobne u osoby, które obecnie zakaża innych i potrzebuje natychmiastowej samoizolacji.

## 9 Bezpieczna utylizacja zestawu do testu



Po zakończeniu testu wrzuć całą użytą zawartość zestawu testowego do dostarczonego worka na odpady z wyjątkiem plastikowego uchwytu na probówkę i wyrzuć ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Po utylizacji starannie umyj ręce.

#### Porady

Pojedyncza torba zapinana na zamek może służyć jako worek na odpady.

## Zanotuj wynik swojego testu

To tylko do Twojej wiadomości. Nadal należy zgłosić wynik do NHS (patrz informacje na stronie 15).

Wejdź na: [gov.uk/report-covid19-result](https://gov.uk/report-covid19-result)

Jeśli mieszkasz w Szkocji, wejdź na: [covidtest.scot](https://covidtest.scot)

Kod QR / numer identyfikacyjny zestawu testowego	U kogo wykonano test	Data	Czas	Wynik testu

## Zestaw zawiera następujące materiały

Elementy	7-pak
Instrukcja użycia (ten dokument)	1
Sterylna wymazówka w hermetycznym opakowaniu	7
Kaseta testowa w hermetycznym opakowaniu	7
Probówka ekstrakcyjna z buforem	7
Nasadka dyszy	7
Torba z zamkiem	7
Uchwyt na probówkę ekstrakcyjną	1
Certyfikat QC	1
	x

Dostawa tego urządzenia jest dozwolona wyłącznie w ramach dystrybucji prowadzonej przez Departament Zdrowia i opieki społecznej (DHSC) w ramach programu NHS Test and Trace.



Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd  
Adres: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,  
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (ChRL)  
Tel.: +86-572-5226111 Faks: +86-572-5226222  
WWW: www.orientgene.com  
quality@orientgene.com



CE<sub>0123</sub>



SENSUS GROUP LTD  
Adres: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook,  
Herts, CM23 4BD United Kingdom (Wielka Brytania)



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Adres: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Niemcy)



Informacje o wymazówce:  
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD  
Adres: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,  
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (ChRL)

CE<sub>0197</sub>



Llins Service & Consulting GmbH  
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (Niemcy)  
Email: info@llins-service.com

## Użyte symbole



Przechowywać w temperaturze 2 – 30°C



Sterylizowane tlenkiem etylenu



Producent



Nie używać produktu, gdy opakowanie jest uszkodzone



Nr partii



Data ważności



Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro



Trzymać z dala od światła słonecznego



Data produkcji



Nie używać ponownie



Ostrzeżenie dotyczące recyklingu, patrz instrukcja



Utrzymywać w suchości



Należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania



Ilość sztuk w opakowaniu (7)



Osoba odpowiedzialna w Wielkiej Brytanii



Nie zawiera lateksu



Numer katalogowy



Nie sterylizować ponownie



Upoważniony przedstawiciel na obszar Europy

Wersja B22088-03 Data wejścia w życie 2021/10/04



GCCOV-502a-H70GE

Niniejsza broszura dotyczy wyłącznie wykonywanego samodzielnie testu Orient Gene Szybki test (antygeny) Covid-19: GCCOV-502a-H70GE

**Przełącz wszystkie wyniki swoich testów do NHS**