

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte celý tento návod.
Tento test sa môže líšiť od testu, ktorý ste používali v minulosti.

Podrobný návod ku rýchlotestu (antigénovému) na Covid-19 Orient Gene na samotestovanie



Tieto pokyny na použitie sa vzťahujú len na rýchlotest (antigénový) na Covid-19 Orient Gene na samotestovanie (GCCOV-502a-H7OGE).

Tento návod vysvetľuje, ako môžete seba alebo inú osobu otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19 a výsledky oznámiť NHS.

Ďalšie jazykové verzie vrátane veľštiny a videonávody sú k dispozícii na [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Čo musíte urobiť

Podrobný návod

Prečítajte si pokyny a dodržujte kroky v správnom poradí. Príprava každého test trvá približne 15 minút a výsledky budú k dispozícii po ďalších 15 minútach.



Obsah tejto príručky

Časť	Názov	Strana
1	Pripravte si miesto testovania	6
	Skontrolujte obsah vašej testovacej súpravy	7
2	Pripravte si test	8
3	Odoberte vzorku výteru	10
	Testovanie inej osoby	11
4	Spracujte vzorku výteru	12
5	Odčítajte výsledok	14
6	Nahláste výsledok	15
7	Čo znamenajú výsledky	16
8	Citlivosť testu	17
9	Bezpečne zlikvidujte testovaciu súpravu	17
	Zaznačte si výsledky testu	18

Približne 1 z 3 ľudí s ochorením COVID-19 o svojom ochorení nevie.

Pravidelné samotestovanie môže pomôcť spomaliť šírenie ochorenia a ochrániť najzraniteľnejších členov našej rodiny a ľudí v okolí.

Rady k vykonaniu testu

V návode nájdete v rámečkoch ako pomôcku užitočné tipy, rady a výstrahy. Keď budete starostlivo dodržiavať tieto pokyny, pravdepodobnosť, že výsledok testu bude spoľahlivý, bude výrazne vyššia.

Všeobecné usmernenia a výstrahy

- Ak sa vám počas výteru spustí krvácanie z nosa, prerušte výter. Výter sa nedá testovať.
- Výrobok nebol vyrobený z prírodného kaučukového latexu, prítomnosť alebo stopy prírodného kaučukového latexu vo výrobku dodanom koncovému používateľovi však nemožno úplne vylúčiť.
- Testovaciu súpravu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Všetky súčasti súpravy sú na jedno použitie okrem držiaka na extrakčnú skúmavku. **Nepoužívajte opätovne** žiadne použité súčasti súpravy, ako sú výterové tyčinky alebo extrakčné skúmavky, okrem držiaka na extrakčné skúmavky.
- **Nemiešajte** súčasti z rôznych škatúl súprav. Používajte iba súčasti súpravy, ktoré sú súčasťou tejto súpravy.
- **Nepoužívajte** testovaciu kazetu, ak bola vystavená čistiacim prostriedkom v domácnosti (najmä bielidlu), pretože to môže viesť k nesprávnemu výsledku.
- **Nevykonávajte** test na priamom slnečnom svetle, pretože to môže viesť k nesprávnemu výsledku.
- Tieto súpravy sú určené len na použitie u ľudí.
- **Nevyhadzujte** držiak extrakčnej skúmavky, je určený na opakované použitie pri všetkých testoch.

Rady

- Testovaciu súpravu skladujte pri bežnej izbovej teplote alebo na chladnom a suchom mieste (2 °C až 30 °C).
- Nenechávajte ju na priamom slnečnom svetle a neskladujte ju v chladničke alebo mrazničke.
- Súprava by sa mala používať pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C). Ak ste súpravu skladovali pri teplote nižšej ako 15 °C, pred použitím ju nechajte 30 minút pri normálnej izbovej teplote.

O tomto teste

Prečo by ste si mali spraviť samotest

Táto samotestovacia súprava na COVID-19 je (antigénový) rýchlotest vykonaný pomocou výteru z nosa, ktorý vám umožní zistiť, či ste infekčný/á. Je určený pre ľudí, ktorí majú príznaky, ako aj pre ľudí bez príznakov. Na overenie vhodnosti typu testu by ste však mali postupovať podľa vnútroštátnych usmernení.

Ak máte pozitívny test na COVID-19, mali by ste:

- pomôcť obmedziť šírenie ochorenia, vy a členovia vašej domácnosti by ste mali dodržiavať aktuálne vládne nariadenia: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- informovať ľudí, s ktorými ste boli v blízkom kontakte, a miesta, ktoré ste navštívili 48 hodín pred začiatkom príznakov, alebo odo dňa preukázania pozitívneho výsledku testu, ak nie sú prítomné žiadne príznaky, aby sa otestovali na možnú infekciu na COVID-19. Vždy sa riadte miestnymi a vnútroštátnymi usmerneniami.

Ak máte negatívny test na COVID-19

Je pravdepodobné, že v čase vykonania testu ste neboli infekčný/infekčná. Negatívny výsledok testu však nezaručuje, že koronavírus nemáte. Mali by ste aj naďalej dodržiavať vládne usmernenia.


Rady

Ak máte vy alebo vaše dieťa/deti príznaky koronavírusu (ochorenia COVID-19) alebo ste sa koronavírusom (ochorením COVID-19) nakazili, preštudujte si usmernenia NHS na internete: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

Ak máte vy alebo vaše dieťa/deti príznaky koronavírusu (COVID-19) a stav sa vám/vaším deťom zhorší alebo nezlepší po 7 dní, navštívte online službu NHS **111: 111.nhs.uk**. Ak nemáte prístup na internet, zavolajte na NHS **111**. V prípade lekárskej pohotovosti volajte **999**.

Ak máte obavy, vyhľadanie pomoci neodkladajte. Dôverujte svojim inštinktom.

Pre koho je tento test vhodný

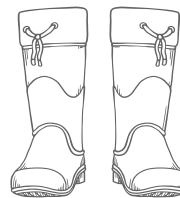

Dospelí starší ako 18 rokov

Samotest a hlásenie, v prípade potreby s asistenciou.



Dospievajúci vo veku od 12 do 17 rokov

Samotest a hlásenie pod dohľadom dospeléj osoby. V prípade potreby môže test vykonať dospelá osoba.



Deti mladšie ako 12 rokov

Deti mladšie ako 12 rokov by mala testovať dospelá osoba. Ak sa na testovanie dieťaťa necítite, test nevykonávajte. Ak dieťa pocíti bolesť, v teste nepokračujte.

- Zrakovo postihnuté osoby môžu používať naše testovacie súpravy, môžu však potrebovať asistenciu.
- Tento test nie je vhodný pre osoby náchylné na krvácanie z nosa alebo pre osoby, ktoré v posledných 6 mesiacoch podstúpili operáciu tváre alebo poranenia hlavy.

Ako často sa testovať

Frekvencia testovania sa môže líšiť v závislosti od vašej situácie a súčasných vnútroštátnych alebo miestnych usmernení.


Kde nájdete ďalšiu podporu

Ďalšie informácie o samotestovaní nájdete na stránke: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

1. Pripravte si miesto testovania

Budete potrebovať:

- časovač, napríklad hodinky alebo hodiny
- vreckovky
- zrkadlo
- prípravok na čistenie povrchov
- dezinfekčný prostriedok na ruky alebo mydlo a prístup k teplej vode

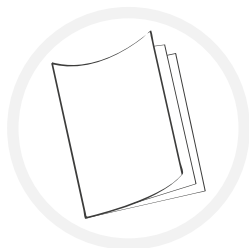

- 1** Pozorne si prečítajte tento návod. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete si tiež pozrieť video s demonštráciou výterového testu online: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)



- 2** Bezprostredne pred začiatkom testu upracte, vyčistite a vysušte rovný povrch, na ktorý umiestnite testovaciu súpravu. Zabráni sa tak kontaminácii testu.



20
sekúnd

- 3** Dôkladne si umývajte ruky 20 sekúnd mydlom a teplou vodou alebo dezinfekčným prostriedkom na ruky. Ak testujete viac ako jednu osobu alebo opakujete neplatný test, medzi jednotlivými testami opätovne očistite povrch a umyte si ruky. Zabráni sa tak kontaminácii testu.

Skontrolujte obsah vašej súpravy

- 4** Vaša testovacia škatuľa by mala obsahovať:



Sterilná odberová tyčinka v zapečatenom obale (x7)



Testovacia kazeta v zapečatenom vrecku (x7)



Rýchlouzatváracie vrecko (x7)
Používajte ako odpadové vrecko



Extrakčná skúmavka s tlmiacim roztokom (x7)



Kvapkací uzáver (x7)



Držiak ekstrakčnej skúmavky (x1 na opätovné použitie)
(Nevyhadzujte)

Rady

Čo robiť, ak je niečo poškodené, rozbité alebo chýba

Ak zistíte, že je niečo poškodené, rozbité alebo chýba, testovaciu súpravu nepoužívajte. Túto situáciu môžete telefonicky oznámiť na kontaktné centrum pre zákazníkov. Na telefonické linky môžete volať každý deň od 7:00 do 23:00.

Zavolajte na číslo: **119** (bezplatný hovor z mobilných telefónov a pevných liniek). Ponúkame podporu v 200 jazykoch, ako aj v britskej posunkovej reči.

Ak vám odberová súprava spôsobila ujmu, jej nahlásenie by mohlo pomôcť iným, prejdite na: [coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

2. Pripravte si test



- 5 Držte skúmavku v dostatočnej vzdialenosti od tváre a opatrne odlepte tesniacu fóliu na extrakčnej skúmavke a zabráňte tak rozliatiu tekutiny.

Varovanie

Nehryzte tesniacu fóliu extrakčnej skúmavky. Zabráňte kontaktu extrakčného tlmivého roztoku s pokožkou.

Varovanie

Extrakčný tlmivý roztok obsahuje konzervačné látky, ktoré môžu u niektorých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Ak sa roztok dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, umyte ich dostatočným množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.



- 6 Umiestnite extrakčnú skúmavku s tlmivým roztokom do držiaka na extrakčnú skúmavku.




- 7 **Jemne sa vysmrkajte** do vreckovky a vyhodte ju do bežného komunálneho odpadu. Zbavíte sa tak prebytočného hlienu. Ak testujete dieťa/odkázanú osobu, podľa potreby im pomôžte vysmrkať sa.



20
sekúnd


- 8 **Po vysmrkaní** si pomocou mydla a teplej vody alebo dezinfekčného prostriedku na ruky 20 sekúnd dôkladne **umývajte ruky**. Zabráni sa tak kontaminácii testu. Ak pomáhate dieťaťu/odkázanej osobe vysmrkať sa, **obaja si musíte** dôkladne 20 sekúnd **umývať ruky** alebo použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.

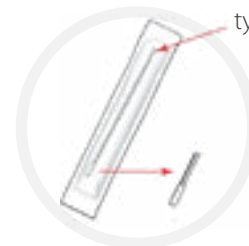

Rukoväť odberovej
tyčinky

Hrot odberovej
tyčinky

- 9 Výterovú tyčinku nájdete v zapečatenom obale. Nahmatajte mäkký textilný hrot výterovej tyčinky.

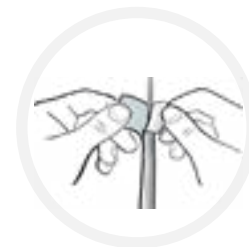

- 10 Otvorte balenie odberovej tyčinky a opatrne ju vyberte.

Varovanie

Nikdy sa rukami nedotýkajte mäkkého látkového hrotu odberovej tyčinky ani žiadnych povrchov.


3. Odoberte vzorku výteru

Varovanie

Pred výterom odstráňte všetky piercingy alebo podobné šperky z nosa.


Ak testujete dieťaťa mladšie ako 12 rokov alebo osobu, ktorá potrebuje pomoc, postupujte podľa pokynov na strane 11.

Testovanie seba

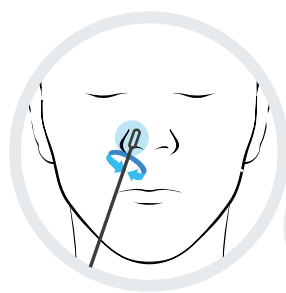

10 Prvá nosová dierka
Vložte látkový hrot odberovej tyčinky len do jednej nosovej dierky (približne 2,5 cm), látkový hrot odberovej tyčinky musí byť vložený 2,5 cm vo vnútri prvej nosovej dierky.

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite odberovou tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky. Dbajte nato, aby sa textilný hrot odberovej tyčinky dostatočne dotýkal vnútornej strany nosovej dierky. Nie je potrebná žiadna sila a nemusíte tlačiť ďaleko do nosovej dierky.

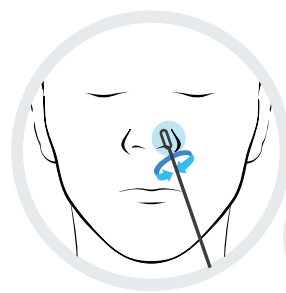

11 Druhá nosová dierka
Použite tú istú odberovú tyčinku, vložte látkový hrot odberovej tyčinky len do druhej nosovej dierky (približne 2,5 cm), látkový hrot odberovej tyčinky musí byť vložený 2,5 cm vo vnútri druhej nosovej dierky.

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite odberovou tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky. Dbajte nato, aby sa textilný hrot odberovej tyčinky dostatočne dotýkal vnútornej strany nosovej dierky.




Varovanie

Ak sa vám počas výteru spustí krvácanie z nosa, prerušte výter. Výter sa nedá testovať. Ak krvácanie pretrváva, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.

Testovanie inej osoby


Testovanie detí mladších ako 12 rokov by mala vykonať dospelá osoba. Pri príprave a testovaní dieťaťa alebo osoby, ktorá potrebuje asistenciu, dodržujte pokyny uvedené nižšie. Môžete si tiež pozrieť demonštračné video na stránke: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

Ak testujete dieťaťa, ukážte mu testovaciu súpravu a povedzte mu, čo budete robiť. Ak je to možné, malo by si sadnúť niekomu na kolená alebo by ho mal niekto držať za ruku. Požiadajte dieťa, aby sa vysmrkalo do vreckovky. Vyhodte vreckovku do uzavretého koša.

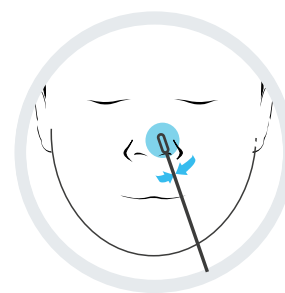

10 Prvá nosová dierka
Vložte látkový hrot odberovej tyčinky len do jednej nosovej dierky testovaného dieťaťa/osoby.

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite odberovou tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky. Nie je potrebná žiadna sila a nemusíte tlačiť ďaleko do ich nosovej dierky, dbajte nato, aby sa textilný hrot odberovej tyčinky dostatočne dotýkal vnútornej strany nosovej dierky.

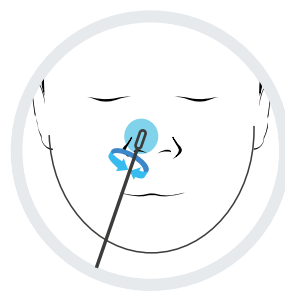

11 Druhá nosová dierka
Použite tú istú odberovú tyčinku, vložte látkový hrot odberovej tyčinky len do jednej nosovej dierky testovaného dieťaťa/osoby.

Krúživými pohybmi 5-krát jemne pretrite odberovou tyčinkou vnútornú stranu ich nosovej dierky, dbajte nato, aby sa textilný hrot odberovej tyčinky dostatočne dotýkal vnútornej strany druhej nosovej dierky.



Varovanie

Ak sa osobe, ktorej robíte výter, spustí krvácanie z nosa, výter prerušte. Výter sa nedá testovať. Ak krvácanie pretrváva, mali by ste sa poradiť s ich lekárom.

4. Spracujte vzorku výteru



- 12 Vložte látkový hrot odberovej tyčinky do extrakčnej skúmavky s tekutinou.

Silno pritlačte hrot k okraju extrakčnej skúmavky a **aspoň 6-krát** ho otočte okolo skúmavky.



- 13 Nechajte odberovú tyčinku v extrakčnom roztoku, **nastavte časovač** a nechajte ju tam **1 minútu**.



- 14 Vytiahnite odberovú tyčinku z extrakčnej skúmavky.



- 15 Vložte odberovú skúmavku do plastového rýchlozatváracieho vrečka.

Rady

Jednotlivé rýchlozatváracie vrecká sa môžu použiť ako vrecká na odpad.



- 16 **Pritlačte** kvapkací uzáver tesne na extrakčnú skúmavku a zabráňte tak pretekaniu.

Umiestnite extrakčnú skúmavku do držiaka na extrakčnú skúmavku.



- 17 **Skontrolujte dátum expirácie (EXP)** na zapečatenom vrecku. Vyberte testovaciu kazetu zo zapečateného vrečka a položte ju na vyčistený rovný povrch.

Varovanie


Testovaciu kazetu, ktorá bola mimo zapečateného vrečka dlhšie ako 30 minút, treba zlikvidovať. Vnútorne vysušacie vrecko a vrecúško opatrne vyhoďte do plastového odpadového vrečka/rýchlozatváracieho vrečka.



- 18 **Jemným** stlačením extrakčnej skúmavky kvapnite **4 kvapky** tekutiny do jamky na vzorku (označenej **S**) na testovacej kazete.

Rady

Testovaciu kazetu umiestnite na **rovný a vyrovnaný povrch**. Počas testu testovacou kazetou nehýbte. Pomaly pridajte kvapky do vzorky. Nepreplňte ju.

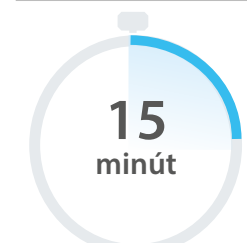


- 19 **Nastavte časovač**. Počkajte **15 minút** a odčítajte výsledok testu.

5. Odčítajte výsledok


Dôležité

Test nenechávajte pôsobiť dlhšie než 20 minút, pretože výsledok nebude platný.

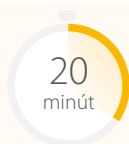

+ Pozitívny výsledok


Zobrazia sa dve čiarky. Jedna farebná čiarka by mala byť v oblasti kontrolnej čiarky (C) a druhá farebná čiarka by mala byť v oblasti testovacej čiarky (T). Dve čiarky, jedna vedľa C a jedna vedľa T, aj keď slabé, ukazujú, že test je pozitívny.

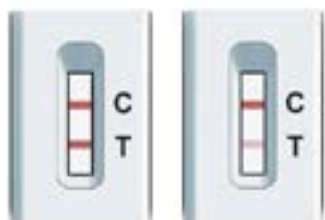

Dôležité

Ak máte pozitívny test, mali by ste ísť do karantény a vaša domácnosť by sa mala riadiť vládnyimi usmerneniami o samoizolácii:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

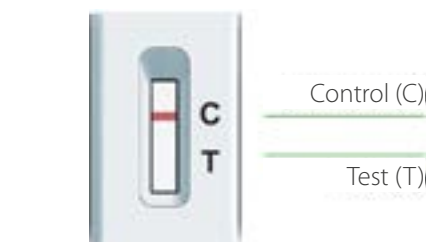

- Negatívny výsledok

V oblasti kontrolnej čiarky (C) sa objaví jedna farebná čiarka. V oblasti testovacej čiary (T) sa neobjaví žiadna čiarka.




⊘ Neplatný výsledok

Kontrolná čiarka (C) sa neobjaví.

6. Nahláste výsledok

NHS by ste mali nahlásiť pozitívne, negatívne aj neplatné výsledky.

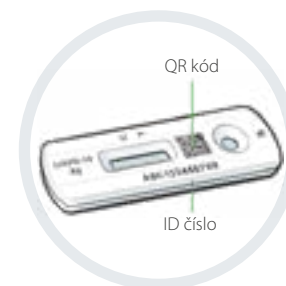

Zaznamenávanie všetkých výsledkov testov pomáha vedcom odhaliť nové ohniská výskytu vírusu a poradiť, ako reagovať. Ak ľudia nahlásujú len pozitívne výsledky, počty prípadov sa zdajú vyššie, než v skutočnosti sú.

Takže aj keď máte negatívny alebo neplatný výsledok, svojim konaním zabezpečíte presnosť informácií NHS.

Na nahlásenie výsledku potrebujete QR kód alebo identifikačné číslo pod ním.



Nahlásenie výsledku online (najrýchlejšie)

Ak žijete v Anglicku, Walese alebo Severnom Írsku, navštívte stránku:

[gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)

Ak žijete v Škótsku, navštívte stránku:

[covidtest.scot](https://www.covidtest.scot)



Alebo ho nahláste telefonicky

Zavolajte na číslo **119**

Telefonické linky sú v prevádzke každý deň od 7:00 do 23:00 (bezplatné mobilné a pevné linky)

7. Čo znamenajú výsledky

Test ste dokončili až po nahlásení výsledku

Pozitívny výsledok

Ak máte pozitívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v súčasnosti infikovaný/á vírusom COVID-19 a hrozí, že nakazíte aj ostatných. Mali by ste sa izolovať. Po nahlásení výsledku vám budú poskytnuté ďalšie informácie o ďalších krokoch.

Varovanie

Vy a všetky osoby, ktoré s vami žijú, by ste mali dodržiavať aktuálne vnútroštátne a miestne usmernenia. Nájdete ich na stránke: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

Negatívny výsledok

Ak máte negatívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v čase vykonania testu neboli infekčný/á. Negatívny výsledok testu však nezaručuje, že nemáte COVID-19.

Ak je váš test negatívny, mali by ste naďalej dodržiavať vnútroštátne a miestne pravidlá a usmernenia vrátane pravidelného umývania rúk, dodržiavania sociálneho odstupu a nosenia rúška na miestach, kde sa to vyžaduje.

Ak sa u vás objavia príznaky, mali by ste sa izolovať a absolvovať aktuálny odporúčaný test na: gov.uk/get-coronavirus-test prípadne telefonátom na zákaznicke kontaktné centrum na číslo **119**. Na telefonické linky môžete volať každý deň od 7:00 do 23:00. Vy aj vaša domácnosť by ste mali dodržiavať vnútroštátne usmernenia.

Neplatný výsledok

Ak sa zobrazí neplatný výsledok, znamená to, že sa nedá určiť, či ste v čase vykonania testu mali vírus. Aby ste si overili, či máte koronavírus, urobte si čo najskôr ďalší test. Nepoužívajte nič z prvého testu a začnite postup testovania od kroku 1.

Ak problém pretrváva

Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte používať testovacie súpravy. Ak nemáte k dispozícii iný test, prostredníctvom aplikácie NHS COVID-19 alebo na stránke: gov.uk/get-coronavirus-test prípadne telefonátom na zákaznicke kontaktné centrum na číslo **119** si môžete vyžiadať iný typ testu. Na telefonické linky môžete volať každý deň od 7:00 do 23:00.

8 Citlivosť testu

Pozitívny výsledok testu je pravdepodobnejší, ak má testovaná osoba vysokú hladinu koronavírusu (COVID-19). Znamená to, že s najväčšou pravdepodobnosťou odhalí ľudí, ktorí sú v súčasnosti infekční a musia byť okamžite izolovaní.

9 Bezpečne zlikvidujte testovaciu súpravu



Po dokončení testu vložte všetky použité súčasti testovacej súpravy do poskytnutého vrecúška na odpad, okrem plastového držiaka na skúmavku, a vyhodte do bežného komunálneho odpadu.

Po likvidácii si dôkladne umyte ruky.

Rady

Jednotlivé rýchlouzatváracie vrecká sa môžu použiť ako vrecká na odpad.

Dodanie tejto pomôcky je povolené len v rámci distribúcie ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí (DHSC) v programe NHS Test and Trace.



Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd
Adresa: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (Čína)
Tel: +86-572-5226111 Fax: +86-572-5226222
Webová stránka: www.orientgene.com
quality@orientgene.com



CE₀₁₂₃



SENSUS GROUP LTD
Adresa: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook,
Herts, CM23 4BD United Kingdom (Spojené kráľovstvo)



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adresa: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Nemecko)



Informácie o odberovej tyčinke:
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adresa: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (Čína)

CE₀₁₉₇



Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (Nemecko)
Email: info@llins-service.com

Použité symboly



Skladujte pri
teplote 2 – 30 °C



Sterilizované
pomocou
etylénoxidu



Výrobca



Nepoužívajte
výrobok, ak
je balenie
poškodené



Varovanie,
prečítajte si návod
na použitie



Dátum expirácie



Diagnostická
zdravotná pomôcka
na použitie in vitro



Skladujte mimo
slniečného žiarenia



Dátum výroby



Nepoužívajte
opakovane



Varovanie,
prečítajte si
návod



Skladujte v suchu



Prečítajte si návod
na použitie



Číslo jednotiek v
balení (7)



Zodpovedná osoba
vo Veľkej Británii



Bez latexu



Katalógové číslo



Nesterilizujte
opakovane



Autorizovaný zástupca
v Európe

Verzia B22088-03 Dátum účinnosti 04.10.2021



GCCOV-502a-H70GE

Táto príručka sa vzťahuje len na rýchlostest Orient Gene na Covid-19 (antigénový) na samotestovanie: GCCOV-502a-H70GE

Všetky výsledky testov nahláste NHS