

Teste başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.  
Bu test daha önce yaptığınızdan farklı olabilir.

# Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi Kullanım Kılavuzu



Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi (GCCOV-502a-H70GE) için geçerlidir.

Bu kılavuzda kendinize veya bir başkasına nasıl COVID-19 testi yapacağınızı ve sonuçları NHS'e nasıl bildireceğiniz açıklanmaktadır.

Galce dahil olmak üzere **farklı dillerdeki** versiyonlarını ve videolarını [gov.uk/covid19-self-test-help](https://gov.uk/covid19-self-test-help) adresinde bulabilirsiniz

**Bütün test sonuçlarınızı NHS'e bildirin**

# Yapmanız gerekenler

## Adım adım rehber

Lütfen kullanım talimatlarını dikkatle okuyun ve adımları sırasıyla takip edin. Her bir testin hazırlık süresi yaklaşık 15 dakika olup sonuçlar için bir 15 dakika daha beklenmesi gerekmektedir.



## İçindekiler

Bölüm	Başlık	Sayfa
1	Test alanını hazırlayın	6
	Test kitinin içeriğini kontrol edin	7
2	Testi hazırlayın	8
3	Kendinizden sürüntü örneği alın	10
	Testin başka birine yapılması	11
4	Sürüntü örneğini işlemekten geçirin	12
5	Sonucu kontrol edin	14
6	Sonucu bildirin	15
7	Sonuçlar ne anlama geliyor?	16
8	Test performansı	17
9	Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın	17
	Test sonuçlarınızı not edin	18

## COVID-19 olan yaklaşık her 3 kişiden 1'i bunu bilmiyor.

Düzenli olarak test yaparak hastalığın yayılmasını yavaşlatabilir ve ailemizdeki ve toplumdaki en hassas kişileri korumaya yardımcı olabiliriz.

## Testle ilgili tavsiyeler

Bu kılavuzda size yardımcı olacak faydalı ipuçları, tavsiyeler ve uyarılar bulacaksınız. Yazılan talimatları adım adım ve dikkatli bir şekilde uygulayarak testten güvenilir bir sonuç elde etme şansınızı çok daha artırabilirsiniz.

## Genel tavsiye ve uyarılar

- Örnek alma esnasında burnunuz kanarsa lütfen işlemi durdurun ve kullandığınız çubuğu test etmeyin.
- Bu ürün doğal kauçuk lateksten yapılmamakla birlikte son kullanıcıya teslim edilen ürünün içerisinde iz miktarda da olsa doğal kauçuk lateks bulunma ihtimali vardır.
- Test kitini çocuklardan uzak tutun.
- Kitin içerisinde bulunan malzemelerin tamamı, örnek tüpü tutucusu hariç, tek kullanımlıktır. Örnek tüpü tutucusu dışındaki hiçbir malzemeyi, örneğin sürüntü çubuklarını ya da içinde solüsyon olan örnek tüplerini **ikinci kez kullanmayın**.
- Farklı test kitlerindeki malzemeleri **karıştırmayın**. Sadece bu kitin içinde yer alan malzemeleri kullanın.
- Test kasetini, (özellikle çamaşır suyu olmak üzere) temizlik ürünlerine temas etmesi halinde **kullanmayın**. Aksi takdirde, test sonucu yanlış çıkabilir.
- Testi doğrudan güneş ışığı altında **yapmayın**. Sonuç yanlış çıkabilir.
- Bu test kitleri sadece insanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.
- Örnek tüpü tutucusunu **atmayın**. Yapacağınız diğer testlerde yeniden kullanacaksınız.

## TAVSİYELER

- Test kitini normal oda sıcaklığında veya serin ve kuru bir yerde (2°C ila 30°C arasında) muhafaza edin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve buzdolabı veya dondurucuda saklamayın.
- Kit oda sıcaklığında (15°C ila 30°C arasında) kullanılmalıdır. Eğer 15°C'nin altında saklanmışsa kullanmadan önce normal oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

# Test hakkında

## Neden kendinize test yapmalısınız?

Bu hızlı COVID-19 (antijen) testi kiti, burundan alınan sürüntü örneğini test ederek bulaşıcı olup olmadığını tespit etmeye yarar. Belirti gösterenler kadar hiç belirtisi olmayanlara da yapılabilir. Bununla birlikte, hangi tür testin sizin için doğru olacağını kontrol etmek için ilgili ulusal yönergeleri takip etmelisiniz.

## COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa yapmanız gerekenler:

- Hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için hükümetin güncel talimatları doğrultusunda kendinizi ve aile üyelerini izole edin: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- Belirteleriniz başlamadan önceki son 48 saat içerisinde ya da belirti olmaması durumunda test sonucunun pozitif çıktığı gün itibariyle yakın temasta olduğunuz kişilere ve ziyaret ettiğiniz yerlere bilgi vererek her ihtimale karşı COVID-19 testi yaptırmalarını önerin. Yerel ve ulusal makamların talimatlarına mutlaka uyun.

## COVID-19 testiniz negatif çıkarsa

Büyük olasılıkla testin yapıldığı sırada bulaşıcı değildiniz demektir. Bununla birlikte test sonucunun negatif çıkması, sizde koronavirüs olmadığını garanti etmez. Hükümet tarafından verilen talimatları yerine getirmeye devam etmelisiniz.


### TAVSİYELER

Siz veya çocuğunuzda koronavirüs (COVID-19) belirtileri varsa ya da COVID-19 kaptıysanız, lütfen NHS sitesindeki talimatlara uyun: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

Sizde veya çocuğunuzda koronavirüs (COVID-19) belirtileri varsa ve durumunuz kötüleşirse ya da yedi gün geçmesine rağmen durumunuzda iyileşme olmazsa NHS **111** online hizmet sayfasını ziyaret edin: [111.nhs.uk](https://111.nhs.uk). İnternete erişiminiz yoksa **111'den** NHS'i arayın. Acil tıbbi durumlarda **999'u** arayın.

**Endişeliyseniz yardım almakta gecikmeyin. Sezgilerinize güvenin.**

## Bu test kimlere yapılabilir?

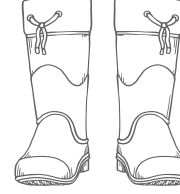

### 18 yaş ve üzeri yetişkinler

Gerekirse yardım isteyerek kendi kendinize test yapın ve sonucu bildirin.



### 12 – 17 yaş arası gençler

Bir yetişkin gözetiminde kendi kendinize test yapın ve sonucu bildirin. Gerekirse test bir yetişkin tarafından yapılabilir.



### 12 yaşından küçük çocuklar

12 yaşından küçük çocuklara bir yetişkin tarafından yardım edilmelidir. Bir çocuğa test yapma konusunda kendinize güvenmiyorsanız yapmayın. Çocuğun canı yanarsa teste devam etmeyin.

- Görme sorunu olanlara testin yapılması esnasında yardım edilmesi gerekebilir.
- Bu test burnu sık ve kolayca kanayanlar ya da son 6 ay içinde yüzünden veya başından yaralananlar için uygun değildir.

### Test sıklığı

Ne sıklıkla test yapmanız gerektiği koşullarınıza ve güncel ulusal veya yerel yönergelere göre değişebilir.


### Ekstra destek

Kendi kendine testle ilgili daha fazla bilgi için: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

# 1. Test alanını hazırlayın

## İhtiyacınız olanlar:

- saat gibi bir zamanlayıcı
- kâğıt mendil
- ayna
- yüzey temizleyici
- el dezenfektanı veya sabun ve sıcak su

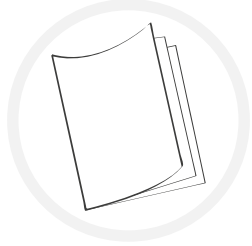

- 1 Bu kullanım talimatlarını dikkatle okuyun. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa sürüntü testinin nasıl yapıldığını gösteren videoyu internetten seyredebilirsiniz: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)



- 2 Teste başlamadan hemen önce, test kitini koyacağınız düz bir yeri boşaltın, temizleyin ve kurulayın. Bunun amacı teste bir şeyin bulaşıp kirlenmesini önlemektir.



20  
saniye


- 3 Ellerinizi sıcak su ve sabunla 20 saniye boyunca iyice yıkayın veya el dezenfektanı kullanın. Birden fazla kişiye test yapıyorsanız veya geçersiz çıkan bir testi tekrarlıyorsanız, her test öncesinde yüzeyi temizleyin ve ellerinizi tekrar yıkayın. Bunun amacı teste bir şeyin bulaşıp kirlenmesini önlemektir.

# Kitin içeriğini kontrol edin

- 4 Test kutusunun içinde olması gerekenler:



Kapalı ambalaj içinde steril sürüntü çubuğu (x7)

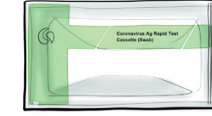

Kapalı ambalaj içinde test kaseti (x7)



Fermuarlı poşet (x7)  
Çöp poşeti olarak kullanın



Solüsyonlu örnek tüpü (x7)



Tüp kapağı (x7)



Örnek tüpü tutucusu  
(x1 – yeniden kullanılabilir)  
(Atmayın)

## TAVSİYELER


### Hasarlı, kırık veya eksik bir şey olması durumunda yapılması gerekenler

Kitin içerisinde hasarlı, kırık veya eksik bir parça varsa lütfen test kitini kullanmayın. Durumu Müşteri İletişim Merkezini arayıp bildirebilirsiniz. Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açıktır.

**119'u** arayın. (Sabit hatlardan ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilir). 200 dilde ve İngiliz İşaret Dilinde hizmet verilmektedir.

Bir cihazdan zarar görmeniz halinde durumu bildirmeniz başkalarına yardımcı olabilir. Lütfen [coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk) adresini ziyaret ediniz.

## 2. Testi hazırlayın

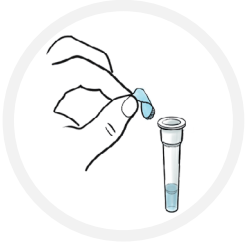

- 5 Örnek tüpünü yüzünüzden uzak tutun ve içindeki sıvının dökülmesini önlemek için tüpün üzerindeki sızdırmazlık filmini dikkatlice çıkartın.

### Uyarı

Tüpün ağzındaki sızdırmazlık filmini ısırarak çıkarmayın. Solüsyonun cildinize temas etmesinden kaçınınız.

### Uyarı

Test solüsyonunun içerisinde bazı kimselerde alerjik tepkiye neden olabilecek koruyucu maddeler bulunmaktadır. Solüsyonun deriyle veya gözlerle temas etmesi halinde bol suyla yıkayınız. Ciltte tahriş meydana gelirse tıbbi yardım isteyiniz.



- 6 İçinde solüsyon bulunan örnek tüpünü, tüp tutucunun içine yerleştiriniz.




- 7 Bir mendille **nazikçe sümürüp burnunuzu silin** ve mendili çöpe atınız. Bunun amacı burundaki fazla mukusu temizlemektir. Eğer testi bir çocuğa veya yardıma ihtiyacı olan birine yapıyorsanız, burunlarını temizlemelerine yardım ediniz.




20 saniye

- 8 **Burnunuzu sildikten sonra, ellerinizi sıcak su ve sabunla 20 saniye boyunca iyice yıkayınız** veya el dezenfektanı kullanınız. Amaç teste bir şeyin bulaşıp kirlenmesini önlemektir. Aynı şekilde bir çocuğun veya yardıma ihtiyacı olan birinin burnunu temizlemesine yardımcı olursanız, **ikiniz de 20 saniye boyunca ellerinizi iyice yıkamalı** veya el dezenfektanı kullanmalısınız.

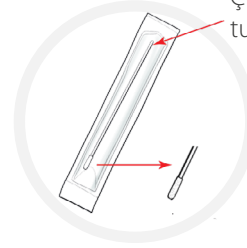

- 9 Kapalı ambalajın içerisindeki steril sürüntü çubuğunun yumuşak ve kumaş kaplı ucunu elinizle tespit ediniz.

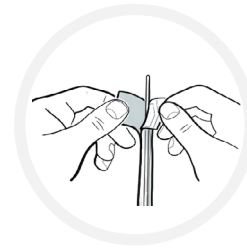

- 10 Ambalajı açınız ve sürüntü çubuğunu dikkatlice çıkartınız.

### Uyarı

Çubuğun yumuşak, kumaş kaplı ucuna elinizle dokunmayınız ya da bu ucu herhangi bir yere değdirmeyiniz.


## 3. Kendinizden sürüntü örneği alın

### Uyarı

Burunda piercing veya benzeri bir takı varsa işlem öncesi çıkartın.

**12 yaşın altında veya yardıma ihtiyacı olan birine test yapacaksanız 11. sayfadaki adımları takip edin.**

### Kendinize test yapma

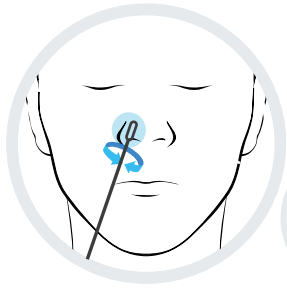


10

#### İlk burun deliği

Sürüntü çubuğunun kumaş kaplı ucunu burun deliklerinden birine yerleştirin. Çubuğun ucu yaklaşık 2.5 cm içeriye sokulmalıdır.

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına **dairesel hareketlerle 5 kez** nazikçe sürtün. Çubuğun ucunun burun deliğinin iç kenarlarına iyice temas ettiğinden emin olun.

Bastırmanız veya çubuğu çok derine itmeniz gerekmez.

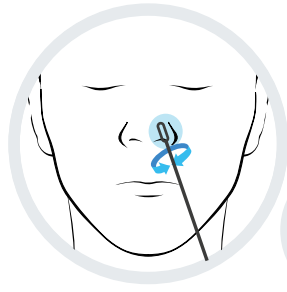

11

#### Diğer delik

Aynı çubuğu, gene yumuşak ucu içeri gelecek şekilde, diğer burun deliğinin içine yerleştirin. Çubuğun ucu yaklaşık 2.5 cm içeriye sokulmalıdır.

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına **dairesel hareketlerle 5 kez** nazikçe sürtün. Çubuğun ucunun burun deliğinin iç kenarlarına iyice temas ettiğinden emin olun.



### Uyarı


Örnek alma esnasında burnunuz kanarsa işlemi durdurun ve kullandığınız çubuğu test etmeyin. Kanama devam ederse doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir

## Testin başka birine yapılması

12 yaşından küçük çocuklara bir yetişkin tarafından test yapılmalıdır. Bir çocuğa veya yardıma ihtiyacı olan birine testi nasıl yapabileceğinize dair talimatlar aşağıda yazılıdır. Dilerseniz [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help) adresindeki videoyu da seyredebilirsiniz.

Bir çocuğa test yapacaksanız, onlara test kitini gösterin ve ne yapacağınızı anlatın. Mümkünse birinin kucağına oturtun veya birinden elini tutmasını isteyin. Çocuktan bir mendile sümkürmesini isteyin ve kirli mendili kapalı bir çöp kutusuna atın.

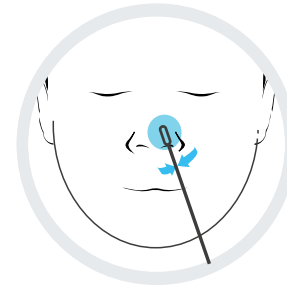


10

#### İlk burun deliği

Sürüntü çubuğunun kumaş kaplı ucunu örnek aldığınız çocuğun ya da kimsenin burun deliklerinden birine yerleştirin.

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına **dairesel hareketlerle 5 kez** nazikçe sürtün. Bastırmanız veya çubuğu çok derine itmeniz gerekmez. Çubuğun ucunun burun deliğinin içine iyice temas ettiğinden emin olun.

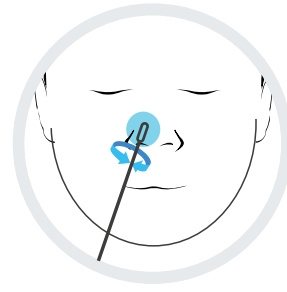

11

#### Diğer delik

Aynı çubuğu, gene yumuşak ucu içeri gelecek şekilde, diğer burun deliğinin içine yerleştirin.

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına **dairesel hareketlerle 5 kez** nazikçe sürtün. Çubuğun ucunun burun deliğinin içine iyice temas ettiğinden emin olun.




### Uyarı

Örnek aldığınız kimsenin burnu kanarsa işlemi durdurun ve kullandığınız çubuğu test etmeyin. Kanama devam ederse doktoruna danışmanızı tavsiye ederiz.

Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir

# 4. Sürüntü örneğini işlemden geçirin

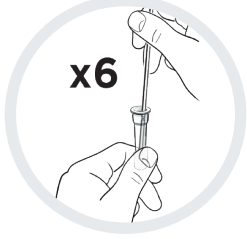


**12** Çubuğun kumaş kaplı ucunu içinde solüsyon bulunan örnek tüpünün içerisine yerleştirin.

Çubuğun ucunu tüpün iç kenarına iyice bastırıp **en az 6 kez çevirin.**



**13** Zamanlayıcıyı ayarlayın ve çubuğu tüpün içerisinde **1 dakika** bekletin.

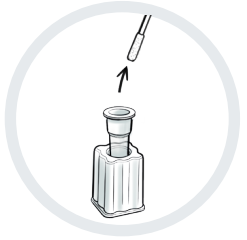

**14** Çubuğu tüpün içinden çıkartın.



**15** Çubuğu fermuarlı plastik poşetin içerisine koyun.

### Tavsiye

Fermuarlı poşet çöp poşeti olarak kullanılabilir.



**16** Kapağı örnek tüpünün ağzına, hiçbir sızıntı olmayacak şekilde, sıkıca **bastırıp** yerleştirin.

**Örnek tüpünü, tüp tutucusuna geri koyun.**



**17** Kasetin kapalı ambalajının üzerindeki **son kullanım tarihini (EXP) kontrol edin.** Test kasetini ambalajdan çıkartıp temizlenmiş, düz bir yüzeye yerleştirin.

### Uyarı


Ambalajından çıkartılan test kaseti 30 dakika dolduktan sonra atılmalıdır. Ambalajın içindeki kurutucu silika jel paketini ve ambalajın kendisini emniyetli bir şekilde fermuarlı plastik çöp poşetinin içine koyun.



**18** Örnek tüpünü **nazikçe** sıkarak içindeki sıvıdan test kasetinin üstündeki (**S** işaretli) örnek haznesine **4 damla** damlatın.

### Tavsiye

Test kasetini **düz ve dengeli bir yüzeye** yerleştirdiğinizden emin olun. Test esnasında kaseti yerinden oynatmayın. Örnek damlatma işlemini yavaşça yapın. Örnek haznesini aşırı doldurmayın.

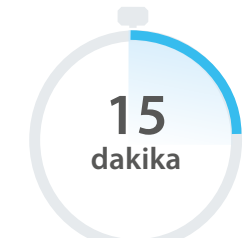

**15**  
dakika

**19** Zamanlayıcıyı ayarlayın.  
**15 dakika** bekleyip sonucu kontrol edin.

## 5. Sonucu kontrol edin


### ÖNEMLİ

Testi 20 dakikadan fazla bekletmeyin, aksi takdirde sonuç geçersiz olur.



### + Pozitif sonuç


İki çizgi belirir. Renkli çizgilerden biri C işaretli kontrol çizgisi bölgesinde, diğer renkli çizgi de T işaretli test çizgisi bölgesinde belirmelidir. Biri C, diğeri T'nin yanında olmak üzere görülen iki çizgi, silik olsa dahi, test sonucunun pozitif olduğunu gösterir.

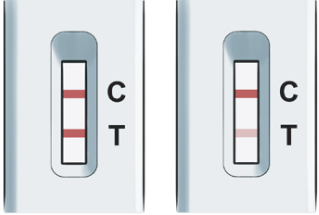

### ÖNEMLİ


Test sonucu pozitif çıkarsa kendinizi izole etmeniz, ev halkının da hükümetin bu konuyla ilgili yönergelerine uyması gerekmektedir:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

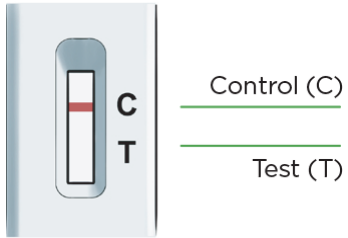

### - Negatif sonuç

(C) işaretli kontrol çizgisi bölgesinde renkli bir çizgi belirir. (T) işaretli test çizgisi bölgesinde hiçbir çizgi belirmez.

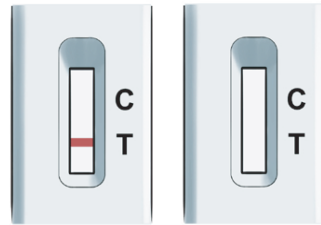


### Geçersiz sonuç

Kontrol çizgisi (C) görünmez.

## 6. Sonucu bildirin

### Pozitif, negatif ve geçersiz test sonuçlarınızı NHS'e bildirmeniz gerekmektedir.

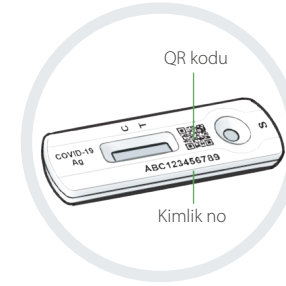

Bütün test sonuçlarının kayda geçirilmesi bilim insanlarının yeni virüs salgınlarını tespit etmesine ve nasıl müdahale edileceği konusunda tavsiye vermelerine yardımcı olmaktadır. Sadece pozitif sonuçlar bildirilirse vaka sayıları gerçekte olduğundan fazla görünür.

Bu yüzden test sonucu negatif veya geçersiz çıksa bile NHS'in elinde doğru bilgiler olmasını sağlamış olacaksınız.

Test sonucunu bildirmek için QR koduna ya da kodun altındaki kimlik numarasına ihtiyacınız olacak.

### İnternette bildirin (en hızlı yöntem)

İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda'da yaşıyorsanız [gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result) adresini ziyaret edin.

İskoçya'da yaşıyorsanız [covidtest.scot](https://www.covidtest.scot) adresine gidin.

### Sonucu telefonla da bildirebilirsiniz

119'u arayın

Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açık olup sabit hatlar ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilir.





# 7. Sonuçlar ne anlama geliyor?

## Testi ancak sonucu bildirdikten sonra tamamlamış sayılırsınız

### + Pozitif sonuç

Test sonucunuz pozitif çıkarsa büyük olasılıkla COVID-19'a yakalanmışsınız ve başkalarına da bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir. Kendinizi izole etmeniz gerekir. Sonucu bildirdiğiniz zaman, başka ne yapmanız gerektiği konusunda size bilgi verilecektir.

#### UYARI

Hem siz hem de sizinle yaşayan kimseler güncel ulusal ve yerel yönergelere uygun hareket etmelidir. Bu yönergeleri öğrenmek için [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/) adresini ziyaret edebilirsiniz.

### - Negatif sonuç

Test sonucunuzun negatif çıkması testin yapıldığı sırada büyük olasılıkla bulaşıcı olmadığınız anlamına gelir. Bununla birlikte, negatif sonuç sizde COVID-19 olmadığının garantisi değildir.

Test sonucunuz negatif çıksa bile düzenli el yıkama ve gerekli yerlerde sosyal mesafe ve maske dahil olmak üzere ulusal ve yerel makamların belirlediği kural ve talimatlara uymaya devam etmelisiniz.

Hastalık belirtilerinin çıkması halinde kendinizi izole etmeli ve [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) adresini ziyaret ederek veya **119** numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayarak tavsiye edilen testi edinmelisiniz. Hatlar her gün 07:00-23:00 arası hizmet vermektedir. Hem siz hem de hane halkı ulusal yönergelere uymalıdır.

### Geçersiz sonuç

Test sonucu geçersiz çıkarsa, testin yapıldığı esnada virüs taşıyıp taşımadığınızı söylemek mümkün değil demektir. Koronavirüs olup olmadığını teyit etmek için, mümkün olan en kısa sürede yeni bir test yaptırın. İlk testin içindeki hiçbir şeyi yeniden kullanmayın ve test prosedürünü 1. adımdan itibaren başlatın.

## Problem devam ederse

Problemin devam etmesi halinde test kitlerini kullanmayı derhal bırakın. Elinizde kullanabileceğiniz başka bir test yoksa NHS COVID-19 uygulamasından, [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) adresinden veya **119** numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayarak farklı bir test isteyebilirsiniz. Merkez her gün 07:00-23:00 arası hizmet vermektedir.

## 8 Test performansı

Test yapılan kişide yüksek düzeyde koronavirüs (COVID-19) bulunması halinde testin pozitif sonuç verme ihtimali çok daha yüksektir. Bu da halen bulaşıcı olan ve derhal kendini izole etmesi gereken kimselerin tespit edilmesi olasılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

## 9 Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın



Test tamamlandığı zaman, kullanılan bütün test malzemelerini, plastik tüp tutucu hariç, kitle birlikte verilen çöp poşetine koyup evsel atıkları biriktirdiğiniz çöp kutusuna atın.

Sonra da ellerinizi iyice yıkayın.

#### Tavsiye

Kitin içerisindeki fermuarlı poşetler çöp poşeti olarak kullanılabilir.

## Test sonuçlarınızı not edin

Bu sizin kendiniz için tuttuğunuz bir kayıttır. Test sonucunu NHS'e mutlaka bildirmeniz gerekir. (Bilgi için bkz. Sayfa 15).

Sonucu [gov.uk/report-covid19-result](https://gov.uk/report-covid19-result) adresinden bildirebilirsiniz.

İskoçya'da yaşıyorsanız [covidtest.scot](https://covidtest.scot) adresini ziyaret ediniz.

Test kitinin QR kodu/ kimlik numarası	Testin yapıldığı kişi	Tarih	Saat	Test sonucu

## Test kitinin içinde yer alan malzemeler aşağıdaki gibidir:

### İçindekiler

### 7'li paket

Kullanım talimatları (bu kitapçık)	1
Kapalı ambalaj içinde steril sürüntü çubuğu	7
Kapalı ambalaj içinde test kaseti	7
Solüsyonlu örnek tüpü	7
Tüp kapağı	7
Fermuarlı poşet	7
Örnek tüpü tutucusu	1
QC belgesi	1
	x

Bu cihazın tedarikine sadece NHS Test and Trace programı uyarınca Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC) tarafından yapılacak dağıtım kapsamında izin verilmiştir.



Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd  
Adres: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street,  
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (Çin)  
Tel: +86-572-5226111 Faks: +86-572-5226222  
Web: www.orientgene.com  
quality@orientgene.com



CE 0123



SENSUS GROUP LTD  
Adres: The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, Spellbrook,  
Herts, CM23 4BD United Kingdom (Birleşik Krallık)



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Adres: Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Almanya)



Sürüntü çubuğu imalatçısı:  
Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD  
Adres: Touqiao Town, Guangling DISTRICT,  
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (Çin)

CE 0197



Llins Service & Consulting GmbH  
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (Almanya)  
E-posta: info@llins-service.com

### Kullanılan semboller



2 - 30°C arasında saklayın



Etilen oksitle sterilize edilmiştir



İmalatçı



Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayın



Parti no.



Son kullanım tarihi



İn vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz



Güneş ışığından koruyun



İmalat tarihi



Tekrar kullanmayın



Uyarı! Lütfen kullanım talimatlarına bakın



Kuru bir yerde tutun



Kullanım talimatlarına bakın



Paket içindeki birim sayısı (7)



Birleşik Krallık sorumlusu



Lateks içermez



Katalog numarası



Yeniden sterilize etmeyin



Avrupa yetkili temsilcisi

Versiyon: B22088-03 Yürürlük tarihi: 2021/10/04



GCCOV-502a-H70GE

Bu kullanım talimatları sadece Orient Gene Kendi Kendine Hızlı Covid-19 (Antijen) Testi: GCCOV-502a-H70GE için geçerlidir

**Bütün test sonuçlarınızı NHS'e bildirin**