

د آزمېښت له پیلولو وړاندې دا ټول لارښود په څیر سره ولولئ.
له هغه څخه توپیر ولري چې تاسو له دې مخکې کارولی و.

د Covid-19 د Orient Gene د ځان د چټک آزمېښت لپاره ستاسو ګام په ګام لارښود



دغه لارښوونې د Covid-19 د ځان د چټک آزمېښت لپاره
(GCCOV-502a-H70GE) لپاره کارول کېږي.

دغه لارښود تاسو ته ښيي چې څه ډول د خپل ځان او نورو د COVID-19 آزمېښت ترسره کړئ، او د پایلې
راپور د روغتیا ملي خدمت (NHS) ته واستوئ.

د ولزي په ګډون بديلي ژبې او ویديويي لارښوونې په [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) کې د
لاسرسې وړ دي

ستاسو ګام په ګام لارښود

په مهرباني سره لارښوونې ولولئ او پراوونه په سمه توګه ترسره کړئ. هر آزمېښت نږدې 15 دقیقې وخت نیسي او پایله به یې 15 دقیقې وروسته چمتو شي.

15
دقیقې
ترتیب

د آزمېښت ترسره کولو له پاره لارښوونه

په لارښود کې ګټورې لارښوونې، نصیحتونه او د خبرتیاوو بکسونه دي چې له تاسو سره مرسته کولای شي. د دې لارښوونو د ګام پر ګام عملي کولو سره به تاسو یوه د باور وړ پایله ترلاسه کړئ.

عمومي لارښود او خبرتیاوي

- که مو د سوب پر مهال پزه ویني شوه، نو سوب کول ودرئ. سوب آزمویل کېدای نشي.
- محصول له طبیعي لاستیک رېر څخه نه دی جوړ شوی. که څه هم په محصول کې د طبیعي رېر لاستیک د آثارو شتون او څارل چې وروستي کارونکي ته لېږدول کېږي، په بشپړه توګه نشي ردېدای.
- د آزمېښت کېت د ماشومانو له لاسرسي څخه لرې وساتئ.
- د کېت ټولې اجزای د یو ځل کارولو له پاره دي، پرته د بهر کولو د ټیوب د ساتنې له وسيلې څخه. د کېت یو ځل کارول شوي توکي لکه سواب او یا د بهر کولو ټیوب بیا ځلي مه کاروئ، پرته د ټیوب د ساتلو له وسيلې څخه.
- د بېلا بېلو کېتو د بکسو توکي مه سره یو ځای کوئ. یواځې هغه توکي وکاروئ چې په کېت کې چمتو شوي دي.
- که چېرته د آزمېښت توکي د کور د پاکولو په توکو لګېدلي وي (په ځانګړې توګه سپینوونکي مایع)، مه یې کاروئ، ځکه کېدای شي دا کار د ناسمي پایلې لامل شي.
- د لمر تر مستقیمو وړانګو لاندې آزمېښت مه ترسره کوئ، ځکه دا کار د ناسمي پایلې لامل کېدای شي.
- دا کېتونه یوازې د انساني استفادې له پاره جوړ شوي دي.
- د وېستونکي ټیوب د ساتلو وسیله لرې مه غورځوئ، دا د نورو آزمېښتونو له پاره هم کارول کېږي.

د دې پرېشور منځپانګه

برخه	عنوان	مخ
1	د خپل د آزمېښت ساحه چمتو کړئ	6
	د خپل د آزمېښت د کېت محتوا وګورئ	7
2	خپل آزمېښت ترتیب کړئ	8
3	خپل د پزې د ترشحاتو آزمېښت ترسره کړئ	10
	د کوم بل چا ارزول	11
4	د پزې د ترشحاتو د آزمېښت پروسس کول	12
5	خپله پایله ولولئ	14
6	د خپلې پایلې راپور ورکړئ	15
7	ستاسو د پایلو معنا څه ده	16
8	د آزمېښت فعالیت	17
9	په خونديتوب سره ستاسو د آزمېښت د کېت لرې کول	17
	د خپل د آزمېښت پایله یادښت کړئ	18

له هرو 3 کسانو څخه یو تن یې نه پوهېږي چې په COVID-19 اخته دی.

په منظم ډول د خپل ځان معاینه کول د ناروغۍ د خپرېدو کچه را کموي او زموږ په کورنۍ او ټولنه کې د زیانمنونکو خلکو په خوندي کولو کې مرسته کوي.

لارښوونه

- د آزمېښت کېت په یوه داسې کوټه کې چې د تودوخې درجه یې عادي وي او وچ او یخ ځای کې وساتئ (له 2° څخه تر 30° پورې).
- د لمر تر مستقیمو وړانګو لاندې یې مه ساتئ او مه یې په فریزر کې ساتئ.
- کېت باید په داسې کوټه کې وکارول شي چې د تودوخې درجه یې (له 15° څخه تر 30° درجو پورې وي). که چېرته کېت په داسې ځای کې ساتل شوی وي چې د تودوخې درجه یې له 15° درجو څخه کمه وي، نو له استعمال څخه وړاندې یې 30 دقیقو له پاره په داسې ځای کې کېږدئ چې تودوخه یې عادي وي.

ولې باید خپل ځان آزمېښت کړئ

د COVID-19 (انټیژن) دغه د خپل ځان آزمېښت کولو کېدو د پزې د سوب یو چټک آزمېښت دی تر څو معلومه چې تاسو په ناروغۍ اخته یاست کنه. دا د هم د هغو خلکو له پاره دی چې نښې نښانې لري هم د هغو له پاره دی چې نښې نښانې نلري. تاسو باید په هر صورت د هېواد په کچه لارښوونې وڅارئ چې کوم ډول آزمېښت ستاسو له پاره مناسب دی.

که ستاسو د COVID-19 د آزمېښت پایله مثبتې وي نو تاسو باید:

- د ناروغۍ د خپرېدو د کچې په کمولو کې مرسته وکړئ، تاسو او ستاسو کورنۍ باید د دولت اوسنۍ لارښوونې تعقیب کړئ:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

- هغو کسانو ته خبر ورکړئ چې په تېرو 48 ساعتونو کې تاسو ورسره نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او هغه ځایونه چې تاسو د نښو نښانو له پیلېدو وړاندې ورغلي وئ، یا له هغې ورځې څخه چې ستاسو د آزمېښت پایله مثبتې ثابتې شوه که څه هم ستاسو نښې نښانې نه وې موجودې، تر څو هغوی د احتمالي COVID-19 آزمېښت ترسره کړي. تل سیمه ییزې او ملي لارښوونې وڅارئ.

که ستاسو د COVID-19 د آزمېښت پایله منفي وه

داسې ښکاري چې تاسو د آزمېښت د ترسره کولو پر مهال پر ناروغۍ اخته نه وئ. په دې توګه د آزمېښت منفي پایله د دې تضمین نه کوي چې تاسو به کرونا ویروس نلري. تاسو باید د دولت د لارښوونو عملي کولو ته دوام ورکړئ.

لارښوونه

که تاسو یا ستاسو ماشوم/ماشومان د کرونا ویروس (COVID-19) نښې نښانې لرئ او یا مو پر (COVID-19) له اخته کسانو سره اړیکه نیولې وي، په مهربانۍ سره په آنلاین بڼه د NHS لارښوونو ته مراجعه وکړئ: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

که تاسو یا ستاسو ماشوم/ماشومان د (COVID-19) نښې نښانې لري او حالت یې د خرابېدو پر لور روان وي، او یا مو ماشوم/ماشومان تر 7 ورځو وروسته نه وي روغ شوي، د **111 NHS** آنلاین خدمتونو ته مراجعه وکړئ: 111.nhs.uk. که تاسو انټرنټ ته لاسرسی نلري، د **111 NHS** ته زنگ ووهئ. د روغتیايي بېرنيو مرستو تر لاسه کولو له پاره له **999** سره اړیکه ونیسئ.

که اندېښمن یاست نو مرسته تر لاسه کول مه ځنډوئ. پر خپل ځان باور ولرئ.

دا آزمېښت د چا له پاره مناسب دی




له 12 څخه کم عمره ماشومان

له 12 کلونو څخه کم عمره ماشومانو آزمېښت باید یو مشر کس ترسره کړي. که د یوه ماشوم په معاینه کولو اعتماد نلري، نو مه یې معاینه کوی، که ماشوم د درد احساس کوي، آزمېښت ته دوام مه ورکوی.



12-17 کلونو پورې تنګي ځوانان

ځان معاینه کول او راپور د مشر کس تر نظارت لاندې. که اړتیا وي مشر کس به آزمېښت ترسره کړي.

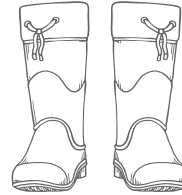

له 18 کلنۍ څخه پورته ځوانان

خپل ځان معاینه کول او راپور، که اړتیا وي له مرستې سره.

- هغه خلک چې په لیدلو کې ستونزه لري هم کولای شي زموږ له کښتونو څخه ګټه واخلي، مګر ښايي مرستې ته اړتیا ولري.
- دا آزمېښت د هغو خلکو له پاره مناسب نه دی چې له پزې څخه یې وینه بهېږي، یا په تېرو 6 میاشتو کې د مخ یا سر په برخه کې ټپي شوی وي.

څو ځله باید آزمېښت وکړو

دا چې تاسو څو ځله آزمېښت وکړئ، دا ستاسو په شرایطو او اوسنیو ملي او سیمه ییزو لارښوونو پورې اړه لري.

اضافي مرسته چېرته تر لاسه کولای شم

د خپل ځان معاینه کولو په اړه نور معلومات دلته تر لاسه کړئ: gov.uk/covid19-self-test-help

1. خپله د آزمېښت ساحه چمتو کړئ

د خپل کېت توکي وگورئ


تاسو به اړتيا ولرئ:

- يوې وخت بنودونکي آلي ته لکه لاسي يا دېوالي ساعت
- کاغذي دستمالونه
- هېنډاره
- صافې
- د لاسونو له پاره د مېکروب ضد مایع يا صابون او گرمو اوبو ته لاسرسی.

4 تاسو باید په خپله آزمېښت کارټ کې لاندې ټول توکي ولرئ:



د بندې کڅوړه (x7)
د خټلو بکس

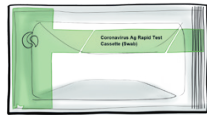

د آزمېښت بکسه په مهر شوي پاکټ کې (x7)



د سواب بایر په مهر شوي پاکټ کې (x7)



د ټیوب د ساتنې وسی (x1 بیا کارېدونکی)
(لرې يې مه غورځوئ)




څڅونکی سرپوښ (x7)



د بهر کولو ټیوب له حایل سره (x7)

1

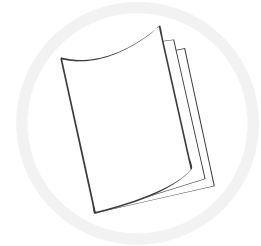

دغه لارښود په خورا غور سره ولولئ. که تاسو لا ډېرې مرستې ته اړتیا لرئ، کولای شئ د سواب آزمېښت ویدیو په آنلاین بڼه وگورئ: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

2



آزمېښت له پیل څخه وړاندې سملاسي یوه سطحه پاکه، صفا او وچه کړئ تر څو د آزمېښت کېت هلته کېږدئ. دا کار له ککړتیا څخه د آزمېښت د مخنیوي له پاره کېږي.

3



20
ثانیې

خپل لاسونه په بشپړه توګه د 20 ثانیو له پاه په گرمو اوبو او صابون پرېمېنځئ، یا د مېکروب ضد مایع وکاروئ. که تاسو له یوه څخه زیات کسان آزمېښت کوئ یا یو تش آزمېښت تکراروئ، له هر آزمېښت وروسته سطحه پاکوئ او خپل لاسونه بیا ځلي پرېمېنځئ. دا کار له ککړتیا څخه د آزمېښت د مخنیوي له پاره کېږي.

لارښوونه

که کوم څه خراب شوي، مات او یا پاتې وي باید څه وکړو که تاسو پوه شوی چې کوم څه خراب شوي، مات او یا پاتې شوي دي، په مهرباني سره د آزمېښت کېت مه کاروئ. تاسو کولای شئ د پیروډونکو د خدمتونو له مرکز سره اړیکه ونیسئ او هغوی ته خبر ورکړئ. دغه ټلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې فعالې وي. د 119 شمېرې ته (له موبایل او ټلیفون څخه په وړیا ډول زنگ ووهئ). مور په 200 ژبو خدمتونه وړاندې کوي، همدارنګه د برېټانیا په اشاروي ژبه هم خدمتونه وړاندې کوي. که کومې آلي تاسو ټپي کړئ، د دې راپور ورکول به له نورو سره مرسته وکړي، لاندې لېنک ته ورشئ. coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

دغه لارښوونې د Orient Gene د Covid-19 د ځان د چټک آزمېښت لپاره (GCCOV-502a-H70GE) لپاره کارول کېږي.

دغه لارښوونې د Orient Gene د Covid-19 د ځان د چټک آزمېښت لپاره (GCCOV-502a-H70GE) لپاره کارول کېږي.

2. خپل آزمېښت ترتيب کړئ

5 ټيوب له خپل مخ څخه لرې وساتئ، بند پوښ پر بهر کونکي ټيوب خلاص کړئ چې د مایع له توییدو څخه مخنیوی وشي.



څېړداری

په بهر کونکي حایل کې یو لږ ساتونکي مواد شته چې ښايي ځینې خلک ورسره حساسیت ونیسي. که محلول له پوستکي یا سترگو سره تماس وکړ، په خورا ډېرو اوبو یې ومینځئ. که مو پوستکي سوزش کاوه نو درمل ورته واخلي.

څېړداری

د بهر کولو د ټیوب بند شوی سرپوښ مه چپئ. د بهر کولو حایل په خپل پوستکي ونه وهئ.

6 د بهر کولو ټیوب چې حایل هم پکې وي، د بهر کولو د ټیوب د ساتني په وسیله کې ځای پر ځای کړئ.




7 خپله پزه په یوه دستمال کې تشه کړئ او دستمال د کور په عمومي خلداني کې واچوئ. په دې توګه به ستاسو د پزې اضافي ترشحات لرې شي. که تاسو کوم ماشوم/ار کس معاینه کوئ، مرسته ورسره وکړئ چې هغه خپله پزه تشه کړي.




8 د خپلې پزې له تشولو څخه وروسته لاسونه د 20 ثانیو له پاره په صابون او اوبو ومینځئ، یا مېکروب ضد مایع وکاروئ. دا د ازموینې له ککړېدو څخه مخنیوی کوي. که تاسو له کوم ماشوم/ار کس سره مرسته کوئ چې خپله پزه تشه کړي، نو تاسو دواړه باید خپل لاسونه د 20 ثانیو له پاره ومینځئ، یا مېکروب ضد مواد وکاروئ.



9 د سواب بایر له مهر شوي پاکټ څخه را واخلي. د سواب نرم تکه یې نوک وپېژنئ.

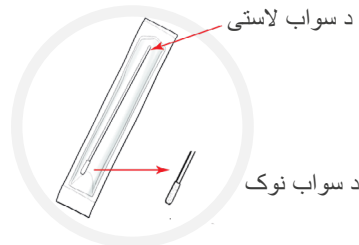

10 د سواب پاکټ خلاص کړئ او سواب ترې را وباسئ.

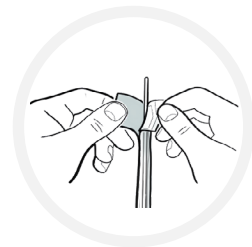

څېړتیا

د سواب تکه یې نوک له خپل لاس یا کومي بلې سطحې سره مه لګوئ.

3. خپله د سواب نمونه واخلي

د بل چا معاینه کول


څېړتیا

په مهرباني سره ډاډ حاصل کړئ چې له نمونې اخیستلو څخه وړاندې د له پزې څخه مېخک او نور زېورات لرې کړئ، که تاسو له 12 کلنې څخه کم عمره ماشوم یا داسې څوک معاینه کوئ چې مرستې ته اړتیا لري، نو په 11 مخ کې شته پړاوونه ترسره کړئ

د خپل ځان آزمېښت کول


تر 12 کلنې څخه بنسټه ماشوم باید د کوم مشر کس له لوري معاینه کړای شي. لاندې لارښود وڅارئ چې څه ډول د یوه ماشوم یا مرستې ته د اړ کس آزمېښت ته چمتووالی ونیسي او آزمېښت یې ترسره کړئ. تاسو کولای شئ یوه لارښود وپېیو دلته وگورئ: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help). که تاسو د ماشوم آزمېښت ترسره کوئ نو هغه ته د آزمېښت کېټ وینښی او ورته وواياست چې تاسو څه کول غواړئ. که شونې وي، ماشوم د کوم چا په زنگون کېنوی یا چا ته وواياست چې د هغه لاس پورته کړي. له ماشوم څخه و غواړئ چې خپله پزه په یوه کاغذي دستمال کې تشه کړي. دستمال د خخلو په سطل کې واچوئ.

د پزې لومړۍ سوري

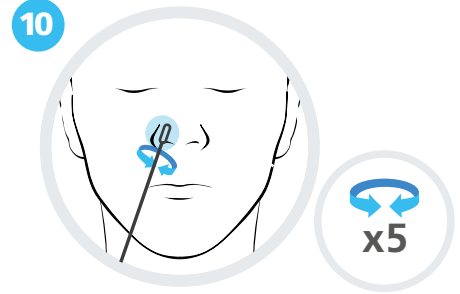


د سواب تکيه يې نوکه د پزې په سوري کې دننه کړئ (نږدئ) 2.5 سانتي متره، ډاډ حاصل کړئ چې د سواب تکه يې نوکه 2.5 سانتي سناسو په پزه کې ننوتې ده. سوب ورو، د خپلې پزې په سوري کې پنځه ځلي وڅرخوي. ډاډ حاصل کړئ چې د سواب تکه يې نوکه مو د پزې سوري ته سم ننوتې ده. زور مه ورکوئ او اړتيا نشته چې په خپله پزه فشار راوړئ.

د پزې لومړۍ سوري

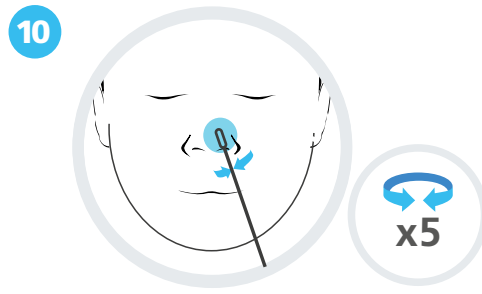


د سواب تکيه يې نوکه د هغه ماشوم/شخص د پزې په سوري کې دننه کړئ چې تاسو يې آزمېښت کوئ. سوب ورو، د هغوی د پزې په سوري کې پنځه ځلي وڅرخوي. زيات فشار ته اړتيا نشته او سواب په زوره پزې ته مه نښاسئ، ډاډ حاصل کړئ چې د سواب تکه يې نوکه د پزې لومړي سوري ته سمه ننوتې ده. زور مه ورکوئ او اړتيا نشته چې په خپله پزه فشار راوړئ.

د پزې دويم سوري

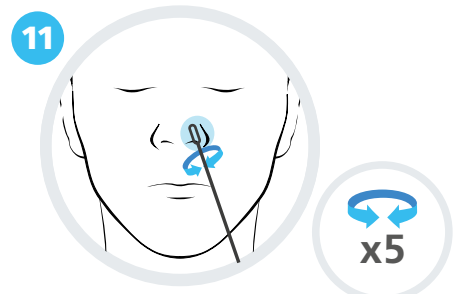

له هماغه سواب څخه په استفادي، د سواب تکه يې نوکه د خپلې پزې په دويم سوري کې دننه کړئ (نږدې 2.5 سانتي)، ډاډ ترلاسه کړئ چې د سواب نوکه د پزې په دويم سوري کې 2.5 سانتي ننوتې ده. سوب ورو، د خپلې پزې په سوري کې پنځه ځلي وڅرخوي. ډاډ حاصل کړئ چې د سواب تکه يې نوکه مو د پزې سوري ته سمه ننوتې ده.

د پزې دويم سوري

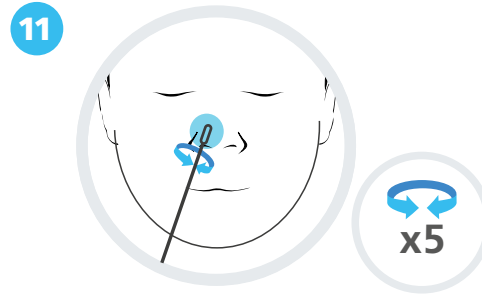

له هماغه سواب څخه په استفادي، د سواب تکه يې نوکه د هغه ماشوم/شخص د پزې په دويم سوري کې دننه کړئ چې آزمېښت يې ترسره کوئ. سوب ورو، د هغوی د پزې په سوري کې پنځه ځلي وڅرخوي، ډاډ حاصل کړئ چې د سواب تکه يې نوکه د پزې سوري ته سمه ننوتې ده.

څېړتیا

که د سواب پر مهال د هغوی پزه ویني شوه، نو سواب کول ودرئ. سواب آزمېښت کېدای نشي. که وینه ونه درېده، توصیه کېږي چې له ډاکټر سره مشوره وکړئ.

څېړتیا


که مو د سواب پر مهال پزه ویني شوه، نو سواب کول ودرئ. سواب آزمېښت کېدای نشي. که وینه ونه درېده، توصیه کېږي چې له ډاکټر سره مشوره وکړئ.

دغه لارښوونې د Orient Gene د Covid-19 د ځان د چټک آزمېښت لپاره (GCCOV-502a-H70GE) لپاره کارول کېږي.

دغه لارښوونې د Orient Gene د Covid-19 د ځان د چټک آزمېښت لپاره (GCCOV-502a-H70GE) لپاره کارول کېږي.


4. د سواب نمونه پروسس کړئ

12 د سواب تکیه یې نوکه د بهر کولو د تیو په مایع کې کپړدئ.

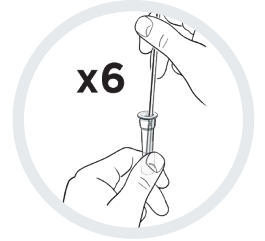


د سواب نوکه د بهر کولو د تیوب پر غاړه په زوره کېکړئ، د تیوب پر غاړه یې لږ تر لږه 6 ځلي ځای بدل را بدل کړئ.


13 سوب د بهر کولو په تیوب کې پرېږدئ، وخت وټاکئ او د یوې دقیقې له پاره یې هلته پرېږدئ.

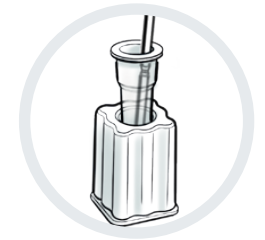

14 سوب د بهر کولو له تیوب څخه را بهر کړئ.

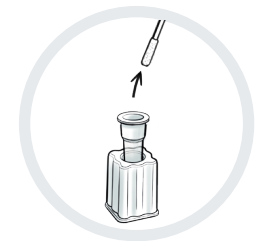


15 سوب په پلاستيکي بند بکس کې کپړدئ.

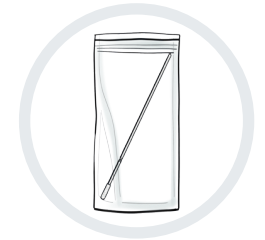

لارښوونه

دغه بند پلاستيکي بکس د خولو د بکس په توګه کارېدای شي.

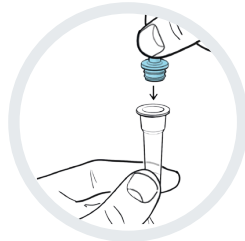

16

د تیوب سرپوښ پرې په زوره کلک کړئ، چې هېڅ مایع تری بهر نشي.

د بهر کولو تیوب بېرته د بهر کولو د تیوب د ساتنې په وسیله کې ځای پر ځای کړئ.



17

پر بند پاکټ د اعتبار نېټه (EXP) وګورئ. د آزمېښت کارټ له بند پاکټ څخه را بهر کړئ او پر یوه پاکه سطحه یې کپړدئ.

څېړنیا

د آزمېښت هغه کارټ چې له 30 دقیقو څخه د ډېر وخت له پاره له پاکټ څخه د باندې پاتې شي، له هغې څخه باید ګټه وانه خیستل شي. داخلي وچوونکي بکسه او پاکټ په احتیاط سره د خولو په پلاستيکي سطل کې واچوئ.



18

د بهر کولو تیوب په آرامی سره کېکړئ تر څو 4 ځلې مایع تری د آزمېښت د بکسې د نمونې پر آله (پر S شکل ځای) وڅڅېږي.

لارښوونه

داده شي چې د آزمېښت کارټ مو پر هواره سطحه ایښي ده. د آزمېښت کارټ د آزمېښت پر مهال مه خوځوئ، ډېر یې هم مه ډکوئ.



19

وخت وټاکئ. 15 دقیقې صبر وکړئ تر څو خپله پایله ولولئ.

اړین


آزمېښت له شل دقیقو څخه د ډېرې مودې له پاره مه پرېږدئ، ځکه دا کار کولای شي پایله له منځه یوسي.

20
دقیقې

مثبته پایله



دوه کرښې ښکاري. یوه رنګه کرښه باید د کنټرول په کرښه کې د (C) په ساحه کې وي، او بله رنګه کرښه باید د آزمېښت په کرښه کې د (T) په ساحه کې وي. دوه کرښې چې یوه یې C ته نږدې وي او بله یې T ته نږدې وي، ان بېکه کرښې ښيي چې پایله مثبت ده.

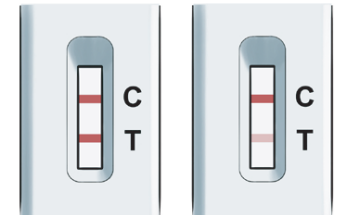

اړین

که تاسو پایله مثبت ده، باید خپل ځان جلا کړئ او کورنۍ مو باید د ځان جلا کولو له پاره د دولت لارښوونې تعقیب کړي:


nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

تاسو باید د خپلې مثبتې، منفي او یا باطلې پایلې راپور NHS ته ورکړئ.

د ټولو آزمېښتونو پایلې له پوهانو سره مرسته کوي تر څو د نویو ویروسونو خپرېدنه تشخیص کړي او د تدابیرو لارښوونه وکړي. که خلک یواځې د مثبتې پایلې راپور ورکړي، دا به له اصلي کچې څخه د ناروغۍ کچه زیاته وښيي.

نو که چېرته ستاسو پایله منفي یا باطله هم وي، NHS ته به ډاډ ورکړئ چې معلومات دقیق دي.

تاسو د خپل آزمېښت د پایلې د راپور ورکولو له پاره لاندې کوډ QR او ID نمبر ته اړتیا لرئ.

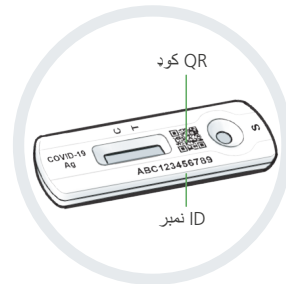

آنلاین راپور ورکړئ (په چټک ډول)

که تاسو په انگلستان، وېلز یا شمالي آیرلنډ کې اوسېږئ نو لاندې لینک ته مراجعه وکړئ:

gov.uk/report-covid19-result




که په سکاټلنډ کې اوسېږئ لاندې لینک ته مراجعه وکړئ:

covidtest.scot

یا د تلیفون له لارې راپور ورکړئ

ته زنگ ووهئ 119

تلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې روښانه وي (له موبایل او تلیفون څخه په وریا ډول زنگ ووهئ).

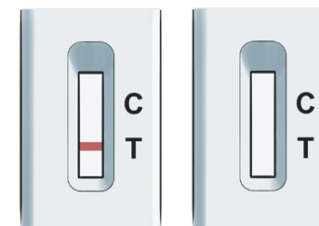

باطله پایله



د کنټرول کرښه (C) نه څرګندېږي.



Control (C)

Test (T)

منفي پایله



د کنټرول په کرښه (C) کې یوه رنګه کرښه څرګندېږي. د آزمېښت په ساحه (T) کې هېڅ کرښه نه څرګندېږي.

7. ستاسو د پایلي معنا څه ده

تاسو یوازې هغه مهال خپل آزمېښت بشپړ کړی دی چې د پایلي راپور مو ورکړی وي

مثبته پایله

که مو پایله مثبتې وه، دا په دې معنا ده چې تاسو اوس پر COVID-19 اخته یاست او د نورو خلکو د اخته کولو گواښ هم شته. تاسو باید ځان جلا کړئ. کله چې تاسو د خپلي پایلي راپور ورکړئ، نو تاسو ته به د راتلونکو پړاوونو د ترسره کولو له پاره نور معلومات درکړل شي.

څېرتیا

تاسو او هر کسان چې له تاسو سره اوسېږي، باید شته ملي او سمه بیزي لارښوونې دلته وڅارئ:

nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

منفي پایله

که ستاسو پایله منفي وه، دا په دې معنا ده چې تاسو د آزمېښت پر مهال پر کرونا اخته نه وئ. مگر بیا هم منفي پایله دا تضمین نشي کولای چې تاسو پر COVID-19 اخته نه یاست.

که ستاسو پایله منفي وه، تاسو باید د ملي او سیمه ییزو لارښوونو څارلو ته دوام ورکړئ، بیا بیا لاسونه ومیځئ، ټولنیز واټن وساتئ او د اړتیا په صورت کې ماسک واغونډئ.

که په تاسو کې نښې نښانې څرگندې شوي، باید خپل ځان جلا کړئ او اوسنی توصیه شوی آزمېښت دلته ترسره کړئ: gov.uk/get-coronavirus-test یا د پېرودونکو د خدمتو مرکز ته په 119 شمېره زنگ ووهئ. ټلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې روښانه وي. تاسو او ستاسو کورنۍ باید ملي لارښوونې و څارئ.

باطله پایله

که ستاسو پایله باطله وه، دا په دې معنا ده چې د آزمېښت په پایله کې ویل کېدای نشي چې تاسو پر ویروس اخته یاست. د لومړي آزمېښت هېڅ توکی بیا ځلي مه کاروئ او د آزمېښت پروسه له لومړي پړاو څخه له سره پیل کړئ. د لومړي آزمېښت هېڅ توکی بیا ځلي مه کاروئ، او د آزمېښت پروسه له لومړي پړاو څخه پیل کړئ.

که ستونزه لا هم پر ځای وه

که ستونزه را هم پر ځای وه، د آزمېښت له کېت څخه ګټه اخیستنه سملاسي بنده کړئ. که له تاسو سره بل آزمېښت د لاسرسي وړ نه وي، کېدای شيد NHS COVID-19 د اپلیکېشن یو بل ډول آزمېښت ترسره کړئ یا لاندې لینک ته مراجعه وکړئ: gov.uk/get-coronavirus-test او یا د پېرودونکو د خدمتو مرکز ته په 119 شمېره زنگ ووهئ. ټلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې روښانه وي.

8 د آزمېښت فعالیت

دا آزمېښت تر ډېره د هغو خلکو مثبتې پایله په ډاګه کوي چې په لوړه کچه کرونا ویروس (COVID-19) ولري.

دا په دې معنا ده چې هغه کسان تشخیصوي چې په ناروغۍ اخته وي او یا بېرني ځان جلا کولو ته اړتیا لري.

9 خپل د آزمېښت کېت په احتیاط سره لري کړئ

کله چې ستاسو آزمېښت بشپړ شو، د آزمېښت د کېت ټول کارول شوي توکي، پرته د ټیوب د ساتنې له پلاستيکي وسيلې څخه د خپل کور په عمومي باطله دانې کې واچوئ.

د ټولو له لري کولو وروسته مو لاسونه په بشپړه توګه ومیځئ.

لارښوونه

یواځنی بند بکس د خخلو د سطل په توګه کارول کېدای شي.



د دې آلي ورکول يواځې د روغتيا اوتولنيزې پاملرنې ځانگي (DHSC) د پراختيا د يوې برخې په توگه د NHS د آزمېښت او څارنې د پروگرام له مخې مجاز دي.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd
 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street, آدرس:
 Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (چين)
 تليفون: +86-572-5226111 فیکس: +86-572-5226222
 ويب پاڼه: www.orientgene.com
 quality@orientgene.com



SENSUS GROUP LTD



The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, آدرس:
 Spellbrook, Herts, CM23 4BD
 (انگلستان) United Kingdom

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (جرمني) آدرس:



د سواب معلومات:



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
 Touqiao Town, Guangling DISTRICT, آدرس:
 Yangzhou, Jiangsu 225109 China (چين)



Llins Service & Consulting GmbH



Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (جرمني)
 ایمیل: info@llins-service.com

کاریدلي سمبولونه

که بکسه خرابه شوي
 وه، له توکي څخه گټه
 مه اخلئ



توليدونکی



عقيم کول په ايتالين
 اکسايډ



په کې بې وساتئ
 30°C - 2°C



د تشخيص
 طبي دستگاه



د پای نېټه



لاټ نمبر



خبرتيا، لارښوونو
 ته پام وکړئ



بیا ځلي بې
 مه کاروئ



د توليد نېټه



له لمر وړانگو بې
 لري وساتئ



په بکسه کې د
 برخو شمېرې (7)



د کارولو له پاره
 لارښوونې



وچ بې ساتئ



بیا بې مه
 تنظیموئ



د کټلاگ نمبر




له لاتکس پرته



د انگلستان
 مسوول کس



اروپايي مسوول

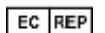

د نسخې B22088-03 د پيل نېټه 2021/10/04

GCCOV-502a-H70GE



دغه لارښوونې د Orient Gene د Covid-19 د ځان د چټک آزمېښت لپاره (GCCOV-502a-H70GE) لپاره کارول کېږي.

د خپلې ازمويښتې تولي پايلى NHS ته راپور کړئ