

قبل از اینکه تست را آغاز کنید، این راهنمای کامل را با دقت بخوانید.
این تست ممکن است با تستی که قبلاً استفاده کرده اید متفاوت باشد.

راهنمای مرحله به مرحله شما برای تست خودی سریع Covid-19 (آنتی ژن) Orient Gene



این دستورالعمل‌های استفاده فقط مربوط به تست خودی سریع Covid-19
(آنتی ژن) Orient Gene (GCCOV-502a-H70GE) میباشد.

این راهنما توضیح میدهد که چگونه میتوانید خود یا شخص دیگر را تست COVID-19 کنید، و نتیجه آنرا به
NHS گزارش دهید.

نسخه‌های زبان جایگزین از جمله نمایش ولزی و نمایش ویدیویی در [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) موجود است.

تمام نتایج تست خود را به NHS گزارش دهید

رهنمای مرحله به مرحله شما

دستورالعمل استفاده را با دقت بخوانید و مراحل را به ترتیب درست دنبال نمائید. راه اندازی هر تست حدود 15 دقیقه طول می کشد و نتایج بعد از 15 دقیقه دیگر آماده می شود.



محتویات این کتاب

بخش	عنوان	صفحه
1	ساحه تست خود را آماده کنید	6
	محتویات بسته تست خود را بررسی کنید	7
2	تست خود را تنظیم کنید	8
3	سمپل سواب (وسیله سمپل گیری از بینی) خود را بگیرید	10
	انجام تست بالای یک شخص دیگر	11
4	سمپل سواب خود را پروسس کنید	12
5	نتیجه خود را بخوانید	14
6	نتیجه خود را گزارش دهید	15
7	نتایج شما چی مفهوم میدهد	16
8	عملکرد تست	17
9	بسته (کیت) تست خود را در یک جای محفوظ دور بیندازید	17
	یک یادداشت از نتایج تست خود بسازید	18

توصیه در باره تست نمودن

نکات مفید، توصیه ها و چوکات های اخطار دهنده در امتداد راهنما برای کمک به شما نشر شده است. با رعایت دقیق این دستورالعمل ها قدم به قدم، چانس بسیار بیشتری برای به دست آوردن نتیجه ای قابل اطمینان خواهید داشت.

راهنمایی ها و اخطاریه های عمومی

- اگر هنگام سمپل گرفتن از بینی دچار خونریزی بینی شدید، لطفاً سمپل گرفتن را توقف دهید. سواب قابل تست کردن نیست.
- این محصول با لاستیک طبیعی ساخته نشده است. با این حال، وجود یا آثار لاستیک طبیعی در محصول تحویل داده شده به کاربر نهایی را نمی توان به طور کامل رد کرد.
- بسته تست را از اطفال خورد سال دور نگه دارید.
- همه اجزای بسته به جز نگهدارنده تیوب استخراج سمپل، اقلام یکبار مصرف هستند. به جز نگهدارنده تیوب استخراج سمپل، از اجزای بسته استفاده شده مانند سواب یا تیوب های استخراج سمپل دوباره استفاده نکنید.
- اجزای بکس های مختلف را مخلوط نکنید. فقط از اجزای که درین بسته ارائه شده است استفاده کنید.
- اگر وسیله تست در معرض مواد شوینده خانگی (به ویژه مایع سفید کننده) قرار گرفته است، از آن استفاده نکنید زیرا ممکن است منجر به نتیجه نادرست شود.
- تست را در زیر نور مستقیم آفتاب انجام ندهید زیرا ممکن است منجر به نتیجه نادرست شود.
- این بسته ها فقط برای استفاده انسان طراحی شده اند.
- نگهدارنده تیوب استخراج سمپل را دور نیندازید، برای همه تست ها مجدداً استفاده می شود.

توصیه

- بسته تست را در حرارت نورمال اتاق یا در جای خشک و خنک نگهداری کنید (2 تا 30 درجه سانتی گراد).
- تحت شعاع مستقیم آفتاب قرار ندهید و در یخچال یا فریزر نگهداری نکنید.
- بسته باید در حرارت اتاق (15 تا 30 درجه سانتی گراد) استفاده شود. اگر بسته در منطقه ای کمتر از 15 درجه سانتی گراد نگهداری شده است، قبل از استفاده آن را به مدت 30 دقیقه در حرارت نورمال اتاق بگذارید.

تقریباً 1 نفر از 3 نفر افراد مبتلا به COVID-19 نمی دانند که به آن مبتلا هستند.

با تست خودی منظم می توانیم شیوع را کاهش داده و از آسیب پذیرترین افراد در خانواده ها و جوامع خود محافظت کنیم.

چرا باید تست-خودی انجام دهید

این بسته تست- خودی سریع COVID-19 (آنتی ژن) یک تست سمپل گیری از بینی است تا بررسی شود که آیا شما مبتلا هستید یا نه. این برای افرادی که علائم دارند و همچنین برای افراد بدون علائم است. با این حال، باید دستورالعمل های ملی را تعقیب کنید تا بررسی کنید که کدام نوع تست برای شما مناسب است.

اگر تست COVID-19 شما مثبت باشد، شما باید:

- به محدود کردن شیوع بیماری کمک کنید، شما و خانواده تان باید از دستورالعمل های فعلی دولت پیروی کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- به افرادی که در تماس نزدیک با آنها بوده اید و جاهای که در 48 ساعت گذشته قبل از شروع علائم آنجا مراجعه کرده اید، یا از روزی که نتیجه تست شما بدون کدام علائم مثبت نشان داده شده است، برای تست مبتلا بودن احتمالی COVID-19 توصیه کنید. همیشه از دستورالعمل های محلی و ملی پیروی کنید.

اگر تست COVID-19 شما منفی باشد

به احتمال زیاد در زمان انجام تست عفونی نبوده اید. با این حال، نتیجه تست منفی، تضمینی برای این نیست که شما ویروس کرونا ندارید. شما باید به تعقیب نمودن دستورالعمل های دولت ادامه دهید.

توصیه

اگر شما یا طفل/اطفال شما علائم ویروس کرونا (COVID-19) دارید یا به ویروس کرونا مبتلا شده اید، لطفاً به راهنمای آنلاین NHS مراجعه کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

اگر شما یا طفل/اطفال تان علائم ویروس کرونا (COVID-19) دارید و وضعیت تان در حال بدتر شدن است، یا شما/اطفال شما بعد از 7 روز بهتر نمی شوید، به خدمات آنلاین NHS 111: [nhs.uk](https://www.nhs.uk) 111. مراجعه کنید اگر به انترنیت دسترسی ندارید به شماره NHS 111 تماس بگیرید. برای وقایع عاجل طبی شماره 999 را دایر کنید.

اگر به تشویش هستید، دریافت کمک را به تأخیر نیندازید. به گزینه خود اعتماد کنید.

این تست برای چه کسانی مناسب است




اطفال زیر سن 12 سال

اطفال زیر سن 12 سال باید توسط یک بزرگسال تست شوند. در صورت عدم اطمینان بالای خود جهت تست یک طفل، تست را انجام ندهید. اگر طفل احساس درد کرد، تست را ادامه ندهید.



نوجوانان 12-17 ساله

تست خودی نموده و تحت نظارت یک بزرگسال گزارش دهید. در صورت نیاز، بزرگسال می تواند تست را انجام دهد.

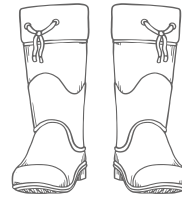

بزرگسالان بالاتر از 18 سال

با دریافت کمک در صورت نیاز، تست خودی نموده و گزارش دهید.

- افرادی که بینایی کمتر دارند هنوز می توانند از بسته های تست ما استفاده کنند، اما ممکن است به کمک نیاز داشته باشند.
- این تست برای افرادی که تکلیف خونریزی بینی دارند یا افرادی که در 6 ماه گذشته عملیات جراحی صورت یا سر انجام داده اند مناسب نیست.

چند بار باید تست نمود

تعداد دفعات تست شما ممکن است با در نظر داشت شرایط شما و دستورالعمل های کنونی ملی یا محلی متفاوت باشد.

در کجا می توان حمایت اضافی پیدا کرد

معلومات بیشتر تست خودی را در: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) دریافت کنید. کنید.

1. ساحه تست خود را آماده کنید

محتویات بسته خود را بررسی کنید


شما نیاز خواهید داشت به:

- یک زمان سنج مانند ساعت دستی یا ساعت سر میزی
- دستمال کاغذی
- یک آئینه
- سطح پاک کن
- ضدعفونی کننده دست یا صابون و دسترسی به آب گرم

4 در صندوق تست خود باید تمام اجناس زیر را داشته باشید:



خریظه زنجیر دار (x7)
به عنوان کثافت دانی
استفاده کنید

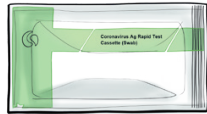

وسيله تست در در
پاكت سر بسته (x7)



سواب (وسيله سمپل گیری
از بینی) استریل در پاکت
سر بسته (x7)



نگهدارنده تیوب استخراج
سمپل (x1 قابل استفاده مجدد)
(دور نیندازید)



سرپوش تیوب (x7)



تیوب استخراج سمپل
با بافر (x7)

توصیه


اگر چیزی خراب، شکسته یا مفقود شده باشد چه باید کرد
اگر متوجه چیزی خراب، شکسته یا مفقود شدید، لطفاً از بسته تست استفاده نکنید. می توانید با تماس
به مرکز تماس با مشتریان باز دهی خود را بدهید. خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز
است.

تماس به: **119** (از طریق تلفون های همراه و تلفون های ثابت رایگان میباشد).
ما به 200 زبان و همچنین زبان اشاره انگلیسی در خدمت هستیم.

اگر توسط کدام وسیله ای آسیب دیدید، گزارش دادن آن می تواند به دیگران کمک کند. لطفاً به:
[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk) مراجعه کنید.

1

این دستورالعمل استفاده را با دقت بخوانید.
همچنین در صورت نیاز به کمک بیشتر می توانید
فیلم تست سواب (سمپل گیری از بینی) را بصورت
آنلاین تماشا کنید: [gov.uk/guidance/
covid-19-self-test-help](https://gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

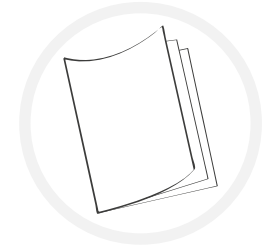

2

بلافاصله قبل از شروع تست، یک سطح هموار را
صاف، پاک و خشک کنید تا بسته تست روی آن
قرار گیرد. این به منظور جلوگیری از آلوده شدن
تست است.



3

دستان خود را به مدت 20 ثانیه، با صابون و آب گرم یا
ضدعفونی کننده دست ها بشویید.
اگر بیش از یک نفر را تست می کنید یا یک تست
باطل را تکرار می کنید، سطح را پاک نموده و بین
هر تست دستان خود را دوباره بشویید. این به منظور
جلوگیری از آلوده شدن تست است.



20
ثانیه

2. تست خود را تنظیم کنید



5

تیوب را از صورت خود دور نگه دارید، پوش چسپانده شده روی تیوب استخراج سمپل را بطور کامل جدا کنید تا از ریختن مایعات جلوگیری شود.

اخطاریه

بافر استخراج دارای مواد نگهدارنده است که ممکن است در برخی افراد عکس العمل حساسیتی ایجاد کند. در صورت تماس محلول با پوست یا چشم، با مقدار زیاد آب بشویید. در صورت سوزش پوست، به داکتر مراجعه کنید.

اخطاریه

پوش چسپانده شده روی تیوب استخراج سمپل را با دندان باز نکنید. از تماس بافر استخراج با پوست خود جلوگیری کنید.



6

تیوب استخراج حاوی بافر را در نگهدارنده تیوب استخراج سمپل قرار دهید.




7

بینی خود را به شکل کامل در یک دستمال کاغذی پاک کرده و آن را در کثافت دانی های خانگی خود بیندازید. این به این دلیل است که شما مخاط اضافی را از بین می برید.
اگر در حال تست طفل/فرد وابسته هستید، در صورت نیاز به او کمک کنید تا بینی خود را پاک کند.




8

بعد از پاک کردن بینی تان، دست های خود را با استفاده از آب و صابون یا ضدعفونی کننده دست ها برای 20 ثانیه کاملاً بشویید. این به منظور جلوگیری از آلوده شدن تست است. اگر به یک طفل/فرد وابسته کمک می کنید که بینی خود را پاک کند، هر دوی شما باید دستان خود را به مدت 20 ثانیه کاملاً بشویید، یا از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

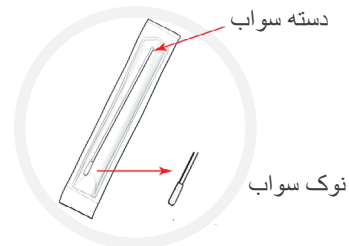

9

سواب استریل را در پاکت سر بسته پیدا کنید. نوک نرم و تکه ای سواب را شناسایی کنید.

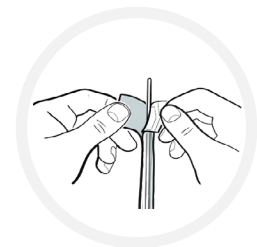

10

پوش سواب را باز کرده و بطور کامل آنرا از داخل پاکت بیرون کنید.

اخطاریه

هرگز نوک تکه ای سواب یا هیچ سطحی را با دست خود لمس نکنید.

3. سبیل سواب خود را بگیرید


انجام تست بالای شخص دیگر

اخطاریه

لطفاً مطمئن شوید که قبل از داخل نمودن سواب در بینی، تمام میخک های بینی یا جواهرات مشابه کشیده شده اند. اگر طفل زیر سن 12 سال، یا فردی که به کمک نیاز دارد را تست میکنید، مراحل صفحه 11 را تعقیب کنید.

تست نمودن خودتان

سورخ اول بینی

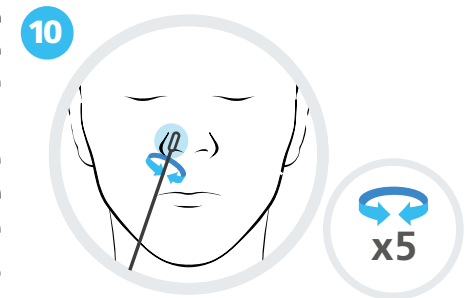


نوک تکه ای سواب را فقد در یک سورخ بینی (تقریباً 2.5 سانتی متر) داخل کنید، مطمئن شوید که نوک تکه ای سواب 2.5 سانتی متر داخل اولین سورخ بینی قرار گرفته است. سواب را بطور کامل در اطراف سورخ بینی خود با حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید. مطمئن شوید که بین نوک تکه ای سواب و قسمت داخلی سورخ بینی تماس خوبی وجود دارد. ضرورت به زور زدن نیست و ضرورت نیست که به داخل سورخ بینی خود فشار دهید.

x5

x5

سورخ اول بینی

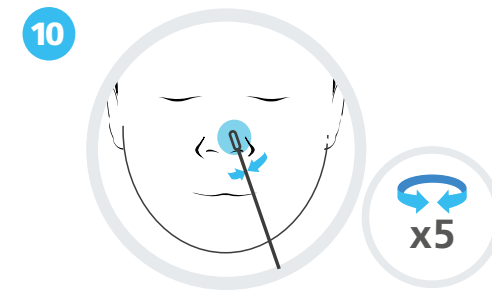


نوک تکه ای سواب را در یک سورخ بینی طفل/شخصی که تست می کنید داخل نمایید.

سواب را بطور کامل در اطراف سورخ بینی شان با حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید. ضرورت به زور زدن نیست و ضرورت نیست که به داخل سورخ بینی فشار دهید. مطمئن شوید که بین نوک تکه ای سواب و قسمت داخلی سورخ بینی تماس خوبی وجود دارد.

x5

x5

سورخ دوم بینی

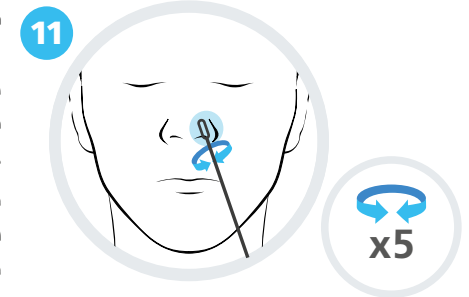


از همان سواب استفاده کنید، نوک تکه ای سواب را در سورخ دیگر بینی (تقریباً 2.5 سانتی متر) داخل کنید، مطمئن شوید که نوک تکه ای سواب 2.5 سانتی متر داخل سورخ دوم بینی قرار گرفته است.

سواب را بطور کامل در اطراف سورخ بینی خود با حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید. مطمئن شوید که بین نوک تکه ای سواب و قسمت داخلی سورخ بینی تماس خوبی وجود دارد.

x5

x5

سورخ دوم بینی

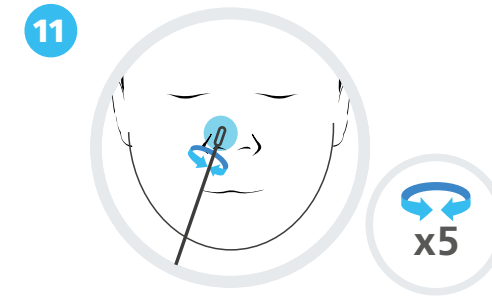

از همان سواب استفاده کنید، نوک تکه ای سواب را در سورخ دیگر بینی طفل/شخصی که تست میکنید داخل نمایید.

سواب را بطور کامل در اطراف سورخ بینی شان با حرکت دایره ای 5 بار بچرخانید. مطمئن شوید که بین نوک تکه ای سواب و قسمت داخلی سورخ دوم بینی تماس خوبی وجود دارد.

x5

x5

اخطاریه

اگر شخصی که سواب می زنی دچار خونریزی بینی شد، لطفاً سواب زدن را متوقف کنید. سواب قابل تست شدن نیست. در صورت ادامه خونریزی توصیه می شود با داکتر شان مشورت کنید.


اخطاریه

اگر در هنگام سواب زدن دچار خونریزی بینی شدید، لطفاً سواب زدن را متوقف کنید. سواب قابل تست شدن نیست. در صورت ادامه خونریزی توصیه می شود با داکتر خود مشورت کنید.

4. سمپل گرفته شده را پروسس کنید

16 برای جلوگیری از چکیدن، سرپوش تیوب استخراج سمپل را محکم فشار دهید.

تیوب استخراج سمپل را دوباره در نگهدارنده تیوب استخراج بگذارید.

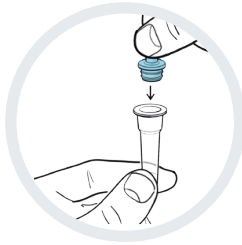

17 تاریخ انقضا (EXP) را در روی پاکت سر بسته بررسی کنید. آله تست را از پاکت سر بسته بیرون کرده و بالای سطح هموار پاک شده قرار دهید.

اخطاریه

یک آله تست که بیش از 30 دقیقه بیرون از پاکت سر بسته قرار گرفته باشد، باید دور انداخته شود. خریطه خشک کننده داخلی و پاکت را با محافظیت در داخل خریطه پلاستیکی/ خریطه زنجیر دار ببندازید.



18 تیوب استخراج سمپل را خوب فشار دهید تا 4 قطره مایع بالای چاه سمپل (با علامت S) روی آله تست قرار گیرد.

توصیه

اطمینان حاصل کنید که آله تست را روی یک سطح هموار و برابر قرار داده اید. در جریان تست آله تست را حرکت ندهید. به آرامی قطره ها را به سمپل اضافه کنید. زیادی پر نکنید.




19 زمان سنج تنظیم کنید. برای خواندن نتیجه خود 15 دقیقه صبر کنید.




12 نوک تکه ای سواب را داخل مایع تیوب استخراج سمپل قرار دهید.


نوک سواب را با قدرت به لبه تیوب استخراج سمپل فشار دهید، در حالی که آن را حداقل 6 بار به اطراف تیوب بچرخانید.

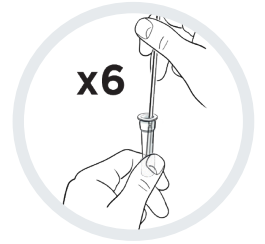

13 سواب را در تیوب استخراج سمپل بگذارید، یک زمان سنج تنظیم کنید و 1 دقیقه بگذارید.

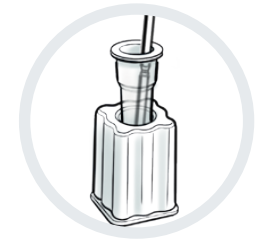


14 سواب را از تیوب استخراج سمپل بیرون کنید.

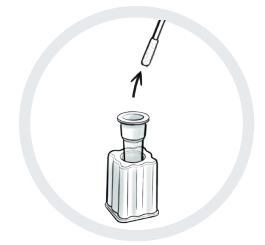

15 سواب را داخل خریطه پلاستیکی زنجیر دار بگذارید.

توصیه

خریطه زنجیر دار می تواند به عنوان زباله دانی استفاده شود.

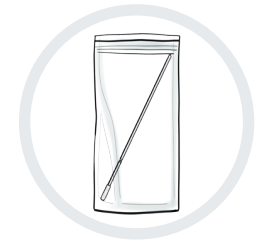

5. نتیجه خود را بخوانید

6. نتیجه خود را گزارش دهید


مهم



تست را بیش از 20 دقیقه به حال خود رها نکنید زیرا این کار نتیجه را باطل می کند.

شما باید نتایج مثبت، منفی و باطل خود را به NHS گزارش دهید.

ثبت تمام نتایج تست ها به دانشمندان کمک می کند تا شیوع ویروس های جدید را تشخیص داده و نحوه عکس العمل با آنها را توصیه نمایند. اگر افراد فقط تنها نتیجه مثبت را گزارش کنند، سطح موارد از آنچه واقعاً هستند بیشتر به نظر می رسد. بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا باطل باشد، مطمئن می شوید که معلومات NHS دقیق میماند.

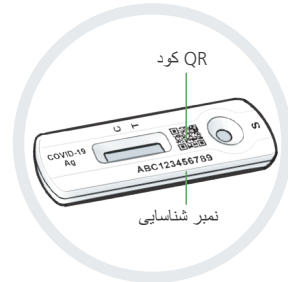

شما به کد QR یا نمبر شناسایی ضرورت دارید تا تحت آن نتیجه خود را گزارش دهید.

گزارش آنلاین (سریعترین)

اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می کنید، از gov.uk/report-covid19-result دیدن کنید.



اگر در اسکاتلند زندگی می کنید، از سایت دیدن کنید: covidtest.scot

یا با تلفن گزارش دهید

با 119 تماس بگیرید


خطوط هر روز، از 7 صبح تا 11 شب (از تلفن های همراه و تلفن های ثابت) باز است.



نتیجه مثبت




دو خط ظاهر می شود. یک خط رنگه باید در ناحیه خط کنترل (C) و یک خط رنگه دیگر در ناحیه خط تست (T) باشد. دو خط، یکی در کنار C و دیگری در کنار T، حتی خطوط کم رنگ، نشان می دهد که تست مثبت است.

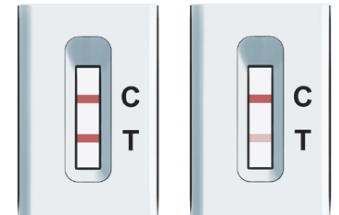

مهم

در صورت مثبت بودن تست، باید خود را قرنطینه کنید و خانواده شما باید از دستور العمل های دولت در مورد خود قرنطینه شدن پیروی کنند:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

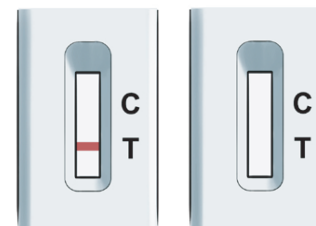

نتیجه باطل



خط کنترل (C) ظاهر نمیشود.

Control (C)

Test (T)

نتیجه منفی



یک خط رنگه در قسمت خط کنترل (C) ظاهر میشود اما در قسمت (T) ظاهر نمیشود.

7. نتیجه شما چی مفهوم میده

شما فقط زمانی تست خود را تکمیل کرده اید که نتیجه خود را گزارش نمایید

نتیجه مثبت

در صورتیکه نتیجه شما مثبت باشد، احتمالاً در حال حاضر به COVID-19 مبتلا شده اید و دیگران را در معرض خطر قرار می دهید. باید خود را قرنطینه کنید. هنگامی که نتیجه خود را گزارش می دهید، معلومات بیشتری در مورد اقدامات بعدی در اختیار شما قرار می گیرد.

اخطاریه

شما و هر کس که با شما زندگی می کند باید از راهنمایی های ملی و محلی فعلی پیروی کنید. آن را می توانید در آدرس: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/ دریابید.

نتیجه منفی

اگر نتیجه منفی گرفتید، احتمالاً در زمان انجام تست عفونی نبوده اید. با این حال، نتیجه تست منفی، تضمینی برای عدم ابتلا به COVID-19 نیست.

در صورت منفی بودن تست، باید از قوانین و دستورالعمل های ملی و محلی پیروی کنید، از جمله شستن مرتب دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک در صورت نیاز.

در صورت بروز علائم باید خود را قرنطینه کرده و تست توصیه شده فعلی را در: gov.uk/get-coronavirus-test یا با تماس به مرکز تماس با مشتری در شماره 119 دریابید. خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز میباشند. شما و خانواده تان باید از دستورالعمل های ملی پیروی کنید.

نتیجه باطل

اگر نتیجه تست شما باطل باشد، این بدان معناست که نمی توان گفت هنگام انجام تست ویروس داشته اید یا نه. برای اینکه بدانید آیا ویروس کرونا دارید یا نه، به زود ترین فرصت تست دیگری را انجام دهید. از هیچ چیزی که در تست اول استفاده نموده بودید درین تست استفاده نکنید و روش تست را از مرحله 1 شروع کنید.

اگر مشکل همچنان ادامه داشت

اگر مشکل همچنان ادامه داشت، بلافاصله استفاده از بسته های تست را قطع کنید. اگر تست دیگری در دسترس ندارید، میتوانید از طریق برنامه NHS COVID-19 یا با مراجعه به آدرس gov.uk/get-coronavirus-test یا با تماس گرفتن به مرکز تماس با مشتریان 119 یک نوع تست دیگر انجام دهید. خطوط همه روزه، از 7 صبح تا 11 شب باز است.

8 عملکرد تست

اگر فردی دارای سطح بالای ویروس کرونا (COVID-19) باشد، احتمالاً تست نتیجه مثبت خواهد داد.

این بدان معناست که به احتمال زیاد افرادی را تشخیص می دهد که در حال حاضر عفونی هستند و باید فوراً خود را قرنطینه کنند.

9 بسته تست خود را در یکجای محفوظ دور بیندازید

بعد از پایان یافتن تست، تمام وسایل بسته تست استفاده شده را در خریطه کثافات تهیه شده بگذارید، بجز نگهدارنده تیوب پلاستیکی، و در باطله دانی های عمومی خانگی خود بیندازید. بعد از دور انداختن دستان خود را کاملاً بشویید.

توصیه

از خریطه زنجیر دار می تواند به عنوان خریطه کثافات استفاده کرد.

یک یادداشت از نتایج تست خود بسازید

این برای سوابق خود شماست. شما هنوز هم باید نتیجه خود را به NHS گزارش دهید (برای معلومات به صفحه 15 مراجعه کنید).

مراجعه به سایت: gov.uk/report-covid19-result

اگر در اسکاتلند زندگی می کنید به سایت covidtest.scot سر بزنید

بسته شما دارای اجناس ذیل میباشد

7 - بسته

اجناس

1	دستورالعمل استفاده (این سند)
7	سواب استریل در پاکت سر بسته
7	آله تست در پاکت سر بسته
7	تیوب استخراج سمپل همراه بافر
7	سر پوش نوک دار
7	خریطة زنجیر دار
1	نگهدارنده تیوب استخراج سمپل
1	تصدیق QC
X	

نتیجه تست	زمان	تاریخ	شخص تست شونده	QR یا نمبر شناسایی بسته تست



عرضه این دستگاه فقط به عنوان بخشی از استقرار اداره مراقبت صحتی و اجتماعی (DHSC) تحت برنامه تست و ردیابی NHS مجاز است.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd
3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street, آدرس:
Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China (چین)
تلفون: +86-572-5226111 فکس: +86-572-5226222
وبسایت: www.orientgene.com
quality@orientgene.com



SENSUS GROUP LTD



The Barn, Tednambury Farm, Tednambury, آدرس:
Spellbrook, Herts, CM23 4BD
(انگلستان) United Kingdom

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (آلمان) آدرس:



معلومات سواب:



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Touqiao Town, Guangling DISTRICT, آدرس:
Yangzhou, Jiangsu 225109 China (چین)



Llins Service & Consulting GmbH



Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (آلمان) آدرس:
info@llins-service.com ایمیل:

سیمبول های استفاده شده

اگر پاکت تخریب شده
باشد از محصول
استفاده نکنید



تولید کننده



استریل شده با
اکسید اتیلن



در حرارت 2-30
درجه سانتی گراد
نگهداری شود



دستگاه تشخیص طبی
آزمایشگاهی



تاریخ انقضا



شماره لات



اخطاریه، لطفاً به
دستوار العمل
مراجعه کنید



دوباره استفاده نکنید



تاریخ تولید



از نور آفتاب
دور نگه بدارید



تعداد واحد ها
در بسته (7)



راجع به دستوار العمل
های استفاده مشوره کنید



خشک نگهدارید



دوباره استریل نکنید



شماره کاتالوگ



بدون لاستیک



شخص مسئول
انگلستان



نماینده مجاز اروپا



نسخه B22088-03 تاریخ اجرا 2021/10/04

GCCOV-502a-H70GE



این کتاب دستوار العمل فقط به تست خودی سریع Covid-19 (آنتی ژن) Orient Gene (GCCOV-502a-H70GE) اشاره میکند.

تمام نتایج تست خود را به NHS گزارش دهید