

قبل از شروع تست، تمام این راهنما را با دقت بخوانید.  
این تست ممکن است با تستی که قبلاً استفاده کرده‌اید متفاوت باشد.

# راهنمای گام به گام تست شخصی COVID-19 DHSC (تست آنتیژن فوری) شما



این دستورالعمل‌های استفاده فقط مربوط به تست شخصی COVID-19 DHSC (تست آنتیژن فوری) است.  
این راهنما توضیح می‌دهد که چگونه از خودتان یا شخص دیگری تست COVID-19 بگیری و نتایج را به NHS گزارش دهی.

نسخه‌های زبان جایگزین و نمایش‌های ویدیویی در این آدرس در دسترس است:

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

نتایج تمام آزمایش‌های خود را به NHS اعلام کنید

## راهنمای گام به گام شما

این دستورالعمل‌ها را بخوانید و مراحل را به ترتیب صحیح دنبال کنید. انجام هر تست حدود 15 دقیقه طول می‌کشد و سپس نتایج بعد از 30 دقیقه آماده می‌شود.



## توصیه در مورد انجام تست

در سرتاسر این راهنما نکات، توصیه‌ها و کادرهای هشدار مفیدی برای کمک به شما آمده است. با دنبال کردن مرحله به مرحله این دستورالعمل‌ها، شانس بیشتری برای کسب نتیجه قابل اطمینان خواهید داشت.

### راهنمایی و هشدارهای عمومی

- برای هر نفر از یک کیت تست جداگانه استفاده کنید. از هر یک از اقلام موجود در بسته تست فقط می‌توانید یکبار استفاده کنید.
- از این اقلام مجدداً استفاده نکنید. لازم است نتیجه هر شخص را گزارش کنید.
- اگر از نظر دست و بینایی مشکلی دارید، ممکن است نیاز داشته باشید شخصی در مراحل گرفتن سواب و انجام تست به شما کمک کند.
- اگر سوراخکاری بینی انجام داده‌اید، سواب را از سوراخ دیگر بینی بگیرید. اگر سوراخکاری هر دو سمت بینی را انجام داده‌اید، قبل از گرفتن سواب، تزیینات یک سمت را خارج کنید.
- اگر طی 24 ساعت گذشته دچار خونریزی از بینی شده‌اید، سواب را از سوراخ بینی دیگر بگیرید یا 24 ساعت صبر کنید.
- حداقل 30 دقیقه قبل از انجام تست، غذا یا نوشیدنی نخورید تا خطر بی‌اعتبار شدن تست کاهش پیدا کند.
- این کیت‌ها فقط برای استفاده انسان طراحی شده‌اند.

### توصیه

کیت تست را در دمای اتاق یا در جای خشک و خنک (در دمای 2 درجه سانتی‌گراد تا 30 درجه سانتی‌گراد) نگهداری کنید. آن را در معرض تابش مستقیم آفتاب نگذارید و در یخچال یا فریزر نگهداری نکنید.

کیت باید در دمای اتاق (در دمای 15 تا 30 درجه سانتی‌گراد) مورد استفاده قرار گیرد. اگر کیت در جایی خنک (با دمایی کمتر از 15 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شده است، قبل از استفاده، آن را به مدت 30 دقیقه در دمای معمولی اتاق قرار دهید.

کیت تست را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

بخش	عنوان	صفحه
1	محل تست خود را آماده کنید	6
	محتویات کیت تست خود را بررسی کنید	7
2	تست خود را انجام دهید	8
3	نمونه سواب خود را بگیرید	10
	انجام آزمایش روی شخصی دیگر	11
4	نمونه سواب را پردازش کنید	12
5	نتیجه خود را بخوانید	14
6	نتیجه خود را گزارش دهید	15
7	نتایج شما به چه معناست	16
8	عملکرد تست	17
9	کیت تست خود را به شکلی ایمن دور بیندازید	17
	نتایج تست خود را یادداشت کنید	18

**حدوداً 1 نفر از هر 3 نفر مبتلا به COVID-19 نمی‌دانند که به آن مبتلا است.**

می‌توانیم با انجام منظم تست شخصی سرعت گسترش را کاهش دهیم و از آسیب‌پذیرترین افراد در خانواده‌ها و جوامع خود محافظت کنیم.

## چرا باید تست شخصی بدهید

این کیت تست شخصی مخصوص افراد بدون علامت بوده و یک تست سواب برای بینی و گلو است تا بررسی شود که آیا آلوده هستید یا خیر.

افراد بدون علامت کسانی هستند که ناقل ویروس بوده اما هیچ‌گونه علائمی از خود نشان نمی‌دهند.

### اگر نتیجه تست 19-COVID شما مثبت است می‌توانید:

- به محدود کردن شیوع بیماری کمک کنید؛ شما و خانواده‌تان باید قرنطینه کردن خود را با رعایت دستورالعمل‌های دولتی انجام دهید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- به افرادی که در 14 روز گذشته از نزدیک با آنها در تماس بوده‌اید یا مکان‌هایی که از آنها بازدید کرده‌اید اعلام نمایید تا تست 19-COVID را انجام دهند.

### اگر نتیجه تست 19-COVID شما منفی است

به احتمال زیاد در زمان انجام تست مبتلا نبوده‌اید. با این حال، نتیجه تست منفی تضمین نمی‌کند که ویروس کرونا نداشته باشید.

#### توصیه

اگر علائم ویروس کرونا (19-COVID) دارید یا به ویروس کرونا (19-COVID) مبتلا شده‌اید، لطفاً در اینترنت به راهنمای NHS مراجعه کنید:

[19-nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19-nhs.uk/)

اگر علائم ویروس کرونا (19-COVID) دارید و وضعیت شما بدتر شده است یا بعد از 7 روز بهبود پیدا نکرده‌اید، به خدمات آنلاین NHS 111 مراجعه کنید: [111.nhs.uk](https://www.nhs.uk/111). اگر به اینترنت دسترسی ندارید، با NHS 111 تماس بگیرید. در شرایط اورژانسی پزشکی با شماره 999 تماس بگیرید.

در صورت داشتن نگرانی، کمک گرفتن را به تعویق نیندازید. به گزینه خود اعتماد کنید.


## این تست برای چه کسانی مناسب است



**بزرگسالان 18 سال به بالا**  
تست شخصی و گزارش دادن، با دریافت کمک در صورت نیاز.



**نوجوانان 12 - 17 سال**  
تست شخصی و گزارش دادن با نظارت یک شخص بزرگسال. در صورت لزوم شخص بزرگسال می‌تواند تست را انجام بدهد.

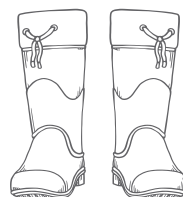

**کودکان زیر 12 سال**  
کودکان زیر 12 سال باید توسط یک بزرگسال تست شوند. اگر برای تست کردن کودک اعتماد به نفس ندارید، این تست را انجام ندهید.

### دفعات انجام تست

اینکه چند بار باید تست بدهید بسته به شرایط و دستورالعمل‌های ملی یا محلی فعلی متفاوت است.

### از کجا می‌توان حمایت بیشتری دریافت کرد

اطلاعات بیشتر در مورد تست شخصی را در این آدرس مشاهده کنید:

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

# 1. منطقه تست خود را آماده کنید

# محتویات کیت تست خود را بررسی کنید

4 در جعبه تست شما باید این موارد وجود داشته باشد:



## توصیه

اگر چیزی آسیب دیده، شکسته یا کم بود، چه باید کرد  
اگر متوجه آسیب دیدگی، شکستگی یا کمبود چیزی شدید، لطفاً از کیت تست استفاده نکنید. از طریق تماس با مرکز تماس مشتریان می‌توانید نظرتان را اعلام کنید.  
تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان‌پذیر است.  
شماره تماس: 119 (تماس با تلفن همراه و تلفن ثابت رایگان است).  
ما به 200 زبان و همچنین زبان اشاره بریتانیایی پشتیبانی ارائه می‌دهیم.  
اگر وسیله‌ای به شما آسیب رسانده است، گزارش دادن آن می‌تواند به دیگران کمک کند، لطفاً به این آدرس مراجعه کنید:

[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

به این موارد نیاز خواهید داشت:


- زمان‌سنج مانند ساعت مچی یا دیواری
- دستمال کاغذی
- آینه
- پاک‌کننده سطوح
- ضدعفونی‌کننده دست یا صابون و دسترسی به آب گرم.



30 دقیقه

30 دقیقه قبل از تست از خوردن و نوشیدن خودداری کنید

1 این دستورالعمل راهنما را با دقت بخوانید.  
در صورت نیاز به کمک بیشتر، می‌توانید فیلم تست سواب را به‌صورت آنلاین تماشا کنید:  
[gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

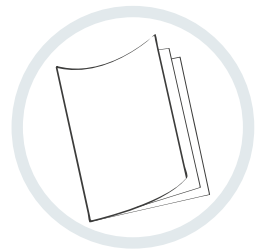


2 درست قبل از شروع تست، یک سطح صاف را خالی، تمیز و خشک کنید تا کیت تست روی آن قرار داده شود.



3 دستان خود را به مدت 20 ثانیه و با استفاده از صابون و آب گرم بشویید یا از ضدعفونی‌کننده دست استفاده نمایید.

اگر می‌خواهید بیش از یک تست انجام بدهید، بین هر بار تست سطح را تمیز کرده و دست‌های خود را دوباره بشویید.

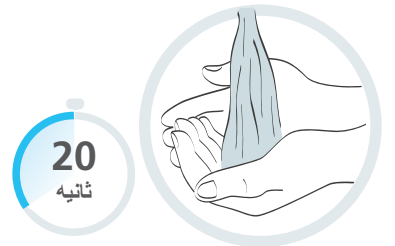

20 ثانیه

## 2. تست خود را انجام دهید


5 نوار تست را از کیسه مهر و موم شده خارج کرده و آن را روی سطح صاف تمیز قرار دهید.

هشدار


پس از باز کردن بسته، تست را ظرف 30 دقیقه شروع کنید.



6 لوله را در نگهدارنده لوله استخراج متصل شده به داخل جعبه قرار دهید.

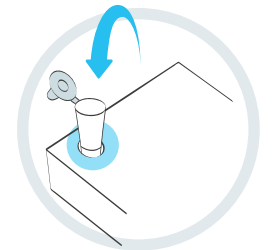

7 ساشه را با دقت بچرخانید یا بکشید. آن را دور از صورتتان نگهداشته و باز کنید و مراقب باشید که مایع نریزد.

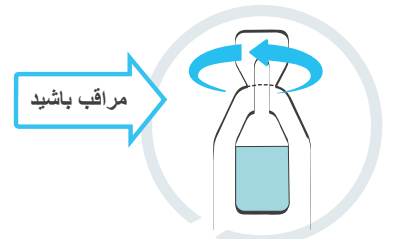

8 لوله استخراج را باز کرده و تمام مایع ساشه را به آرامی به داخل لوله فشار دهید.

مراقب باشید ساشه با بدنه لوله تماس پیدا نکند. ساشه را در کیسه زیاله ارائه شده قرار دهید.



9 به آرامی در داخل یک دستمال کاغذی فین کنید و دستمال را به داخل سطل زیاله دردار بیندازید.

اگر دارید از یک کودک تست می‌گیرید به او کمک کنید تا فین کند. این کار برای آن است که مخاط اضافی را دور بریزد.



10 مجدداً دستان خود را به مدت 20 ثانیه و با استفاده از صابون و آب گرم بشویید یا از ضدعفونی‌کننده دست استفاده نمایید.


اگر این تست را روی شخص دیگری انجام می‌دهید، باید دوباره دستان خود را بشویید یا ضدعفونی کنید.




11 سواب موجود در لفاف مهر و موم شده را پیدا کنید. نوک نرم و پارچه‌ای آن را مشخص کنید.

هشدار

نوک نرم و پارچه‌ای سواب را لمس نکنید.

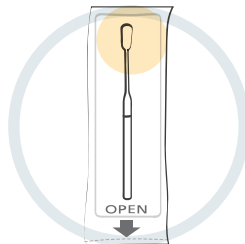

12 بسته‌بندی سواب را فقط وقتی باز کنید که آماده استفاده از آن هستید و سواب را به آرامی بیرون بیاورید.

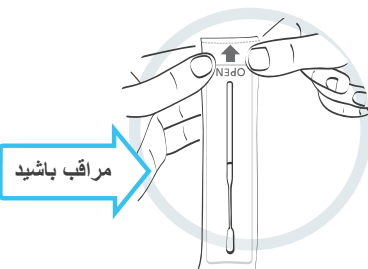

### 3. نمونه سواب خود را بگیرید

### انجام آزمایش روی شخصی دیگر

کودکان زیر 12 سال باید توسط یک بزرگسال تست شوند. در مورد نحوه آماده‌سازی و تست کودک یا شخصی که به کمک نیاز دارد، دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید. می‌توانید ویدئوی نمایش این کار را در آدرس زیر تماشا کنید: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

اگر از یک کودک تست می‌گیرید، جعبه تست را به او نشان دهید و در مورد کارهایی که می‌خواهید انجام دهید با وی صحبت کنید. در صورت امکان او را روی زانوهای شخص دیگری بنشانید یا از یک نفر بخواهید دستپایش را بگیرد. از کودک بخواهید در داخل دستمال فین کند. دستمال کاغذی را داخل سطل زباله دردار بیندازید.


#### هشدار

نوک پارچه‌ای سواب نباید با زبان، دندان‌ها، گونه‌ها، لثه‌ها یا هر سطح دیگری تماس پیدا کند. اگر با هر چیز دیگری تماس پیدا کند، ممکن است نمونه شما را خراب کند. هرگز نوک نرم و پارچه‌ای سواب را با دستان خود لمس نکنید.

در صورت گرفتن تست از کودک زیر 12 سال یا شخصی که به کمک نیاز دارد، مراحل صفحه 11 را دنبال کنید

13 سواب را در دستتان بگیرید، از کودک بخواهید دهانتش را کاملاً باز و سرش را به عقب خم کند. نوک پارچه‌ای سواب را روی هر دو لوزه (یا محل قبلی قرارگیری آنها) بمالید.


13

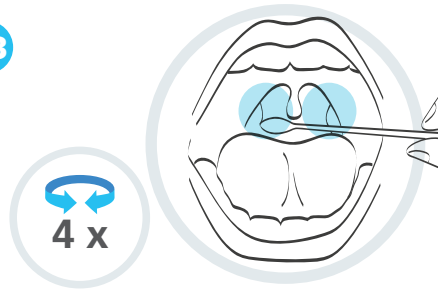

این کار را طوری انجام دهید که هر طرف 4 بار به‌خوبی تماس پیدا کند. سواب را با دقت بیرون بیاورید.

13 دهان خود را به‌طور کامل باز کنید و نوک پارچه‌ای سواب را روی هر دو لوزه (یا محل قبلی قرارگیری آنها) بمالید.


13

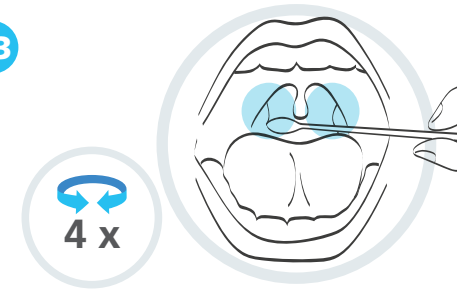

این کار را طوری انجام دهید که هر طرف 4 بار به‌خوبی تماس پیدا کند (برای این کار از چراغ قوه یا آینه استفاده کنید). سواب را با دقت از ته گلو بیرون بیاورید.

14 نوک پارچه‌ای همان سواب را به آرامی در 1 سوراخ بینی او فرو کنید تا زمانی که اندکی مقاومت را احساس نمایید.

14

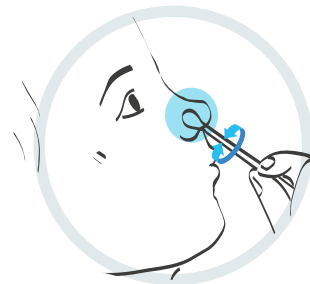


همان سواب را به آرامی در 1 سوراخ بینی فرو کنید تا زمانی که اندکی مقاومت را احساس نمایید (حدود 2.5 سانتی‌متر به داخل بینی).

14



15 سواب را 10 دور کامل به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی او بچرخانید. اگر سواب را به لوزه‌ها نزده‌اید،


15

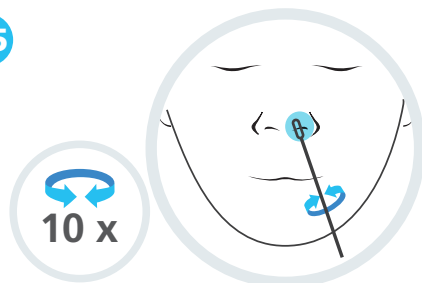

سواب را به هر دو سوراخ بینی وارد کنید و در هر سوراخ 10 بار به‌طور کامل بچرخانید.

15 سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی حرکت داده و 10 دور کامل بچرخانید. نیازی نیست نیرو وارد کنید.

15

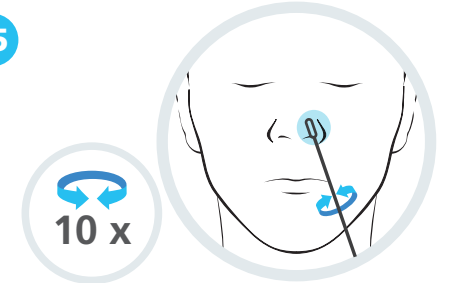

ممکن است این حالت ناراحت‌کننده باشد. در صورت احساس مقاومت یا درد شدید، سواب را بیشتر فرو نبرید.


# 4. نمونه سواب را پردازش کنید

## نکته


برای دستیابی به بهترین عملکرد، پس از پاک کردن سوراخ بینی خود، در اسرع وقت سواب را تست کنید.

**16** لوله استخراج را بردارید و نوک پارچه‌ای سواب را در داخل لوله استخراج یعنی در داخل مایع قرار دهید.

نوک سواب را به لبه داخلی لوله استخراج فشار دهید و همزمان سواب را به مدت 15 ثانیه بچرخانید. این کار برای انتقال نمونه شما به داخل مایع صورت می‌گیرد.

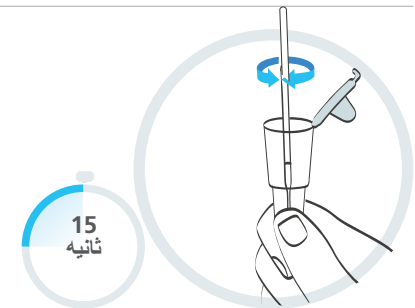


**17** هنگام خارج کردن سواب، با انگشتان دیواره‌های لوله استخراج را به سواب فشار دهید. مطمئن شوید که تمام مایع موجود در نوک نرم سواب را خارج کنید. سواب را در کیسه زباله ارائه شده قرار دهید.

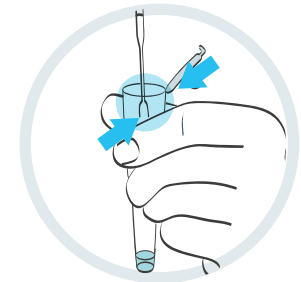


**18** درپوش لوله استخراج را محکم فشار دهید تا از نشستن آن جلوگیری شود.

## توصیه


پس از اتمام این مرحله دستان خود را دوباره بشویید.

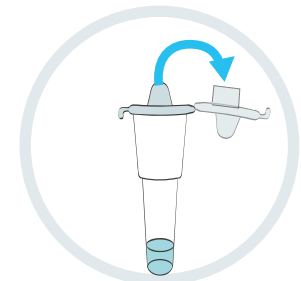

**19** اطمینان حاصل کنید که کیت تست روی سطحی تمیز و صاف قرار داشته باشد. در طول تست نوار را حرکت ندهید.

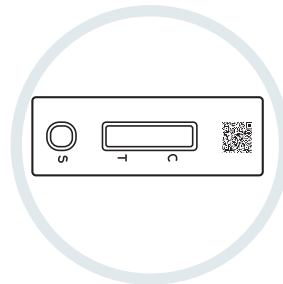


**20** لوله استخراج را به آرامی فشار دهید تا 2 قطره از مایع در داخل حفره نمونه (S) بر روی نوار تست بریزد. مطمئن شوید که مایع بریزد نه حباب هوا. ویال جمع‌آوری نمونه را به همراه سواب در کیسه زباله قرار دهید.

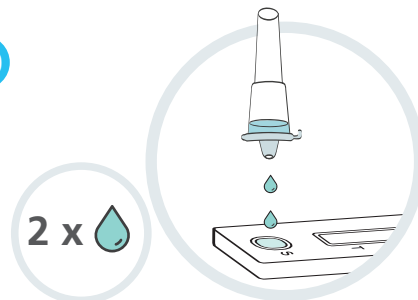

**21** زمان‌سنج را تنظیم کنید و 30 دقیقه صبر کنید، سپس نتیجه را بخوانید.

نتیجه مثبت ممکن است پس از 20 دقیقه یا بعد از آن ظاهر شود، اما برای ثبت نتیجه منفی باید 30 دقیقه کامل صبر کنید زیرا ممکن است پدیدار شدن خط تست (T) به این میزان طول بکشد.

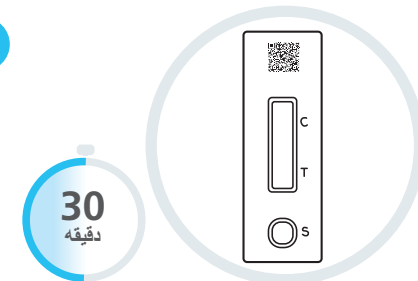

نحوه خواندن و گزارش دادن نتیجه خود را در صفحه بعد مشاهده کنید. <<

## 5. نتیجه خود را بخوانید

نکته مهم

30 دقیقه


اجازه ندهید تست بیش از 30 دقیقه طول بکشد زیرا این کار باعث ابطال نتیجه می‌گردد.

### نتیجه مثبت



دو خط ظاهر می‌شود. یک خط رنگی باید در منطقه خط کنترل (C)، و یک خط رنگی دیگر باید در منطقه خط تست (T) باشد.


وجود دو خط، یکی در کنار C و دیگری در کنار T، نشان می‌دهد که تست مثبت است، حتی اگر کم‌رنگ باشد.

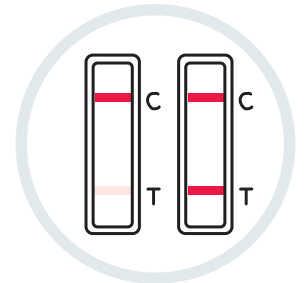

نکته مهم

در صورت مثبت بودن تست، شما و خانواده‌تان باید خود را با رعایت دستورالعمل‌های دولتی قرنطینه کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

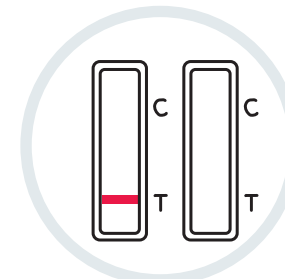

### نتیجه نامعتبر




خط کنترل (C) ظاهر نمی‌شود.

### نتیجه منفی



یک خط رنگی در منطقه خط کنترل (C) ظاهر می‌شود. هیچ خطی در منطقه خط تست (T) ظاهر نمی‌شود.

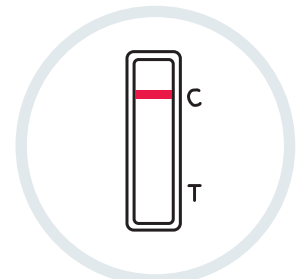

## 6. نتیجه خود را گزارش دهید

شما باید نتایج مثبت، منفی و نامعتبر خود را به NHS گزارش دهید.

ثبت تمام نتایج تست‌ها به دانشمندان کمک می‌کند تا شیوع ویروس جدید را تشخیص دهند و در مورد نحوه واکنش به آن توصیه ارائه کنند. اگر افراد فقط نتیجه مثبت را گزارش دهند، سطح موارد ابتلا بیشتر از حد واقعی به نظر خواهد رسید.

بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا نامعتبر باشد، مطمئن می‌شوید که اطلاعات NHS دقیق است.

برای گزارش دادن نتیجه خود به QR یا شماره شناسه در زیر آن نیاز دارید.



به صورت آنلاین گزارش دهید  
(سریع‌ترین روش)

اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می‌کنید، به این آدرس بروید:

[gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)

اگر در اسکاتلند زندگی می‌کنید، به این آدرس بروید:  
[covidtest.scot](https://www.covidtest.scot)

یا با استفاده از تلفن گزارش دهید

با 119 تماس بگیرید

تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان‌پذیر است (تماس با تلفن همراه و تلفن ثابت رایگان است).





## فقط وقتی تست خود را به پایان رسانده‌اید که نتیجه خود را گزارش دهید

### + نتیجه مثبت

اگر نتیجه مثبت بود، نشان می‌دهد که در حال حاضر به COVID-19 آلوده شده‌اید و این خطر وجود دارد که دیگران را نیز آلوده کنید. هنگامی که نتیجه خود را گزارش می‌دهید، اطلاعات بیشتری در مورد مراحل بعدی که باید انجام دهید در اختیارتان قرار می‌گیرد.

#### هشدار

شما، هرکسی که با شما زندگی می‌کند و هر کسی در حلقه حمایتی‌تان قرار دارد باید خود را مطابق با دستورالعمل‌های ملی و محلی فعلی قرنطینه کنید، این دستورالعمل‌ها در آدرس زیر قابل مشاهده است:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/)

### - نتیجه منفی

اگر نتیجه تست منفی بود، به احتمال زیاد در زمان انجام تست مبتلا نبوده‌اید. با این حال، نتیجه تست منفی تضمین نمی‌کند که COVID-19 نداشته باشید.

اگر نتیجه تست شما منفی بود، باید قوانین و دستورالعمل‌های ملی و محلی را رعایت کنید، از جمله شستن دست‌ها به‌طور منظم، حفظ فاصله اجتماعی و در صورت لزوم استفاده از پوشش صورت.

در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه جدید و

بی‌وقفه یا از دست دادن یا تغییر در حس چشایی یا بویایی، شما و خانواده‌تان باید خود را قرنطینه کرده و طبق دستورالعمل‌ها لازم است تست دیگری را در این آدرس انجام دهید:

[gov.uk/get-coronavirus-test](https://gov.uk/get-coronavirus-test) یا با مرکز تماس مشتریان به شماره 119 تماس بگیرید. تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان‌پذیر است.

### نتیجه نامعتبر

اگر نتیجه نامعتبر دریافت کردید، بدان معنی است که تست به‌درستی اجرا نشده است. باید از یک تست جریان جانبی دیگر درون بسته استفاده کنید. از هیچ‌یک از اقلام تست اول مجدداً استفاده نکنید و رویه تست را از مرحله 1 شروع کنید.

## اگر مشکل همچنان ادامه داشت

اگر مشکل همچنان ادامه داشت، بلافاصله استفاده از کیت‌های تست را قطع کنید. اگر تست دیگری در اختیار ندارید، می‌توانید از طریق برنامه NHS 19-COVID یا با مراجعه به این آدرس، تست دیگری را انجام دهید: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://gov.uk/get-coronavirus-test) یا با مرکز تماس مشتریان به شماره 119 تماس بگیرید. تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان‌پذیر است.

## 8 عملکرد تست

اگر کسی دارای سطوح بالای ویروس کرونا (COVID-19) باشد، احتمال اینکه نتیجه تست مثبت شود، بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب به احتمال زیاد افرادی که در حال حاضر مبتلا هستند شناسایی می‌شوند و باید بلافاصله خود را قرنطینه کنند.

## 9 کیت تست خود را به شکلی ایمن دور بیندازید

پس از اتمام تست، تمام محتویات کیت تست استفاده شده را در کیسه زباله ارائه شده قرار داده و آن را در کنار زباله‌های خانگی معمول خود بگذارید.

پس از دور انداختن آن، دست‌هایتان را به‌طور کامل بشویید.



تأمین این دستگاه تنها به‌عنوان بخشی از استقرار DHSC براساس برنامه تست و ردیابی NHS مجاز است.

سازنده: Victoria Street, Westminster, 39, Department of Health and Social Care  
0EU London, SW1



تولید شده براساس قرارداد با DHSC توسط: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd  
Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, 188 .4F, No/3F/2F  
.P. R. China ,361026 ,Fujian

#### فهرست نمادها

حاوی ملزومات کافی برای XX تست		سازنده		استریل شده با استفاده از اکسید اتیلن		در دمای 2 - 30 درجه نگهداری شود	 30°C 2°C
اگر بسته‌بندی آسیب‌دیده است از آن استفاده نکنید		دستگاه پزشکی تشخیصی درون‌تنی		تاریخ استفاده تا		شماره گروه	
قابل بازیافت		مجدداً استفاده نشود		تاریخ تولید		دور از نور خورشید نگهداری گردد	
		احتیاط		دستورالعمل‌های استفاده را رعایت کنید		خشک نگهدارید	

تمام اطلاعات و تصاویر مندرج در این سند در تاریخ 18 ژوئن 2021 صحیح هستند.

نسخه 1.3.4