

مخکې له دې چې تاسو ازموینه پیل کړئ دا بشپړ لارښود په غور ولولئ.
دا ازموینه ممکن د هغه څخه توپیر ولري چې تاسو دمخه کارولی وي.

د DHSC COVID-19 د ځان د ازموینې په اړه ستاسو تدریجي لارښود (د انټیجن گړندی ازموینه)



دا لارښوونې یوازې د DHSC COVID-19 د ځان د ازموینې (د انټیجن گړندی ازموینه) د استعمال په اړه دي.
په دې لارښود کې دا تشریح شوي چې د ځان او کوم بل کس د COVID-19 ازموینه به څنگه کوئ او دا چې
NHS ته به پایلې څنگه راپور کوئ.

د ژبې بدیل نسخې او ویډیو څرگندونې په دې ادرس شتون لري:

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

د خپلې ازموینې ټولې پایلې NHS ته راپور کړئ

تاسو څه کولو ته اړتیا لرئ



ستاسو تدریجی لارښود

د لارښوونو مطالعه وکړئ او په سم ترتیب سره دا مرحلې تعقیب کړئ. د هرې ازموینې تنظیم کول شاوخوا 15 دقیقې وخت نیسي او پایلې به یې په 30 نورو دقیقو کې چمتو کېږي.

پاڼه	سرلیک	برخه
6	د خپلې ازموینې ساحه مو چمتو کړئ	1
7	د خپلې ازموینې د کیت مینځپانګې وګورئ	
8	خپله ازموینه تنظیم کړئ	2
10	د خپلې سواب نمونه واخلئ	3
11	په بل چا باندې ازموینه ترسره کول	
12	د سواب نمونه پروسس کړئ	4
14	خپله پایله ولولئ	5
15	خپله پایله راپور کړئ	6
16	ستاسو پایلې څه معنی لري	7
17	د ازموینې اجرا	8
17	د خپلې ازموینې کیت په خوندي ډول ضایع کړئ	9
18	د خپلو ازموینو د پایلو په اړه یو یادښت جوړ کړئ	

په 3 کې شاوخوا 1 کس چې COVID-19 لري نه پوهیږي چې دی په دې ناروغی اخته دی.

په منظم ډول د ځان په معاینه کولو سره موږ د دې ناروغی د زیاتې خپریدو مخنیوی کولی شو او په خپلو کورنیو او ټولنو کې د زیات زیان منونکو کسانو سره مرسته کولی شو.

د ازموینې د ترسره کولو په اړه مشوره

دا لارښوونې ګټورې دي، مشوره او د خبردارۍ بکسونه په دې ټول لارښود کې ستاسو سره د مرستې لپاره ورکړل شوي. په احتیاط سره ګام په ګام د دې لارښوونو په تعقیبولو سره به تاسو په ښه توګه دا فرصت ولرئ چې باوري پایله ترلاسه کړئ.

عمومي لارښوونه او خبرداري

- د هر کس لپاره د ازموینې جلا کیت استعمالوئ. تاسو د ازموینې د کیت هر شی یوازې یو ځل استعمالولی شئ.
- دغه شیان بیا ځلي مه استعمالوئ. تاسو باید د هر کس د پایلي راپور ورکړئ.
- که تاسو په خپلو لاسونو یا نظر کې څه ستونزې لرئ، نو کولای شئ چې د بل کوم کس سره په سواب دننه کولو او د ازموینې په پروسه کې مرسته ترلاسه کړئ.
- که ستاسو په پوزه مېخکې وي، نو بله سپریمه سواب کړئ. که په دواړو اړخونو مېخکې لرئ، له سواب کولو مخکې له یو اړخ څخه مېخکې لرې کړئ.
- که په تیر شوو 24 ساعتو کې ستاسو پوزه ویني شوي وي، نو بله سپریمه سواب کړئ یا 24 ساعته انتظار وکړئ.
- د ازموینې دمخه لږ تر لږه د 30 دقیقو لپاره څه مه خورئ یا مه څښئ چې د ازموینې د خرابیدو خطر کم کړئ.
- دا کیتونه یوازې د انساني استعمال لپاره دي.

مشوره

د ازموینې کیت د خونې په تودوخه کې یا په یخ وچ ځای کې نڅیره کوئ (له 2° د سانتي ګراد څخه تر 30° درجو د سانتي ګراد پورې). لمر ته یې مخامخ مه پرېږدئ او په یخچال یا فریژر کې یې مه ږدئ.

کیت باید د خونې په تودوخه کې استعمال کړل شي (له 15° د سانتي ګراد څخه تر 30° د سانتي ګراد پورې). که کیت په یخ ځای کې کینودل شوی وي، (له 15° سیلسیس څخه کم)، نو د استعمال مخکې یې تر 30 دقیقو پورې د خونې په عادي تودوخه کې پرېږدئ.

کیت له ماشومانو څخه لرې ساتئ.

د دې ازموينې په اړه

ولې تاسو بايد پخپله د ځان ازموينه وکړئ

د ازموينې دا کيټ د هغه کسانو لپاره دی چې د ناروغۍ علايم پکې څرگندې نه وي، دا د پوزې او ستونې لپاره د سواب ازموينه ده خو دا وکتل شي چې تاسو ناروغي لری او کنه.

علايم نه لرونکي هغه کسان وي چې وپروس لري خو علايم يې پکې څرگندې نه وي.

که د COVID-19 لپاره ستاسو د ازموينې پايله مثبت وي، نو تاسو بايد:

- د ناروغۍ د خپرېدو په کمولو کې مرسته وکړئ، تاسو او ستاسو کورنۍ بايد د حکومت د لارښونو په تعقيب سره سم ځان انزوا کړئ:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

- هغه خلکو ته مشوره ورکړئ چې تاسو ورسره په نږدې تماس کې یاست، یا هغه ځایونه چې تاسو په تیرو 14 ورځو کې لیدلي، چې د COVID-19 د احتمالي ناروغۍ لپاره ازموينه وکړي.

که د COVID-19 لپاره ستاسو ازموينه منفي راشي

دا احتمال لري چې تاسو د ازموينې د ترسره کولو پر مهال ساري ناروغي نه لرله. که څه هم، د ازموينې منفي پايله دا تضمین نه وړاندې کوي چې تاسو کورونا وپروس نه لری.

مشوره

که تاسو د کورونا وپروس (COVID-19) علايم لری یا په کورونا وپروس (COVID-19) اخته شوي یاست، مهرباني وکړئ د NHS لارښود آنلاین تعقيب کړئ:

nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

که تاسو د کورونا وپروس (COVID-19) علايم لری او ستاسو وضعیت خرابیږي، یا تاسو له اوو ورځو وروسته بڼه نه یاست، نو د NHS آنلاین خدمت وکاروئ: 111.nhs.uk. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی نه لری، نوته زنگ ووهئ [111 NHS](https://111.nhs.uk). د طبي بېرني وضعیت لپاره [999](https://999.nhs.uk) ته زنگ ووهئ.

که تاسو انډیبنمن یاست، نو د مرستې په ترلاسه کولو کې خنډ مه کوئ. په خپل شعور باور وکړئ.

دا ازموینه د چا لپاره مناسبه ده




د 12 کلونو څخه کم عمره ماشومان

د 12 کلونو څخه د کم عمر لرونکي ماشومانو لپاره باید د یو بالغ کس په واسطه ازموینه ترسره شي. دا ازموینه مه کوئ که چیري تاسو احساس کوئ چې تاسو د ماشوم د ازموینې د ترسره کولو په اړه ډاډه نه یاست.



ځوانان چې عمرونه یې د 12 - 17 کلونو ترمنځ وي

د ځان ازموینه او د لویانو د څارنې سره راپور ورکول. بالغ کسان ممکن د اړتیا په صورت کې ازموینه ترسره کړي.

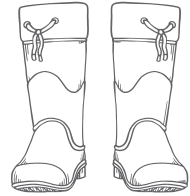

د هغو لویانو لپاره چې عمرونه یې تر 18 کلونو لوړ دي

ځان ازموینه او راپور، د مرستې سره که اړتیا وي.

څو ځله باید ازموینه وکړل شي

دا چې تاسو څو ځله باید ازموینه وکړئ ممکن ستاسو د حالاتو او اوسني ملي یا ځایي لارښوونو پورې اړه ولري.

چیرته اضافي ملاتړ ترلاسه کړئ

د ځان د ازموینې په اړه نور معلومات دلته وگورئ: gov.uk/covid19-self-test-help

1. د خپلي ازمويني ساحه مو چمتو كړئ

تاسو به لاندي شيانو ته اړتيا ولرئ:


- ټايمر لکه لاسي يا دېوالي ساعت
- کاغذي دسمالونه
- هنداره
- سطحه پاکوونکي
- د لاس سنیتایزر یا صابون او گرمو اوبو ته لاسرسی.

30
دقیقې



له آزمويني مخکې د 30 دقیقو لپاره خوراک او څښاک مه کوئ

1 د هداياتو دا لارښود په غور سره ولولئ. که تاسو نورې مرستې ته اړتيا لرئ، همدرانگه کولای شئ د سواب د ازمويني ویدیو آنلاین وگورئ: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

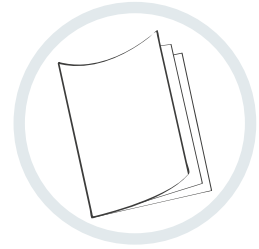


2 له آزمويني څخه مخکې په سملاسي توگه د آزمويني د کيټ اېښودو لپاره يوه همواره سطحه پاکه، صفا او وچه کړئ.



3 خپل لاسونه په صابون او گرمو اوبو سره، يا د لاس په سنیتایزر سره د 20 ثانيو لپاره ښه ومينځئ.



که له يوې څخه ډيرې ازمويني ترسره کوئ، د هرې ازمويني ترمينځ سطحه او خپل لاسونه بېرته ومينځئ.

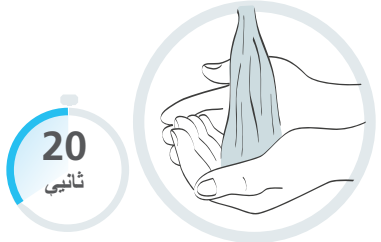


د خپل کیت توکي وگورئ

4


د ازموينې په خپل بکس کې تاسو بايد لاندې شيان ولرئ:

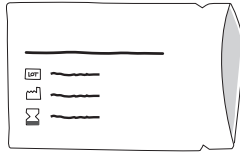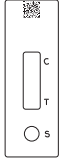

په مهر شوي کڅوره کې د ازموينې پټی

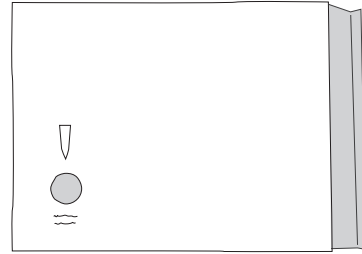

د استخراج ټيوب هولدر

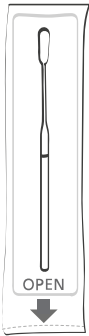

په مهر شوي پوښ کې
د دننه سواب



د کثافاتو کڅوره



د استخراج ټيوبونه



د استخراج بفر
کڅوره

مشوره

که څه شی زيانمن، مات يا ورک شوی وي نو څه به کوئ
که تاسو وگورئ چې څه شی زيانمن شوی، مات شوی، ورک شوی، نو مهرباني وکړئ د ازموينې
کيټ مه کاروئ. تاسو کولی شئ د پيروډونکي د تماس مرکز ته په زنگ و هلو سره خپل نظر ورکړئ.
تليفونونه هره ورځ خلاص وي، د سهار له 7 بجو څخه تر ماسختن 11 بجو پورې.

زنگ ووهئ: **119** (له وړيا گرځنده تليفون او زمکني تلفون څخه وړيا).
مور په 200 ژبو او همدارنگه د بریتانيې په اشاروي ژبه ملاتړ وړاندې کوو.

که تاسو د يوې وسيلې لخوا زيانمن شوي ياست، د دې په اړه راپور ورکول کولی شي له نورو سره
مرسته وکړي، مهرباني وکړئ دا وېب پاڼه وگورئ:

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. خپله ازموینه تنظیم کړئ


5 د ازموینې پټۍ له مهر شوي کڅورې څخه راوباسئ او په پاکه هواره سطحه یې واچوئ.

خبرداری


کله چې دا یوځل خلاص شي، نو ازموینه په 30 دقیقو کې دننه پیل کړئ.



6 ټیوب په استخراج ټیوب هولدر کې ځای په ځای کړئ چې په بکس کې دننه لگېدلی وي.

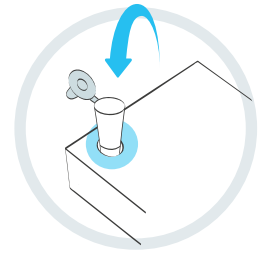


7 کڅوره په دقت سره تاو کړئ یا یې خلاصه کړئ. دا له خپل مخ څخه لری خلاصه کړئ او محتاط اوسئ چې هیڅ مایع تویه نه شي.

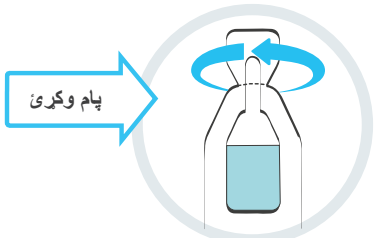

8 د استخراج ټیوب خلاص کړئ او په آرام سره ټوله مایع له کڅورې څخه په ټیوب کې واچوئ.

پام وکړئ چې کڅوره له ټیوب سره لمس نکړئ. کوچنی پلاستيکي کڅوره د کثافاتو په چمتو شوي ستل کې واچوئ.

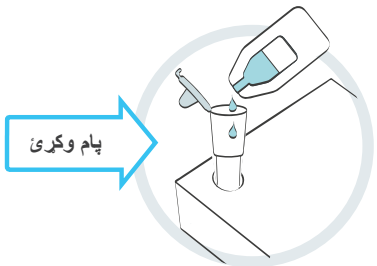


9 په آرام سره خپله پوزه په کاغذ کې سون و هڼی او کاغذ په تړل شوي کڅوړه کې وغورځوی.

که تاسو ماشوم معاينه کوئ، نو د دوی سره د پوزې په سون و هلو کې مرسته وکړئ. دا د دې لپاره دی چې تاسو له اضافي ګرنگو څخه خلاصی ومومئ.



10 خپل لاسونه له صابون او ګرمو اوبو یا د لاسونو له سنیټایزر څخه په استفادې سره له 20 ثانیو لپاره ښه ومیځئ.


که تاسو دا ازموینه په بل چا ترسره کوئ، تاسو باید خپل دواړه لاسونه ومیځئ یا یې د عفونت ضد په مایع سره پاک کړئ.

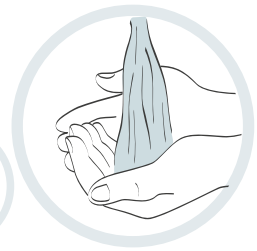


11 ستاسو مخې ته په مهر شوي پوښ کې سواب ومومئ. د سواب نرمه توکري څوکه په ګوته کړئ.

څېړداری

د سواب نرمه توکري څوکه مه لمس کوئ.

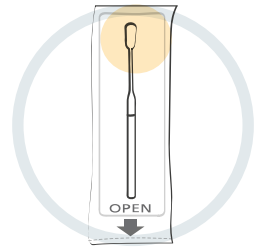

12 د سواب بڼه یوازې هغه وخت خلاصه کړئ کله چې تاسو چمتو یاست چې سواب په آرام سره راوباسئ او استعمال یې کړئ.

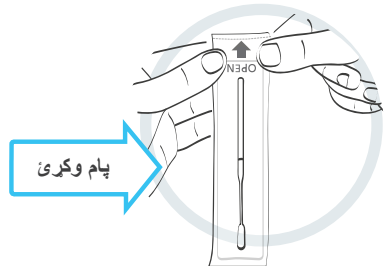

3. د خپل سواب نمونه واخلي

خبرداري


د سواب د توکر څوکه د ژبې، غاښونو، ژامو يا نورو کومو سطحو سره مه لمس کوي. که د بل سره لمس شي، نو ستاسو نمونه خرابيدلی شي. د سواب نرمه توکري څوکه هيڅکله په خپل لاسونو مه لمس کوي.

که له 12 کلونو څخه د کم عمر ماشوم ازموینه کوئ، يا د داسې يو کس چې مرستې ته اړتيا لري، د 11 مې پاتې گامونه تعقيب کړئ.

13 خولپيوره خلاصه کړئ او د سواب نرمه توکري څوکه په خپلو دواړو تانسلونو باندې (يا پر هغه ځای باندې چې هلته تانسولونه وي) وموښئ.


دا کار له ښه تماس سره څلور ځله په هر اړخ باندې ترسره کړئ (د داسې کولو لپاره د تارچ يا آييني څخه استفاده وکړئ). د خپل ستوني له شا څخه په احتياط سره سواب لري کړئ.

13

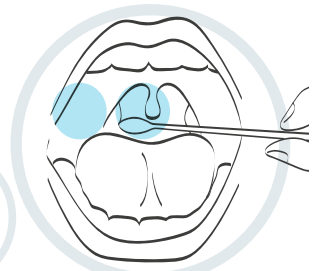

14 ورته سواب په نرمی سره 1 سپيرمي ته دننه کړئ تر هغه چې لږ شان مقاومت احساس کړئ (تقريباً په خپل پوزه کې 2.5 سانتي ميټره).


14

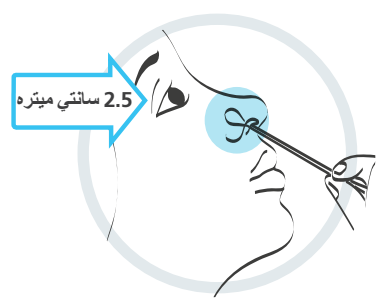

15 په سپيرمه کې دننه په نرمی سره سواب تاو کړئ، داسې چې 10 ځله بشري حلقې پوره کړي. زور ورکولو ته اړتيا نشته.

15

دا ممکن د نا آرامی احساس وکړي. که تاسو د قوي مقاومت يا درد احساس وکړئ، نو سواب نور ژور مه دننه کړئ.

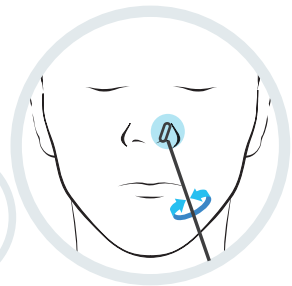

په بل چا باندې ازموینه ترسره کول

د 12 کلونو څخه د کم عمر لرونکو ماشومانو لپاره باید د یو بالغ کس په واسطه ازموینه ترسره شي. دا چې ماشوم یا هغه کس چې مرستی ته اړتیا لري څنگه چمتو کوي او ازموینه به یې کوي، د دې په اړه لاندې لارښوونې تعقیب کړئ. تاسو کولی شئ تشریحي ویدیو په دې ادرس وگورئ: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help


که تاسو یو ماشوم معاینه کوئ، دوی ته د ازموینې کیت وښایاست او د هغه څه په اړه ورسره وغزیرئ چې تاسو یې کوئ. که امکان ولري، هغوی د چا په غیر کې کښېنئ یا دې یې څوک له لاس څخه ونیسي. له ماشوم څخه وغواړئ چې خپله پوزه په کاغذي دسمال کې سون وهي. کاغذي دسمال په تړل شوي کڅوړه کې وغورځوئ.

13 سواب په خپل لاس کې ونیسی، ماشوم ته وواپاست چې خپله خوله پوره خلاصه کړي او سر یې شا ته کور کړئ. د سواب ټوکري څوکه په نرمۍ سره په دواړه تانسلونو (یا هغه ځای باندې چې هلته تانسولونه وي) وموښئ.

دا کار له ښه تماس سره څلور ځله په هر اړخ باندې ترسره کړئ. په احتیاط سره سواب راوباسئ.


13

4 x

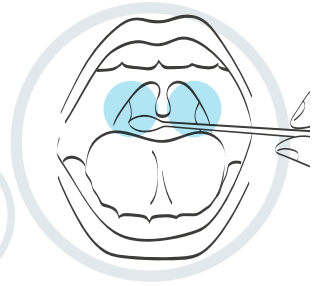

14 د ورته سواب ټوکري په نرمۍ سره د دوی په یوې سپریمه کې دننه کړئ تر هغه چې تاسو یو څه مقاومت احساس کړئ.

14

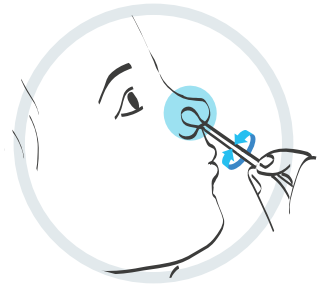


15 په آرام سره سواب د هغوی په سپریمه کې دننه شاولخوا 10 ځله په دایروي حرکت سره تاو کړئ.

که تاسو تانسولونه سواب نه کړئ، دواړه سپریمې سواب کړئ، داسې چې په هره سپریمه کې 10 ځله په دایروي حرکت سره سواب تاو کړئ.

15

10 x

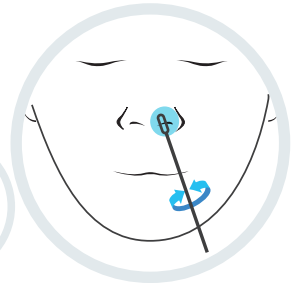


4. د سواب نمونه پروسس کړئ

لارښوونه

د ښو اجرا آتو لپاره، د پوزې له سوډ وهلو وروسته څومره ژر چې ممکنه وي د پوزې سواب معاینه کړئ.

16 د استخراج ټیوب پورته کړئ او د سواب توکري څوکه د راتلولو په ټیوب کې واچوئ ترڅو دا په مایع کې وي.


د استخراج د ټیوب په دنننې څنډه کې په زور سره دغه څوکه دننه کړئ، په داسې حال کې چې تر 15 ثانیو پورې سواب په دایروي ډول تاوئ. دا د دې لپاره چې ستاسو نمونه مایعاتو ته انتقال شي.

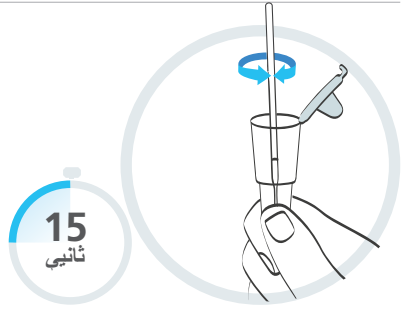

17 د استخراج بفر ټیوب د سواب لري کولو په وخت په آرام سره ونیسئ.

ډاډ تر لاسه کړئ چې تاسو د سواب د نرمې څوکي څخه ټوله مایع لري کړئ.

سواب د کثافاتو په کڅوره کې واچوئ چې تاسو ته چمتو شوي ده.

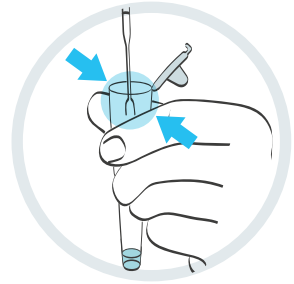

18 د استخراج د ټیوب سر په کلکه توگه وتړئ ترڅو د لیک کېدو مخنیوی وشي.


مشوره



د دې مرحلې له بشپړولو وروسته یو ځل بیا خپل لاسونه وښخئ.




19 ډاډ تر لاسه کړئ چې د ازموينې کيټ په پاکه او هواره سطحه باندې پروت دی. د ازموينې پرمهال پټی ته حرکت مه ورکوی.

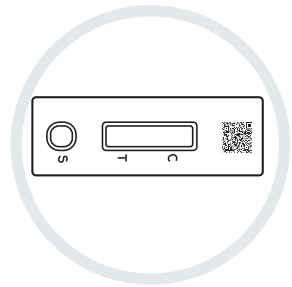


20 په نرمۍ سره د استخراج بفر ټيوب باندې فشار واچوی ترڅو د مایع 2 څاڅکي د ازموينې پټی کې د نمونې څاه (S) ته ورسېږي.

ډاډ تر لاسه کړئ چې تاسو مایع اچولی ده، نه د هوا حباب. د نمونې راټولولو شیشه د کثافاتو په پلاستيکي کڅوړه کې د سواب لاسي سره واچوی.

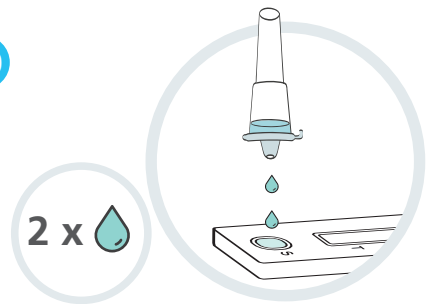

21 ټایمر برابر کړئ او د خپلې پایلې لوستلو دمخه 30 دقیقې انتظار وکړئ.

20 دقیقې وروسته هر وخت مثبتې پایله څرگندېدلې شي، لاکن، تاسو باید تر بشپړ 30 دقیقو پورې انتظار وکړئ ترڅو منفي پایله ثبت کړئ ځکه چې د ازموينې کرښه (T) د څرگندېدو پورې دومره وخت اخیستلی شي.

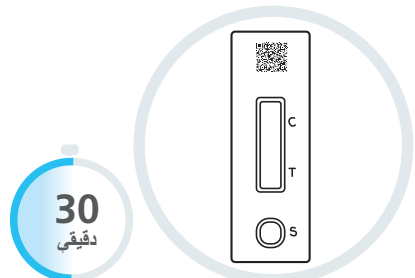

په راتلونکې پاڼه دا معلومه کړئ چې خپله پایله به څنگه لولئ او راپور کوئ. <<

5. خپله پایله ولولئ

مهم

30
دقیقی


ازموینه د چمتو کیدو لپاره له 30 دقیقو څخه د زیات وخت لپاره مه پریردئ، ځکه چې په دې سره به پایله باطله شي.

مثبته پایله




دوه کرښې ښکاره کیږي. یوه رنگه کرښه باید د (C) سیمې د کنټرول په کرښه کې وي، او بله رنگه کرښه باید د (T) سیمې د آزمویني په کرښه کې وي.

دوه کرښې، یوه د C سره نږدې او بله T ته نږدې، حتی خړې کرښې، څرګندوي چې ازموینه مثبت ده.

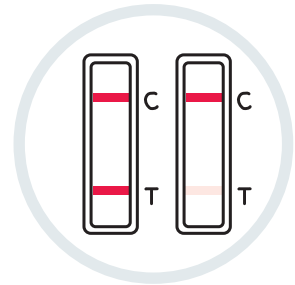

مهم


که ستاسو ازموینه مثبت راشي، تاسو او ستاسو کورنۍ باید د حکومتي لارښوونو سره سم ځان منزوي کړئ: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

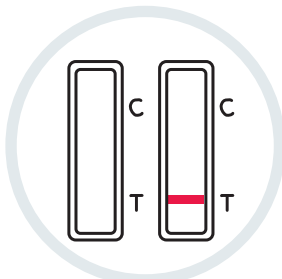

باطل پایله



د کنټرول کرښه (C) نه ښکاره کیږي.

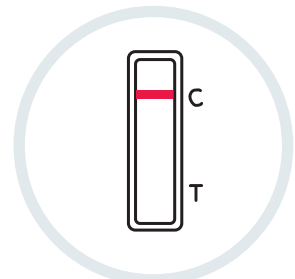

منفي پایله



یوه رنگه کرښه د کنټرول کرښې په (C) سیمه کې ښکاره کیږي. د آزمویني د کرښې سیمه (T) کې هیڅ کرښه نه ښکاره کیږي.


6. خپله پایله راپور کړئ

تاسو باید خپلې مثبتې، منفي او باطلې پایلې NHS ته واستوئ.

د ټولو ازموینو پایلو ثبت کول له ساینس پوهانو سره د نوي ویروس د خپریدو په موندلو کې مرسته کوي او وړاندیز کوي چې څنګه غبرګون وښیئ. که خلک یوازې مثبتې پایله راپور کړي، د قضيې کچه د دوی په پرتله لوړه ښکاري.

نو حتی که ستاسو پایله منفي یا باطله وي، تاسو به ډاډ تر لاسه کړئ چې د NHS معلومات دقیق پاتې شي.

تاسو د خپلې پایلې د راپور ورکولو لپاره د QR کوډ، یا د هغې لاندې د ID شمیرې ته اړتیا لرئ.

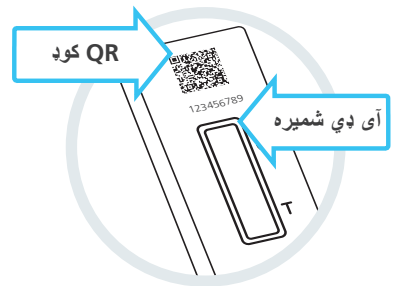

آنلاین (ګرندی) راپور ورکړئ

که تاسو په انګلستان، ولز یا شمالي آیرلینډ کې ژوند کوئ، نو لاندې وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ:

gov.uk/report-covid19-result

که تاسو په سکاټلنډ کې ژوند کوئ، نو لاندې وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ:

covidtest.scot



یا د تلفون له لارې راپور ورکړئ

119 ته زنگ ووهئ

تلفوني اړیکې هره ورځ د سهار له 7 بجو څخه تر ماسختن 11 بجو پورې پراښتې وي (له وریا ګرځنده تلفون او لینی تلفون څخه وریا)



7. ستاسو پایلی څه معنی لري

کله چې تاسو خپله پایله راپور کوئ، تاسو یوازې خپله ازموینه بشپړه کړې

مثبه پایله

که تاسو مثبه پایله ترلاسه کړئ، نو احتمال شتون لري چې تاسو دا مهال په COVID-19 اخته یاست او دا خطر شتون لري چې نور کسان په دې اخته کړئ. کله چې تاسو خپله پایله راپور کړئ، تاسو ته به د راتلونکو کامونو په اړه نور معلومات درکړل شي.

خبرداری

تاسو، هرڅوک چې ستاسو سره ژوند کوي، او هرڅوک چې ستاسو د ملاتړ په ساحه کې وي، باید د اوسني ملي او ځایي لارښود سره سم ځان منزوي کړي، کوم چې دلته په دې ویب پاڼه موندل کېدای شي: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

منفي پایله

که تاسو منفي پایله ترلاسه کړئ، نو احتمال شتون لري چې تاسو هغه وخت ساري ناروغي نه لرله کله مو چې ازموینه ترسره کوله. اما، د ازموینې منفي پایله دا تضمین نه وړاندې کوي چې تاسو COVID-19 نه لرئ.

که ستاسو د ازموینې پایله منفي وي، تاسو باید د ملي او ځایي مقرراتو او لارښوونو تعقیب ته دوام ورکړئ، چې په دې کې له اړتیا سره سم په منظمه توګه لاس مینځل، ټولنیز واټن ساتل او د مخ ماسکونه اچول شامل دي.

که تاسو لوړه ټوډوخه، نوی مسلسل ټوخی ولرئ یا مو خپل د ذایقي او بوی حس له لاسه ورکړی وي، تاسو او ستاسو کورنی باید ځان منزوي کړئ او لارښوونې دا دي چې لاندې بله ازموینه وکړئ: gov.uk/get-coronavirus-test یا د پېروډونکي تماس مرکز ته په 119 زنگ ووهئ. تلیفونونه هره ورځ خلاص وي، د سهار له 7 بجو څخه تر ماسختن 11 بجو پورې.

باطل پایله



که تاسو باطل پایله ترلاسه کړئ، د دې معنی دا ده چې ازموینه په سمه توګه نه ده ترسره شوې. تاسو اړتیا لرئ له کڅوړې څخه یوه بله افقي ازموینه (flow test) وکړئ. د لومړي کيټ څخه هېڅ شی مه کاروئ او د لومړي ګام څخه د ازموینې پروسه پیل کړئ.

که ستونزه دوام ولري

که ستونزه دوام ولري، سمدستي د ټیسټ کیتونو کارول بند کړئ. که تاسو بله ازموینه ونه لرئ، تاسو ممکن د NHS COVID-19 غوښتنلیک له لارې یا د دې وېب پاڼې په کتلو سره یو بل ډول ازموینه ترسره کړئ: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) یا د پیروډونکي تماس مرکز ته په 119 زنگ ووهئ. تلیفونونه هره ورځ خلاص وي، د سهار له 7 بجو څخه تر ماسختن 11 بجو پورې.

8 د ازموینې اجرا

که یو کس د کورونا ویروس (COVID-19) لوري کچې لري، زیات احتمال دا دی چې دا ازموینه به مثبت پایله ورکوي. دا په دې معنی چې زیات احتمال دا دی چې دا به هغه کسان کشف کوي چې اوسمهال ناروغي لري او سمدلاسه منزوي کیدو ته اړتیا لري.

9 د خپلې ازموینې کيټ په خوندي ډول ضایع کړئ

کله چې ستاسو ازموینه بشپړه شي، د ازموینې د کيټ ټول کارول شوي مواد د کثافاتو په کڅوړه کې واچوئ او دا د خپلې کورنۍ په عمومي کثافاتو کې واچوئ. له ضایع کولو وروسته خپل لاسونه په ښه توګه ومینځئ.



د خپلو ازموينو د پايلو په اړه يو يادښت جوړ کړئ



دا ستاسو د خپلو ریکارډونو لپاره ده. تاسو باید لاهم خپلي پايلې NHS ته راپور کړئ (د معلوماتو لپاره 15 مه پاڼه وگورئ).

دا وېب پاڼه وگورئ: [gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)

د ازمويني پايله	وخت	نيټه	چا ازموينه ترسره کړه

ستاسو کیت لاندې توکي لري

7-بسته	3-بسته	شيان
1	1	د کارولو لپاره لارښوونې (دا سند)
1	1	د ټيوب هولډر سوري سره بکس
7	3	په مهر شوي کڅوړه کې د ازموينې پټی
7	3	د استخراج بفر کڅوړی
7	3	د استخراج ټيوب هولډر
7	3	په مهر شوي پوښ کې دننه سواب
7	3	د کثافاتو کڅوړه
د محصول کوډ TK2193	د محصول کوډ TK2196	

د دې وسیلې لپیرل یوازي د NHS تېسټ او ټریس برنامې لاندې د DHSC گمارني برخې په توگه اجازه لري.

Department of Health and Social Care, 39 Victoria Street, Westminster, London, SW1 0EU. 

د DHSC د ټرون لاندې جوړ کړل شوی له اړخه د: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 2F/3F/4F, No. 188, Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, 361026, P. R. China.

د سمبولو فهرست

مناسب دي د XX ازمويڼو لپاره		جوړونکي 	د ایتیلین آکسایډ په کارولو سره معقم شوی		له 2 - 30 °C درجو د سانتي گراد پورې 2 ⁺ سانتي بي ذخيره کړئ		30 ⁺ سانتي گراد
که بسته وېجاره شوي وي، نو مه يې استعمالوئ		په انويټرو تشخيصي طبعي وسيله	IVD	د استعمال نيټه		لاټ شميره	LOT
د بيا کارولو وړ		بېرته يې مه کاروئ		د توليد نيټه		دا د لمر وړانگو څخه لرې وساتئ	
		احتياط		د استعمال لپاره لارښوونې وگورئ		وچ يې وساتئ	

په دې سند کې ورکړل شوي ټول اسناد او عکسونه د 18 جون 2021 د نيټې پورې صحيح دي.

نسخه 1.3.4