


قبل از آغاز تست، تمامی این رهنما را با احتیاط بخوانید.
این تست ممکن است با تستی که قبلاً استفاده کرده اید، متفاوت باشد.

رهنمای قدم به قدم شما جهت تست شخصی DHSC COVID-19 (تست انتی جن سریع)

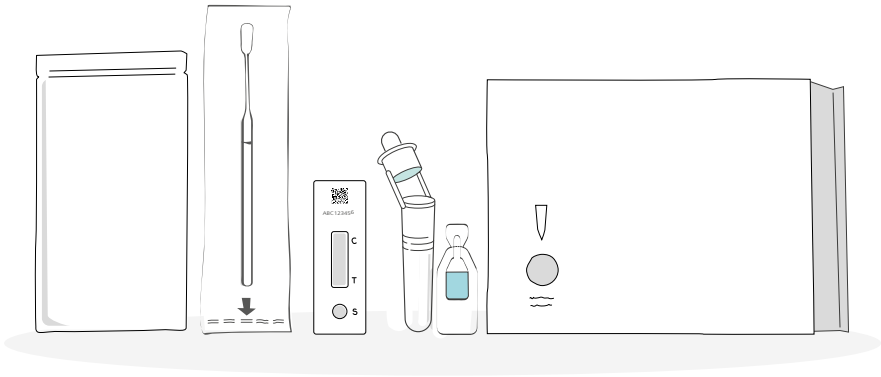

این طرز العمل های قابل استفاده فقط مربوط به تست شخصی DHSC COVID-19 (تست انتی جن سریع) است.
این رهنما تشریح می کند که چگونه از خود یا شخص دیگری تست COVID-19 بگیرید و نتایج را به NHS
راپور دهید.

ورژن های لسانی جایگزین و فلم های ویدیویی در این آدرس میسر می باشند:

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

نتایج تمام تست ها را به NHS راپور دهید

کاری که شما باید انجام دهید



راهنمای قدم به قدم شما

این طرزالعمل ها را بخوانید و مراحل را به ترتیب صحیح، تعقیب نمایید. انجام هر تست حدود 15 دقیقه طول می کشد تا تنظیم شود و نتایج بعد از 30 دقیقه آماده می شود.

صفحه	عنوان	بخش
6	ساحه تست خود را آماده کنید	1
7	محتویات کیت تست خود را چک کنید	
8	تست خود را انجام دهید	2
10	نمونه سواب خود را اخذ نمایید	3
11	انجام آزمایش روی شخصی دیگر	
12	نمونه سواب را پروسس کنید	4
14	نتیجه خود را بخوانید	5
15	نتیجه خود را راپور دهید	6
16	نتایج شما به چه معنا است	7
17	عملکرد تست	8
17	کیت تست خود را به شکل مصنون دور بیندازید	9
18	نتایج تست خود را نوت نمایید	

تقریبا 1 نفر از 3 نفر مصاب به COVID-19 نمی داند که به آن مصاب شده است.

با انجام منظم تست شخصی سرعت شیوع را کاهش دهیم و از آسیب پذیرترین افراد در فامیل ها و جوامع خود محافظت کنیم.

مشوره در مورد گرفتن تست

در سرتاسر این رهنما نکات، توصیه ها و کادرهای هشدار مفیدی برای کمک به شما آمده است. با تعقیب نمودن مرحله به مرحله این طرز العمل ها، چانس بیشتری برای کسب نتیجه قابل اطمینان خواهید داشت.

راهنمایی و هشدارهای عمومی

- برای هر نفر از یک کیت تست جداگانه استفاده نمایید. شما از هر یک از اقلام موجود در بسته تست، صرف یک بار استفاده می توانید.
- از این اقلام مجدداً استفاده ننمایید. ضرورت دارید تا نتیجه هر شخص را راپور دهید.
- اگر شما از نظر دست و بینایی مشکلی دارید، ممکن است ضرورت به همکاری شخص دیگری داشته باشید تا در گرفتن سواب و انجام تست به شما کمک نماید.
- اگر بینی خود را سوراخ نموده اید، سواب را از سوراخ دیگر بینی بگیرید. اگر هر دو قسمت بینی خود را سوراخ نموده اید، قبل از گرفتن سواب، اشیاء یک قسمت را خارج کنید.
- اگر در طول 24 ساعت گذشته مصاب به خونریزی بینی شده اید، سواب را از سوراخ بینی دیگر بگیرید یا 24 ساعت صبر کنید.
- حداقل 30 دقیقه قبل از انجام تست غذا یا نوشیدنی مصرف نکنید تا خطر بی اعتبار شدن تست کاهش یابد.
- این کیت ها فقط برای استفاده انسان طراحی شده اند.

توصیه

کیت تست را در حرارت اتاق یا در جای خشک و خنک (در دمای 2 درجه سانتی گراد تا 30 درجه سانتی گراد) نگهداری کنید. آن را در معرض اشعه مستقیم آفتاب نگذارید و همچنین در یخچال یا فریزر هم قرار ندهید.

کیت باید در حرارت اتاق (در حرارت 15 تا 30 درجه سانتی گراد) استفاده شود. اگر کیت در جایی سرد (با حرارت کمتر از 15 درجه سانتی گراد) نگهداری شده است، قبل از استفاده، آن را به مدت 30 دقیقه در حرارت معمولی اتاق قرار دهید.

کیت تست را از دسترس اطفال دور نگهدارید.

چرا باید تست شخصی بدهید

این کیت تست شخصی مخصوص افراد بدون علامت بوده و یک تست سواب برای بینی و گلو است تا چک شود که آیا مصاب هستید یا خیر.

اشخاص فاقد اعراض و علائم کسانی هستند که ناقل ویروس می باشند اما هیچ گونه اعراض و علائمی از خود نشان نمی دهند.

اگر نتیجه تست COVID-19 شما مثبت است می توانید:

- به محدود کردن شیوع بیماری کمک نمایید، شما و فامیل تان باید طبق طرز العمل های دولت، خود را قرنطین نمایید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- به افرادی که در 14 روز گذشته از نزدیک با آنها در تماس بوده اید یا مکان هایی که از آنها بازدید کرده اید اعلام نمایید تا تست COVID-19 را انجام دهند.

اگر نتیجه تست COVID-19 شما منفی است

این احتمال وجود دارد که در موقع گرفتن تست، شما مصاب نبوده باشید. با این حال، نتیجه تست منفی تضمین نمی کند که ویروس کرونا نداشته باشید.

توصیه

اگر اعراض و علائم ویروس کرونا (COVID-19) را دارید یا به ویروس کرونا (COVID-19) مصاب شده اید، لطفاً در اینترنت به راهنمای NHS مراجعه کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

اگر اعراض و علائم ویروس کرونا (COVID-19) را دارید و وضعیت شما بدتر شده است یا بعد از 7 روز خوب نشدید، به خدمات آنلاین **111 NHS** مراجعه نمایید: 111.nhs.uk. اگر به اینترنت دسترسی ندارید، با **111 NHS** به تماس شوید. برای وضعیت عاجل صحتی با نمبر **999** به تماس شوید.

اگر نگران هستید، گرفتن کمک را به تعویق نیندازید. به غرایز خود اعتماد کنید.

این تست برای چه کسانی مناسب است



اطفال کمتر از 12 سال


اطفال کمتر از 12 سال باید توسط یک کلان سال تست شوند. اگر اعتماد به نفس لازم جهت تست کردن یک طفل را ندارید، این تست را انجام ندهید.



نوجوانان

بین سن 12 - 17 سال

تست شخصی و راپوردهی، تحت نظارت یک شخص کلان سال شخص کلان سال می تواند در صورت نیاز تست را بگیرد.

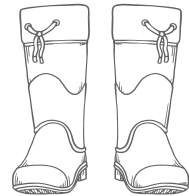

کلان سالان با سن کلاتر

از 18 سال

انجام تست شخصی و راپور دهی، همراه با کمک اگر نیاز بود.

دفعات انجام تست

اینکه چندین مرتبه باید تست بدهید نظر به شرایط و طرز العمل های ملی یا محلی فعلی متفاوت می باشد.

از کجا می توان حمایت دیگری کسب نمود

معلومات بیشتر در مورد تست شخصی را در این آدرس مشاهده کنید:

gov.uk/covid19-self-test-help

1. ساحه تست خود را آماده کنید

به این موارد نیاز خواهید داشت:

- تایمر مانند ساعت دستی یا دیواری
- تیشو
- یک آینه
- پاک کننده سطح
- ضدعفونی کننده دست یا صابون و آب گرم.

30
دقیقه




30 دقیقه قبل از تست از خوردن و نوشیدن اجتناب نمایید

1

این طرز العمل راهنما را با احتیاط بخوانید. اگر نیاز به کمک بیشتر دارید همچنان شما می توانید از فلم های تست سواب آنلاین دیدن نمایید.

gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

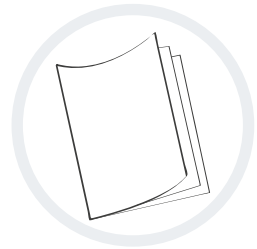

2

درست قبل از شروع تست، یک سطح صاف را خالی، پاک و خشک کنید تا کیت تست روی آن قرار داده شود.



3

دستان خود را به مدت 20 ثانیه و با استفاده از صابون و آب گرم بشویید یا از ضدعفونی کننده دست استفاده نمایید.

اگر اضافه تر از یک تست انجام می دهید، بین هر تست سطح را پاک نمایید و دست های خود را مجدداً بشویید.


20
ثانیه





محتویات کیت خود را چک کنید.

4


در جعبه تست شما باید این مواد موجود باشند:

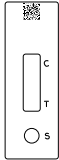

نوار تست در بسته بندی لاک و موم شده

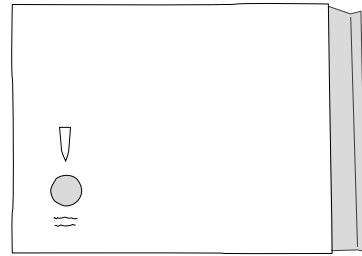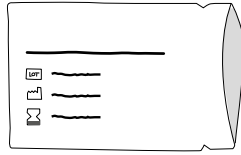

نگهدارنده تیوب استخراج

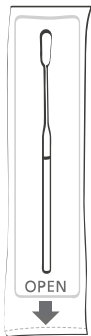

سواب در داخل بسته لاک و موم شده



خریبه کثافات



تیوب استخراج



ساشه بافر استخراج

توصیه

در صورتی که کدام چیزی خراب شده، یا شکسته و یا کمبودی داشت چی باید کرد اگر متوجه آسیب دیدگی، شکستگی یا کمبود چیزی شدید، لطفاً از کیت تست استفاده نکنید. می توانید برای دادن فیدبک با مرکز به تماس شوید. تماس با این خطوط همه روزه از ساعت 7 صبح الی 11 شب امکان پذیر است.

نمبر تماس: **119** (تماس با موبایل و تلفون ثابت رایگان است).
ما به 200 لسان و همچنین لسان اشاره بریتانیایی پشتیبانی/خدمات ارائه می دهیم.

اگر توسط کدام دستگاه به شما آسیب رسیده، راپور دهی آن می تواند به دیگران کمک کند. لطفاً به این آدرس مراجعه شود.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. تست خود را انجام دهید.


5 نوار تست را از کیسه لاک و موم شده خارج کرده و آن را روی سطح صاف پاک قرار دهید.

هشدار


بعد از باز کردن بسته، تست را در طول 30 دقیقه شروع کنید.



6 تیوب را در نگهدارنده تیوب استخراج متصل شده به داخل باکس قرار دهید.

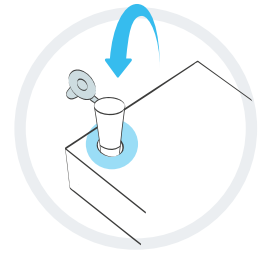


7 ساشه را با احتیاط بچرخانید یا بکشید. آن را از صورت خود دور نگاه داشته و باز کنید و احتیاط نمایید تا مایع نریزد.

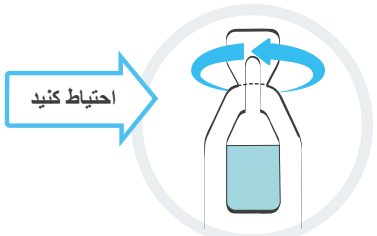

8 تیوب استخراج را باز کرده و تمام مایع ساشه را به آرامی به داخل تیوب فشار دهید.

احتیاط کنید که ساشه با بدنه تیوب تماس پیدا نکند. ساشه را در خریطه کثافات موجوده، قرار دهید.

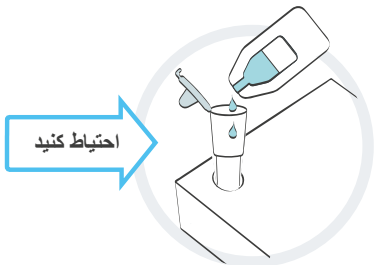

9 به آرامی در داخل یک دستمال کاغذی فین کنید و دستمال را به داخل خریطه کتافات سرپوش دار ببندازید.



اگر دارید از یک طفل تست می گیرید به او کمک کنید تا بینی خود را تخلیه کند. این کار برای آن است که از مخاط اضافی خلاص شوید.

10 مجدداً دستان خود را به مدت 20 ثانیه و با استفاده از صابون و آب گرم بشویید یا از ضدعفونی کننده دست استفاده نمایید.




اگر قصد دارید این آزمایش را بر روی شخص دیگری انجام دهید، شما باید هم دست های خود را بشویید و هم ضد عفونی کنید.


11 سواب موجود در بسته لاک و موم شده در جلوی شما است. نوک نرم و تکه ای آن را مشخص کنید.

هشدار

نوک نرم و تکه ای سواب را لمس نکنید.

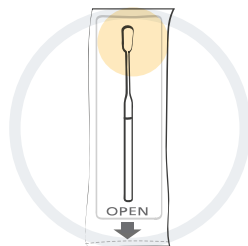

12 بسته بندی سواب را فقط وقتی باز کنید که آماده استفاده از آن هستید و سواب را به آرامی بیرون بیاورید.

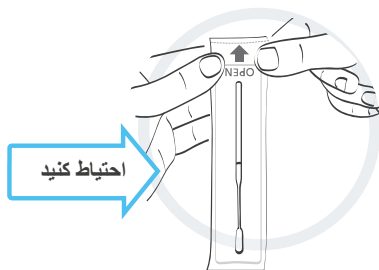

3. نمونه سواب خود را اخذ نمایید

هشدار

نوک پارچه ای سواب نباید با زبان، دندان ها، گونه ها، لثه ها یا هر سطح دیگری تماس پیدا کند. اگر با هر چیز دیگری تماس پیدا کند، ممکن است سمپل شما را خراب کند. هرگز نوک نرم و تکه ای سواب را با دستان خود لمس نکنید.


در صورت گرفتن تست از طفل کمتر از 12 سال یا شخصی که به کمک نیاز دارد، مراحل صفحه 11 را تعقیب کنید

13 دهان خود را به طور کامل باز کنید و نوک تکه ای سواب را روی هر دو لوزه (یا محل قبلی قرار داده شده آنها) بمالید.

این کار را طوری انجام دهید که هر طرف 4 بار به خوبی تماس پیدا کند (برای این کار از چراغ قوه یا آینه استفاده کنید). سواب را با دقت از انتهای گلو خارج سازید.

13


4 x

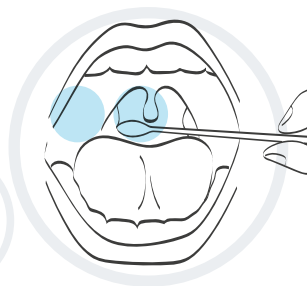

14 همان سواب را به آرامی در 1 سوراخ بینی داخل کنید تا زمانی که اندکی مقاومت را احساس نمایید (حدود 2.5 سانتی متر به داخل بینی).

2.5 سانتی متر

14

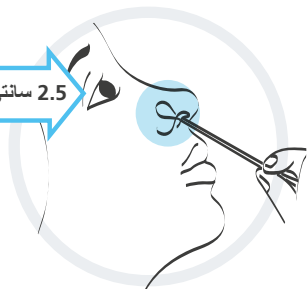


15 سواب را به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی حرکت داده و 10 دور کامل بچرخانید. نیازی نیست فشار دهید.

ممکن است این حالت ناراحت کننده باشد. در صورت احساس مقاومت یا درد شدید، سواب را بیشتر داخل ننمایید.

15

10 x

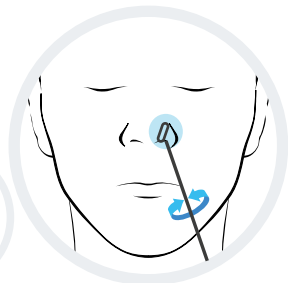

انجام آزمایش روی شخصی دیگر

اطفال کمتر از 12 سال باید توسط یک کلان سال تست شوند. در مورد طریقه آماده سازی و تست طفل یا شخصی که به کمک نیاز دارد، طرز العمل های ذیل را تعقیب کنید. می توانید فلم نمایش این کار را در آدرس ذیل تماشا کنید:

gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help


اگر قصد دارید از یک طفل تست بگیرید، جعبه تست را به او نشان داده و در مورد کارهایی که می خواهید انجام دهید با وی گپ بزنید. در صورت امکان او را روی زانوهای کس دیگری بنشانید یا از یک نفر بخواهید که دستهای وی را بگیرد. از طفل بخواهید در داخل دستمال دماغ خود را خالی کند. دستمال کاغذی را داخل خریطه کتافات سرپوش دار ببندازید.

سواب را در دست های خود بگیرید، از طفل بخواهید دهانش را کاملاً باز و سرش را به عقب خم کند. نوک تکه ای سواب را روی هر دو لوزه (یا محل قبلی قرار گیری آنها) بمالید.

این کار را طوری انجام دهید که به هر طرف 4 مرتبه کاملاً تماس پیدا کند. سواب را با احتیاط بیرون بیاورید.


13

4 x

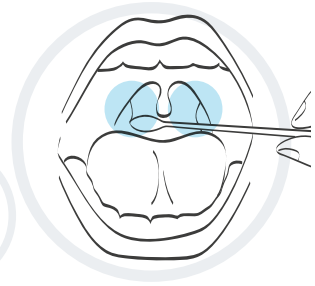

نوک تکه ای همان سواب را به آرامی در 1 سوراخ بینی او داخل کنید تا زمانی که اندکی مقاومت را احساس نمایید.

14

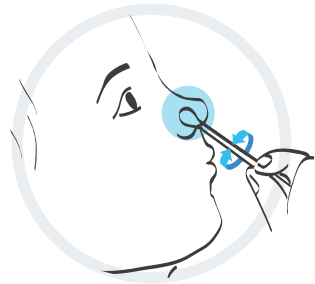


سواب را 10 مرتبه کامل به آرامی در اطراف داخل سوراخ بینی او بچرخانید.

اگر سواب را به لوزه ها نزده اید، سواب را به هر دو سوراخ بینی داخل کنید و در هر سوراخ 10 مرتبه به طور کامل بچرخانید.

15

10 x

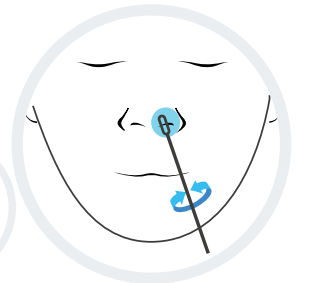


4. سمپل سواب را پروسس کنید

نکته


برای گرفتن بهترین عملکرد، پس از پاک کردن سوراخ بینی، در اسرع وقت سواب را تست کنید.

16 تیوب استخراج را بردارید و نوک تکه ای سواب را در داخل تیوب استخراج یعنی در داخل مایع قرار دهید.

نوک سواب را به لب داخلی تیوب استخراج فشار دهید و در همان موقع سواب را به مدت 15 ثانیه بچرخانید. این کار برای انتقال نمونه شما به داخل مایع صورت می گیرد.

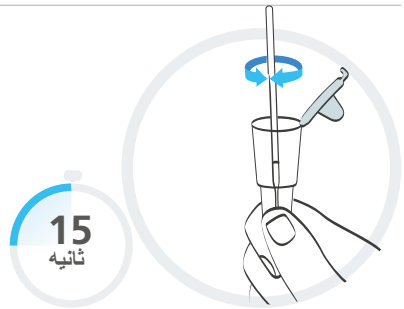

17 هنگام خارج کردن سواب، با انگشت های خود دیواره های تیوب استخراج را به سواب فشار دهید. مطمئن شوید که تمام مایع موجود در نوک نرم سواب را خارج کرده اید. سواب را در خریطه کثافات داده شده، قرار دهید.

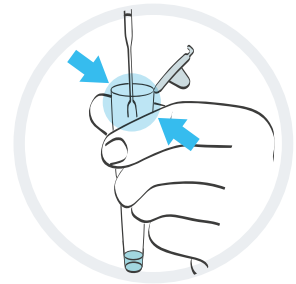


18 سرپوش تیوب استخراج را محکم فشار دهید تا از نشست آن جلوگیری شود.


توصیه



پس از اتمام این مرحله دستان خود را دوباره بشویید.

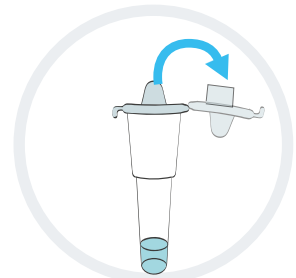


19 اطمینان حاصل کنید که کیت تست روی سطحی پاک و صاف قرار داشته باشد.
در طول تست نوار را حرکت ندهید.

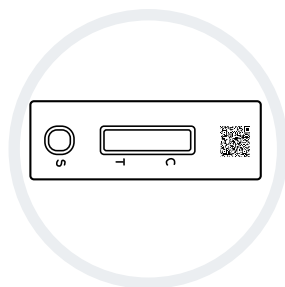


20 تیوب استخراج را به آرامی فشار دهید تا 2 قطره از مایع در داخل حفره سمپل (S) بر روی نوار تست بریزد.

مطمئن شوید که مایع را بریزد نه حباب هوا. ویال جمع آوری سمپل را به همراه سواب در خریطه کثافات قرار دهید.

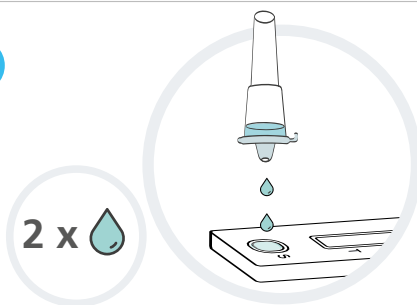

21 تایمر را تنظیم کنید و 30 دقیقه صبر کنید، سپس نتیجه را بخوانید.

نتیجه مثبت ممکن است بعد از 20 دقیقه یا کمی دیرتر معلوم شود، اما برای رکورد نتیجه منفی باید 30 دقیقه کامل صبر کنید چون ممکن است ظاهر شدن خط تست (T) به این میزان وقت طول بکشد.

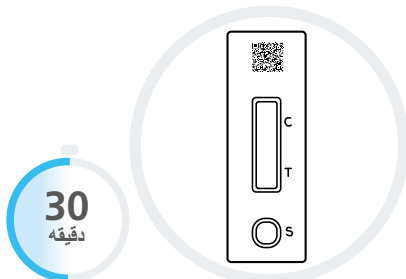

نحوه خواندن و راپوردهی نتیجه خود را در صفحه بعد مشاهده کنید. <<

5. نتیجه خود را بخوانید

نکته مهم




اجازه ندهید تست بیشتر از 30 دقیقه صورت بگیرد زیرا این کار باعث ابطال نتیجه می گردد.

نتیجه مثبت



دو خط ظاهر می شود. یک خط رنگی باید در قسمت خط کنترل (C)، و یک خط رنگی دیگر باید در قسمت خط تست (T) باشد.


وجود دو خط، یکی در کنار C و دیگری در کنار T، نشان دهنده آنست که تست مثبت است، حتی اگر کم رنگ باشد.

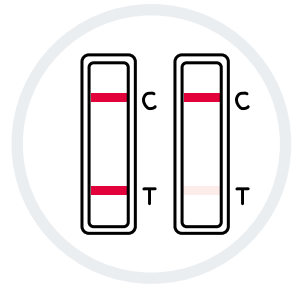

نکته مهم

در صورت مثبت بودن تست، شما و فامیل شما باید قرنطینه کردن خود را با مراعات طرز العمل های دولت انجام دهید:


[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

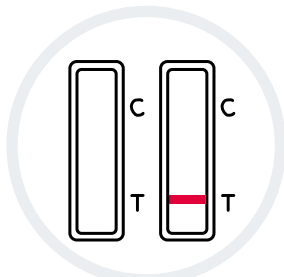

نتیجه نامعتبر



خط کنترل (C) دیده نمی شود.

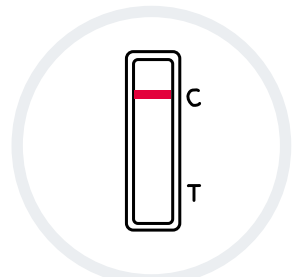

نتیجه منفی



یک خط ملون در قسمت خط کنترل (C) مشاهده می شود. هیچ خطی در قسمت خط تست (T) مشاهده نمی شود.

6. نتیجه خود را گزارش دهید

شما باید نتایج مثبت، منفی و نامعتبر خود را به NHS گزارش دهید.

ثبت تمام نتایج تست ها به دانشمندان کمک می کند تا شیوع ویروس جدید را تشخیص دهند و در مورد نحوه واکنش به آن توصیه ارائه کنند. اگر اشخاص تنها نتیجه مثبت را راپور دهند، آمار موارد مصاب، بیشتر از حد واقعی دیده می شود.

بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا نامعتبر باشد، شما مطمئن خواهید شد که معلومات NHS دقیق است.

به کد QR یا آیدی نمبر زیر آن برای راپور دهی نتیجه خود ضرورت دارید.

به صورت آنلاین گزارش بدهید (سریع ترین روش)

اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می کنید، به این آدرس بروید:

gov.uk/report-covid19-result

اگر در اسکاتلند زندگی می کنید، به این آدرس مراجعه نمایید:

covidtest.scot

یا با استفاده از تلفن گزارش دهید

با **119** به تماس شوید

تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح الی 11 شب امکان پذیر است (تماس با موبایل و تلفون ثابت رایگان است).



7. نتایج شما به چه معناست

فقط وقتی تست خود را به پایان رسانده اید که نتیجه خود را راپور داده باشید

نتیجه مثبت

اگر نتیجه مثبت بود، نشان می دهد که در حال حاضر به COVID-19 مصاب شده اید و این خطر وجود دارد که دیگران را نیز مصاب کنید. هنگامی که نتیجه خود را گزارش می دهید، معلومات بیشتری در مورد مراحل بعدی که باید انجام دهید در اختیارتان قرار می گیرد.

هشدار

شما، هرکسی که با شما زندگی می کند و هر کسی در حلقه حمایتی تان قرار دارد باید خود را مطابق با طرز العمل های ملی و محلی فعلی قرنطینه کنید، این طرز العمل ها در آدرس زیر قابل مشاهده است: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/

نتیجه منفی

اگر نتیجه منفی حاصل نمودید، به احتمال زیاد در زمانی که از شما تست گرفته شده شما مصاب نبوده اید. با این حال، نتیجه تست منفی تضمین نمی کند که COVID-19 نداشته باشید. اگر نتیجه تست شما منفی بود، باید قوانین و طرز العمل های ملی و محلی را رعایت کنید، از جمله شستن منظم دست ها، حفظ فاصله اجتماعی و در صورت لزوم استفاده از پوشش صورت. در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه جدید و بی وقفه یا از دست دادن یا تغییر در حس ذائقه یا بویایی، شما و فامیل تان باید خود را قرنطینه کرده و طبق طرز العمل ها لازم است تست دیگری را در این آدرس انجام دهید: gov.uk/get-coronavirus-test یا با مرکز تماس مشتریان به شماره 119 به تماس شوید. تماس با این خطوط همه روزه از ساعت 7 صبح الی 11 شب امکان پذیر است.

نتیجه نامعتبر



اگر نتیجه نامعتبر دریافت کردید، بدان معنی است که تست به درستی اجرا نشده است. باید از یک تست جریان جانبی دیگر از بسته استفاده کنید. از هیچ یک از اقلام تست اول مجدداً استفاده نکنید و پروسیجر تست را از مرحله 1 شروع نمایید.

اگر مشکل همچنان ادامه دارد

اگر مشکل همچنان موجود باشد، بلافاصله استفاده از کیت های تست را قطع کنید. اگر تست دیگری در اختیار ندارید، می توانید از طریق برنامه NHS COVID-19 یا با مراجعه به این آدرس، تست دیگری را اخذ نمایید: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) یا با مرکز تماس مشتریان به نمبر **119** به تماس شوید. تماس با این خطوط همه روزه از ساعت 7 صبح الی 11 شب امکان پذیر است.

عملکرد تست

8

اگر کسی دارای سطوح بالای ویروس کرونا (COVID-19) باشد، احتمال اینکه نتیجه تست مثبت شود، بیشتر می باشد. این به این معنا است که به احتمال زیاد اشخاصی که در حال حاضر مصاب هستند، شناسایی می شوند و باید بدون وقفه خود را قرنطینه کنند.

کیت تست خود را به شکل مصئون دور بیندازید

پس از تکمیل تست، تمام محتویات کیت تست استفاده شده را در خریطه کثافات موجوده، قرار دهید و آن را در پهلوی کثافات خانگی معمولی خود بگذارید. پس از دور انداختن آن، دستهایتان را به طور کامل بشویید.

9



کیت شما دارای اقلام ذیل است

بسته 7 تایی	بسته 3 تایی	اقلام
1	1	طرز العمل های استفاده (این فایل)
1	1	جعبه دارای سوراخ نگهدارنده تیوب
7	3	نوار تست در بسته لاک و موم شده
7	3	ساشه بافر استخراج
7	3	نگهدارنده تیوب استخراج
7	3	سواب در داخل بسته لاک و موم شده
7	3	خریظه کثافات
کد محصول TK2193	کد محصول TK2196	

تأمین این دستگاه تنها به عنوان بخشی از استقرار DHSC براساس برنامه تست و ردیابی NHS مجاز است.

تولید کننده: Department of Health and Social Care, 39 Victoria Street, Westminster, London, SW1 0EU



تولید شده براساس قرارداد خط با DHSC توسط: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 2F/3F/4F, No. 188, Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, 361026, P. R. China

فهرست سمبول ها

<p>حاوی ملزومات کافی برای تست xx</p>	<p>تولید کننده</p>	<p>استریل شده با استفاده از اکساید اتیلن</p>	<p>درجه 30 سانتی گراد</p> <p>در حرارت 2 - 30 درجه نگهداری شود</p> <p>2 درجه سانتی گراد</p>
<p>اگر بسته بندی آسیب دیده/خراب شده است از آن استفاده نکنید قابل بازیافت</p>	<p>دستگاه طبی تشخیصی درون تنی</p>	<p>تاریخ استفاده تا</p>	<p>نمبر لات</p>
	<p>مجدداً استفاده نشود</p>	<p>تاریخ تولید</p>	<p>دور از اشعه خورشید نگهداری گردد</p>
	<p>احتیاط</p>	<p>طرز العمل های استفاده را مراعات کنید</p>	<p>خشک نگهدارید</p>

تمام معلومات و تصاویر درج شده در این سند در تاریخ 18 ژوئن 2021 صحیح می باشد.

ورژن 1.3.4