


اقرأ كل هذا الدليل بعناية قبل أن تبدأ هذا الاختبار.
من الممكن أن يكون هذا الاختبار مختلف عن تلك الإختبارات التي استخدمتها من قبل.

الدليل الخاص بك خطوة بخطوة الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف) (جولد)

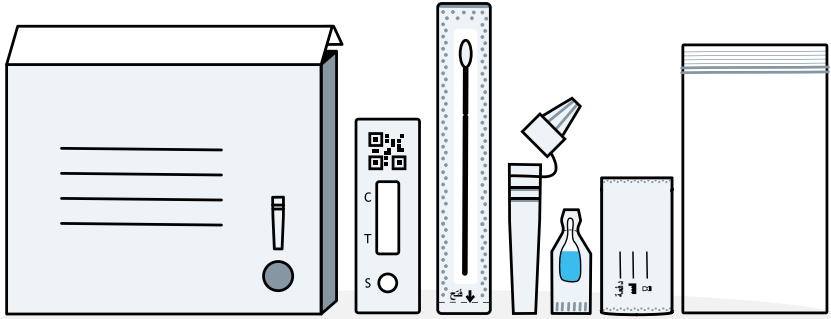

هذه التعليمات خاصة بكاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2 (مسحة الأنف) (جولد)، كود المنتج: COVID19AGVCGS7.
يوضح الدليل كيفية اختبار نفسك وطفلك أو شخص آخر لـ COVID-19، وكيفية الإبلاغ عن نتائجك.

تتوفر إصدارات اللغات البديلة وعروض الفيديو علي الرابط التالي:

gov.uk/covid19-self-test-help

أبلغ عن جميع نتائج الاختبارات الخاصة بك الي NHS

ماذا تحتاج أن تفعل



الدليل الخاص بك خطوة بخطوة

اقرأ التعليمات واتبع الخطوات بالترتيب الصحيح. يستغرق إعداد كل اختبار حوالي 15 دقيقة و سوف تكون النتائج جاهزة في غضون 10 دقائق.

6 صفحة	1	جهز منطقة الاختبار الخاصة بك وقم بفحص محتويات مجموعة الاختبار الخاصة بك
8 صفحة	2	جهز الاختبار الخاص بك
10 صفحة	3	خذ عينة المسحة الخاصة بك
12 صفحة	4	معالجة عينة المسحة
14 صفحة	5	اقرأ النتيجة الخاصة بك
15 صفحة	6	أبلغ عن النتيجة الخاصة بك
16 صفحة	7	ماذا تعني النتائج الخاصة بك
17 صفحة	8	أداء الاختبار
17 صفحة	9	تخلص من اختبارك بطريقة آمنة

حوالي 1 من 3 أشخاص مصابين COVID-19 لا يعرفون أنهم مصابين بهذا المرض.

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)

نصيحة تتعلق بإجراء هذا الاختبار

إرشادات التخزين والتعامل

- يحفظ في عبوة في درجة حرارة الغرفة (2-30 درجة مئوية). لا تجمد.
- يجب استخدام المجموعة في غرفة درجة حرارتها ما بين (15 درجة مئوية الي 30 درجة مئوية). إذا تم تخزين المجموعة في مكان بارد (أقل من 15 درجة مئوية)، اتركها في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة 20 دقيقة قبل الاستخدام.
- استخدم مجموعة اختبار منفصلة لكل شخص. يمكنك استخدام كل عنصر في مجموعة الاختبار مرة واحدة فقط. لا تعيد استخدام العناصر. ستحتاج الي الإبلاغ عن نتيجة كل شخص.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في يديك أو الرؤية، قد تحتاج الي شخص ما ليساعدك في عملية المسح والاختبار.
- إذا كان لديك ثقب في الأنف، يجب عليك إزالة الثقب قبل إجراء الاختبار.
- تجنب استخدام العينات المخلوطة بالدم. إذا كنت قد تعرضت لنزيف في الأنف خلال الـ 24 ساعة السابقة، يجب عليك الانتظار 24 ساعة قبل إجراء الاختبار.
- لا تلمس رأس المسحة عند التعامل مع المسحة.
- تجنب لمس مجموعة الاختبار ومنطقة شاشة النتائج حيث يتم إضافة العينة.

تحذير

- لا تستخدم بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. رجاء اتباع تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود علي الصندوق.
 - يجب ان يظل الكاسيت داخل الحقيبة المحكمة الإغلاق حتي يصبح جاهزا للاستخدام.
 - تم تصميم مجموعات الاختبار للاستخدام الأدمى فقط.
 - لا تستخدم أي بخاخات للأنف قبل الاختبار بـ 15 دقيقة.
 - لم يتم تصنيع المنتج من لاتكس المطاط الطبيعي، ومع ذلك أن وجود أو آثار لاتكس المطاط الطبيعي في المنتج كما تم تسليمه الي المستخدم النهائي لا يمكن تجاهله نهائيا.
- اتبع هذه التعليمات بعناية، قد يكون هذا الاختبار مختلفا عن ذلك الاختبار التي استخدمته من قبل.

حول هذا الاختبار

لماذا يجب ان تقوم بإجراء الاختبار الذاتي

مجموعة الاختبار الذاتي لـ COVID-19 هي عبارة عن اختبار مسحة للأنف. يمكن استخدام هذا الاختبار للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، ومع ذلك يجب عليك اتباع الإرشادات الوطنية للتحقق من نوع الاختبار المناسب لك.

إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية، يجب عليك:

- أن تساعد في الحد من انتشار المرض، يجب عليك وعلي أسرتك اتباع الإرشادات الوطنية الحالية: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- عليك بارشاد الأشخاص الذين كنت علي اتصال وثيق بهم أو الأماكن التي قمت بزيارتها في الـ 48 ساعة الأخيرة قبل بداية ظهور الأعراض، أو من اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة التحليل الإيجابية في حالة عدم وجود أعراض، لإجراء اختبار احتمالية أصابهم بفيروس COVID-19. اتبع دائما الاجراءات المحلية و الوطنية.

إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 سلبية

من المحتمل انك لم تكون معديا وقت إجراء الاختبار. ومع ذلك، فإن النتيجة السلبية للاختبار لا تضمن عدم أصابتك بفيروس كورونا. يجب عليك الإستمرار في اتباع الإرشادات الحكومية.

نصيحة

لا تتأخر في الحصول على المساعدة، إذا كنت تشعر بالقلق. ثق دائما في غرائزك.

إذا كانت لديك أعراض COVID-19 أو أصبت بفيروس COVID-19، رجاء اتباع الإرشادات الخاصة بـ NHS:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)

إذا كانت لديك أعراض COVID-19 وحالتك تتسوء، أو لا تشعر بالتحسن بعد سبعة أيام، عليك استخدام خدمة فيروس كورونا عبر الإنترنت NHS 111 111.nhs.uk

إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت اتصل NHS 111.

للطوارئ الطبية، اتصل 999.

يمكنك الحصول على المزيد من النصائح عن أعراض COVID-19 للأطفال في الرابط التالي:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/)

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)

أبلغ عن جميع نتائج الاختبارات الخاصة بك الى NHS

لمن يناسب هذا الأختبار




الأطفال تحت سن 12 عاما

يجب على الشخص البالغ إجراء الاختبار للأطفال تحت سن 12 عاما. لا تقوم بإجراء هذا الأختبار إذا كنت تشعر بعدم الارتياح تجاه اختبار الطفل. لا تستمر في الاختبار إذا شعر الطفل بعدم راحة أو ألم شديد.



المراهقون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-17 عاما

الاختبار الذاتي والأبلاغ تحت إشراف البالغين. يمكن للشخص البالغ إجراء الاختبار، عند الضرورة.

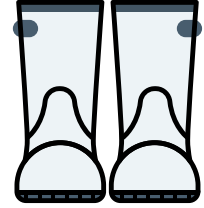

البالغين +18

الاختبار الذاتي والأبلاغ، بالمساعدة إذا لزم الأمر.

كم مرة يمكنك إجراء الاختبار

قد يختلف عدد مرات الاختبار طبقا لظروفك و الإرشادات المحلية أو الوطنية.

أين يمكنك الحصول على دعم إضافي

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن الاختبار الذاتي في: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

يشير كتيب التعليمات الى كاسيت اختبار أنتيجن السريع SARS-CoV-2 (مسحة الأنف) (جولد) فقط، كود المنتج: COVID19AGVCGS7.

كود المنتج: COVID19AGVCGS7

1. جهاز مكان اختبارك

هام



يجب استخدام المجموعة في غرفة درجة حرارتها ما بين (15 درجة مئوية الي 30 درجة مئوية). إذا تم تخزين المجموعة في مكان بارد (أقل من 15 درجة مئوية)، أتركها في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة 20 دقيقة قبل الاستخدام.

ستحتاج الي: مؤقت (مثل ساعة أو منبه)، مناديل ورقية، معقم لليدين أو صابون ومياه دافئة.


15
دقيقة



لا تستخدم أي بخاخات للأنف لمدة 15 دقيقة قبل إجراء الاختبار

1 اقرأ تعليمات هذا الدليل بعناية.

1

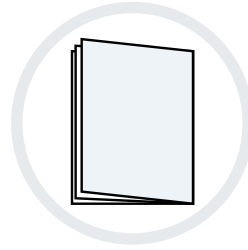

2 طهر و نظف و جفف سطحاً مستويًا علي الفور قبل البدء في اجراء الاختبار.

2



3 قم بغسيل يديك جيدا لمدة 20 ثانية، باستخدام الصابون والمياه الدافئة أو معقم اليدين.

3




يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)

أبلغ عن جميع نتائج الاختبارات الخاصة بك الي NHS


تحقق من محتويات المجموعة الخاصة بك

4

يجب ان تجد التالي في صندوق الاختبار الخاص بك:

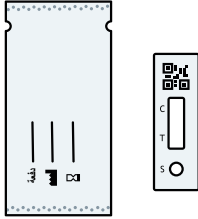


كاسيتات الاختبار داخل أكياس محكمة الأغلاق

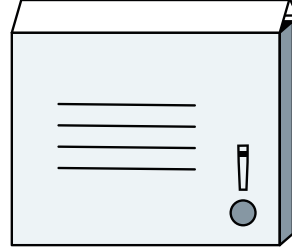


الصندوق الخارجي مع حامل الأنبوب



مسحات

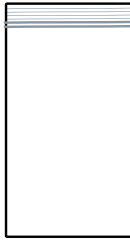

أكياس نفايات بلاستيكية

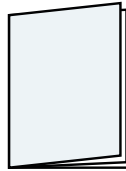

تعليمات الاستخدام
(هذا الكتيب)



أنابيب استخراج



أكياس السوائل
قوارير استخلاص
عازلة

نصيحة

ماذا تفعل في حالة تلف شيء ما أو كسره أو فقده

إذا لاحظت تلف، كسر أو فقد أي شيء، رجا عدم استخدام مجموعة الاختبار. يمكنك تقديم التغذية المرجعية عن طريق الاتصال بمركز اتصال العملاء. الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساء.

اتصل: **119** (مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية).
نحن نقدم الدعم بعدد 200 لغة و لغة الإشارة البريطانية.

إذا تعرضت للإصابة بواسطة جهاز، قم بإبلاغ:


coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. جهاز الاختبار الخاص بك


5 أخرج كاسيت الاختبار من الكيس المحكم الإغلاق وضعه علي سطح مستو ونظيف.

تحذير

بمجرد فتح الكيس، يجب الاستخدام خلال 1 ساعة، أو سيصبح الاختبار لاغي. تخلص من الكاسيت ومحتويات الكيس التي كانت خارج الكيس المحكم الإغلاق مدة تزيد عن 1 ساعة.

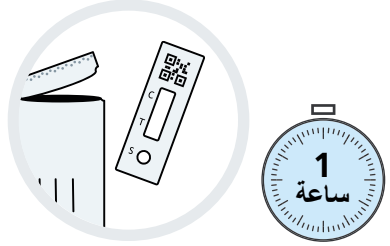

6 ضع أنبوب الاستخراج داخل حامل أنبوب الاستخراج (منطقة مفرغة دائرية علي غطاء الصندوق) من أجل تجنب سكب السائل.

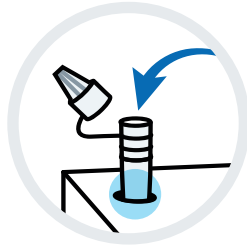

7 لف بعناية لفتح كيس السائل. أفتح الكيس بعيدا عن وجهك وكن حذرا لكي لا تسكب أي من السائل.

تحذير

يحتوي عازل الاستخراج مواد قد تسبب تهيجا اذا لامست الوجه أو الجلد. إذا لامس المحلول الجلد أو العين، قم بغسلهما بالكثير من الماء. إذا حدث تهيج في الجلد، رجاء طلب العناية الطبية.



8 أفتح أنبوب الاستخراج وأضغط برفق علي كل السائل من الكيس الي داخل الأنبوب.

احترس و ضع كيس السائل الفارغ داخل كيس النفايات البلاستيكية الموفرة.



يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)

أبلغ عن جميع نتائج الاختبارات الخاصة بك الي NHS

9 انفخ أنفك برفق داخل منديل ورقي ثم تخلص من المنديل الورقي في سلة مغلقة.

إذا كنت تساعد شخصا آخر أو تقوم بإجراء الاختبار لطفل، ساعده علي نفخ أنفه ثم تخلص من المنديل بعيدا في سلة مغلقة.



10 اغسل يديك جيدا مرة أخرى لمدة 20 ثانية مستخدما الصابون والمياه الدافئة أو استخدم المعقم.


إذا كنت تساعد شخصا آخر أو تجري اختبار لطفل، ساعده علي غسيل يديه.




11 ابحث عن المسحة داخل الغلاف المحكم الإغلاق الموجود أمامك. حدد طرف القماش الناعم.

هام

لا تلمس طرف القماش الناعم من المسحة. إذا تم لمس طرف القماش الناعم للمسحة، تخلص من المسحة.

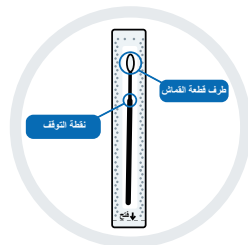

12 انزع الغلاف لفتح عبوة المسحة برفق من الطرف الآخر، عندما تكون فقط جاهزا لاستخدامها.

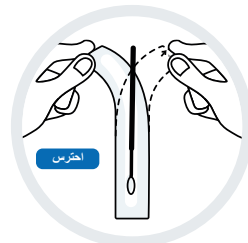

3. خذ عينة المسحة الخاصة بك


إذا كنت تختبر شخصا آخر، رجاء الرجوع الى التعليمات الواردة في صفحة رقم 11.

هام

يجب إجراء الاختبار باستخدام عينة الأنف فقط.


أدخل طرف القماش للمسحة داخل فتحة انف واحدة فقط (تقريبا 1.5 سم داخل أنفك).

13

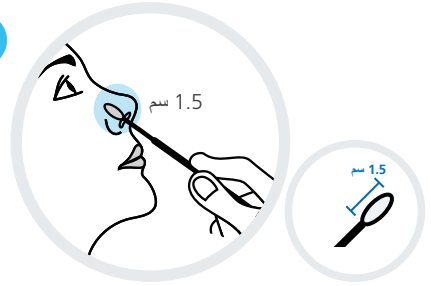

امسح المسحة برفق حول فتحة انفك من الداخل في حركة دائرية 5 مرات على الأقل لمدة 5 ثواني.


14

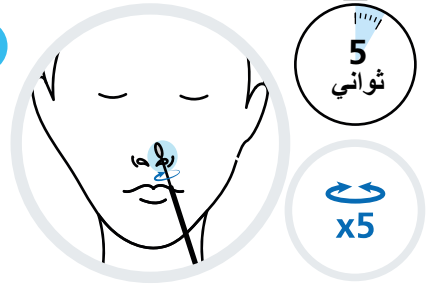

أنزع المسحة ببطء. ليست هناك حاجة لاستعمال القوة ولا يجب عليك الدفع بعيدا في فتحة أنفك. لا تعيد المسحة إلى العبوة الورقية الأصلية.

باستخدام نفس المسحة، ضع الطرف القماش للمسحة داخل فتحة الأنف الأخرى فقط (1.5 سم تقريبا داخل أنفك).

15

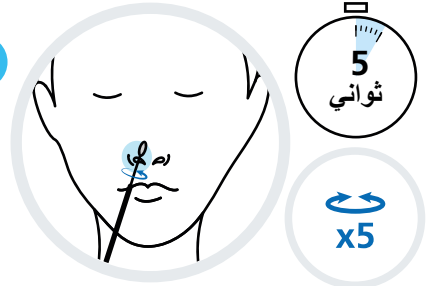

امسح المسحة برفق حول فتحة الأنف في حركة دائرية 5 مرات على الأقل لمدة 5 ثواني.

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الى كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)

إجراء الاختبار على شخص آخر


نصيحة

يجب إجراء الاختبار للأطفال تحت سن 12 عاما بواسطة شخص بالغ. اتبع الإرشادات أدناه حول كيفية تحضير واختبار الطفل. يمكنك مشاهدة فيديو توضيحي علي الرابط

gov.uk/covid19-self-test-help


إذا كنت تجري الاختبار لطفل، بين له مجموعة الاختبار وتحدث معه عن ماذا تنوي فعله. إذا كان في الإمكان، أجلسه في حضن شخص ما أو يقوم شخص ما بمسك يديه.

13

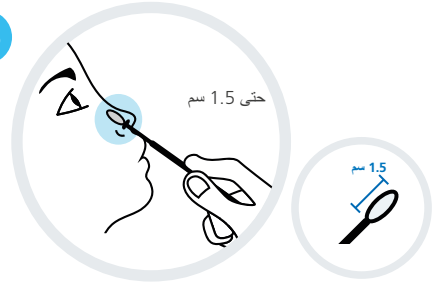


أدخل طرف النسيج الخاص بالمسحة داخل فتحة أنفه فقط (حتى 1.5 سم)، أو حتى تشعر بمقاومة. امسح المسحة برفق حول الجزء الداخلي لفتحة الأنف في حركة دائرية 5 مرات لمدة لا تقل عن 5 ثواني. أزرع المسحة ببطء. ليست هناك حاجة لاستعمال القوة ولا يجب عليك الدفع بعيدا في فتحة أنفه. لا تعيد المسحة إلى العبوة الورقية الأصلية.

14

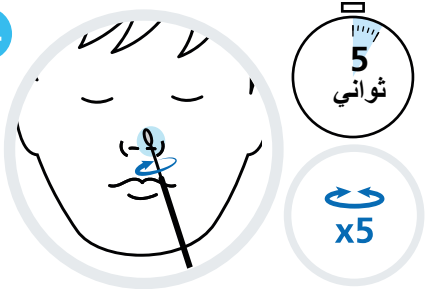

باستخدام نفس المسحة، ضع طرف القماش للمسحة داخل فتحة أنفه الأخرى (حتى 1.5 سم) أو حتى تشعر بمقاومة. امسح المسحة برفق حول الجزء الداخلي لفتحة الأنف في حركة دائرية 5 مرات لمدة لا تقل عن 5 ثواني.

15

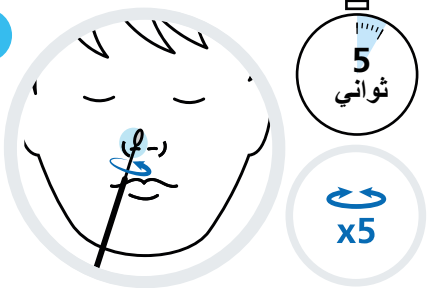


كود المنتج: COVID19AGVCGS7

4. معالجة عينة المسحة

معلومة

للحصول على أفضل أداء، اختبر المسحة في أسرع وقت بعد الحصول على العينة.


16 التقط أنبوب الاختبار ثم ضع طرف قماش المسحة داخل أنبوب الاستخراج، بحيث يكون طرف القماش في السائل. اضغط على رأس المسحة بقوة في اتجاه داخل جسم الأنبوب عن طريق الضغط على أسفل الأنبوب بإبهامك وأصابعك. أثناء الضغط، قم بتدوير المسحة لمدة 10 ثواني على الأقل.

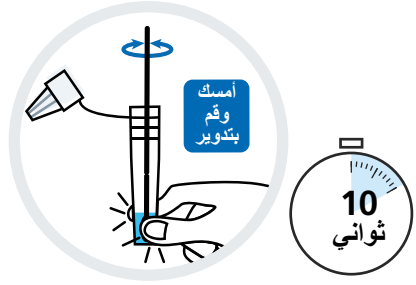

17 ارفع مسحة الأنف قليلاً ثم اكسر المسحة في وضع "نقطة التوقف". اترك رأس المسحة داخل أنبوب الاستخراج. ضع مقبض المسحة داخل شنطة النفايات البلاستيكية الموفرة.




18 ثبت غطاء الفطارة بإحكام على الجزء العلوي من أنبوب الاستخراج.

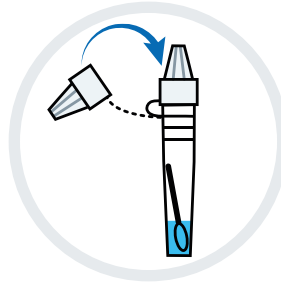

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)


تأكد من أن كاسيت الاختبار على سطح نظيف ومستو.
لا تحرك الكاسيت أثناء الاختبار.

19

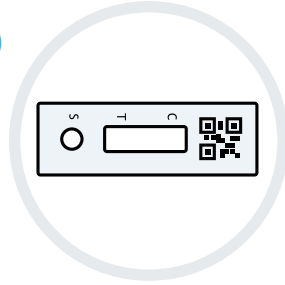


إضغط برفق على أنبوب الاستخراج لوضع 3 نقاط من
السائل داخل بئر العينة (S) على شريط الاختبار.
تأكد من أنك تقوم بإلقاء السائل وليس فقاعة هواء.
ضع أنبوب الاستخراج داخل شنطة النفايات البلاستيكية.

20

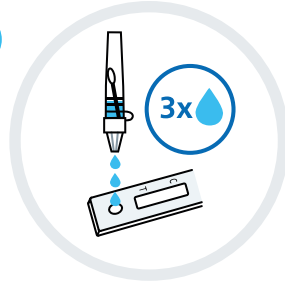

شغل المؤقت وانتظر لمدة 10 دقائق قبل قراءة النتيجة.
لا تحرك الاختبار بعد تشغيله. إشرح النتيجة بعد 10
دقائق. لا تقرأ النتيجة بعد مرور 20 دقيقة.
يجب أن تنتظر فترة ظهور النتيجة البالغة 10 دقائق كاملة
قبل قراءة نتيجة اختبارك.

21

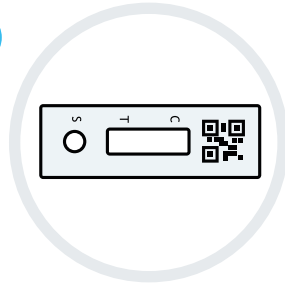

كود المنتج: COVID19AGVCGS7

5. اقرأ النتيجة الخاصة بك

هام

لا تترك الاختبار لكي يظهر لمدة أكثر من 20 دقيقة. هذا سيجعل الاختبار باطلا.



انتظر لمدة 10 دقيقة لقراءة النتيجة.




نتيجة إيجابية



يظهر خطان. ينبغي أن يكون خط ملون واحد في منطقة تحكم الخطوط (C)، وخط ملون آخر ينبغي أن يكون في منطقة اختبار الخط (T)


خطان، احدهما بجانب C و الآخر بجانب T، تكون نتيجة الاختبار إيجابية حتى لو كان الخطان باهتان.

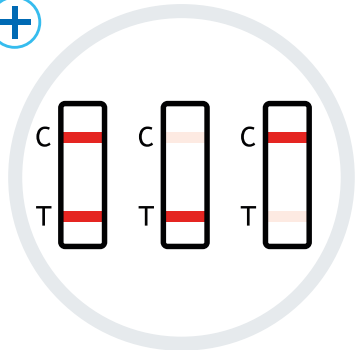

هام

إذا كانت النتيجة إيجابية، يجب عليك عزل نفسك ويجب علي أسرتهك اتباع الشروط الحكومية بشأن العزل الذاتي:


[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

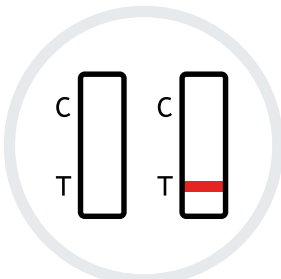

نتيجة باطلة



فشل خط التحكم (C) في الظهور.

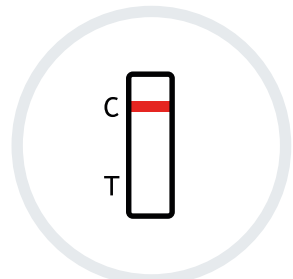

نتيجة سلبية



خط واحد ملون يظهر في منطقة تحكم الخط (C). لا يظهر خط في منطقة اختبار الخط (T).

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع 2-SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)


أبلغ عن جميع نتائج الاختبارات الخاصة بك الي NHS

6. أبلغ عن النتيجة الخاصة بك

يجب عليك الإبلاغ عن نتائج الإيجابية، السلبية أو الباطلة الى NHS

يساعد تسجيل جميع نتائج الاختبارات علي اكتشاف حالات تفشي الفيروس الجديدة و كيفية التعامل معها.

إذا أبلغ الأشخاص عن الحالة الإيجابية فقط، سوف تبدو معدلات الحالة أعلى مما هي عليه فعليا. لذلك حتي ولو كانت نتيجتك سلبية أو باطلة، يجب عليك التأكد من أن المعلومات الخاصة ب NHS دقيقة. أنت بحاجة الي رمز QR، أو رقم بطاقة الهوية للإبلاغ عن نتيجتك.

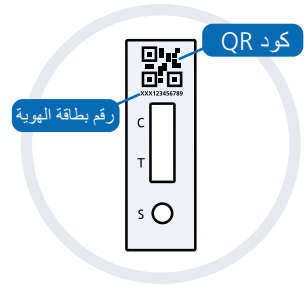

عليك الأبلغ عبر الإنترنت (أسرع)
إذا كنت تعيش في إنجلترا، ويلز أو شمال أيرلندا، قم بزيارة:
gov.uk/report-covid19-result

إذا كنت تعيش في سكتلندا، قم بزيارة: covidtest.scot



أو يمكنك الأبلغ بالهاتف.

إذا لم تتمكن من إبلاغ نتيجتك عبر الإنترنت، أتصل
برقم **119** (مجانا من الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية).
الخطوط مفتوحة كل يوم. من 7 صباحا الي 11 مساء.



كود المنتج: COVID19AGVCGS7

7. ماذا تعني النتائج الخاصة بك

تكون قد استكملت أختبارك، عند قيامك بالإبلاغ عن نتيجتك

نتيجة ايجابية



إذا كانت نتيجتك ايجابية، من المحتمل أن تكون مصاب حاليا ب COVID-19، وتخطر بعدوي الآخرين. يجب أن تقوم بعزل نفسك. عندما تقوم بالإبلاغ عن النتيجة الخاصة بك سوف يتم تزويدك بمزيد من المعلومات عن الخطوات التالية التي يجب إتخاذها.

تحذير

يجب عليك وأي شخص يعيش معك، اتباع الارشادات الوطنية و المحلية الحالية. يمكن العثور علي هذه الإرشادات في:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

نتيجة سلبية



إذا حصلت علي نتيجة سلبية، فمن المحتمل أنك لم تكن معديا وقت إجراء الاختبار. ومع ذلك، فإن النتيجة السلبية للاختبار، لا تعد ضمانة علي عدم أصابتك بفيروس COVID-19.

إذا كان الاختبار سلبيا، يجب عليك مواصلة اتباع القواعد و الإرشادات الوطنية و المحلية، متضمنا ذلك غسل اليدين بانتظام، و التباعد الاجتماعي و إرتداء أغطية الوجه عند الإقتضاء.

إذا ظهرت عليك أعراض الفيروس، يجب عليك عزل نفسك والحصول على الاختبار الحالي الموصى به في: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) أو بواسطة الاتصال بمركز اتصال العملاء رقم 119. الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساء.

يجب عليك أنت و أهلك اتباع الإرشادات الوطنية.

نتيجة باطلة



إذا حصلت على نتيجة باطلة، فهذا يعني أن الاختبار لم يعمل بشكل صحيح ولا يمكن القول إذا كنت مصابا بالفيروس عند إجراء الاختبار. تحتاج الى استخدام اختبار آخر من العبوة في أسرع وقت ممكن. لا تعيد استخدام أي شيء من الاختبار الأول، وابدأ إجراءات الاختبار من الخطوة رقم 1.

إذا استمرت المشكلة، توقف عن استخدام مجموعة الاختبار فوراً. أطلب حزمة جديدة من مجموعات الاختبار عن طريق زيارة: gov.uk/get-coronavirus-test ، من خلال تطبيق NHS COVID-19 او الاتصال بمركز اتصال العملاء على الرقم 119. الخطوط متاحة يوميا، من الساعة 7 صباحا الي الساعة 11 مساء.

8. أداء الاختبار

من المحتمل جدا أن يعطي الاختبار نتيجة ايجابية اذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من فيروس كورونا (COVID-19). يعني هذا أنه من المحتمل جدا اكتشاف الأشخاص المصابين حاليا وفي حاجة الي العزل الذاتي فوراً.

9. تخلص من اختبارك بطريقة آمنة



بمجرد اكتمال الاختبار، ضع جميع المحتويات المستخدمة في كيس النفايات المتوفر ثم ضعه في النفايات المنزلية العامة.

أغسل يديك جيدا بعد التخلص منها.

المعلومات الواردة في هذا الكتيب صحيحة اعتبارا من (29 سبتمبر 2021).

كود المنتج: COVID19AGVCGS7

أسم المنتج: كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف) (جولد)

دون نتائج الاختبار الخاصة بك

هذا لسجلاتك الخاصة. لا يزال عليك أن تبلغ نتائجك الي NHS (أنظر صفحة رقم 15 للمعلومات).

عليك زيارة: gov.uk/report-covid19-result

إذا كنت تعيش في سكوتلاندا، قم بزيارة: covidtest.scot

من أجرى الاختبار	التاريخ	الوقت	نتيجة الاختبار

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)

أبلغ عن جميع نتائج الاختبارات الخاصة بك الي NHS

تحتوي المجموعة الخاصة بك علي المواد التالية ذكرها

البنود	7-عبوات
تعليمات للاستخدام (هذا الكتيب)	1
كاسيتات الاختبار داخل أكياس محكمة الأغلاق	7
أكياس السوائل (قوارير استخلاص عازلة)	7
أنابيب استخراج	7
مسحات	7
أكياس نفايات بلاستيكية	7

ملخص لمزيد من المعلومات

<p>gov.uk/covid19-self-test-help</p>	<p>دعم إضافي للاختبار الذاتي إصدارات اللغات البديلة وعروض الفيديو إرشادات لإعداد واختبار الطفل</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/</p>	<p>إرشادات حول معلومات العزل الذاتي والعلاج</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19</p>	<p>إرشادات NHS حول COVID-19</p>
<p>111.nhs.uk أو اتصل بـ NHS 111 إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت</p>	<p>إذا كانت لديك أعراض COVID-19 وحالتك تسوء، أو لا تشعر بالتحسن بعد سبعة أيام، عليك استخدام خدمة فيروس كورونا عبر الإنترنت NHS 111:</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children</p>	<p>أعراض COVID-19 لدى الأطفال</p>
<p>coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</p>	<p>إذا تعرضت للإصابة بواسطة جهاز، قم بإبلاغ</p>
<p>gov.uk/report-covid19-result</p>	<p>أبلغ النتيجة عبر الإنترنت (إنجلترا، ويلز أو أيرلندا الشمالية):</p>
<p>covidtest.scot</p>	<p>أبلغ النتيجة عبر الإنترنت (سكوتلندا):</p>
<p>gov.uk/get-coronavirus-test</p>	<p>اطلب الاختبار الحالي الموصى به</p>
<p>اتصل برقم 119</p>	<p>شئ ما تالف، مكسور أو مفقود دعم اللغة (متضمنا لغة الإشارة البريطانية) أبلغ نتيجتك (إذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت)</p>

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)

يسمح بتوفير هذا الجهاز فقط كجزء من قسم الرعاية الصحية والاجتماعية (DHSC) التابع لبرنامج الاختبار والتتبع الخاص ب NHS.



الصانع:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
Derby, DE1 3QB, United Kingdom (المملكة المتحدة)



معلومات المسحة:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020
Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China (الصين)
أو



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (الصين)



الرموز

لا تستخدم المنتج عندما
تكون العبوة تالفة



تعليم باستخدام
أكسيد الإيثيلين



30°C
2°C
خزن في درجة
حرارة ما بين 2
إلى 30 درجة مئوية



راجع قسم "نصائح
حول إجراء الاختبار"
للحصول علي إرشادات
وتحذيرات عامة



جهاز طبي
للتشخيص في المختبر



تاريخ انتهاء
الصلاحية



رقم الدفعة



لا تعيد الاستخدام



يحتوي على
ما يكفي لـ 7
اختبارات



راجع
تعليمات
الاستخدام



رقم الكتالوج



الإصدار رقم 5 تاريخ سريان 29/09/2021
تتعلق تعليمات الاستخدام بكاسيت اختبار أنتيجن السريع SARS-CoV-2 (مسحة الأنف) (جولد)، الصانع:
SureScreen Diagnostics وكود المنتج: COVID19AGVCGS7

يشير هذا الكتيب الخاص بالتعليمات الي كاسيت اختبار أنتيجن السريع SureScreen SARS-CoV-2 (مسحة الأنف)(جولد)