


Darllenwch y canllaw cyfan yn ofalus cyn dechrau'r prawf.

Efallai y bydd y prawf yma'n wahanol i'r rhai a ddefnyddioch yn flaenorol.

Eich canllaw cam wrth gam i'r Casét Prawf Cyflym Antigenau SureScreen SARS-CoV-2 (Swab Trwynol) (Aur)

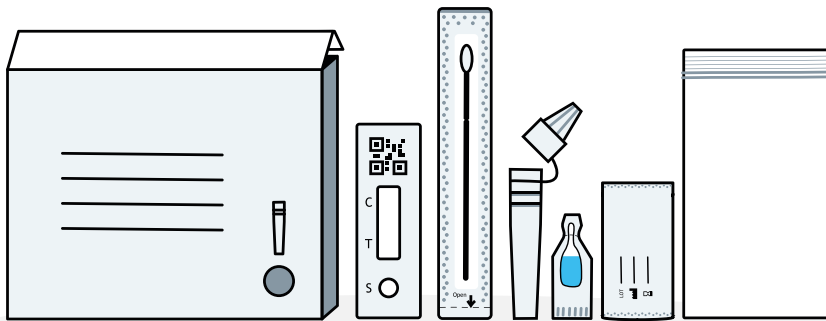

Mae'r cyfarwyddiadau hyn ar gyfer y Casét Prawf Cyflym Antigenau SARS-CoV-2 (Swab Trwynol) (Aur) SureScreen Diagnostics, Cod Cynnyrch: COVID19AGVCG57. Mae'r canllaw yn esbonio sut i brofi eich hun, eich plentyn neu unigolyn arall am y COVID-19, a sut i adrodd eich canlyniadau.

Mae fersiynau ar gael mewn ieithoedd eraill, ynghyd ag arddangosiadau fideo ar: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Adroddwch eich holl ganlyniadau prawf i'r GIG

Beth sydd angen i chi ei wneud

Eich canllaw cam wrth gam

Darllenwch trwy'r cyfarwyddiadau'n ofalus a dilyn y camau yn y drefn gywir. Mae pob prawf yn cymryd tua 15 munud i baratoi a bydd y canlyniadau'n barod ar ôl 10 munud.



1	Paratoi lle ar gyfer eich prawf a gwirio cynnwys eich pecyn prawf	tudalen 6
2	Paratoi eich prawf	tudalen 8
3	Cymryd eich sampl swab	tudalen 10
4	Prosesu'r sampl swab	tudalen 12
5	Darllen eich canlyniad	tudalen 14
6	Adrodd am eich canlyniad	tudalen 15
7	Beth mae eich canlyniadau'n ei olygu	tudalen 16
8	Perfformiad y Prawf	tudalen 17
9	Gwaredu'ch pecyn prawf yn ddiogel	tudalen 17

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â COVID-19 yn gwybod ei fod ganddynt.

Cyngor ar gymryd y prawf

Canllaw Storio a Thrin

- Storiwch fel y mae wedi ei becynnu ar dymheredd ystafell (2-30°C). Peidiwch â'i rewi.
- Dylech ddefnyddio'r pecyn ar dymheredd ystafell (15°C i 30°C). Os yw'r pecyn wedi'i storio mewn lle oer (dan 15°C), gadewch ef ar dymheredd ystafell am 20 munud cyn ei ddefnyddio.
- Defnyddiwch becyn ar wahân ar gyfer pob unigolyn. Dim ond unwaith y gallwch ddefnyddio pob eitem yn y pecyn prawf. Peidiwch ag ail-ddefnyddio'r eitemau. Bydd angen i chi adrodd canlyniad pob unigolyn.
- Os oes gennych broblemau gyda'ch dwylo neu'ch golwg, efallai y bydd angen cymorth rhywun arall arnoch gyda'r broses swabio a phrofi.
- Os ydych chi wedi tyllu'ch trwyn, tynnwch y darn cyn cyflawni'r prawf.
- Peidiwch â defnyddio samplau gwaedlyd. Os ydych chi wedi cael gwaedlif o'r trwyn o fewn y 24 awr diwethaf, dylech aros 24 awr cyn gwneud prawf.
- Peidiwch â chyffwrdd blaen y swab wrth ei drin.
- Dylech osgoi cyffwrdd â chit y prawf ac ardal y ffenestr canlyniadau ble mae'r sampl yn cael ei roi.

Rhybuddion

- Peidiwch â defnyddio tu hwnt i'r dyddiad dod i ben. Dilynwch y dyddiad dod i ben ar y blwch.
- Dylai'r casét aros yn y pecyn wedi ei selio nes byddwch yn barod i'w ddefnyddio.
- Dim ond at ddefnydd dynol y mae'r pecynnau prawf hyn wedi'u cynllunio.
- Peidiwch â defnyddio unrhyw chwistrell trwyn am 15 munud cyn profi.
- Nid yw'r cynnyrch wedi ei greu gyda latecs rwber naturiol, fodd bynnag ni ellir eithrio presenoldeb neu olion latecs rwber naturiol yn y cynnyrch fel y mae wedi ei ddarparu i'r defnyddiwr terfynol yn llwyr.

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus, efallai y bydd y prawf yma'n wahanol i'r rhai a ddefnyddioch yn flaenorol.

Cod Cynnyrch: COVID19AGVCGS7

Ynglŷn â'r prawf hwn

Pam ddylech chi wneud hunan-brawf

Mae'r pecyn hunan-brawf COVID-19 yma yn brawf swab ar gyfer y trwyn. Gall pobl heb unrhyw symptomau ei ddefnyddio, fodd bynnag, dylech ddilyn canllawiau cenedlaethol i wirio pa fath o brawf sy'n addas i chi.

Os byddwch yn derbyn canlyniad positif ar gyfer COVID-19 dylech:

- helpu cyfyngu ar ledaeniad y clefyd, dylech chi a'ch aelwyd ddilyn canllawiau cyfredol y llywodraeth: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
- gynghori'r rhai rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw a lleoliadau rydych chi wedi ymweld â nhw yn ystod y 48awr cyn i'ch symptomau gychwyn, neu o'r diwrnod pan ddangosir canlyniad prawf positif os nad oes symptomau, y dylent gael prawf ar gyfer haint COVID-19 posibl. Dilynwch ganllawiau lleol a chenedlaethol ar bob adeg.

Os byddwch yn derbyn canlyniad negatif ar gyfer COVID-19

Mae'n debygol nad oeddech chi'n heintus pan wnaed y prawf. Fodd bynnag, nid yw canlyniad prawf negatif yn sicrydd nad oes gennych y coronafeirws. Dylech barhau i ddilyn canllawiau'r llywodraeth.

CYNGOR

Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help os ydych yn poeni. Dilynwch eich greddf.

Os oes gennych chi symptomau COVID-19 neu os ydych chi wedi dal COVID-19, dilynwch ganllawiau'r GIG: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


Os oes gennych chi symptomau COVID-19 ac mae eich cyflwr yn gwaethygu, neu os na fyddwch chi'n gwella wedi saith niwrnod, defnyddiwch wasanaeth coronafeirws ar-lein 111 y GIG 111.nhs.uk

Os nad oes gennych chi fynediad i'r rhyngwrwyd, ffoniwch **NHS 111**.

Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch **999**.


Gallwch gael rhagor o gyngor am symptomau COVID-19 mewn plant ar: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

Ar gyfer pwy mae'r prawf yma'n addas

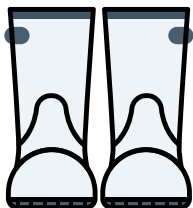

Oedolion 18+ oed

Hunan-brofi ac adrodd, gyda chymorth os oes angen.

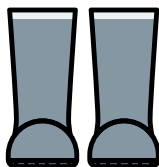

Pobl ifanc rhwng 12 -17 oed

Hunan-brofi ac adrodd gyda chymorth oedolyn os oes angen. Gall yr oedolyn gyflawni'r prawf fel fo angen.



Plant dan 12

Dylai oedolyn brofi plant dan 12 oed. Peidiwch â chynnal y prawf hwn os ydych yn teimlo'n anghyfforddus yn cynnal y prawf ar blentyn. Peidiwch â pharhau gyda'r prawf os yw'r plentyn yn teimlo unrhyw anghysur arwyddocaol neu boen.

Pa mor aml i brofi

Gall pa mor aml y dylech brofi amrywio yn ôl eich amgylchiadau a beth yw'r canllawiau cenedlaethol neu leol ar y pryd.

Ble i ddod o hyd i gymorth ychwanegol

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hunan-brofi ar: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Mae'r llyfryn cyfarwyddiadau hwn yn cyfeirio at y Casét Prawf Cyflym Antigenau SARS-CoV-2 (Swab Trwynol) (Aur), cod cynnyrch: COVID19AGVCGS7.

Cod Cynnyrch: COVID19AGVCGS7

1. Paratoi eich ardal brawf

PWYSIG

Dylech ddefnyddio'r pecyn ar dymheredd ystafell (15°C i 30°C). Os yw'r pecyn wedi'i storio mewn lle oer (dan 15°C), gadewch ef ar dymheredd ystafell am 20 munud cyn ei ddefnyddio.




Peidiwch â defnyddio unrhyw chwistrell trwyn am 15 munud cyn profi



15
munud

Byddwch angen: amserydd (fel oriawr neu gloc), hancesi papur, hylif diheintio dwylo neu sebon a dŵr cynnes.

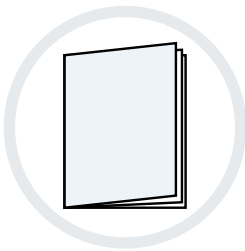

- 1** Darllenwch y canllaw cyfarwyddyd hwn yn ofalus.



- 2** Cliriwch, glanhewch a sychwch arwyneb gwastad yn syth cyn cychwyn y prawf.




- 3** Golchwch eich dwylo'n drylwyr am 20 eiliad, gan ddefnyddio sebon a dŵr cynnes, neu hylif diheintio dwylo.


Mae'r llyfryn cyfarwyddiadau hwn yn cyfeirio at y Casét Prawf Cyflym Antigenau SureScreen SARS-CoV-2 (Swab Trwynol) (Aur)

Gwiriwch gynnwys eich pecyn

4 Yn eich blwch pecyn profi, fe ddylech weld:

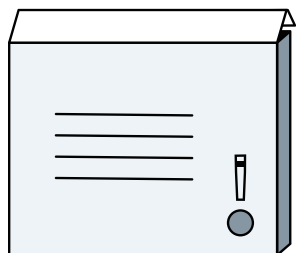

Blwch allanol gyda daliwr tiwb

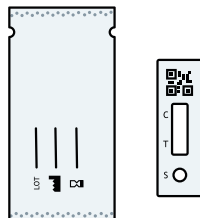


Casetiau profi mewn pecynnau wedi selio




Bagiau bychan (Ffiolau byffer echdynnu)



Tiwbiau echdynnu

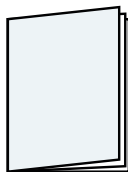

Cyfarwyddiadau defnydd (y llyfryn hwn)

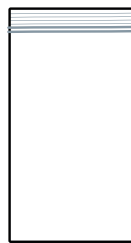

Bagiau gwastraff plastig



Swabiau

CYNGOR

Beth i'w wneud os yw rhywbeth wedi ei ddifrodi, torri neu ar goll

Os byddwch yn sylwi bod unrhyw beth wedi ei ddifrodi, torri neu ar goll, peidiwch â defnyddio'r pecyn profi. Gallwch roi adborth trwy ffonio'r ganolfan gyswllt i gwsmeriaid. Mae llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.


Ffoniwch: **119** (am ddim o ffonau symudol a llinellau tir).

Rydym yn cynnig cefnogaeth mewn 200 o ieithoedd, yn ogystal ag Iaith Arwyddion Prydain.

Os byddwch yn cael eich niweidio gan ddyfais; adroddwch i:

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. Paratoi eich prawf

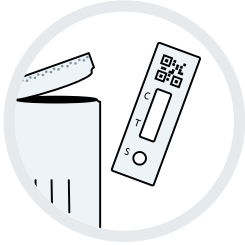


- 5 Tynnwch y casét prawf o'r pecyn wedi'i selio a'i osod ar yr arwyneb gwastad glân.




RHYBUDD

Wedi ei agor, rhaid ei ddefnyddio o fewn 1 awr, neu bydd y prawf yn ddi-rym. Taflwch y casét a chynnwys y bag bach os ydynt wedi bod tu allan i'r bag wedi selio ers mwy nag 1 awr.

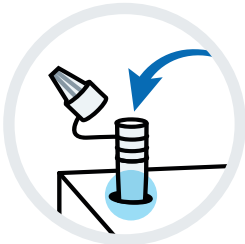

- 6 Rhowch y tiwb echdynnu yn y daliwr tiwb echdynnu (yr ardal crwn tyllog ar gaeod y blwch) i osgoi arllwys yr hylif.

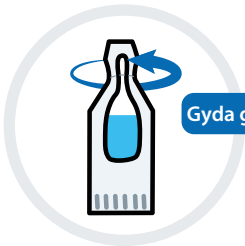

Gyda gofal

- 7 Gyda gofal, rhowch dro i dorri sêl cynhwysydd yr hylif. Agorwch yn ddigon pell o'ch wyneb a gofalwch beidio â gollwng unrhyw hylif.

RHYBUDD

Mae'r byffer echdynnu yn cynnwys deunydd a allai achosi llid os daw i gysylltiad â'r wyneb neu groen. Os yw'r toddiant yn dod i gysylltiad â'r croen neu lygad, golchwch gyda digon o ddŵr. Os bydd yr croen yn cosi, mynnwch sylw



Gyda gofal

- 8 Agorwch y tiwb echdynnu ac yn ofalus iawn, gwasgwch yr holl hylif o'r bag bach i'r tiwb.

Cymerwch ofal a rhoi'r bag hylif gwag yn y bag gwastraff plastig a ddarparwyd.



9

Chwythwch eich trwyn yn ysgafn gan ddefnyddio hances bapur, a thafwch yr hances mewn bin wedi cau.


Os ydych chi'n helpu rhywun arall neu'n profi plentyn, helpwch nhw i chwythu eu trwyn a thafu'r hances bapur mewn bin gyda chaead.



10

Golchwch eich dwylo'n drylwyr eto am 20 eiliad, gan ddefnyddio sebon a dŵr cynnes neu gallwch ddefnyddio hylif diheintio.

Os ydych chi'n helpu rhywun arall neu'n cynnal prawf ar blentyn helpwch ef neu hi i olchi ei ddwylo/dwylo.

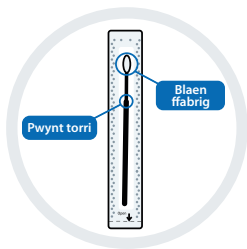


11

Chwiliwch am y swab yn y pecyn wedi ei selio o'ch blaen. Nodwch y pen ffabrig, meddal.

PWYSIG

Peidiwch â chyffwrdd blaen meddal, ffabrig y swab. Os yw blaen ffabrig y swab wedi ei gyffwrdd, tafwch y swab

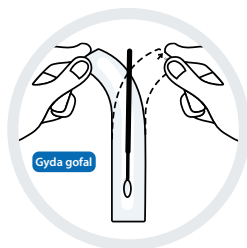

12


Agorwch ddeunydd pacio'r swab yn ofalus o'r pen arall, pan fyddwch yn barod i'w ddefnyddio yn unig.

3. Cymryd eich sampl


Os ydych chi'n profi rhywun arall, gweler y cyfarwyddiadau ar dudalen 11.

PWYSIG

Dylid cyflawni'r prawf yn defnyddio sampl trwyn yn unig.

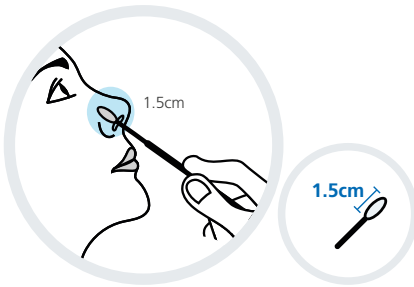


- 13** Rhowch flaen ffabrig y swab tu fewn i un ffroen (tua 1.5cm i fyny eich trwyn).

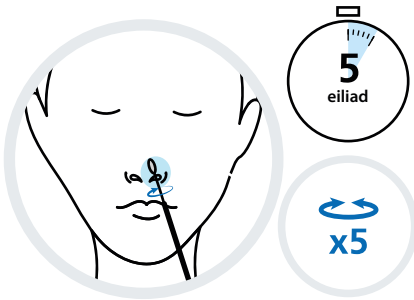

- 14** Trowch y swab yn ofalus o amgylch tu fewn i'ch ffroen mewn symudiad cylchol **5 gwaith** am o leiaf **5 eiliad**.

Tynnwch y swab yn araf. Nid oes angen defnyddio grym a does dim rheid i chi wthio'n rhy bell i'ch ffroen. Peidiwch â dychwelyd y swab i'r deunydd pacio papur gwreiddiol.

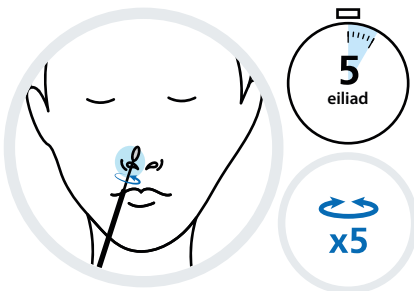


- 15** Gan ddefnyddio'r un swab, rhowch flaen y swab ffabrig tu fewn i'r ffroen arall (tua 1.5cm i fyny eich trwyn.)

Trowch y swab yn ofalus o amgylch tu fewn i'ch ffroen mewn symudiad cylchol **5 gwaith** am o leiaf **5 eiliad**.


Gwneud prawf ar rywun arall

CYNGOR


Dylai oedolyn brofi plant dan 12. Dilynwch y canllawiau isod ar sut i baratoi a phrofi plentyn. Gallwch wyllo fideo arddangos ar [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

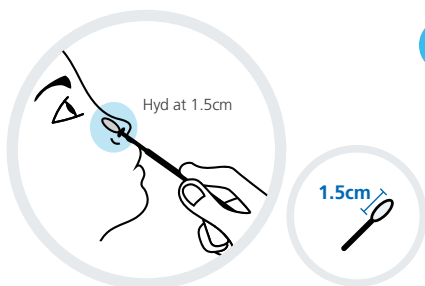

- 13** Os ydych chi'n profi plentyn, dangoswch y pecyn prawf iddynt a thrafod beth fyddwch chi'n ei wneud. Os yn bosibl, rhowch nhw i eistedd ar lin rhywun neu gael rhywun i ddal eu llaw.

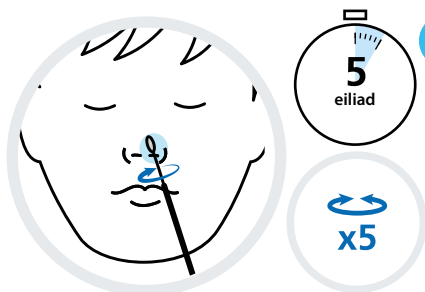

- 14** Rhowch flaen ffabrig y swab ychydig tu mewn i'w ffroen (hyd at 1.5cm), neu nes byddwch yn teimlo gwrthiant. Trowch y swab yn ofalus o amgylch tu fewn i'w ffroen mewn symudiad cylchol **5 gwaith** am o leiaf **5 eiliad**. Tynnwch y swab yn araf. Nid oes angen defnyddio grym a does dim rhaid i chi wthio'n rhy bell i'w ffroen. Peidiwch â dychwelyd y swab i'r deunydd pacio papur gwreiddiol.

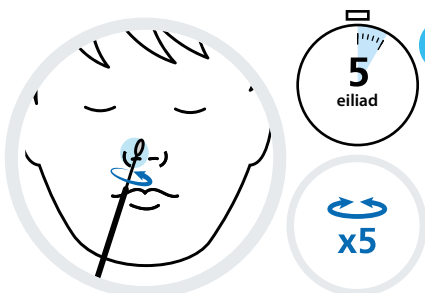


- 15** Gan ddefnyddio'r un swab, rhowch flaen y swab ffabrig tu fewn i'w ffroen arall (hyd at 1.5cm) neu nes byddwch yn teimlo gwrthiant.

Trowch y swab yn ofalus o amgylch tu fewn i'w ffroen mewn symudiad cylchol **5 gwaith** am o leiaf **5 eiliad**.

4. Prosesu'r sampl swab

AWGRYM

I gael y perfformiad gorau, profwch y swab cyn gynted â phosibl wedi casglu eich sampl.

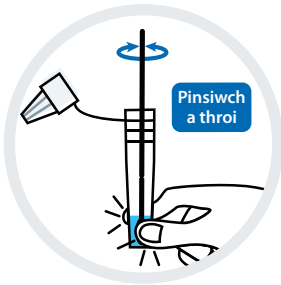


16

Codwch y tiwb echdynnu a rhoi blaen ffabrig y swab yn y tiwb echdynnu, fel ei fod yn yr hylif.

Gwasgwch ben y swab yn gadarn yn erbyn tu fewn corff y tiwb trwy binsio gwaelod y tiwb gyda'ch bysedd a bawd.


Tra'n pinsio, trowch y swab am o leiaf 10 eiliad.

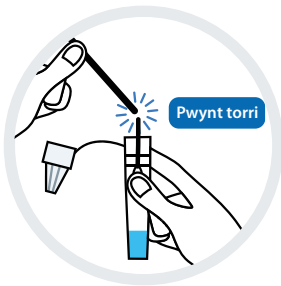

17


Codwch y swab trwynol yn ofalus, ac yna torri'r swab ar y safle "pwynt torri". Gadewch ben y swab yn y tiwb echdynnu.

Rhowch handlen y swab yn y bag plastig gwastraff a ddarperir.

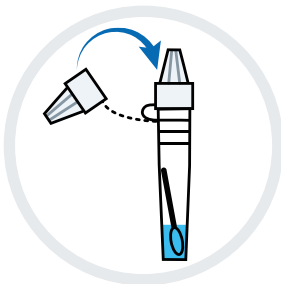

18


Gosodwch gaead y diferydd yn dyn ar ben y tiwb echdynnu.

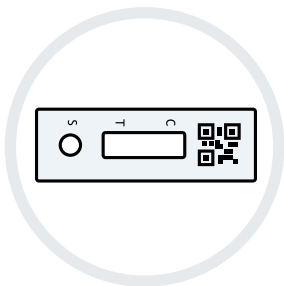

19

Sicrhewch fod y casét prawf ar arwyneb glân a gwastad.

Peidiwch â symud y casét yn ystod y prawf.

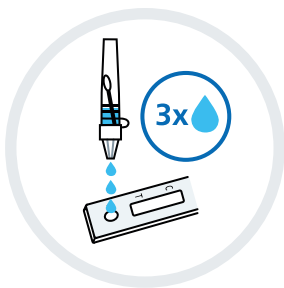


20

Gwasgwch y tiwb echdynnu yn ofalus i roi 3 ddiferyn o'r hylif yn y ffynnon sampl (S) ar y sribed profi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gollwng hylif ac nid swigen aer.

Rhowch y tiwb echdynnu yn y bag plastig gwastraff a ddarparwyd.

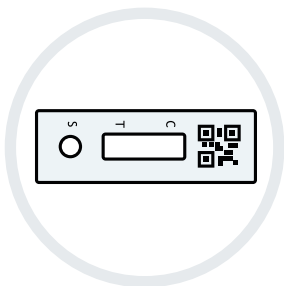

21

Dechreuwch amserydd ac aros 10 munud cyn darllen y canlyniad.

Peidiwch â symud y prawf unwaith y bydd wedi cychwyn. Dehonglwgch y canlyniad wedi 10 munud. Peidiwch â darllen wedi 20 munud.

Rhaid i chi aros am yr amser datblygu llawn o 10 munud cyn i chi ddarllen canlyniad y prawf.



5. Darllen eich canlyniad

PWYSIG



Arhoswch am 10 munud i ddarllen y canlyniad.



Peidiwch â gadael i'r prawf ddatblygu am fwy nag **20 munud**. Bydd hyn yn gwneud y canlyniad yn annilyd.




Canlyniad positif

Mae dwy linell yn ymddangos. Dylai un llinell lliw fod yn ardal y llinell reoli (C), a llinell lliw arall yn ardal y llinell brawf (T).

Mae dwy linell, un wrth ymyl C ac un wrth ymyl T, hyd yn oed os ydynt yn llinellau gwan, yn dangos bod canlyniad y prawf yn positif.


PWYSIG

Os bydd eich canlyniad yn positif, dylech hunanynysu a dylai eich aelwyd ddilyn canllawiau'r llywodraeth ar hunanynysu: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

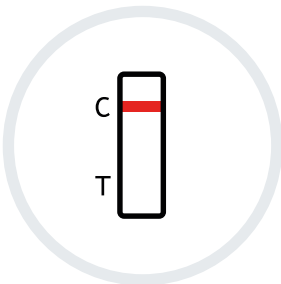

Canlyniad negatif

Mae un llinell lliw yn ymddangos yn yr ardal llinell reoli (C). Does yna ddim llinell liw yn ymddangos yn y rhanbarth llinell brawf (T).

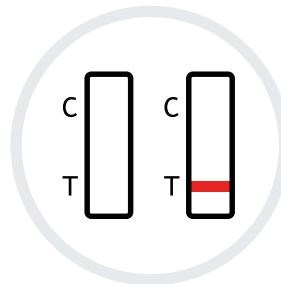


Canlyniad annilyd

Nid yw'r llinell rheoli (C) yn ymddangos.

6. Adrodd eich canlyniad

Dylech adrodd eich canlyniadau positif, negatif neu annilys i'r GIG

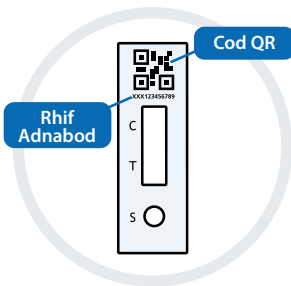

Mae cofnodi canlyniad pob prawf yn helpu gwyddonwyr i nodi achosion newydd o'r firws a chynghori ar sut i ymateb.

Os mai dim ond canlyniadau positif a adroddir arnynt, mae lefelau achosion yn ymddangos i fod yn uwch nag ydynt mewn gwirionedd. Felly hyd yn oed os yw'ch canlyniad yn negatif neu'n annilys, dylech sicrhau bod gwybodaeth y GIG yn gywir. Mae angen y cod QR, neu'r rhif adnabod sydd o dan i adrodd eich canlyniad.



Adrodd ar-lein (cyflymaf).

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, ewch i gov.uk/report-covid19-result

Os ydych chi'n byw yn yr Alban ewch i covidtest.scot



Neu, adrodd dros y ffôn.

Os na allwch chi adrodd eich canlyniad ar-lein, ffoniwch **119** (am ddim o ffonau symudol a llinellau tir).

Mae llinellau ar agor bob dydd. 7am i 11pm.

7. Beth mae eich canlyniadau'n ei olygu

Dim ond wedi i chi roi gwybod am eich canlyniad fyddwch chi wedi cwblhau eich prawf

+ Canlyniad positif

Os byddwch yn cael canlyniad positif, mae'n debygol eich bod wedi eich heintio â COVID-19 ar hyn o bryd a bod perygl y byddwch yn heintio eraill. Dylech hunanynysu. Pan fyddwch yn adrodd eich canlyniad, byddwch yn cael rhagor o wybodaeth ar y camau nesaf i'w cymryd.

RHYBUDD

Dylech chi, ac unrhyw un sy'n byw gyda chi, ddilyn y canllaw cenedlaethol a lleol cyfredol. Gellir dod o hyd iddo yn: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

- Canlyniad Negatif

Os byddwch yn cael canlyniad negatif, mae'n debygol nad oeddech chi'n heintus ar yr adeg pan gymeroch y prawf. Fodd bynnag, **nid yw canlyniad prawf negatif yn sicrwydd nad oes gennych COVID-19.**

Os yw canlyniad y prawf yn negatif, mae'n rhaid i chi barhau i ddilyn rheolau a chanllawiau cenedlaethol a lleol, gan gynnwys golchi dwylo'n rheolaidd, cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb lle mae angen gwneud hynny.

Os byddwch chi'n datblygu symptomau, dylech hunanynysu a chael y prawf a argymhellir ar hyn o bryd ar: gov.uk/get-coronavirus-test neu trwy ffonio'r ganolfan gyswllt cwsmeriaid ar 119. Mae llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.

Dylech chi a'ch aelwyd ddilyn canllawiau cenedlaethol.



Canlyniad annilys

Os byddwch yn cael canlyniad annilys, mae hyn yn golygu na chafodd y prawf ei gyflawni'n gywir ac nad yw'n bosibl i ni ddweud a oedd y feirws arnoch pan gynhaliwyd y prawf. Bydd angen i chi ddefnyddio prawf arall o'r pecyn cyn gynted â phosibl. Peidiwch ag ail-ddefnyddio unrhyw beth o'r pecyn profi a chychwynnwch weithdrefn y prawf o gam 1.

Os yw'r broblem yn parhau, stopiwch ddefnyddio'r pecyn profi ar unwaith. Archebwch becyn newydd o brofion trwy droi at: gov.uk/get-coronavirus-test, trwy Ap COVID-19 y GIG neu trwy ffonio eich canolfan gyswllt cwsmeriaid ar **119**. Mae llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.

8. Perfformiad Prawf

Mae'r prawf yn fwy tebygol o roi canlyniad positif os oes gan rywun lefelau uchel o goronafeirws (COVID-19). Mae hyn yn golygu ei fod yn fwy tebygol o ddarganfod y bobl sy'n heintus ar hyn o bryd sydd angen hunanynysu ar unwaith.



9. Gwaredu'ch pecyn profi yn ddiogel

Pan fyddwch wedi cwblhau eich prawf rhowch yr holl eitemau a ddefnyddiwyd yn y bag gwastraff a ddarparwyd, a rhoi hyn yng ngwastraff cyffredinol y cartref.

Golchwch eich dwylo'n drylwyr ar ôl gwaredu.

Mae'r wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir ar (29 Medi 2021).

Cod cynnyrch: COVID19AGVCGS7

Enw'r cynnyrch: Casét Prawf Cyflym Antigenau SureScreen SARS-CoV-2 (Swab Trwynol) (Aur)

Gwnewch nodyn o ganlyniadau eich profion

Mae hyn ar gyfer eich cofnodion chi eich hun. Dylech adrodd eich canlyniad i'r GIG hefyd (gweler tudalen 15 am ragor o wybodaeth).

Ewch i: gov.uk/report-covid19-result

Os ydych chi'n byw yn yr Alban ewch i covidtest.scot

Pwy gymerodd y prawf	Dyddiad	Amser	Canlyniad y prawf

Mae eich pecyn yn cynnwys y deunyddiau canlynol

Eitemau	Pecyn o 7
Cyfarwyddiadau defnydd (y llyfryn hwn)	1
Casetiau profi mewn pecynnau wedi selio	7
Bagiau bychan (Ffiolau byffer echdynnu)	7
Tiwbiau echdynnu	7
Swabiau	7
Bagiau gwastraff plastig	7

Crynodeb o Wybodaeth Bellach

Cefnogaeth ychwanegol hunanbrawf Fersiynau iaith amgen ac arddangosiadau fideo Canllawiau i baratoi a phrofi plentyn	gov.uk/covid19-self-test-help
Canllaw ar Hunanynysu a gwybodaeth triniaeth	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
Canllawiau'r GIG ar COVID-19	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
Os oes gennych chi symptomau COVID-19 ac mae eich cyflwr yn gwaethygu, neu os na fyddwch chi'n gwella wedi saith niwrnod, defnyddiwch wasanaeth coronafeirws ar-lein 111 y GIG:	111.nhs.uk Neu ffoniwch GIG 111 os nad oes gennych fynediad i'r rhyngwrwd
Symptomau COVID-19 mewn plant	nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children
Os byddwch yn cael eich niweidio gan ddyfais; adroddwch i:	coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Adroddwch ganlyniad ar-lein (Cymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon):	gov.uk/report-covid19-result
Adroddwch ganlyniad ar-lein (Yr Alban):	covidtest.scot
Archebwch brawf gyfredol a argymhellir:	gov.uk/get-coronavirus-test
Rhywbeth wedi ei ddfrodi, torri neu ar goll Cefnogaeth ieithyddol (yn cynnwys iaith Arwyddion Prydain) Adrodd eich canlyniad (os nad oes gennych fynediad i'r rhyngwrwd)	Ffoniwch 119

Ni chaniateir cyflenwi'r ddyfais hon ond fel rhan o waith yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) dan raglen Profi ac Orlhain y GIG.



Gwneuthurwr:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
Derby, DE1 3QB, United Kingdom (Y Deyrnas Unedig).



Gwybodaeth swab:
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
Cyfeiriad: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020
Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China
(Gweriniaeth Pobl Tsieina)
neu



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Cyfeiriad: Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (Tsieina)



Symbolau



Storiwch
ar 2 – 30°C



Diheintwyd
gan ddefnyddio
ethylenocsid



Gwneuthurwr



Rhif lot



Dyddiad dod i ben



Dyfais feddygol
ddiagnostig in vitro

Peidiwch
â defnyddio'r
cynnyrch pan
fydd y pecyn
wedi'i ddfrodi



Gweler
y cyfarwyddiadau
ar gyfer defnydd



Cynhwysir
digon ar gyfer
7 o broffion



Peidiwch â'i
ailldefnyddio



Cymerwch olwg
ar yr adran
'Cyngor ar
gymryd y prawf'
am ganllawiau
a rhybuddion
cyffredinol



Rhif catalog

Fersiwn 5 Dyddiad dod i rym 29/09/21

Mae'r cyfarwyddiadau defnydd yma ar gyfer y Casét Prawf Cyflym Antigenau SARS-CoV-2 (Swab Trwynol) (Aur), gwneuthurwr: SureScreen Diagnostics a'r cod cynnyrch: COVID19AGVCGS7