


قبل از آغاز تست، تمامی این راهنما را با دقت بخوانید.
این تست امکان دارد با تست هایی که قبلا داشته اید، فرق داشته باشد.

راهنمای قدم به قدم شما برای کست تست سریع انتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)

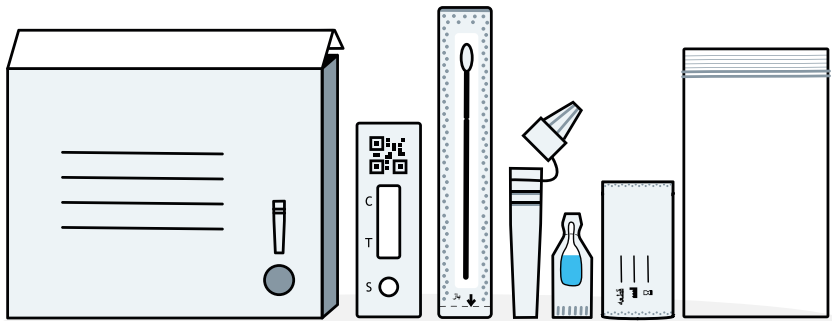

این طرزالعمل ها برای کست تست سریع انتی ژن SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا) میباشد، کد محصول: COVID19AGVCGS7.
این راهنما تشریح می دهد که چگونه از خود یا شخص دیگری تست COVID-19 بگیریید و چطور نتایج خود را راپور دهید.

ورژن های لسان جایگزین و فلم های ویدیویی در این آدرس قابل دسترس می باشند:

gov.uk/covid19-self-test-help

نتایج تمام تست ها را به NHS راپور دهید

کاری که شما باید انجام دهید

راهنمای قدم به قدم شما



این طرز العمل ها را بخوانید و مراحل را به ترتیب صحیح، تعقیب نمایید. هر تست تقریباً 15 دقیقه وقت میگیرد تا انجام شود و نتایج در 10 دقیقه آماده خواهد شد.

صفحه 6	1	ساحه تست خود را آماده و محتویات کیت تست خود را بررسی نمایید
صفحه 8	2	تست خود را انجام دهید
صفحه 10	3	نمونه سواب خود را اخذ نمایید
صفحه 12	4	سمپل سواب را پروسس کنید
صفحه 14	5	نتیجه خود را بخوانید
صفحه 15	6	نتیجه خود را گزارش دهید
صفحه 16	7	نتایج شما به چه معناست
صفحه 17	8	عملکرد تست
صفحه 17	9	به شکل مصنون تست خود را دور بیاندازید

تقریباً 1 نفر از 3 نفر مصاب به COVID-19 نمی داند که به آن مصاب شده است.

مشوره در مورد گرفتن تست راهنمای نگهداری و استفاده

- به شکل بسته بندی شده در حرارت اتاق (2-30 درجه سانتی گراد) نگهداری شود. یخ نزند.
- کیت باید در حرارت اتاق (در حرارت 15 تا 30 درجه سانتی گراد) استفاده شود. اگر کیت در جایی سرد (با حرارت کمتر از 15 درجه سانتی گراد) نگهداری شده است، قبل از استفاده، آن را به مدت 20 دقیقه در حرارت معمولی اتاق قرار دهید.
- برای هر نفر از یک کیت تست جداگانه استفاده نمایید. شما فقط از هریک از اقلام موجود در بسته تست، یک بار استفاده می توانید. از این اقلام مجدداً استفاده ننمایید. شما ضرورت دارید تا نتیجه هر شخص را راپوردهید.
- اگر شما از نظر دست و بینایی مشکلی دارید، ممکن است ضرورت به همکاری شخص دیگری داشته باشید تا در گرفتن سواب و انجام تست به شما کمک نماید.
- اگر یک حلقه یا نگین بینی دارید، حلقه یا نگین را قبل از انجام این تست بکشید.
- از سمپل های دارای خون استفاده نکنید. اگر شما در 24 ساعت گذشته خونریزی بینی داشته اید، باید 24 ساعت قبل از انجام تست صبر کنید.
- در زمان برداشتن سواب ذریعه دست، سر سواب را لمس نکنید.
- از دست زدن به کیت تست و ساحه نمایش نتایج جاییکه سمپل اضافه شده است پرهیز کنید.

هشدار

- بعد از ختم تاریخ انقضاء استفاده نکنید. لطفاً به تاریخ انقضاء در بالای بسته توجه کنید.
 - تا زمانیکه کست آماده استفاده میشود باید در بسته سرغوج باقی بماند.
 - این کیت های تست فقط برای استفاده انسان دیزاین شده اند.
 - بمدت 15 دقیقه قبل از انجام تست، از هیچ نوع اسپری استفاده نکنید.
 - این محصول همراه لاتکس رابر طبیعی ساخته نشده است با وجود آن؛ موجودیت لاتکس رابر طبیعی را در محصول تحویل داده شده به استفاده کننده ی آخری را نمی توان کاملاً انکار کرد.
- این طرز العمل ها را به دقت مراعات کنید، این تست امکان دارد با تست هایی که قبلاً داشته اید، فرق داشته باشد.

درباره این تست

چرا باید تست شخصی بدهید

این کیت تست شخصی COVID-19 یک تست سواب برای بینی است. این تست میتواند برای اشخاصی که کدام اعراض و علائمی ندارند استفاده شود، بااینحال شما باید طرزالعمل های ملی را برای بررسی اینکه چه نوع تست برای شما مناسب است مراعات کنید.

اگر نتیجه تست COVID-19 شما مثبت است، باید:

- به کاهش انتشار این مریضی کمک کنید، شما و خانواده شما باید رهنمودهای برحال دولت را که در

این سایت آمده مراعات کنید: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)

[self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- به کسانی که در نزدیکی آنها بوده اید و جاهایی که طی 48 ساعت قبل از شروع علائم تان، یا اگر هیچ علائمی ندیدید، از روزی که نتیجه مثبت آزمایش اعلام شد، از آنها دیدار کردید، خبر بدهید تا از آنجا که احتمال دارد که به COVID-19 مبتلا شده باشند، آزمایش بدهند. همواره از مقررات محلی و ملی تبعیت کنید.

اگر نتیجه تست COVID-19 شما منفی است

این احتمال وجود دارد که در موقع گرفتن تست، شما مصاب نبوده اید. با این حال، نتیجه تست منفی تضمین نمی کند که ویروس کرونا نداشته باشید. شما همچنان باید رهنمودهای دولتی را مراعات کنید.

توصیه

اگر نگران هستید، گرفتن کمک را به تعویق نیاوردید. به غرایز خود اعتماد کنید.

اگر اعراض و علائم COVID-19 را دارید یا به COVID-19 مصاب شده اید، لطفاً رهنمود NHS را مراعات

کنید: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)

اگر اعراض و علائم COVID-19 را دارید و وضعیت شما بدتر شده است یا بعد از هفت روز خوب نشدید، به خدمات آنلاین ویروس کرونای NHS 111 [111.nhs.uk](https://www.nhs.uk) مراجعه نمایید.

اگر به اینترنت دسترسی ندارید، با NHS 111 به تماس شوید.

برای وضعیت عاجل به نمبر 999 به تماس شوید.

میتوانید در مورد اعراض و علائم COVID-19 اطفال، توصیه های بیشتری را در این آدرس پیدا کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/)

این تست برای چه کسانی مناسب است




اطفال کمتر از 12 سال

یک شخص کلان سال باید از اطفال کمتر از 12 سال تست بگیرد. اگر شما از تست گرفتن یک طفل احساس ناراحتی میکنید، این تست را انجام ندهید. اگر طفل احساس ناراحتی یا درد زیاد میکند، تست را ادامه ندهید.



نوجوانان بین سن 12-17 سال

انجام تست شخصی و راپور دهی تحت نظارت یک شخص کلانسال. شخص کلان سال می تواند در صورت نیاز تست را بگیرد.

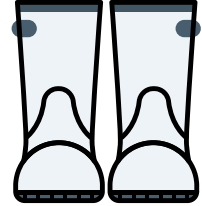

کلان سالان با سن کلانتر از 18 سال

انجام تست شخصی و راپور دهی، همراه با کمک اگر نیاز بود.

دفعات انجام تست

اینکه چندین مرتبه باید تست بدهید نظر به شرایط و طرز العمل های ملی یا محلی فعلی متفاوت می باشد.

از کجا می توان حمایت دیگری کسب نمود

معلومات بیشتر در مورد تست شخصی را در این آدرس مشاهده نمایید:

gov.uk/covid19-self-test-help

این کتابچه راهنما فقط در مورد کست تست SARS-CoV-2 سریع انتی ژن (سواب بینی) (طلا) است، کود تولید: COVID19AGVCGS7

کود محصول: COVID19AGVCGS7

1. ساحه تست خود را آماده کنید

نکته مهم



کیت باید در حرارت اتاق (در حرارت 15 تا 30 درجه سانتی گراد) استفاده شود. اگر کیت در جایی سرد (با حرارت کمتر از 15 درجه سانتی گراد) نگهداری شده است، قبل از استفاده، آن را به مدت 20 دقیقه در حرارت معمولی اتاق قرار دهید.

ضروریات شما: یک تایمر (مانند ساعت دستی یا دیواری)، دستمال کاغذی، مایع ضد عفونی کننده دست یا صابون و آب گرم.


15
دقیقه



بمدت 15 دقیقه قبل از انجام تست، از هیچ نوع اسپری استفاده نکنید.

این طرز العمل راهنما را با دقت بخوانید.

1

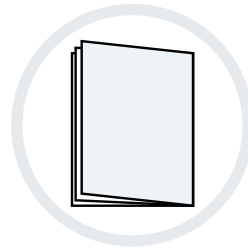

بلافاصله قبل از شروع تست یک سطح صاف را خالی، پاک و خشک نمایید.

2



دستان خود را به مدت 20 ثانیه و با استفاده از صابون و آب گرم بشویید یا از ضد عفونی کننده دست استفاده نمایید.

3




این کتابچه راهنما، فقط مربوط به کیت تست سریع انتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا) میباشد

نتایج تمام تست ها را به NHS راپور دهید


محتویات کیت خود را چک کنید.

4

در جعبه تست شما باید این مواد موجود باشند:

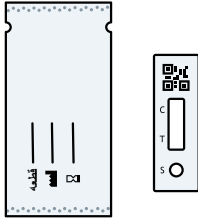

کست های تست که در بسته های سرغوج قرار دارند

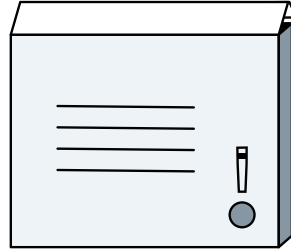


جعبه کلان به همراه نگهدارنده تیوب



سواب



خریطة های
پلاستیکی کثافات

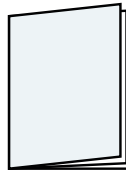

رهنمای استفاده
(این کتابچه)



تیوب های استخراج



بوئل خورد مایع
(ویال های بافر
استخراج)

توصیه

در صورتی که کدام چیزی خراب شده، یا شکسته و یا کمیودی داشت چی باید کرد

اگر متوجه آسیب دیدگی، شکستگی یا کمیودی چیزی شدید، لطفاً از کیت تست استفاده نکنید. می توانید توسط تماس گرفتن به مرکز مشتریان فیدبک بدهید. تماس با این خطوط همه روزه از ساعت 7 صبح الی 11 شام ممکن است.

نمبر تماس: **119** (تماس با موبایل و تلفون ثابت رایگان است).
ما به 200 لسان و همینطور به لسان اشاره بریتانوی پشتیبانی/خدمات ارائه می دهیم .

اگر شما توسط یکی از این وسایل صدمه دیدید، به این آدرس راپور بدهید:

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk


2. تست خود را انجام دهید

کست تست را از بسته سرغوج بیرون کنید و آنرا روی یک سطح صاف پاکیزه بگذارید.

5


هشدار

بعد از باز شدن، الی مدت 1 ساعت از آن استفاده کنید، در غیر اینصورت، تست نامعتبر خواهد شد. کست و محتویات بسته را که بمدت 1 ساعت خارج از بسته سرغوج مانده است، دور بیندازید.

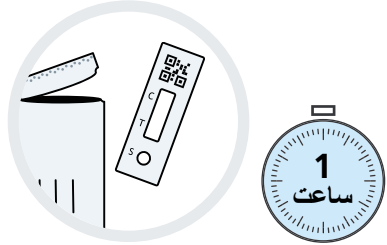

تیوب استخراج را در نگهدارنده تیوب استخراج (ساحه ای که به شکل دایره بالای درب جعبه سوراخ شده) قرار دهید تا از ریختن مایع جلوگیری شود.

6

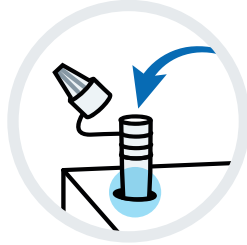

با احتیاط سر بوتل خورد مایع را بچرخانید تا باز شود. آن را از صورت خود دور نگاه داشته و باز کنید و احتیاط نمایید تا مایع نریزد.

7

هشدار

بافر استخراج، حاوی موادی است که در صورت تماس با صورت یا جلد، ممکن است باعث تحریک جلدی شود. اگر این محلول با جلد یا چشم تماس پیدا کرد، با آب زیاد بشویید. اگر تحریک جلدی اتفاق افتاد، لطفاً برای مراقبت های معالجوی کمک بخواهید.



تیوب استخراج را باز کرده و تمام مایع ساشه را به آرامی به داخل تیوب فشار دهید.

8

مراقب باشید و بوتل خورد مایع خالی را در خریطه کثافات داده شده بیندازید.



9 به آرامی در داخل یک دستمال کاغذی فین کنید و دستمال را به داخل خریطه کتافات سرپوش دار بیندازید.

9



اگر شما به شخصی دیگری کمک میکنید یا یک طفل را تست میکنید، به او کمک کنید تا بینی خود را فین کند و دستمال کاغذی را در یک سطل کتافات بیندازید.

10 دستهای خود را مجدداً بمدت 20 ثانیه با آب گرم و صابون بشویید یا از مایع ضدعفونی کننده استفاده کنید.


10



اگر شما به شخصی دیگری کمک میکنید یا یک طفل را تست میکنید، به او کمک کنید تا دستهای خود را بشوید.

11 سواب موجود در بسته لاک و موم شده در جلوی شما است. نوک نرم و تکه ای آن را مشخص کنید.

11

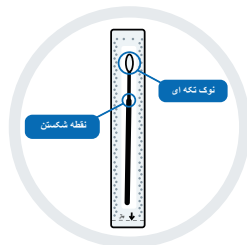


نکته مهم

نوک نرم و تکه ای سواب را لمس نکنید. اگر نوک تکه ای سواب لمس شده است، سواب را دور بیندازید.

12 فقط زمانی که شما آماده هستید، به آرامی بسته بندی سواب را از طرف پایینی دیگر آن جدا و باز کنید.

12

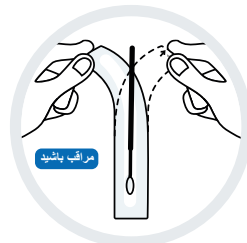


3. نمونه سواب خود را اخذ نمایید

اگر شما شخص دیگری را تست میکنید، لطفاً به هدايات در صفحه 11 مراجعه کنید.


نکته مهم

این تست فقط باید با استفاده از سمپل بینی اجرا شود.


13 نوک تکه ای سواب را دقیقاً داخل یک سوراخ بینی داخل کنید (تقریباً 1.5 سانتیمتر به داخل بینی خود).

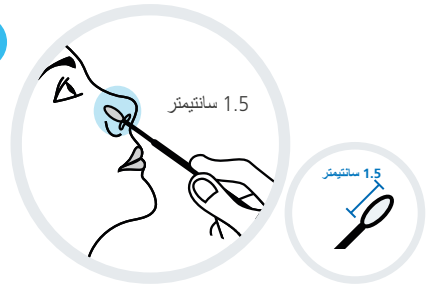

14 به آرامی سواب را به داخل سوراخ بینی خود به شکل دایره ای 5 مرتبه و حداقل به مدت 5 ثانیه بچرخانید. آن را به آهستگی خارج کنید. نیازی به اعمال زور نیست و لازم نیست آن را زیاد به داخل سوراخ بینی فشار دهید. سواب را به داخل بسته بندی کاغذی اصلی آن پس نگذارید.

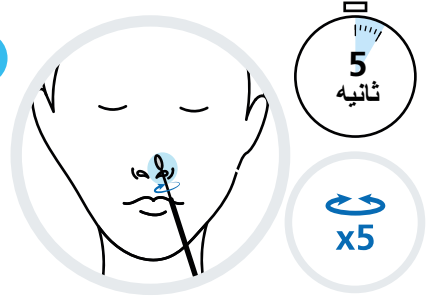

15 با استفاده از همان سواب، نوک تکه ای سواب را دقیقاً داخل سوراخ دیگر بینی قرار دهید (که تقریباً 1.5 سانتیمتر داخل بینی شما است).

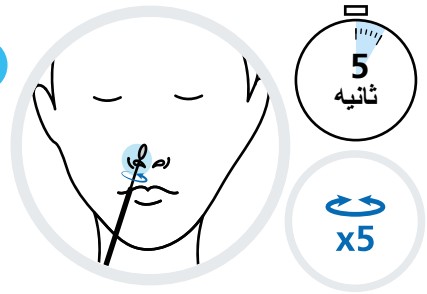

به آرامی سواب را به داخل سوراخ بینی خود به شکل دایره ای 5 مرتبه و حداقل به مدت 5 ثانیه بچرخانید.

این کتابچه راهنما، فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا) میباشد

انجام آزمایش روی شخصی دیگر


توصیه

اطفال کمتر از 12 سال باید توسط یک کلان سال تست شوند. در مورد طریقه آماده سازی و تست طفل، طرز العمل های ذیل را تعقیب کنید. می توانید فلم نمایش این کار را در آدرس ذیل تماشا کنید:

gov.uk/covid19-self-test-help


اگر شما یک طفل را تست میکنید، کیت تست را به آنها نشان دهید و درباره کاری که میخواهید انجام دهید با او صحبت کنید. در صورت امکان، او را روی پای کسی بنشانید یا از کسی بخواهید دستهای او را بگیرد.

13

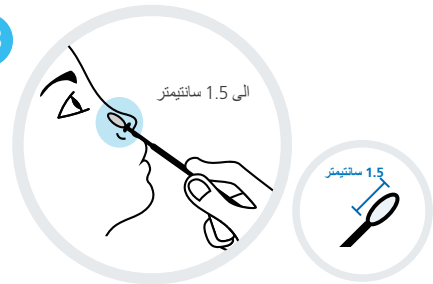


نوک تکه ای سواب را دقیقاً داخل سوراخ بینی او (الی 1.5 سانتیمتر)، یا تا زمانی که احساس اطمینان میکنید، داخل کنید. به آرامی سواب را به داخل سوراخ بینی او به شکل دایره ای 5 مرتبه و حداقل به مدت 5 ثانیه بچرخانید. آن را به آهستگی خارج کنید. ضرورت به هیچ فشاری نیست و شما نباید آنرا به داخل سوراخ بینی او فشار دهید. سواب را به داخل بسته بندی کاغذی اصلی آن پس نگذارید.

14

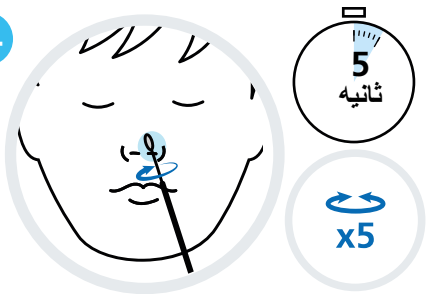

با استفاده از همان سواب، نوک تکه ای سواب را دقیقاً داخل سوراخ دیگر بینی او (الی 1.5 سانتیمتر) یا تا زمانی که احساس اطمینان میکنید، داخل کنید.

15

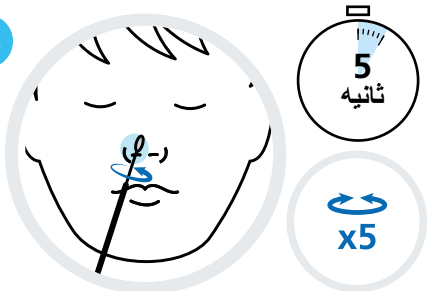

به آرامی سواب را به داخل سوراخ بینی او به شکل دایره ای 5 مرتبه و حداقل به مدت 5 ثانیه بچرخانید.

کود محصول: COVID19AGVCGS7

4. سمپل سواب را پروسس کنید


نکته

برای حصول بهترین نتیجه، بعد از جمع آوری سمپل، در اسرع وقت ممکنه سواب را تست کنید.

تیوب استخراج را گرفته و نوک تکه ای سواب را در تیوب استخراج قرار دهید تا در مایع باشد.

16

با فشار دادن قسمت پایین تیوب ذریعه شست و انگشتان خود، سر سواب را محکم به قسمت داخلی بدنه تیوب فشار دهید.

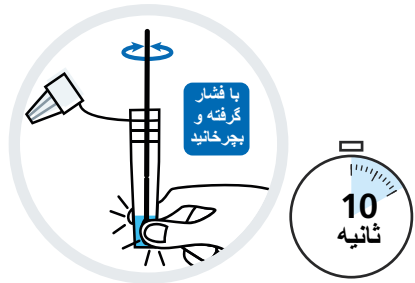

درحالیکه با انگشتان فشار میدهید، سواب را حداقل بمدت 10 ثانیه بچرخانید.

سواب بینی را کمی بالا بیاورید و بعدا سواب را از موقعیت "نقطه شکستن" بشکنید. سر سواب را در داخل تیوب استخراج بگذارید.


17

دسته سواب را در خریطه کثافات پلاستیکی داده شده، بیندازید.




سریوش قطره چکانک را محکم در قسمت بالای تیوب استخراج بگذارید.

18

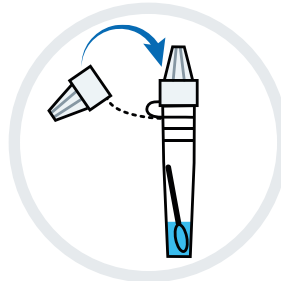


اطمینان حاصل کنید که کست تست روی یک سطح پاکیزه و صاف قرار دارد.
در حین تست نمودن کست را حرکت ندهید.

19

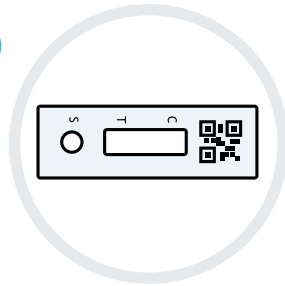

تیوب استخراج را به آرامی فشار دهید تا 3 قطره از مایع در داخل حفره سمپل (S) بر روی نوار تست بریزد.

20

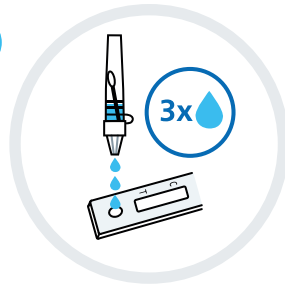


مطمئن شوید که مایع را بریزد نه حباب هوا.

تیوب استخراج را در خریطه کثافات پلاستیکی بیندازید.

تایمر را روشن کنید و 10 دقیقه صبر کنید، بعداً نتیجه را بخوانید.

21

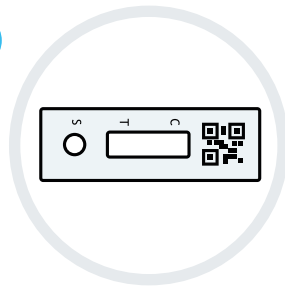

در طول تست، آن را حرکت ندهید. نتیجه را بعد از 10 دقیقه تفسیر کنید. نتیجه را بعد از 20 دقیقه نخوانید.

باید قبل از خواندن نتیجه تست خود، 10 دقیقه کامل که مربوط به زمان توسعه است صبر کنید.

5. نتیجه خود را بخوانید

نکته مهم

نگذارید که تست بیشتر از 20 دقیقه بماند. اینکار باعث نامعتبر شدن تست میشود.



برای 10 دقیقه صبر کنید و بعدا نتیجه را بخوانید.




نتیجه مثبت



دو خط ظاهر می شود. یک خط ملون باید در قسمت خط کنترل (C)، و یک خط ملون دیگر باید در قسمت خط تست (T) باشد.


وجود دو خط، یکی در کنار C و دیگری در کنار T، نشان می دهد که تست مثبت است، حتی اگر ضعیف باشد.

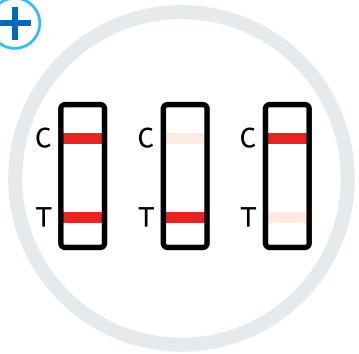

نکته مهم

اگر تست شما مثبت شد، شما باید خود را قرنطینه کنید، خانواده شما باید رهنمودهای دولتی را در مورد قرنطینه شخصی مراعات نمایند:


nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

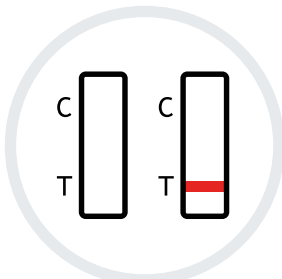

نتیجه نامعتبر



خط کنترل (C) دیده نمی شود.

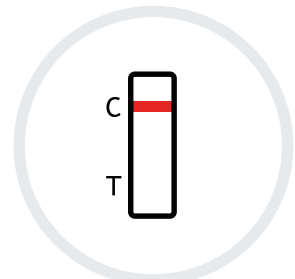

نتیجه منفی



یک خط ملون در قسمت خط کنترل (C) مشاهده می شود. هیچ خطی در قسمت خط تست (T) مشاهده نمی شود.

این کتابچه راهنما، فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا) میباشد


نتایج تمام تست ها را به NHS راپور دهید

6. نتیجه خود را گزارش دهید

شما باید نتایج مثبت، منفی یا نامعتبر را به NHS راپور بدهید

ثبت تمام نتایج تست ها به دانشمندان کمک می کند تا شیوع ویروس جدید را تشخیص دهند و در مورد نحوه واکنش به آن توصیه ارائه کنند.

اگر اشخاص تنها نتیجه مثبت را راپور دهند، آمار موارد مصاب، بیشتر از حد واقعی دیده می شود. بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا نامعتبر باشد، شما مطمئن خواهید شد که معلومات NHS دقیق است. به کد QR یا آیدی نمبر زیر آن برای راپور دهی نتیجه خود ضرورت دارید.

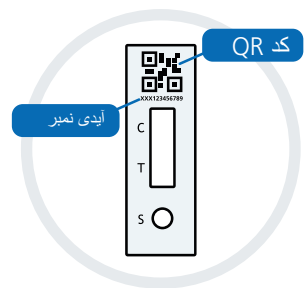

به طور آنلاین راپور بدهید (سریع ترین روش).
اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می کنید،
به این آدرس بروید: gov.uk/report-covid19-result

اگر در اسکاتلند زندگی می کنید، به این آدرس مراجعه نمایید:
covidtest.scot



یا ذریعۀ تلفون راپور بدهید.

اگر نمی توانید نتایج خود را به طور آنلاین راپور دهید، با
119 به تماس شوید (تماس با موبایل و تلفون ثابت رایگان
است).

خطوط همه روزه جواب گو می باشند. از ساعت 7 صبح الی
11 شب.



کود محصول: COVID19AGVCGS7

7. نتایج شما به چه معناست

شما تنها زمانی تست خود را تکمیل کرده اید که نتیجه خود را راپور داده اید

+ نتیجه مثبت

اگر نتیجه تست شما مثبت شد، به احتمال زیاد شما در حال حاضر مبتلا به COVID-19 و ریسک مصاب نمودن دیگران هستید. شما باید خود را قرنطینه کنید. زمانیکه نتیجه خود را راپور میدهید، معلومات بیشتری در قدمه های بعدی به شما ارائه خواهد شد.

هشدار

شما، و هرکسی که با شما زندگی میکند، باید رهنمودهای محلی و ملی برحال را مراعات کند. این رهنمودها را میتوانید در اینجا پیدا کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- نتیجه منفی

اگر نتیجه تست شما منفی بود، به احتمال زیاد در زمانی که تست را انجام داده اید، مصاب نبوده اید. با این حال، نتیجه تست منفی ضمانت نمی کند که شما COVID-19 نداشته باشید.

اگر نتیجه تست شما منفی بود، باید قوانین و طرز العمل های ملی و محلی را مراعات کنید، از جمله شستن دست ها به طور منظم، حفظ فاصله اجتماعی و در صورت لزوم استفاده از پوشش صورت.

اگر اعراض و علائم شما پیشرفت کرد، شما باید خود را قرنطینه کنید و تست پیشنهادی فعلی را از طریق این ویبسایت [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) یا ذریعۀ تلفون با مرکز تماس مشتریان، با نمبر 119 بدست آورید. تماس با این خطوط همه روزه از ساعت 7 صبح الی 11 شب امکان پذیر است.

شما و خانواده شما باید رهنمودهای ملی را مراعات کنید.

نتیجه نامعتبر



اگر نتیجه تست شما نامعتبر بود، به این معنی است که این تست به قسم صحیح اجرا نشده است و نمیتوان گفت که آیا شما در زمان انجام تست مبتلا به ویروس بوده اید یا نه. شما باید در اسرع وقت ممکنه از یک تست دیگر این بسته استفاده کنید. از هیچ یک از اقلام تست اول مجدداً استفاده نکنید و پروسیجر تست را از مرحله 1 شروع نمایید.

اگر مشکل همچنان موجود باشد، بلافاصله استفاده از کیت های تست را قطع کنید. یک بسته جدید کیت های تست را با مراجعه به این وبسایت: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test)، از طریق اپلیکیشن NHS COVID-19 یا ذریعه تماس با مرکز تماس با مشتریان با نمبر 119 سفارش بدهید. تماس با این خطوط همه روزه از ساعت 7 صبح الی 11 شب امکان پذیر است.

8. عملکرد تست

اگر کسی دارای سطوح بالای ویروس کرونا (COVID-19) باشد، احتمال اینکه نتیجه تست مثبت شود، بیشتر می باشد. این به این معنا است که به احتمال زیاد اشخاصی که در حال حاضر مصاب هستند، شناسایی می شوند و باید بدون وقفه خود را قرنطینه کنند.

9. به شکل مصنوعی تست خود را دور بیندازید



بعد از ختم شدن تست، تمام محتویات استفاده شده را در خریطه کثافات داده شده بیندازید و آنرا در کثافات خانگی عمومی خود بگذارید.

پس از دور انداختن آن، دستهایتان را به طور کامل بشویید.

معلومات ذکر شده در این کتابچه از تاریخ (29 سپتمبر 2021) صحت دارد.

کد محصول: COVID19AGVCGS7

نام محصول: کست تست سریع انتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)

نتایج تست خود را نوت کنید

این برای ریکورد خود شما است. باز هم باید نتیجه خود را به NHS راپور دهید (برای کسب معلومات به صفحه 15 مراجعه نمایید).

به این آدرس مراجعه کنید: gov.uk/report-covid19-result

اگر در اسکاتلند زندگی می کنید، به این آدرس مراجعه نمایید: covidtest.scot

چه کسی تست می دهد	تاریخ	تایم	نتیجه تست

کیت شما دارای اقلام ذیل است

اقلام	بسته 7 تایی
رهنمود برای استفاده (این کتابچه)	1
کست های تست که در بسته های سرغوج قرار دارند	7
بوتل خورد مایع (ویال های بافر استخراج)	7
تیوب های استخراج	7
سواب	7
خریظه های پلاستیکی کثافات	7

خلاصه معلومات بیشتر

<p>gov.uk/covid19-self-test-help</p>	<p>پشتیبانی اضافی برای تست شخصی نسخه های لسان بدیل و نمایش های ویدیویی رهنمایی برای آماده سازی و تست طفل</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/</p>	<p>رهنمایی برای قرنطینه خود و معلومات تداوی</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19</p>	<p>رهنمایی NHS در مورد COVID-19</p>
<p>111.nhs.uk یا اگر شما دسترسی به اینترنت ندارید با NHS 111 به تماس شوید</p>	<p>اگر شما اعراض و علائم COVID-19 را دارید و وضعیت شما بدتر شده، یا بعد از هفت روز خوب نشدید، از خدمات آنلاین ویروس کرونا NHS 111 استفاده کنید:</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children</p>	<p>اعراض و علائم COVID-19 در اطفال</p>
<p>coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</p>	<p>اگر شما توسط یکی از این وسایل صدمه دیدید، راپور بدهید به</p>
<p>gov.uk/report-covid19-result</p>	<p>نتیجه را به قسم آنلاین (انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی) راپور بدهید:</p>
<p>covidtest.scot</p>	<p>نتیجه را به قسم آنلاین (اسکاتلند) راپور بدهید:</p>
<p>gov.uk/get-coronavirus-test</p>	<p>سفارش یک تست پیشنهادی بر حال</p>
<p>با 119 به تماس شوید</p>	<p>صدمه دیدن، تخریب شدن یا گم شدن چیزی پشتیبانی لسانی (بشمول لسان اشاره بریتانیوی) نتیجه خود را راپور بدهید (اگر شما به اینترنت دسترسی ندارید)</p>

تأمین این دستگاه تنها به عنوان بخشی از استقرار اداره صحت و ایمنی اجتماعی (DHSC) براساس برنامه تست و ردیابی NHS مجاز است.



تولید کننده:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
Derby, DE1 3QB, United Kingdom (انگلستان)



معلومات سواب:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
آدرس: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020 Taizhou,
Zhejiang, People's Republic of China (جمهوری خلق چین)
یا



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
آدرس: Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (جمهوری خلق چین)



سیمبول ها

وقتی بسته آسیب دیده
است، از محصول
استفاده نکنید



جهت راهنمایی و
هشدارهای عمومی،
بخش "توصیه
درمورد انجام تست"
را مرور کنید

تولید کننده



دستگاه طبی
تشخیصی
درون تنی



مجدداً استفاده
نشود



استریل شده با
استفاده از
اکساید اتیلن



تاریخ انقضا



محتوی 7
تست مکمل



در حرارت 2 - 30
درجه نگاهداری شود



نمبر لات



طرز العمل های
استفاده را
مراعات کنید



نمبر کاتالوگ



نسخه 5 تاریخ اجرا 29/09/2021

این طرز العمل استفاده، مربوط به کست تست سریع انتی ژن SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا) میباشد، تولید کننده: SureScreen Diagnostics و کود تولید: COVID19AGVCGS7

این کتابچه راهنما، فقط مربوط به کست تست سریع انتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا) میباشد