


قبل از شروع تست، تمام این راهنما را با دقت بخوانید.
ممکن است این آزمایش با آزمایش هایی که قبلاً استفاده کرده اید، متفاوت باشد.

راهنمای گام به گام شما برای کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)

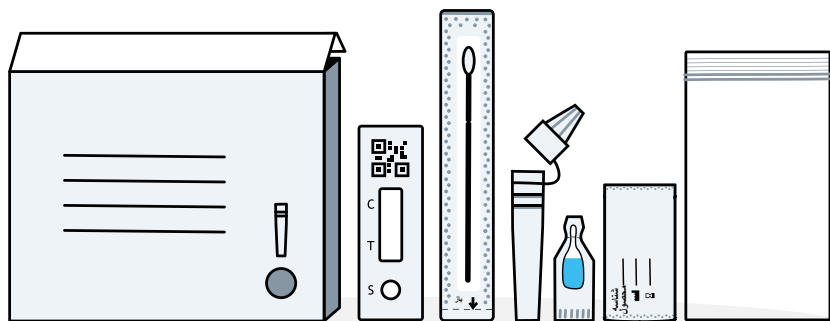

این دستورالعمل ها درباره کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)، کد محصول: COVID19AGVCGS7 هستند.
این راهنما توضیح می دهد که چگونه از خود، کودکان یا فرد دیگر آزمایش COVID-19 بگیرید، و چگونه نتایج خود را گزارش دهید.

نسخه های زبان جایگزین و نمایش های ویدیویی در این آدرس در دسترس است:

gov.uk/covid19-self-test-help

نتایج تمام آزمایش های خود را به NHS اعلام کنید

آنچه باید انجام دهید



راهنمای گام به گام شما

این دستورالعمل‌ها را بخوانید و مراحل را به ترتیب صحیح دنبال کنید. انجام هر آزمایش حدود 15 دقیقه طول می‌کشد و نتایج ظرف 10 دقیقه آماده خواهند شد.

صفحه 6	1 منطقه آزمایش خود را آماده کرده و محتویات کیت آزمایش خود را بررسی کنید
صفحه 8	2 تست خود را انجام دهید
صفحه 10	3 نمونه سواب خود را بگیرید
صفحه 12	4 نمونه سواب را پردازش کنید
صفحه 14	5 نتیجه خود را بخوانید
صفحه 15	6 نتیجه خود را گزارش دهید
صفحه 16	7 نتایج شما به چه معناست
صفحه 17	8 عملکرد تست
صفحه 17	9 تست خود را به شکلی ایمن دور بیندازید

حدوداً 1 نفر از هر 3 نفر مبتلا به COVID-19 نمی‌داند که به آن مبتلا است.

توصیه در مورد انجام تست

راهنمای ذخیره و نگهداری

- به صورت بسته بندی شده و در دمای اتاق (2-30 درجه سانتی گراد) نگهداری شود. آن را منجمد نکنید.
- کیت باید در دمای اتاق (در دمای 15 تا 30 درجه سانتی گراد) مورد استفاده قرار گیرد. اگر کیت در جایی خنک (با دمایی کمتر از 15 درجه سانتی گراد) نگهداری شده است، قبل از استفاده، آن را به مدت 20 دقیقه در دمای معمولی اتاق قرار دهید.
- برای هر نفر از یک کیت تست جداگانه استفاده کنید. از هر یک از اقلام موجود در بسته تست فقط می‌توانید یکبار استفاده کنید. از این اقلام مجدداً استفاده نکنید. لازم است نتیجه هر شخص را گزارش کنید.
- اگر از نظر دست و بینایی مشکلی دارید، ممکن است نیاز داشته باشید شخصی در مراحل گرفتن سواب و انجام تست به شما کمک کند.
- اگر پیرسینگ بینی دارید، قبل از انجام تست آن را بردارید.
- از استفاده از نمونه های خونی خودداری کنید. اگر در 24 ساعت گذشته خونریزی بینی داشته اید، قبل از انجام تست باید 24 ساعت صبر کنید.
- هنگام استفاده از سواب، سر سواب را لمس نکنید.
- از لمس کردن کیت تست و ناحیه پنجره نتایج که نمونه به آنجا اضافه می شود، خودداری کنید.

هشدار

- بعد از تاریخ انقضا از آن استفاده نکنید. لطفاً به تاریخ انقضای روی جعبه توجه کنید.
 - کاست تا زمانیکه آماده استفاده شود، باید در کیسه سر بسته باقی بماند.
 - این کیت های تست فقط برای مصرف انسانی طراحی شده اند.
 - از 15 دقیقه قبل از آزمایش از هیچگونه اسپری بینی استفاده نکنید.
 - این محصول از لاتکس لاستیکی طبیعی ساخته نشده است با این حال وجود یا استفاده از مقدار کمی لاتکس طبیعی در محصول هنگام تحویل به کاربر نهایی را نمی توان کاملاً منتفی دانست.
- این دستورالعمل ها را با دقت رعایت کنید، ممکن است این آزمایش با آزمایش هایی که قبلاً استفاده کرده اید، متفاوت باشد.

درباره این تست

چرا باید تست شخصی بدهید

این کیت تست شخصی COVID-19 یک تست سواب بینی است. از آن می‌توان برای افراد بدون علائم استفاده کرد، با این حال شما باید دستورالعمل‌های ملی را رعایت کنید تا دریابید که کدام نوع تست برای شما مناسب است.

اگر نتیجه آزمایش COVID-19 شما مثبت باشد، باید:

- به محدود کردن شیوع بیماری کمک کنید، شما و خانواده شما باید دستورالعمل‌های فعلی دولت را رعایت کنید: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- به افرادی که در 48 ساعت قبل از شروع علائم، یا در صورت عدم بروز علائم از روزی که تست شما مثبت شده است با آنها ارتباط نزدیک داشته‌اید یا محل‌هایی که به آنها سر زده‌اید، توصیه کنید که تست COVID-19 بدهند. همیشه از دستورالعمل‌های محلی و ملی پیروی کنید.

اگر نتیجه تست COVID-19 شما منفی است

به احتمال زیاد در زمان انجام تست مبتلا نبوده‌اید. با این حال، نتیجه تست منفی تضمین نمی‌کند که ویروس کرونا نداشته باشید. شما باید همواره دستورالعمل‌های دولت را رعایت کنید.

توصیه

در صورت داشتن نگرانی، کمک گرفتن را به تعویق نیندازید. به گزینه خود اعتماد کنید. در صورت دچار شدن به نشانه‌های COVID-19 یا در صورت ابتلا به COVID-19، از دستورالعمل‌های NHS پیروی کنید: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)

اگر دچار نشانه‌های COVID-19 باشید و وضعیت شما بدتر شود، یا پس از هفت روز بهبود نیابید، می‌توانید از سرویس آنلاین کروناویروس NHS 111 به نشانی 111.nhs.uk استفاده کنید.

اگر به اینترنت دسترسی ندارید، با **NHS 111** تماس بگیرید.

در شرایط اضطراری پزشکی **999** را شماره گیری کنید.

اطلاعات بیشتر درباره نشانه‌های ابتلای کودکان به COVID-19 را می‌توانید در نشانی زیر بیابید: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/)

این آزمایش برای چه کسی مناسب است




کودکان زیر 12 سال

یک فرد بزرگسال باید از کودکان زیر 12 سال تست بگیرد. اگر گرفتن آزمایش از یک کودک برای شما راحت نیست، این تست را انجام ندهید. اگر کودک احساس ناراحتی یا درد زیاد می کند، آزمایش را ادامه ندهید.



نوجوان 12-17 ساله

تست شخصی و گزارش دادن با نظارت یک شخص بزرگسال. در صورت لزوم، فرد بزرگسال می تواند آزمایش را انجام دهد.

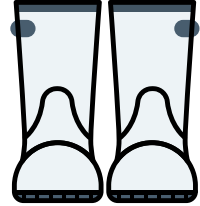

بزرگسالان

18 سال به بالا

تست شخصی و گزارش دادن، با دریافت کمک در صورت نیاز.

دفعات انجام تست

اینکه چند بار باید تست بدهید بسته به شرایط و دستورالعمل های ملی یا محلی فعلی متفاوت است.

از کجا می توان حمایت بیشتری دریافت کرد

در [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) اطلاعات بیشتری را درباره آزمایش از خود کسب کنید.

این کتابچه دستورالعمل ها فقط به کاست تست فوری آنتی ژن SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)، کد محصول: COVID19AGVCGS7 اشاره دارد.

کد محصول: COVID19AGVCGS7 اشاره دارد.

1. منطقه تست خود را آماده کنید

نکته مهم



کیت باید در دمای اتاق (در دمای 15 تا 30 درجه سانتی‌گراد) مورد استفاده قرار گیرد. اگر کیت در جایی خنک (با دمایی کمتر از 15 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شده است، قبل از استفاده، آن را به مدت 20 دقیقه در دمای معمولی اتاق قرار دهید.

شما به: یک تایمر (مانند ساعت مچی یا ساعت)، دستمال کاغذی، ضدعفونی کننده دست یا صابون و آب گرم نیاز خواهید داشت.


15
دقیقه



از 15 دقیقه قبل از آزمایش از هیچگونه اسپری بینی استفاده نکنید

این دستورالعمل راهنما را با دقت بخوانید.

1

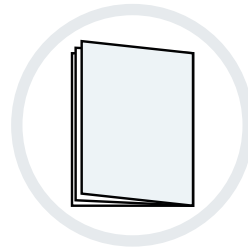

بلافاصله قبل از شروع آزمایش یک سطح صاف را پاک، تمیز و خشک کنید.

2



دستان خود را به مدت 20 ثانیه و با استفاده از صابون و آب گرم بشویید یا از ضدعفونی‌کننده دست استفاده نمایید.

3




این کتابچه دستورالعمل فقط به کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)

نتایج تمام آزمایش‌های خود را به NHS اعلام کنید


محتویات کیت تست خود را بررسی کنید

4

در جعبه تست شما باید این موارد وجود داشته باشد:

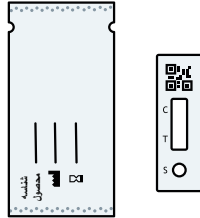


کاست تست در کیسه های سر بسته

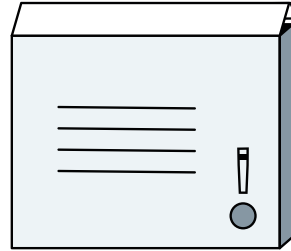

جعبه بیرونی با نگهدارنده لوله



سواب

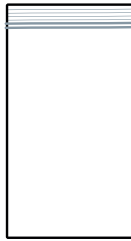

کیسه زیاله پلاستیکی



دستورالعمل مصرف
(این کتابچه)



لوله های استخراج



ساشه مایع (ویال های
بافر استخراج)

توصیه

اگر چیزی آسیب دیده، شکسته یا کم بود، چه باید کرد

اگر متوجه آسیب دیدگی، شکستگی یا کمبود چیزی شدید، لطفاً از کیت تست استفاده نکنید. از طریق تماس با مرکز تماس مشتریان می‌توانید نظرتان را اعلام کنید. تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان پذیر است.

شماره تماس: **119** (تماس با تلفن همراه و تلفن ثابت رایگان است).
ما به 200 زبان و همچنین زبان اشاره بریتانیایی پشتیبانی ارائه می‌دهیم.

اگر یک دستگاه به شما آسیب وارد کرد، به آدرس زیر گزارش دهید:


coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. تست خود را انجام دهید


5 کاست تست را از کیسه سر بسته خارج کنید و آن را روی یک سطح صاف و تمیز قرار دهید.

هشدار

پس از باز کردن، آن را ظرف 1 ساعت مصرف کنید، در غیر این صورت تست نامعتبر خواهد بود. کاست و محتویات کیسه را که بیش از 1 ساعت خارج از کیسه سر بسته بوده اند، دور بیندازید.

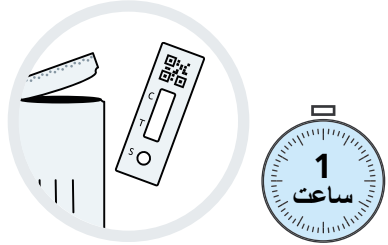

6 لوله استخراج را در نگهدارنده لوله استخراج (ناحیه دایره-شکل سوراخ شده روی درب جعبه) قرار دهید تا از ریختن مایع جلوگیری شود.

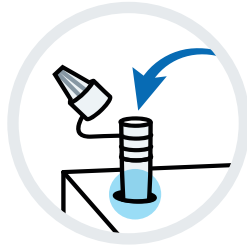

7 با دقت بچرخانید تا سائنه مایع باز شود. آن را دور از صورتتان نگهداشته و باز کنید و مراقب باشید که مایع نریزد.

هشدار

بافر استخراج حاوی موادی است که در صورت تماس با صورت یا پوست ممکن است باعث سوزش شود. اگر محلول با پوست یا چشم تماس پیدا کرد، آن را با آب فراوان بشویید. در صورت بروز خارش لطفاً به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.



8 لوله استخراج را باز کرده و تمام مایع سائنه را به آرامی به داخل لوله فشار دهید.

مراقب باشید و سائنه مایع خالی را داخل کیسه زباله پلاستیکی ارائه شده قرار دهید.



9 به آرامی در داخل یک دستمال کاغذی فین کنید و دستمال را به داخل سطل زباله دردار بیندازید.

اگر به فرد دیگری کمک می کنید یا از یک کودک تست می گیرید، به او کمک کنید تا فین کند و دستمال را به داخل سطل زباله دردار بیندازد.



10 دوباره دست هایتان را به مدت 20 ثانیه و با استفاده از صابون و آب گرم کاملاً بشویید یا از ضدعفونی کننده استفاده کنید.


اگر به فرد دیگری کمک می کنید یا از یک کودک تست می گیرید، به او کمک کنید تا دست هایش را بشوید.




11 سواب موجود در لفاف مهر و موم شده در جلوی خود را پیدا کنید. نوک نرم و پارچه ای آن را مشخص کنید.

نکته مهم

نوک نرم و پارچه ای سواب را لمس نکنید. در صورت لمس نوک پارچه ای سواب، سواب را دور بیندازید.

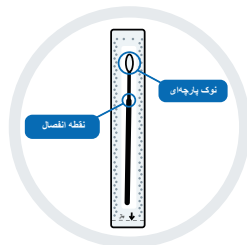

12 فقط زمانی که آماده استفاده از کیت هستید، بسته بندی سواب را از انتهای دیگر آن به آرامی باز کنید.

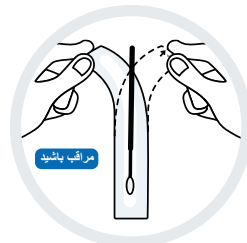

3. نمونه سواب خود را بگیرید


اگر از یک فرد دیگر آزمایش می‌گیرید، لطفاً به دستورالعمل‌های صفحه 11 رجوع کنید.

نکته مهم

در این تست فقط باید از بینی نمونه‌گیری شود.


نوک پارچه‌ای سواب را در یک سوراخ بینی وارد کنید (حدود 1.5 سانتی متر بالای بینی).

13

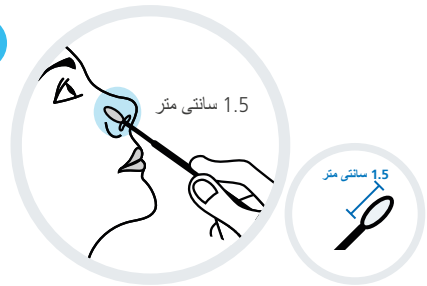


سواب را 5 بار و به مدت حداقل 5 ثانیه با یک حرکت دایره‌ای در داخل سوراخ بینی خود به آرامی بچرخانید. آن را آهسته بیرون بیاورید. نیازی به اعمال زور نیست و لازم نیست آن را زیاد به داخل سوراخ بینی فشار دهید. سواب را به بسته بندی کاغذی اصلی باز نگردانید.

14

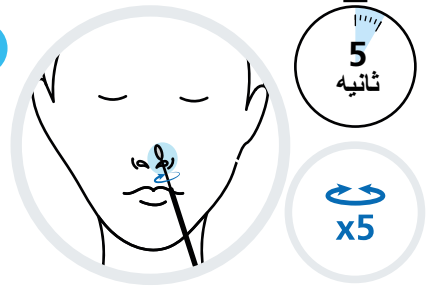

با استفاده از همان سواب، نوک پارچه‌ای سواب را داخل سوراخ بینی دیگر قرار دهید (که حدود 1.5 سانتی متر بالای بینی است).

15

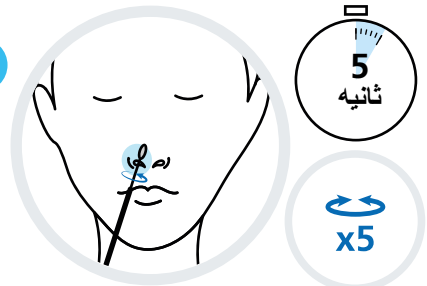

سواب را در یک حرکت دایره‌ای 5 بار و به مدت حداقل 5 ثانیه در داخل سوراخ بینی خود به آرامی بچرخانید.

این کتابچه دستورالعمل فقط به کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)

نتایج تمام آزمایش‌های خود را به NHS اعلام کنید

انجام آزمایش روی شخصی دیگر


توصیه

کودکان زیر 12 سال باید توسط یک بزرگسال تست شوند. دستورالعمل های زیر را درباره نحوه آماده سازی و گرفتن تست از کودک رعایت کنید. می توانید ویدئوی نمایش این کار را در آدرس زیر تماشا کنید:

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)


اگر از یک کودک تست می گیرید، کیت تست را به او نشان دهید و بگویید که می خواهید چه کار کنید. در صورت امکان، او را روی پای یک فرد بنشانید یا از یک فرد بخواهید که دست های او را بگیرد.

13

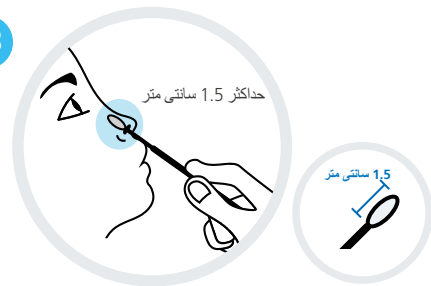


نوک پارچه ای سواب را در سوراخ بینی (حداکثر 1.5 سانتی متر) وارد کنید، یا این کار را ادامه دهید تا جاییکه احساس مقاومت کنید. سواب را 5 بار و به مدت حداقل 5 ثانیه با یک حرکت دایره ای در داخل سوراخ بینی او به آرامی بچرخانید. آن را آهسته بیرون بیاورید. نیازی به اعمال زور نیست و لازم نیست آن را زیاد به داخل سوراخ بینی او فشار دهید. سواب را به بسته بندی کاغذی اصلی باز نگردانید.

14

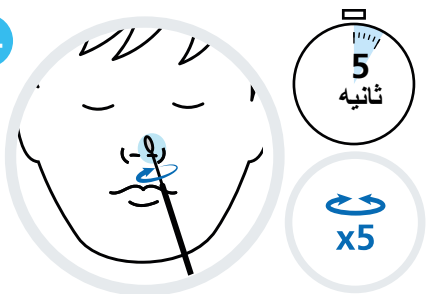

با استفاده از همان سواب، نوک پارچه ای سواب را داخل سوراخ بینی دیگر او قرار دهید (حداکثر 1.5 سانتی متر) یا این کار را ادامه دهید تا جاییکه احساس مقاومت کنید.

15

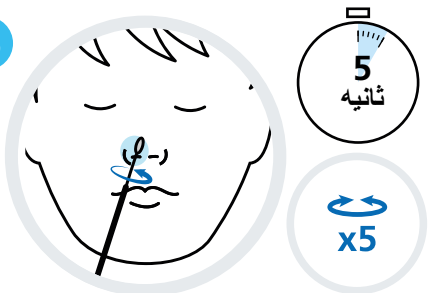

سواب را 5 بار و به مدت حداقل 5 ثانیه با یک حرکت دایره ای در داخل سوراخ بینی او به آرامی بچرخانید.

4. نمونه سواب را پردازش کنید

نکته


برای دستیابی به بهترین عملکرد، بعد از نمونه گیری سواب را در اسرع وقت آزمایش کنید.

لوله استخراج را بردارید و نوک پارچه ای سواب را در لوله استخراج قرار دهید، به طوریکه در مایع قرار بگیرد

با انگشت شست و انگشت های دیگر خود به پایین لوله فشار وارد کنید و از این طریق سر سواب را روی قسمت داخلی بدنه لوله محکم فشار دهید.

وقتی دارید فشار می دهید، سواب را به مدت حداقل 10 ثانیه بچرخانید.

16

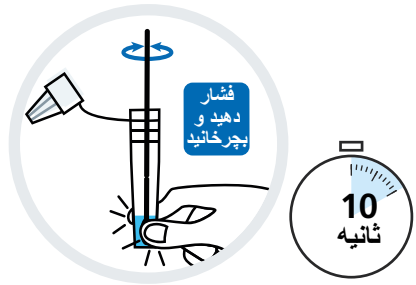

سواب بینی را به آرامی بالا بیاورید سپس سواب را از قسمت "نقطه انفصال" بشکنید. سر سواب را در لوله استخراج بگذارید.


دسته سواب را در کیسه زباله پلاستیکی ارائه شده قرار دهید.

17




درپوش قطره چکان را در بالای لوله استخراج ببندید.

18

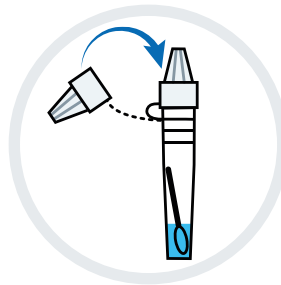

مطمئن شوید که کاست تست روی یک سطح تمیز و صاف قرار دارد.
در طول آزمایش کاست را تکان ندهید.

19

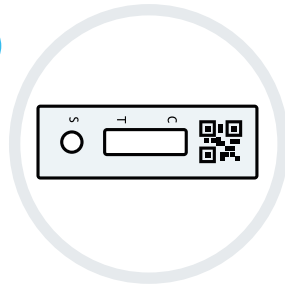


لوله استخراج را به آرامی فشار دهید تا 3 قطره از مایع در داخل حفره نمونه (S) بر روی نوار تست بریزد.

مطمئن شوید که مایع بریزد نه حباب هوا.

لوله استخراج را در یک کیسه زیباله پلاستیکی قرار دهید.

20

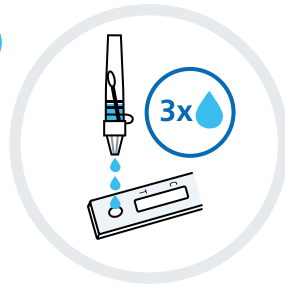


زمان را اندازه بگیرید و قبل از خواندن نتیجه 10 دقیقه صبر کنید.

وقتی آزمایش در حال انجام است، آن را حرکت ندهید.
بعد از 10 دقیقه نتیجه را تفسیر کنید. بعد از 20 دقیقه نتیجه را نخوانید.

قبل از اینکه نتیجه تست را بخوانید، باید 10 دقیقه کامل صبر کنید.

21

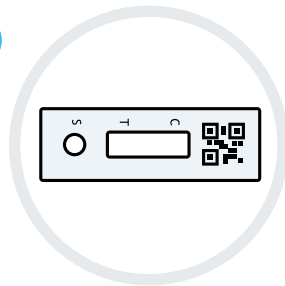

کد محصول: COVID19AGVCGS7 اشاره دارد.

5. نتیجه خود را بخوانید

نکته مهم

نگذارید تست بیشتر از 20 دقیقه طول بکشد. در این صورت تست اعتبار نخواهد داشت.




برای خواندن نتیجه 10 دقیقه صبر کنید.



نتیجه مثبت




دو خط ظاهر می‌شود. یک خط رنگی باید در قسمت خط کنترل (C)، و یک خط رنگی دیگر باید در قسمت خط آزمایش (T) باشد.
دو خط، یکی در کنار C و یکی در کنار T، حتی خطوط کم‌رنگ، نشان می‌دهد که نتیجه مثبت است.

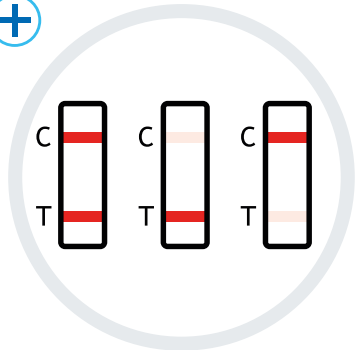

نکته مهم

اگر نتیجه آزمایش شما مثبت است باید خود را ایزوله کنید، خانواده شما باید دستورالعمل‌های دولت درباره ایزوله سازی خود را رعایت کنند:


[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

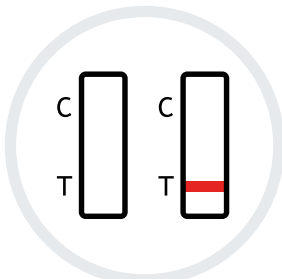

نتیجه نامعتبر



خط کنترل (C) ظاهر نمی‌شود.

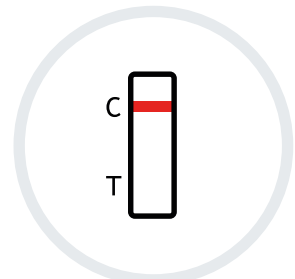

نتیجه منفی



یک خط رنگی در منطقه خط کنترل (C) ظاهر می‌شود. هیچ خطی در منطقه خط تست (T) ظاهر نمی‌شود.

این کتابچه دستورالعمل فقط به کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)


نتایج تمام آزمایش‌های خود را به NHS اعلام کنید

6. نتیجه خود را گزارش دهید

شما باید نتایج مثبت، منفی یا نامشخص خود را به NHS گزارش دهید

ثبت تمام نتایج تست‌ها به دانشمندان کمک می‌کند تا شیوع ویروس جدید را تشخیص دهند و در مورد نحوه واکنش به آن توصیه ارائه کنند.

اگر افراد فقط نتیجه مثبت را گزارش دهند، سطح موارد ابتلا بیشتر از حد واقعی به نظر خواهد رسید. بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا نامعتبر باشد، مطمئن می‌شوید که اطلاعات NHS دقیق است. برای گزارش دادن نتیجه خود به کد QR یا شماره شناسه در زیر آن نیاز دارید.

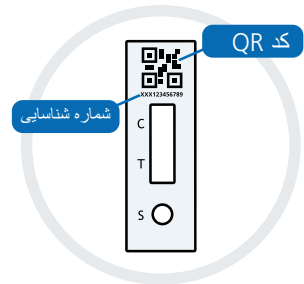

به صورت آنلاین گزارش بدهید (سریع‌ترین روش).
اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می‌کنید، به این آدرس بروید: gov.uk/report-covid19-result


اگر در اسکاتلند زندگی می‌کنید، به این آدرس بروید
covidtest.scot



یا با استفاده از تلفن گزارش دهید.

اگر نمی‌توانید نتیجه خود را به طور آنلاین گزارش دهید، با **119** تماس بگیرید (که از تلفن همراه و خط ثابت رایگان است).

تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان‌پذیر است.

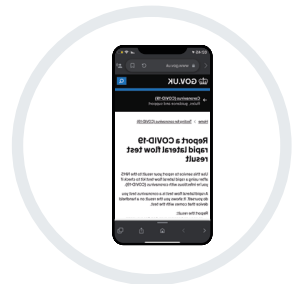

کد محصول: COVID19AGVCGS7 اشاره دارد.

7. نتایج شما به چه معناست

نتیجه زمانی تست خود را به پایان رسانده‌اید که نتیجه خود را گزارش دهید

نتیجه مثبت

اگر نتیجه آزمایش شما مثبت باشد، به احتمال زیاد در حال حاضر شما به COVID-19 مبتلا هستید. و خطر انتقال بیماری به دیگران وجود دارد. شما باید خود را ایزوله کنید. هنگامی که نتیجه خود را گزارش می‌دهید، اطلاعات بیشتری در مورد مراحل بعدی که باید انجام دهید در اختیارتان قرار می‌گیرد.

هشدار

شما، و هر فردی که با شما زندگی می‌کند، باید دستورالعمل ملی و محلی فعلی را رعایت کنید. این دستورالعمل در آدرس زیر موجود است:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

نتیجه منفی

اگر نتیجه آزمایش شما منفی است، احتمالاً در زمان انجام آزمایش ناقل نبوده‌اید. با این حال، نتیجه منفی آزمایش تضمینی برای عدم ابتلای شما به COVID-19 به شمار نمی‌رود.

اگر نتیجه تست شما منفی بود، باید قوانین و دستورالعمل‌های ملی و محلی را رعایت کنید از جمله شستن دست‌ها به‌طور منظم، حفظ فاصله اجتماعی و در صورت لزوم استفاده از پوشش صورت.

در صورت بروز علائم باید خود را ایزوله کنید و تست پیشنهادی فعلی را در gov.uk/get-coronavirus-test یا از طریق تماس با مرکز تماس با مشتریان به شماره 119 دریافت کنید. تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان‌پذیر است.

شما و خانواده شما باید دستورالعمل‌های ملی را رعایت کنید.

نتیجه نامعتبر



دریافت نتیجه نامعتبر بدین معنا است که تست به درستی انجام نشده است و نمی توان گفت آیا هنگام انجام تست شما به ویروس مبتلا شده بودید یا خیر. باید در اسرع وقت از یک تست دیگر موجود در بسته استفاده کنید. از هیچ‌یک از اقلام تست اول مجدداً استفاده نکنید و رویه تست را از مرحله 1 شروع کنید.

اگر مشکل همچنان ادامه داشت، بلافاصله استفاده از کیت‌های تست را قطع کنید. با مراجعه به: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test)، از طریق برنامه NHS COVID-19 یا تماس با مرکز تماس با مشتریان به شماره 119 یک بسته کیت تست جدید سفارش دهید. تماس با این خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب امکان‌پذیر است.

8. عملکرد تست

اگر کسی دارای سطوح بالای ویروس کرونا (COVID-19) باشد، احتمال اینکه نتیجه تست مثبت شود، بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب به احتمال زیاد افرادی که در حال حاضر مبتلا هستند شناسایی می‌شوند و باید بلافاصله خود را قرنطینه کنند.

9. تست خود را به شکلی ایمن دور بیندازید



بعد از اتمام تست، تمام محتویات استفاده شده را در کیسه زباله ارائه شده قرار دهید و آن را در زباله خانگی خود بیندازید.

پس از دور انداختن آن، دستهایتان را به‌طور کامل بشویید.

اطلاعات موجود در این کتابچه از تاریخ (29 سپتامبر 2021) صحیح است.

کد محصول: COVID19AGVCGS7

نام محصول: کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)

نتایج تست خود را یادداشت کنید

این اطلاعات برای سوابق خودتان است. باز هم باید نتیجه خود را به NHS گزارش دهید (برای کسب اطلاعات به صفحه 15 مراجعه کنید).

به این آدرس مراجعه کنید: gov.uk/report-covid19-result

اگر در اسکاتلند زندگی می‌کنید، به این آدرس بروید covidtest.scot

نتیجه تست	ساعت	تاریخ	چه کسی تست می‌دهد

این کتابچه دستورالعمل فقط به کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سوابق بینی) (طلا)

نتایج تمام آزمایش‌های خود را به NHS اعلام کنید

کیت شما دارای موارد زیر است

بسته 7 تایی	اقلام
1	دستورالعمل مصرف (این کتابچه)
7	کاست تست در کیسه های سر بسته
7	ساشه مایع (ویال های بافر استخراج)
7	لوله های استخراج
7	سواب
7	کیسه زباله پلاستیکی

خلاصه ای از اطلاعات بیشتر

<p>gov.uk/covid19-self-test-help</p>	<p>پشتیبانی اضافی درباره آزمایش از خود نسخه های زبان جایگزین و نمایش های ویدئویی راهنمای آماده سازی و گرفتن تست از کودک</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/</p>	<p>راهنمای ایزوله سازی خود و اطلاعات درمان</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19</p>	<p>راهنمای NHS درباره COVID-19</p>
<p>111.nhs.uk یا اگر به اینترنت دسترسی ندارید، با NHS 111 تماس بگیرید</p>	<p>اگر علائم COVID-19 را دارید و بیماری شما وخیم تر شده است، یا بعد از هفت روز بهتر نشده اید، از خدمات کروناویروس آنلاین NHS 111 استفاده کنید</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children</p>	<p>علائم COVID-19 در کودکان</p>
<p>coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</p>	<p>اگر یک دستگاه به شما آسیب وارد کرد، به آدرس زیر گزارش دهید</p>
<p>gov.uk/report-covid19-result</p>	<p>گزارش نتیجه به طور آنلاین (انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی):</p>
<p>covidtest.scot</p>	<p>گزارش نتیجه به طور آنلاین (اسکاتلند):</p>
<p>gov.uk/get-coronavirus-test</p>	<p>سفارش یک تست پیشنهادی فعلی</p>
<p>تماس با 119</p>	<p>چیزی آسیب دیده، شکسته است یا در بسته موجود نیست پشتیبانی زبان (اعم از زبان اشاره انگلیسی) گزارش نتیجه خود (اگر به اینترنت دسترسی ندارید)</p>

یادداشت ها:

این کتابچه دستورالعمل فقط به کاست تست فوری آنتی ژن SureScreen SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)

نتایج تمام آزمایش‌های خود را به NHS اعلام کنید

عرضه این دستگاه تنها توسط اداره بهداشت و مراقبت اجتماعی (DHSC) و تحت برنامه NHS تست و ردیابی مجاز است.



سازنده:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
Derby, DE1 3QB, United Kingdom (بریتانیا)



اطلاعات سواب:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
آدرس: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020 Taizhou,
Zhejiang, People's Republic of China (جمهوری خلق چین)
یا



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
آدرس: Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (جمهوری خلق چین)



علامات

وقتی بسته آسیب دیده است، از محصول استفاده نکنید



سازنده

استریل شده با استفاده از اکسید اتیلن

STERILE EO

در دمای 2 - 30 °C درجه نگهداری شود



برای اطلاع از راهنمایی و هشدارهای کلی، به بخش "توصیه درباره انجام تست" رجوع کنید



دستگاه پزشکی تشخیصی درون تنی



تاریخ انقضا



شماره گروه



مجدداً استفاده نشود



مناسب برای انجام 7 تست



دستورالعمل‌های استفاده را رعایت کنید



شماره کاتالوگ



نسخه 5 تاریخ اجرا 29/09/2021

این دستورالعمل‌های مصرف به کاست تست فوری آنتی ژن SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)، سازنده: SureScreen Diagnostics و کد محصول: COVID19AGVCGS7 مربوط می شود

این کتابچه دستورالعمل فقط به کاست تست فوری آنتی ژن SARS-CoV-2 (سواب بینی) (طلا)