


مخکې له دې چې تاسو ازموینه پیل کړئ دا بشپړ لارښود په غور ولولئ.
دا ازموینه ممکن د هغه څخه توپیر ولري چې تاسو دمخه کارولي وي.

د SureScreen SARS-CoV-2 اینتي جین گړندی ازمویني کپسټ (د پزې سواب) (طلايي) په اړه ستاسو ګام په ګام لارښود

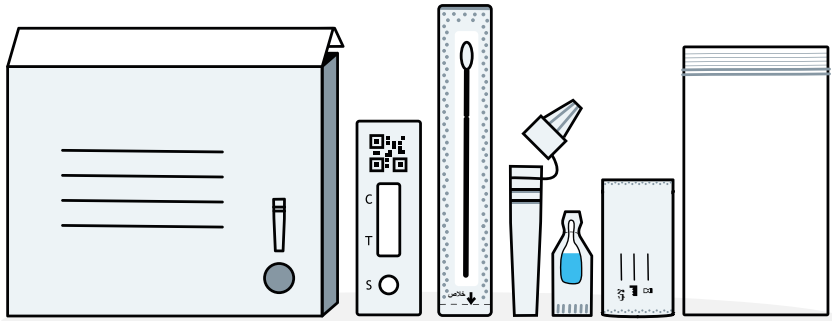

د پیژندګلوی دې کتابچې ته یوازې د SureScreen SARS-CoV-2 اینتي جین گړندی ازمویني کپسټ
(د پزې سواب) (طلايي) ویل کیږي، د محصول کوډ: COVID19AGVCGS7.
په دې لارښود کې دا تشریح شوي چې د COVID-19 لپاره به خپله، د خپل ماشوم یا کوم بل شخص ازموینه
څنګه کوئ، او خپلې پایلې به څنګه راپور کوئ.

همدغه راز، د ژبي بڼې او د ویديو نموني دلته موجودې دي:

gov.uk/covid19-self-test-help

د خپلې ازموینې ټولې پایلې NHS ته راپور کړئ

تاسو څه کولو ته اړتیا لرئ



ستاسو ګام په ګام لارښود

دا لارښوونې وګورئ او په سم ترتیب دا ګامونه تطبیق کړئ. هره ازموینه د چمتووالي لپاره شاوخوا 15 دقیقې وخت اخلي او پایلې په 10 دقیقو کې چمتو کيږي.

- | | |
|---------|--|
| پاڼه 6 | 1 د خپلې ازموینې ساحه چمتو کړئ او د خپلې ازموینې د کیت محتویات وګورئ |
| پاڼه 8 | 2 خپله ازموینه تنظیم کړئ |
| پاڼه 10 | 3 د خپل سواب نمونه واخلئ |
| پاڼه 12 | 4 د سواب نمونه پروسس کړئ |
| پاڼه 14 | 5 خپله پایله ولولئ |
| پاڼه 15 | 6 خپله پایله راپور کړئ |
| پاڼه 16 | 7 ستاسو پایلې څه معنی لري |
| پاڼه 17 | 8 د ازموینې اجرا |
| پاڼه 17 | 9 په خوندي توګه خپله ازموینه تنظیم کړئ |

په 3 کې شاوخوا 1 کس چې COVID-19 لري نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي.

د پیژندګلوی دې کتابچې ته یوازې د SureScreen SARS-CoV-2 اینټي جین ګرندۍ ازموینې کبست (د پزې سواب) (طلايي) ویل کيږي

د خپلې ازموینې ټولې پایلې NHS ته راپور کړئ

د ازموينې د ترسره کولو په اړه مشوره

د ذخيره کولو او اداره کولو لارښوونه

- په کڅوره کې يې د خوني په تودوخه (2-30 سېنټي گړېده) کې کيږدئ. کنگل کوي يې مه.
- دا کيټ بايد د خوني په تودوخه (له 15 سېنټي گړېده څخه تر 30 سېنټي گړېده پورې) استعمال کړل شي. که کيټ په يخ ځای کې کيښودل شوی وي (له 15 سېنټي گړېده څخه کم)، نو د استعمالولو مخکې يې د خوني په عادي تودوخه کې تر 20 دقيقو پورې پرېږدئ.
- د هر شخص لپاره د ازموينې د جلا کيټ څخه استفاده کوي. تاسو د ازموينې په دې کيټ کې موجود کوم شی يوازې يو ځل کارولی شئ. دغه توکي بيا مه استعمالوي. تاسو بايد د هر شخص پایله راپور کړئ.
- که تاسو په خپلو لاسو يا نظر کې څه ستونزې لرئ، نو بايد په سواب کولو او د ازموينې په پروسه کې د بل کوم شخص مرستې ته اړتيا ولرئ.
- که تاسو پزې ته څه شی اچولی وي، د ازموينې مخکې دغه شی لرې کړئ.
- په وينې ککړې شوي نموني مه استعمالوي. که په تير شوي 24 ساعتو کې ستاسو د پزې څخه وينه تللي وي، نو د ازموينې کولو نه مخکې بايد تر 24 ساعتو پورې انتظار وکړئ.
- کله چې سواب اداره کوي، نو د سواب څوکه مه لمس کوي.
- د ازموينې کيټ او کوم ځای چې نمونه ورکول کيږي، هلته د پایلو کړکې مه لمس کوي.

خبرداري

- د ټاکلي وخت تيريدو وروسته يې مه استعمالوي. لطفاً په بکس ټاکل شوي نېټه تطبیقوي.
- دا کيسټ بايد د استعمالولو پورې په بنده کڅوره کې وي.
- د ازموينې دا کيټونه يوازې د انساني استعمال لپاره جوړ کړل شوي دي.
- د ازموينې نه 15 دقيقې مخکې د پزې سپري مه استعمالوي.
- دا محصول د طبيعي ربر لاتيکس څخه نه دی جوړ شوی، که څه هم په محصول کې د طبيعي ربر لاتيکس شتون يا نېنې لکه څنگه چې د پای کاروونکي ته سپارل کيږي په بشپړ ډول خارج کيدی نه شي.

دا لارښوونې په خیر سره تطبیقوي، دا ازموینه پټایي له هغه ازموينو څخه مختلف وي چې تاسې مخکې کړي وي.

د دې ازموينې په اړه

ولې تاسو بايد پخپله د ځان ازموينه وکړئ

د COVID-19 د ځان ازموينه د پزې لپاره د سواب ازموينه وي. دا ازموينه هغه کسان کولى شي چې علامه نه لري، لاکن، د دې کتلو لپاره تاسو بايد ملي لارښوونې تعقيبوي چې کوم ډول ازموينه ستاسو لپاره سمه ده.

که د COVID-19 لپاره ستاسو ازموينه مثبتې راشي، نو تاسو بايد:

- د دې ناروغۍ د خپرېدو په مخنيوي کې مرسته وکړئ، تاسو او ستاسو کورنۍ بايد د حکومت اوسنۍ لارښوونې تعقيبوي: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
- هغه خلکو او ځايونو ته خبر ورکړئ چې تاسو ورسره نږدې اړيکه لرلې وي، او تاسو په تېر شوي 48 ساعتو کې ورته تللي ياست، مخکې له دې چې ستاسو علايم پيل شي، يا له هغه ورځې راهيسې چې د ازمويني پايله مثبت څرگنده شوي، که څه علايم موجود نه وي، چې ممکن د COVID-19 ناروغۍ لپاره ازموينه وکړئ. تل محلي او ملي لارښوونې تعقيبوي.

که د COVID-19 لپاره ستاسو ازموينه منفي راشي

دا احتمال لري چې تاسو د آزمويني د ترسره کولو پر مهال ساري ناروغي نه لرله. که څه هم، د ازمويني منفي پايله دا تضمين نه وړاندې کوي چې تاسو کورونا وېروس نه لرئ. تاسو بايد په دوام سره حکومتي لارښوونې تعقيبوي.

مشوره

که تاسو انډيمينن ياست، نو د مرستې په ترلاسه کولو کې ځنډ مه کوئ. په خپل شعور باور وکړئ.

که تاسو د COVID-19 علايم لرئ يا د COVID-19 په ناروغۍ اخته يئ، لطفاً د NHS لارښوونه تعقيبوي:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

که تاسو د COVID-19 علايم لرئ او ستاسو وضعيت خرابيږي، يا تاسو له اوو ورځو وروسته بڼه نه ياست، نو د

111 NHS آنلاین کورونا وېروس خدمت وکاروئ 111.nhs.uk

که تاسو انټرنېټ ته لاسرسۍ نه لرئ، نوته زنگ ووهئ **NHS 111**.

د طبي بېرني وضعيت لپاره **999** ته زنگ ووهئ.

تاسو په ماشومانو کې د COVID-19 د علايمو په اړه نوره مشوره دلته ترلاسه کولى شئ:

nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/

دا ازموینه د چا لپاره مناسبه ده




له 12 کالو څخه کم عمر ماشومان

یو بالغ کس باید له 12 کالو څخه د کم عمر ماشومانو ازموینه وکړي. که د ماشوم په ازموینه کولو کې تاسو ناکراري احساسوئ، نو دا ازموینه مه کوئ. که ماشوم زیاته ناکراري یا درد احساسوي، نو ازموینه ته دوام مه ورکوئ.



هغه ځوانان چې عمر یې 12-17 کاله وي

د ځان ازموینه او د لویانو د څارني سره راپور ورکول. بالغ کسان ممکن د اړتیا په صورت کې ازموینه ترسره کړي.

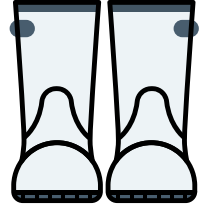

هغه لویان چې عمر یې له 18 کالو څخه زیات وي

ځان ازموینه او راپور، د مرستې سره که اړتیا وي.

څو ځله باید ازموینه وکړل شي

دا چې تاسو څو ځله باید ازموینه وکړئ ممکن ستاسو د حالاتو او اوسني ملي یا ځایي لارښوونو پورې اړه ولري.

چیرته اضافي ملاتړ ترلاسه کړئ

د ځان د ازموینې په اړه نور معلومات دلته ترلاسه کړئ: gov.uk/covid19-self-test-help

د لارښوونې دې کتابچې ته یوازې SARS-CoV-2 انتي جین گړندی ازموینه کېسټ (د پزې سواب) (طلايي)، ویل کېږي، د محصول کوډ: COVID19AGVCGS7.

د محصول کوډ: COVID19AGVCGS7

د خپلې ازموینې ټولې پایلې NHS ته راپور کړئ

1. د خپلي ازمويني ساحه مو چمتو كړئ

مهم



دا كيبټ بايد د خوني په تودوخه (له 15 سېنټي گريډه څخه تر 30 سېنټي گريډه پورې) استعمال كړل شي. كه كيبټ په يخ ځاى كې كينودل شوى وي (له 15 سېنټي گريډه څخه كم)، نو د استعمالولو مخكې يې د خوني په عادي تودوخه كې تر 20 دقيقو پورې پرېږدئ.

تاسو به اړتيا لرئ: وخت تاكونكي ته (لكه كړئ يا ساعت)، تشوز، د لاسو پاكوونكى يا سابون او گرمي اوبه.


15
دقيقې



د ازمويني نه 15 دقيقې
مخكې د پزې سپرې مه
استعمالوئ

د هداياتو دا لارښود په غور سره ولولئ.

1

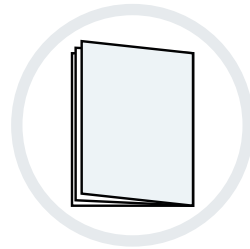

د ازمويني له پيل څخه مخكې سمدستي يوه هواره
سطحه پاكه، صفا او وچه كړئ.

2



د 20 ثانيو پورې په ښه توگه خپل لاسونه په گرمو اوبو
او سابون يا لاس پاكوونكي سره ومينځئ.

3




د پيژندگلوۍ دى كټاچې ته يوازې د SureScreen SARS-CoV-2 اينټي جين گړندۍ ازمويني كېسټ (د پزې سواب) (طلايي) ويل كيږي

د خپلي ازمويني ټولې پايلې NHS ته راپور كړئ


د خپل کیت توکي وگورئ

4

د ازموينې په خپل بکس کې تاسو بايد لاندې شيان ولرئ:

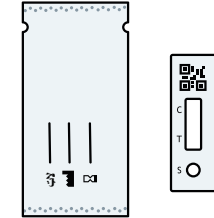

د ازموينې کېستې په بنده کڅوره کې

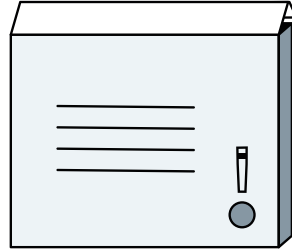


بهرنی بکس د ټيوب نيونکي سره



سوابونه



د پلاستيکي فضله موادو بستې

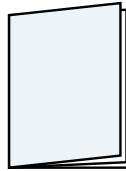

د استعمال لپاره لارښوونې (دا کتابچه)



د استخراج ټيوبونه



د مايعی کڅورې (د استخراج بفر بوتلگي)

مشوره

که څه شی زيانمن، مات يا ورک شوی وي نو څه به کوئ

که کوم شی زيانمن شوی، مات شوی يا بي درکه شوی وي، لطفأ د ازموينې کيټ مه استعمالوئ. تاسو کولی شئ د پيرودونکي د تماس مرکز ته په زنگ وهلو سره خپل نظر ورکړئ. تلفونونه هره ورځ خلاص وي، د سهار له 7 بجو څخه تر ماخوستن 11 بجو پورې.

زنگ ووهئ: **119** (له وړيا گرځنده تلفون او ليني تلفون څخه وړيا).
مور په 200 ژبو او همدارنگه د بریټانيې په اشاروي ژبه ملاتړ وړاندې کوو.

که د کومي آلي څخه زيانمن شئ، دلته راپور ورکړئ:

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk


2. خپله ازموینه تنظیم کړئ

د ازموینې کېسټ د بندې کڅوړې څخه راوباسئ او په پاکه همواره سطحه یې کیږدئ.

5


څېړداری

کله چې دا خلاص کړئ، یوازې په 1 ساعت کې دننه یې استعمالوئ، گڼې نو ازموینه به خرابه شي. د کڅوړې کېسټ او هغه مواد لرې کړئ چې له 1 ساعت څخه د زیات وخت لپاره د بندې کڅوړې څخه بهر و.

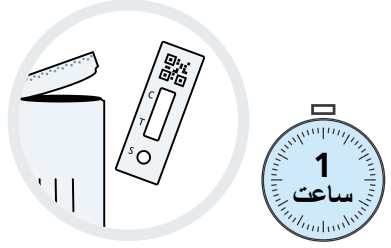

د استخراج ټیوب د استخراج د ټیوب په نیوونکي (د بکس په سر په چاپیره سوړې شوي ساحه) کې پر ځای کړئ څو مایع تویه نه شي.

6

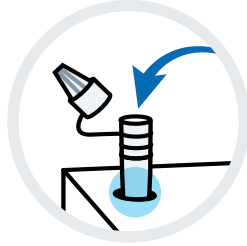

په احتیاط سره د مایعې کڅوړه په تاوهلو سره خلاصه کړئ. د خپل مخ سره یې لرې خلاصوئ او احتیاط کوئ چې مایع تویه نه شي.

7

څېړداری

د استخراج په بوتلکي کې داسې مواد شامل وي چې که د مخ یا پوستکي سره لمس شي نو د څارښت لامل کیږي. که دغه محلول په پوستکي یا سترگه ولگي، په ډیرو اوبو یې وینځئ. که پوستکي مو څارښت کوي، لطفاً طبي پاملرنه ترلاسه کړئ.



د استخراج ټیوب خلاص کړئ او په کراره له کڅوړې څخه ټوله مایع ټیوب ته واچوئ.

8

پام کوئ او د خالي مایع کڅوړه د فضله موادو په پلاستيکي بسته کې واچوئ.



9 په نرمۍ سره په تښو کې خپله پزه سوند وھې او دغه تښو بند ډبې ته واچوئ.

که تاسو د بل کوم شخص سره مرسته کوئ یا د ماشوم ازموینه کوئ، مرسته ورسره وکړئ چې خپله پزه سوند وھې او دغه تښو بند ډبې ته واچوي.



10 د 20 ثانيو پورې په ښه توګه خپل لاسونه په ګرمو اوبو او سابون يا لاس پاکوونکي سره ومنيئ.


که تاسو د بل کوم شخص سره مرسته کوئ یا د ماشوم ازموینه کوئ، د هغوی سره په لاسونو مینځلو کې مرسته وکړئ.




11 خپلې مخې ته په بنده ګڅوره کې سواب ومومئ. نرمه ټوکري څوکه معلومه کړئ.

مهم

د سواب نرمه ټوکري څوکه مه لمس کوئ. که د سواب نرمه ټوکري څوکه لمس شوي وي، دغه سواب ضايع کړئ.

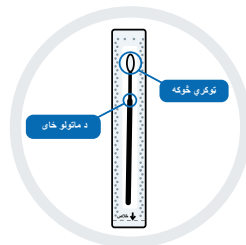

12 د بلې څوکي نه په نرمۍ سره د سواب ګڅوره خلاصه کړئ، یوازې هغه وخت کله چې د استعمال لپاره چمتو شوي.

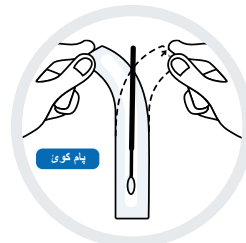

3. د خپل سواب نمونه واخلي


که تاسو د بل کوم شخص ازموینه کوئ، لطفأ په 11 مه پانه لارښوونو ته مراجعه وکړئ.

مهم

دا ازموینه باید یوازې د پزې د نموني په کارولو سره وکړل شي.


په یوه سپریمه کې د سواب ټوکري څوکه دننه کړئ (شاوخوا تر 1.5 سېنټي میټره پورې پخپله پزه کې).

13

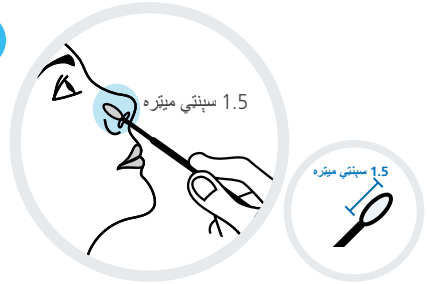


په نرمې سره په دایروي شکل کې سواب په خپله سپریمه کې دننه چاپیره 5 ځله لږ تر لږه تر 5 ثانیو پورې ومړئ. په آرام سره یې لري کړئ. فشار کولو ته اړتیا نشته او تاسو باید د زیاته دننه کولو لپاره دننه فشار ورنه کړئ. سواب د خپل کاغذ په کڅوره کې بیا مه ږدئ.

14

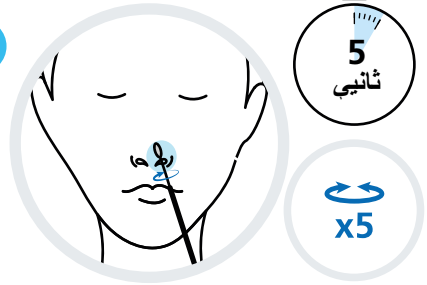

په ورته سواب استعمالولو سره، د سواب ټوکري څوکه په بله سپریمه کې دننه کړئ (چې ستاسو تر پزې پورې شاوخوا تر 1.5 سېنټي میټره پورې وي).

15

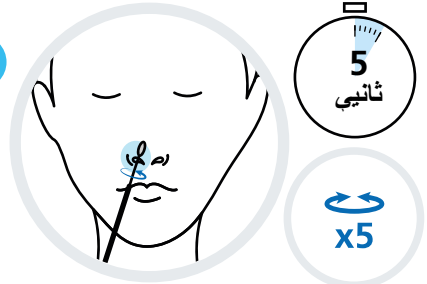

په نرمې سره په دایروي شکل کې سواب په خپله سپریمه کې دننه چاپیره 5 ځله لږ تر لږه تر 5 ثانیو پورې ومړئ.

د پیژندګلوی دی کتاچې ته یوازې د SureScreen SARS-CoV-2 اینټي جین ګړندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طلايي) ویل کېږي

په بل چا باندې ازموینه ترسره کول


مشوره

له 12 کالو څخه د کم عمر ماشومانو ازموینه باید بل لوی شخص وکړي. د ماشوم د چمتووالي او ازموینې لپاره لاندې لارښوونې تعقیبوی. تاسو د نمونې وپښو دلته کتلی شئ

gov.uk/covid19-self-test-help


که تاسو د ماشوم ازموینه کوئ، هغوی ته د ازموینې کیت وښایئ او دا ورته ووايي چې تاسو څه کوئ. که ممکن وي، هغوی د چا په غیر کې کینوی یا چا ته ووايي چې د لاس نه یې ونیسي.

13

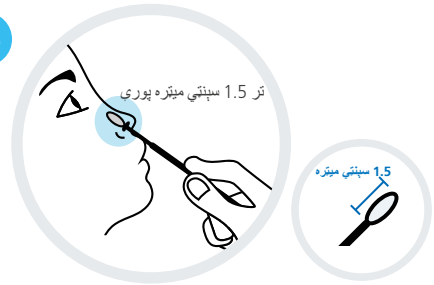


د هغوی په سپریمه کې د سواب ټوکري څوکه (تر 1.5 سینټي میټره) پورې دننه کړئ، یا تر هغې چې مقاومت احساس کړي. په نرمۍ سره په دایروي شکل کې سواب د هغوی په سپریمه کې دننه چاپیره 5 ځله لږ تر لږه تر 5 ثانیو پورې ومړئ. په آرام سره یې لږې کړئ. فشار کولو ته اړتیا نشته او تاسو باید د هغوی په سپریمو کې د زیاته دننه کولو لپاره دننه فشار ور نه کړئ. سواب د خپل کاغذ په کڅوره کې بیا مه ردئ.

14

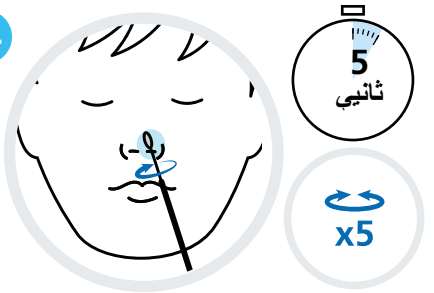

په ورته سواب استعمالولو سره، د سواب ټوکري څوکه د هغوی په بله سپریمه کې دننه کړئ (1.5 سینټي میټره پورې) یا څو تاسو مقاومت احساس کړئ.

15

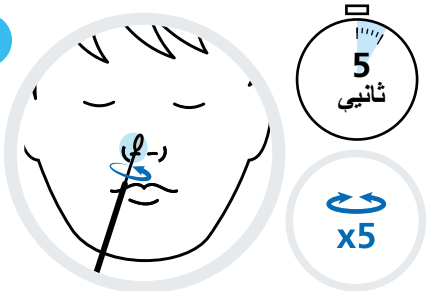

په نرمۍ سره په دایروي شکل کې سواب د هغوی په سپریمه کې دننه چاپیره 5 ځله لږ تر لږه تر 5 ثانیو پورې ومړئ.

4. د سواب نمونه پروسس کړئ

لارښوونه


د ښه اجرا لپاره، څومره چې ژر ممکن وي، د نمونې تر لاسه کولو وروسته د سواب ازموینه وکړئ.

د استخراج ټیوب راواخلئ او د سواب ټوکري څوکه د استخراج په ټیوب کې کيږدئ، داسې چې په مایع کې دننه وي.

ټوکري څوکه ته د ټیوب په دننه برخه کې ځور ورکړئ داسې چې د ټیوب ویخ پخپلې غټې گوټي یا گوټو وځوروي.

کله چې ځور ورکوي، تر 10 ثانیو پوري دغه سواب تاوهئ.

16

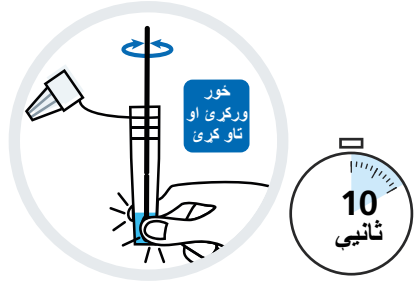

لږ شان د پزې سواب پورته کړئ، بیا په "ماتیدونکي" پوزسیون کې دغه سواب مات کړئ. د سواب څوکه د استخراج په ټیوب کې پریږدئ.


د سواب لاستی د فضلہ موادو په پلاستیکی څخوره کې واچوئ.

17




د استخراج په ټیوب لپاسه د ډرافر سر کلک کړئ.

18

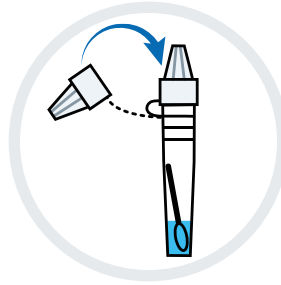


19 دا ډاډه کوی چې د ازموینې کېسټ په پاکه او همواره سطحه پروت دی. د ازموینې پرمهال کېسټ ته حرکت مه ورکوی.

19

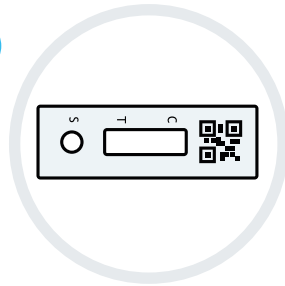

20 په نرمی سره د استخراج په ټیوب خور وکړئ چې له مایع څخه 3 ځاڅکي په ښه توګه (S) د ازموینې په پټی واچوی.

20

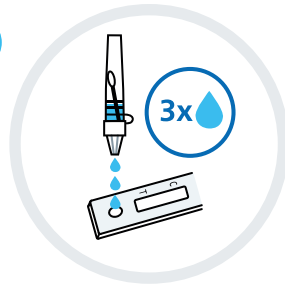


ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو مایع اچولی ده، نه د هوا حباب.

د استخراج ټیوب د فضله موادو په پلاستيکي کڅوره کې کېږدئ.

21 وخت ټاکونکی چالان کړئ او د پایلي لوستلو مخکې تر 10 دقیقو پورې انتظار وکړئ.

21

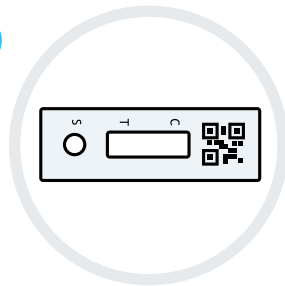

کله چې ازموینه روانه وي، دې ته حرکت مه ورکړئ. 10 دقیقې وروسته پایله ترلاسه کړئ. د 20 دقیقو وروسته دا مه لولئ.

مخکې له دې چې خپله ازموینه ولولئ، د پرمختګ تر 10 بشپړو دقیقو پورې باید انتظار وکړئ.

5. خپه پایله ولولئ

مهم

از مومینه داسی مه پریردی چی له 20 دقیقو سره زیات وخت روانه وی. په دی سره به از مومینه خرابه شی.



د پایلی لوستلو لپاره د 10 دقیقو انتظار وکړئ.




مثبته پایله



دوه کرینې ښکاره کیږي. یوه رنگه کرینه باید د (C) سیمې د کنترول په کرینه کې وي، او بله رنگه کرینه باید د (T) سیمې د آزمونې په کرینه کې وي.


دوه کرینې، یوه د C سره نږدې او بله T ته نږدې، حتی خړی کرینې، څرګندوي چې از مومینه مثبت ده.

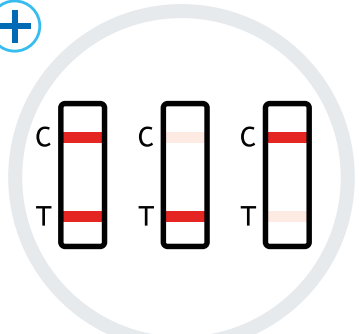

مهم

که ستاسو از مومینه مثبت وي، باید ځان جلا کړئ، ستاسو کورنی باید د ځان د جلا کولو په اړه حکومتي لارښوونې تعقیبوي:


[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

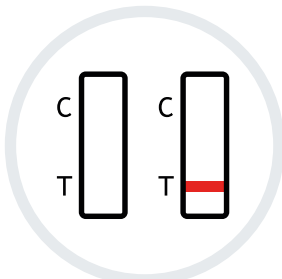

باطل پایله



د کنترول کرینه (C) نه ښکاره کیږي.

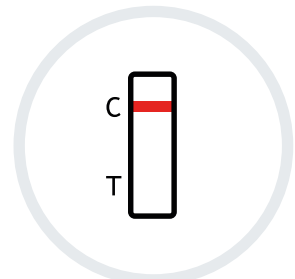

منفي پایله



یوه رنگه کرینه د کنترول کرینې په (C) سیمه کې ښکاره کیږي. د از مومینې د کرینې سیمه (T) کې هیڅ کرینه نه ښکاره کیږي.


د پیژندګلوی دی کتابچې ته یوازي د SureScreen SARS-CoV-2 اینټي جین ګرندئ از مومینې کېسټ (د پزی سواب) (طلايي) ویل کیږي

6. خپله پایله راپور کړئ

تاسو باید NHS ته خپل مثبت، منفي یا خرابي شوي پایلي راپور کړئ

د ټولو ازموینو پایلو ثبت کول له ساینس پوهانو سره د نوي ویروس د خپریدو په موندلو کې مرسته کوي او وړاندیز کوي چې ځنګه غبرګون ونښئ.

که خلک یوازې مثبت پایله راپور کړي، د قضیې کچه د دوی په پرتله لوړه ښکاري. نو حتی که ستاسو پایله منفي یا باطله وي، تاسو به ډاډ ترلاسه کړئ چې د NHS معلومات دقیق پاتې شي. تاسو د خپلي پایلي د راپور ورکولو لپاره د QR کوډ، یا د هغې لاندې د ID شمیرې ته اړتیا لرئ.

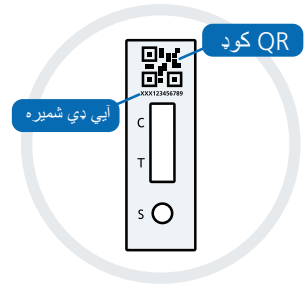

آنلاین (ګرندی) راپور ورکړئ. که تاسو په انگلستان، ولز یا شمالي آیرلینډ کې ژوند کوئ، نو لاندې ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ: gov.uk/report-covid19-result



که تاسو په سکاټلنډ کې ژوند کوئ، نو لاندې ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ: covidtest.scot

یا د تلیفون له لارې راپور ورکړئ.

که تاسو خپله پایله آنلاین نه شئ راپور کولی، 119 ته زنگ ووهئ (د ګرځنده او مځکني تلیفونونو څخه ورپا).

اړیکې هره ورځ خلاصې وي. د سهار له 7 بجو څخه تر ماخوستن 11 بجو پورې.



د محصول کوډ: COVID19AGVCS7

د خپلي ازموینې ټولې پایلي NHS ته راپور کړئ

7. ستاسو پایلی څه معنی لري

کله چې تاسو خپله پایله راپور کوئ، تاسو یوازې خپله ازموینه بشپړه کړې

مثبه پایله +

که تاسو مثبت پایله ترلاسه کړئ، نو دا امکان شتون لري چې تاسو اوسمهال په COVID-19 ناروغۍ اخته یئ او نورو ته د ناروغۍ د انتقالولو خطر لری. تاسو باید ځان جلا کړئ. کله چې تاسو خپله پایله راپور کوئ، تاسو ته به د راتلونکي اقداماتو په اړه نور معلومات درکړل شي.

څېړداری

تاسو او هر هغه کس چې له تاسو سره اوسېږي، باید اوسني ملي او محلي لارښوونه تعقیبوي. دا دلته موندل کیدی شي:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

منفي پایله -

که تاسو منفي پایله ترلاسه کړئ، نو دا امکان شتون لري چې د ازموینې کولو پرمهال تاسو دا ناروغی نه لرله. اما، د ازموینې منفي پایله دا تضمین نه وړاندې کوي چې تاسو COVID-19 نه لری.

که ستاسو د ازموینې پایله منفي وي، تاسو باید د ملي او ځایي مقرراتو او لارښوونو تعقیب ته دوام ورکړئ، چې په دې کې له اړتیا سره سم په منظمه توګه لاس مینځل، ټولنیز واټن ساتل او د مخ ماسکونه اچول شامل دي.

که ستاسو علایم څرګند شي، نو باید ځان جلا کړئ او اوسنی تجویز شوي ازموینه په دې ادرس وکړئ: gov.uk/get-coronavirus-test یا په 119 د مشترې د اړیکې مرکز ته په زنگ وهلو سره. تلیفونونه هر ورځ خلاص وي، د سهار له 7 بجو څخه تر ماخوستن 11 بجو پورې.

تاسو او ستاسو کورنۍ باید ملي لارښوونې تعقیبوي.

باطل پایله



که تاسو باطل پایله ترلاسه کړئ، دا په دې معنی چې ازموینه په سمه توګه نه ده شوې او دا ویل ممکن نه دي چې د ازموینې کولو پرمهال تاسو دا وایرس لرلو او کنه. څومره ژر چې ممکن وي، تاسو باید له دغه بستي څخه بله ازموینه وکړئ. د لومړۍ ازموینې څخه کوم شی بیا مه استعمالوئ، او د ازموینې کړنلاره د ګام 1 څخه بیا پیل کړئ.

که ستونزه بیا هم شتون لري، سمدلاسه د دغه ازموینې د کيټ کارول بند کړئ. د ازموینې د نوي کيټونو غوښتنه په دې ادرس وکړئ: gov.uk/get-coronavirus-test د NHS د COVID-19 اپ له لارې یا په 119 د مشتري د اړیکې مرکز ته په زنگ و هلو سره. تلیفونونه هره ورځ خلاص وي، د سهار له 7 بجو څخه تر ماخوستن 11 بجو پورې.

8. د ازموینې اجرا

که یو شخص د کورونا وایرس (COVID-19) لوړه کچه لري، نو ممکن ازموینه مثبت پایله ورکړي. دا په دې معنی چې دا زیاتره هغه کسان کشف کوي چې اوسمهال په ناروغۍ اخته وي او په سملاسي توګه ځان جلا کولو ته اړتیا لري.

9. په خوندي توګه خپله ازموینه تنظیم کړئ



کله چې ستاسو ازموینه بشپړه شي، ټول استعمال شوي مواد په فاضلانه کې واچوئ او دا د خپلې کورنۍ په عمومي فضله موادو کې کېږدئ.

له ضایع کولو وروسته خپل لاسونه په ښه توګه وینځئ.

د دې کتابچې معلومات د (29 سپټمبر 2021 پورې) صحیح کړی شوي دي.

د محصول کوډ: COVID19AGVCGS7

د محصول نوم: د SureScreen SARS-CoV-2 اینټي جین ګرندۍ ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طلايي)

د خپلو ازموينو د پايلو په اړه يو يادښت جوړ کړئ

دا ستاسو د خپلو ريکارډونو لپاره ده. تاسو بايد لاهم خپلي پايلې NHS ته راپور کړئ (د معلوماتو لپاره 15 مه پاڼه وگورئ).

وگورئ: gov.uk/report-covid19-result

که تاسو په سکاټلنډ کې ژوند کوئ، نو لاندې وېب پاڼې ته مراجعه وکړئ:

covidtest.scot

د ازموينې پايله	وخت	نېټه	چا ازموينه ترسره کړه

ستاسو په کيټ کې لاندې مواد شامل دي

شيان	7-بسته
د استعمال لپاره لارښوونه (دا کتابچه)	1
د ازموينې کېستې په بنده کڅوره کې	7
د مایعې کڅورې (د استخراج بفر بوتلګي)	7
د استخراج ټیوبونه	7
سوابونه	7
د پلاستيکي فضله موادو بستې	7

د نورو معلوماتو لنډيز

<p>gov.uk/covid19-self-test-help</p>	<p>د خپلې ازموينې اضافي مرسته د ژبې بدليې بڼې او د وډيو نمونې د ماشوم د چمتو کولو او ازموينې لپاره لارښوونه</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/</p>	<p>د ځان د جلا کولو او درملنې د معلوماتو په اړه لارښوونه</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19</p>	<p>د COVID-19 په اړه د NHS لارښوونه</p>
<p>111.nhs.uk يا که تاسو انټرنېټ ته لاس رسې نه لرئ، نو NHS 111 ته زنگ ووهئ</p>	<p>که تاسو د COVID-19 علايم لرئ او ستاسو وضعيت خرابېږي، يا تاسو له اوو ورځو وروسته بڼه نه ياست، نو د NHS 111 آنلاين کورونا وپروس خدمت وکاروئ:</p>
<p>nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children</p>	<p>په ماشومانو کې د COVID-19 علايم</p>
<p>coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</p>	<p>که د کومې آلې څخه زيانمن شئ، دلته راپور ورکړئ</p>
<p>gov.uk/report-covid19-result</p>	<p>آنلاين پايله راپور کړئ (انگلستان، والز يا شمالي آيرلينډ):</p>
<p>covidtest.scot</p>	<p>آنلاين پايله راپور کړئ (سکاټ لينډ):</p>
<p>gov.uk/get-coronavirus-test</p>	<p>د اوسني تجويز شوي ازموينې غوښتنه وکړئ</p>
<p>119 ته زنگ ووهئ</p>	<p>څه خراب شوي، مات شوي يا بې درکه شوي د ژبې مرسته (د بریتانيې د اشارې د ژبې پشمول) خپله پايله راپور کړئ (که تاسو انټرنېټ ته لاس رسې نه لرئ)</p>

یاددبنتونه:

د پیژندګلوی دی کتاجی ته یوازی د SARS-CoV-2 SureScreen ایټی جین ګرندی آزموینی کېست (د پزی سواب) (طلایی) ویل کیږي

د NHS د ازموینې او تعقیب پروگرام له مخې دا آله یوازې د روغتیا او ټولنیز مراقبت ادارې (DHSC) د لیرلو د برخې په توګه لیردول کېدی شي.

SureScreen Diagnostics

جوړوونکي:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
Derby, DE1 3QB, United Kingdom (برېتانيه)



د سواب معلومات:



0123

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
اдрес: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020 Taizhou,
Zhejiang, People's Republic of China (د چین د خلکو جمهوریت)




0197

Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
اдрес: Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (د چین د خلکو جمهوریت)



علام

موصول مه کاروی
کله چې کڅوره
خرا به شي

جوړوونکي 

د ایتیلین آکساید
په کارولو سره
معقم شوی


STERILE/EO

په 2 - 30 سېنټي
ګرېده کې بې زدی





د عمومي لارښوونې او
اخطارونو لپاره د
'ازموینې د اخیستلو په
اره مشوره' برخه
وګورئ





په ویترو تشخیصي
طبي وسیله 

د ختمیدو نیټه 

لاټ شمېره 

بیرته مه کاروی 

مواد مناسب دي د
7 ازموینو لپاره 

د استعمال لپاره
لارښوونې وګورئ 

د کتلاګ شمېره 

نسخه 5 د تطبیق نیټه 29/09/2021

د استعمال دا لارښوونې د SureScreen SARS-CoV-2 اینټي جین ګرندی ازموینې کېسټ (د پزې سواب)
(طلايي)، جوړوونکي سره تړاو لري: د SureScreen Diagnostics او محصول کوډ: COVID19AGVCGS7

د پیژندګلوی دی کتاچې ته یوازې د SureScreen SARS-CoV-2 اینټي جین ګرندی ازموینې کېسټ (د پزې سواب) (طلايي) ویل کېږي