


Citiți cu atenție acest ghid în întregime înainte de a începe testarea. Acest test poate fi diferit de cele folosite anterior.

# Ghidul dvs. pas cu pas privind caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (cu aur coloidal)

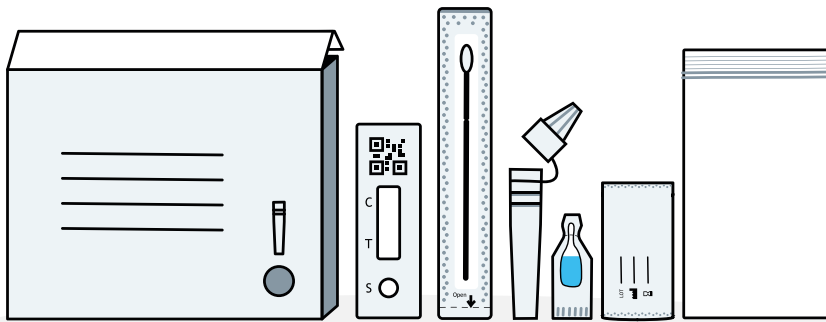

Aceste instrucțiuni sunt pentru caseta de test rapid antigen SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (cu aur coloidal), codul produsului: COVID19AGVCGS7. Ghidul vă explică cum să vă testați pe dvs., pe copilul dvs. sau pe o altă persoană, împotriva COVID-19, și cum să raportați rezultatele.

Sunt disponibile versiuni în alte limbi, alături de demonstrații video, la:  
[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

**Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.**

# Ce trebuie să faceți

## Ghidul dvs. pas cu pas

Citiți instrucțiunile integral și urmați pașii în ordinea corectă. Pregătirea fiecărui test durează aproximativ 15 minute, iar rezultatele vor fi gata după alte 10 minute.



<b>1</b>	Pregătiți zona de testare și verificați conținutul setului de testare	pag. 6
<b>2</b>	Pregătiți testul	pag. 8
<b>3</b>	Recoltați proba cu bețișorul cu tampon	pag. 10
<b>4</b>	Procesați proba recoltată cu bețișorul	pag. 12
<b>5</b>	Citiți rezultatul	pag. 14
<b>6</b>	Raportați rezultatul	pag. 15
<b>7</b>	Ce înseamnă rezultatul dvs.	pag. 16
<b>8</b>	Efectuarea testului	pag. 17
<b>9</b>	Eliminarea în siguranță a testului dvs.	pag. 17

**Aproximativ 1 din 3 persoane care au COVID-19 nu știu că sunt bolnave.**

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)

# Sfaturi privind efectuarea testului

## Instrucțiuni de depozitare și utilizare

- A se păstra în ambalaj la temperatura camerei (2-30°C). Nu congelați.
- Setul trebuie folosit la temperatura camerei (15°C - 30°C). Dacă setul a fost păstrat la rece (mai puțin de 15°C), înainte de utilizare, lăsați-l la temperatura normală a camerei timp de 20 minute.
- Folosiți câte un set de testare separat pentru fiecare persoană. Fiecare articol din setul de testare poate fi folosit o singură dată. Nu refolosiți articolele. Trebuie să raportați rezultatele fiecărei persoane.
- Dacă aveți probleme de vedere sau cu mâinile, puteți avea nevoie de ajutor la recoltarea exsudatului nazal și a procesului de testare.
- Dacă aveți un piercing în nas, scoateți-l înainte de efectuarea testului.
- Evitați utilizarea probelor cu sânge. Dacă ați avut sângerări nazale în ultimele 24 ore, trebuie să așteptați 24 ore înainte de a efectua un test.
- Când umblați cu bețișorul cu tampon, nu atingeți capul cu tampon.
- Evitați să atingeți setul de testare și zona ferestrei cu rezultate unde se aplică proba recoltată.

## Avertizări

- A nu se folosi după data de expirare. Respectați data de expirare de pe cutie.
- Până la utilizare, caseta trebuie să rămână în punga sigilată.
- Aceste seturi de testare sunt doar pentru uz uman.
- Cu 15 minute înainte de testare, nu folosiți spray-uri nazale.
- Produsul nu a fost realizat cu cauciuc natural (latex), dar nu poate fi exclusă complet prezența sau urmele de cauciuc natural în acest produs, așa cum este livrat utilizatorului final.

**Respectați cu strictețe aceste instrucțiuni, acest test poate fi diferit de cele folosite până acum.**

Cod de produs: COVID19AGVCGS7

**Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.**

# Despre acest test

## De ce trebuie să vă auto-testați

Acest set de auto-testare împotriva COVID-19 este un test cu bețișor cu tampon cu vată pentru nas. Poate fi folosit pentru persoanele asimptomatice, dar trebuie să respectați instrucțiunile la nivel național și să verificați ce tip de test vi se potrivește.

## Dacă sunteți testat pozitiv la COVID-19, trebuie să:

- ajutați la limitarea răspândirii bolii, dvs. și toți membrii gospodăriei dvs. trebuie să respectați normele actuale comunicate de guvern: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- informați persoanele cu care ați intrat în contact apropiat și din locurile pe care le-ați vizitat în ultimele 48 ore înainte de apariția simptomelor, sau din ziua în care ați fost testat pozitiv, dacă sunteți asimptomatici, pentru a se testa pentru o posibilă infectare cu COVID-19. Respectați întotdeauna normele locale și naționale.

## Dacă sunteți testat negativ la COVID-19

Este posibil ca, în momentul efectuării testului, să nu fi fost infectați. Totuși, rezultatul negativ al testului nu reprezintă o garanție că nu aveți coronavirusul. Trebuie să continuați să respectați instrucțiunile guvernamentale.

### SFAT

**Dacă aveți îngrijorări, nu întârziați să apelați la ajutor. Aveți încredere în instinctele dvs.**

Dacă aveți simptome de COVID-19 sau ați contractat COVID-19, respectați instrucțiunile NHS: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)

Dacă aveți simptome de COVID-19, iar starea dvs. de înrăutățește sau nu vă simțiți mai bine după șapte zile, apelați la serviciul NHS 111 pentru coronavirus [111.nhs.uk](https://www.111.nhs.uk)


Dacă nu aveți acces la internet, sunați la **NHS 111**.

Pentru urgențe medicale, formați **999**.

Puteți afla mai multe despre simptomele de COVID-19 la copii la: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/)

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)

## Cui îi este destinat acest test

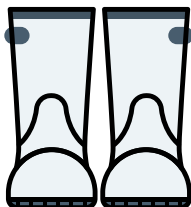

### Adulți de peste 18 ani

Auto-testați-vă și raportați, cu ajutor la nevoie.



### Adolescenți între 12 și 17 ani

Auto-testați-vă și raportați sub supravegherea adulților. Adultul poate efectua testul, dacă este necesar.



### Copii sub 12 ani

Un adult trebuie să testeze copiii sub 12 ani. Nu efectuați acest test dacă nu credeți că puteți testa un copil. Nu continuați testul dacă copilul simte orice durere sau disconfort pronunțat.

## Cât de des trebuie să vă testați

Frecvența testelor poate varia în funcție de situația dvs. personală și de instrucțiunile naționale sau locale actuale.

## Unde puteți găsi ajutor suplimentar

Aflați mai multe despre auto-testare la: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal), cod de produs: COVID19AGVCGS7.

Cod de produs: COVID19AGVCGS7

**Raportați NHS toate rezultatele testelor dvs.**

# 1. Pregătiți zona de testare

## IMPORTANT

Setul trebuie folosit la temperatura camerei (15°C - 30°C). Dacă setul a fost păstrat la loc rece (sub 15°C), lăsați-l la temperatura normală a camerei timp de 20 minute înainte de utilizare.




Nu folosiți spray-uri nazale cu 15 minute înainte de testare



**15**  
minute

Veți avea nevoie de: cronometru (ceas de mână sau de masă), șervețele, dezinfectant de mâini sau săpun și apă caldă.

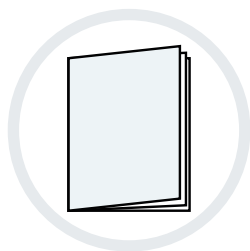

- 1** Citiți cu atenție acest ghid de instrucțiuni.



- 2** Eliberați, curățați și uscați o suprafață plană imediat înainte de a începe testul.




- 3** Spălați-vă bine pe mâini timp de 20 secunde cu săpun și apă caldă sau cu dezinfectant pentru mâini.


Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)

# Verificați conținutul setului dvs.

4 Cutia setului de testare trebuie să conțină:

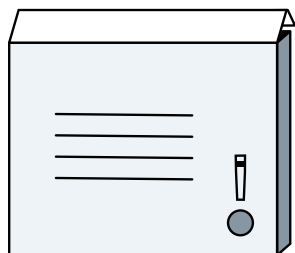

Cutie exterioră cu suport de tub

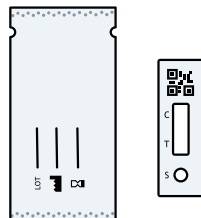


Casete de testare în pungi sigilate




Plicuri cu lichid  
(Flacoane cu  
soluție tampon  
pentru extracție)



Tuburi de  
extracție

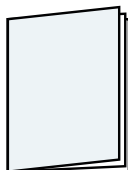

Instrucțiuni de  
utilizare (această  
broșură)

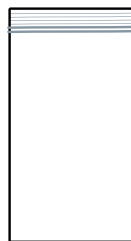

Pungi de plastic  
pt. deșeuri



Betișoare

## SFAT

### Ce este de făcut dacă există articole deteriorate, rupte sau lipsă

Dacă observați ceva deteriorat, rupt sau lipsă, nu folosiți setul de testare. Ne puteți comunica opinia dvs. cu un apel la centrul de contact pentru clienți. Liniile sunt disponibile zilnic, de la 07:00 la 23:00.


Sunați la: **119** (gratuit de pe mobil și fix).

Oferim asistență în 200 limbi, cât și în limbajul britanic al semnelor.

Dacă suferiți vătămări din cauza unui dispozitiv, raportați la:

[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)


## 2. Pregătiți testul

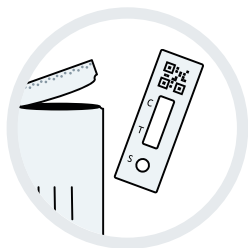


- 5** Scoateți caseta de testare din punga sigilată și puneți-o pe o suprafață plată și curată.

### AVERTIZARE

După deschidere, folosiți testul în maximum 1 oră, altfel își pierde valabilitatea. Eliminați caseta și conținutul care au fost scoase din punga sigilată timp de mai mult de 1 oră.

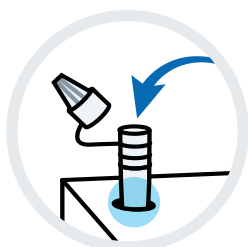

- 6** Puneți tubul de extracție în suportul de tub de extracție (zona perforată circular de pe capacul cutiei) pentru a evita vărsarea lichidului.

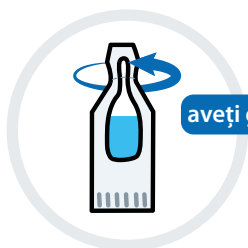

aveți grijă

- 7** Răsuciți cu grijă pentru a deschide plicul cu lichid. Deschideți-l ținându-l la distanță, aveți grijă să nu vărsați deloc din lichid.

### AVERTIZARE

Soluția tampon pentru extracție conține materiale care pot fi iritante în contact cu fața sau pielea. Dacă soluția intră în contact cu pielea sau cu ochii, spălați cu apă din abundență. Dacă apar iritații ale pielii, apelați la medic.



aveți grijă

- 8** Deschideți tubul de extracție și stoarceți ușor tot lichidul de plic în tub.

Aveți grijă să puneți plicul golit de lichid în punga de plastic pentru deșeuri furnizată.





9

Suflați-vă ușor nasul într-un șervețel și aruncați șervețelul într-un coș de gunoi cu capac.


Dacă ajutați pe altcineva sau testați un copil, ajutați-i să-și sufle nasul și aruncați șervețelul într-un coș de gunoi cu capac.



10

Spălați-vă iarăși bine pe mâini timp de 20 secunde cu săpun și apă caldă sau folosiți dezinfectant.

Dacă ajutați pe altcineva sau testați un copil, ajutați-i să se spele pe mâini.

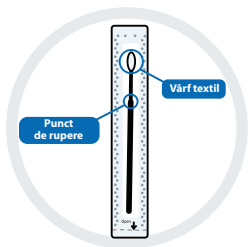


11

Găsiți bețișorul cu tampon din punga sigilată din fața dvs. Identificați vârful textil, moale.

#### IMPORTANT

Nu atingeți vârful textil, moale, al bețișorului. Dacă vârful textil al bețișorului a fost atins, aruncați bețișorul.

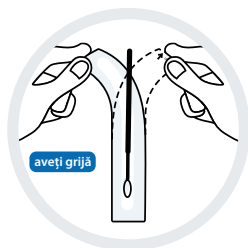

12


Desfaceți încet ambalajul bețișorului de la celălalt capăt, dar numai când sunteți gata de utilizare.

# 3. Recoltați-vă proba cu bețișorul


Dacă efectuați testul altcuiva, consultați instrucțiunile de la pagina 11.

## IMPORTANT

Testul trebuie efectuat doar cu o probă recoltată din nas

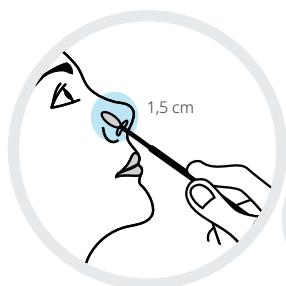


- 13** Introduceți vârful textil al bețișorului o distanță mică într-o nară (la aproximativ 1,5 cm adâncime în nas).

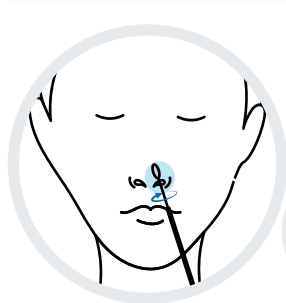

- 14** Atingeți ușor partea interioară a nării dvs. cu bețișorul, într-o mișcare circulară, de **5 ori** timp de cel puțin **5 secunde**.

Scoateți-l încet. Nu este nevoie de forță și nu trebuie să împingeți mult în nară. Nu puneți bețișorul înapoi în ambalajul de hârtie original.

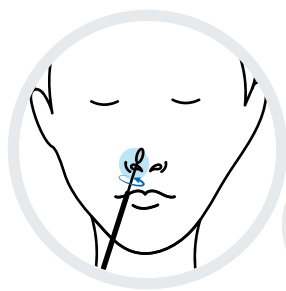

- 15** Folosind același bețișor, introduceți vârful textil al bețișorului puțin în cealaltă nară (adică aproximativ 1,5 cm în interiorul nasului.)

Rotiți ușor bețișorul în interiorul nării dvs., cu o mișcare circulară, de **5 ori** timp de cel puțin **5 secunde**.




Această broșură face referire doar la casceta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)


# Atunci când faceți un test altcuiva

## SFAT


Copiii sub 12 ani trebuie testați de un adult. Respectați instrucțiunile de mai jos privind pregătirea și testarea unui copil. Puteți urmări un videoclip demonstrativ la [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

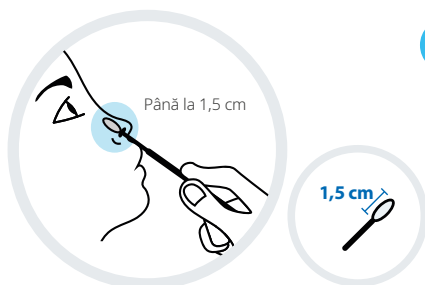

- 13** Dacă testați un copil, arătați-i setul de testare și descrieți-i ce urmează să faceți. Dacă se poate, așezați copilul în brațele cuiva sau cereți cuiva să-l țină de mână.

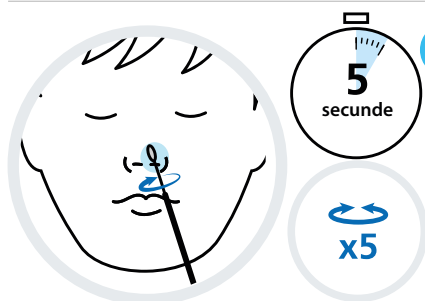

- 14** Introduceți vârful textil al bețișorului puțin în nară (până la 1,5 cm) sau până simțiți rezistență. Răsuciți ușor bețișorul în interiorul nării într-o mișcare circulară de **5 ori** timp de cel puțin **5 secunde**. Scoateți bețișorul încet. Nu este nevoie de forță și nu trebuie să împingeți adânc în nară. Nu puneți bețișorul înapoi în ambalajul de hârtie original.

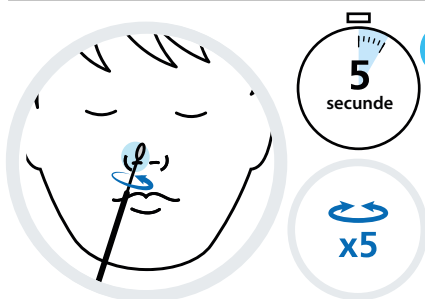


- 15** Folosind același bețișor, introduceți vârful textil al bețișorului puțin în cealaltă nară a copilului (până la 1,5 cm) sau până când simțiți rezistență. Răsuciți ușor bețișorul în interiorul nării într-o mișcare circulară de **5 ori** timp de cel puțin **5 secunde**.

## 4. Prelucrați proba recoltată cu bețișorul

### SFAT


Pentru cele mai bune rezultate, testați bețișorul imediat ce este posibil după ce recoltați proba.

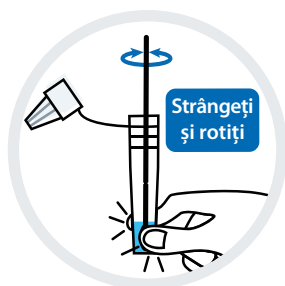

- 16** Luați tubul de extracție și puneți vârful textil al bețișorului în tubul de extracție, pentru a ajunge în lichid.


Apăsați bine vârful bețișorului de interiorul corpului tubului și strângeți bine capătul de jos al tubului între degetul mare și celelalte degete.

În timp ce strângeți, rotiți bețișorul timp de cel puțin 10 secunde.

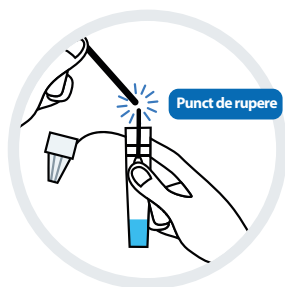


- 17** Ridicați puțin bețișorul nazal, apoi rupeți bețișorul în poziția „punct de rupere”. Lăsați capul bețișorului în tubul de extracție.

Puneți corpul bețișorului în pungă de plastic pentru deșeuri pusă la dispoziție.

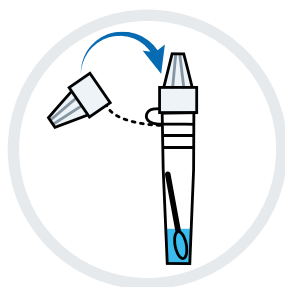


- 18** Puneți bine dopul pe tubul de extracție.

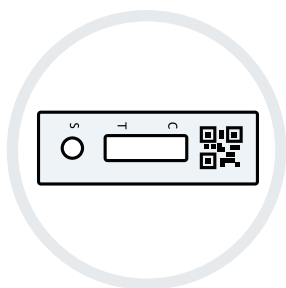

**19** Asigurați-vă că caseta de testare este pe o suprafață curată și plană.


Nu mișcați caseta în timpul testului.

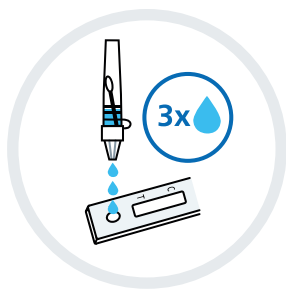

**20** Stoarceți încet tubul de extracție și puneți 3 picături de lichid în godeul pentru probă (S) de pe banda de testare.

Asigurați-vă că scurgeți lichid și nu bule de aer.

Puneți tubul de extracție în punga de plastic pentru deșeuri.

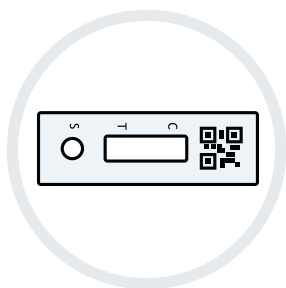

**21** Porniți cronometrul și așteptați 10 minute înainte de a citi rezultatul.

După începere, nu mișcați testul. Interpretați rezultatul după 10 minute. Nu citiți după 20 minute.

Trebuie să așteptați toată perioada de 10 minute de dezvoltare înainte de a vă citi rezultatul testului.



# 5. Citiți rezultatul

## IMPORTANT



Așteptați 10 minute pentru a citi rezultatul.



Nu lăsați testul la dezvoltat mai mult de **20 minute**. Acest lucru va invalida testul.




## Rezultat pozitiv

Apar două linii. O linie colorată trebuie să fie în regiunea liniei de control (C) și o altă linie colorată trebuie să fie în regiunea liniei de testare (T).

**Două linii, una lângă C și una lângă T, chiar dacă nu sunt clare, arată că testul este pozitiv.**


## IMPORTANT

Dacă sunteți testat pozitiv, trebuie să vă auto-izolați, iar membrii gospodăriei dvs. trebuie să respecte instrucțiunile guvernului privind auto-izolarea: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

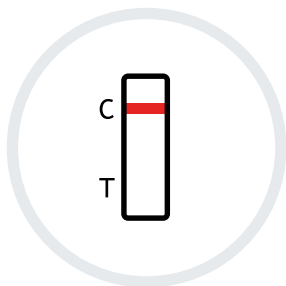

## Rezultat negativ

O linie colorată apare în regiunea liniei de control (C). Nu apare nicio linie în regiunea liniei de testare (T).

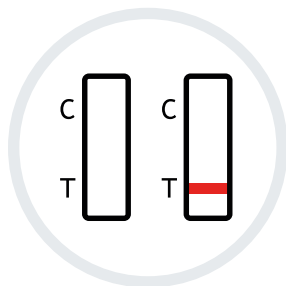


## Rezultat nul

Nu apare linia de control (C).

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)

# 6. Raportați rezultatul

## Trebuie să raportați NHS rezultate pozitive, negative sau nule

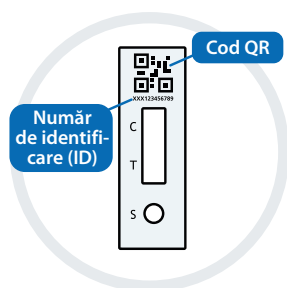


Înregistrarea tuturor rezultatelor ajută oamenii de știință să depisteze noi focare ale virusului și să transmită instrucțiuni privind modul de reacție.

Dacă oamenii raportează doar rezultatele pozitive, numărul cazurilor pare mai mare decât este în realitate. Astfel, chiar dacă aveți un rezultat negativ sau nul, veți asigura exactitatea informațiilor NHS. Aveți nevoie de codul QR sau de numărul de identificare (ID) de sub codul QR pentru a vă raporta rezultatul.



Raportați online (cea mai rapidă metodă). Dacă locuiți în Anglia, Țara Galilor sau Irlanda de Nord, accesați [gov.uk/report-covid19-result](https://gov.uk/report-covid19-result)

Dacă locuiți în Scoția, accesați [covidtest.scot](https://covidtest.scot)

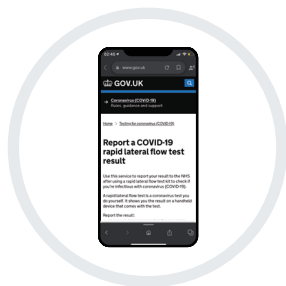

Sau raportați telefonic.

Dacă nu vă puteți raporta rezultatul online, apelați **119** (gratuit de pe mobil și de pe fix).

Liniile sunt deschise zilnic, între 07:00 și 23:00.

# 7. Ce înseamnă rezultatul dvs.

## Testul este încheiat numai după ce vă raportați rezultatul

### + Rezultat pozitiv

Dacă aveți un rezultat pozitiv, este posibil să fiți infectați cu COVID-19 și riscați să-i infectați și pe alții. Trebuie să vă auto-izolați. Atunci când vă raportați rezultatul, veți primi alte informații referitoare la următorii pași de parcurs.

#### AVERTIZARE

Dvs. și toți cei care locuiesc cu dvs. trebuie să respectați instrucțiunile naționale și locale actuale. Acestea se regăsesc la:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

### - Rezultat negativ

Dacă aveți un rezultat negativ, este posibil să nu fi fost infectați în momentul efectuării testului. Totuși, un rezultat negativ nu reprezintă o **garanție că nu aveți COVID-19**.

Dacă aveți un test negativ, trebuie să continuați să respectați normele naționale și locale, inclusiv spălarea regulată a mâinilor, distanțarea socială și purtarea măștilor faciale, acolo unde este cazul.

Dacă dezvoltați simptome, trebuie să vă auto-izolați și să obțineți testul actual recomandat de la: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) sau cu un apel la centrul de contact pentru clienți la 119. Liniile sunt deschise zilnic, de la 07:00 la 23:00.

Dvs. și membrii gospodăriei dvs. trebuie să respectați instrucțiunile naționale.





## Rezultat nul

Dacă obțineți un rezultat nul, acest lucru înseamnă că testul nu a fost desfășurat corect și că nu se poate spune dacă aveți virusul la efectuarea testului. Trebuie să folosiți un alt test din pachet imediat ce se poate. Nu reutilizați nimic de la primul test, începeți procedura de la pasul 1.

Dacă problema persistă, întrerupeți imediat utilizarea setului de testare. Comandați un nou pachet de seturi de testare accesând: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test), prin aplicația COVID-19 de la NHS sau cu un apel la centrul de contact pentru clienți la **119**. Liniile sunt deschise zilnic, de la 07:00 la 23:00.

## 8. Efectuarea testului

Sunt mai multe șanse de a obține un rezultat pozitiv dacă o persoană are niveluri ridicate de coronavirus (COVID-19). Acest lucru înseamnă că este foarte probabilă detectarea persoanelor care sunt infectate în prezent și care trebuie să se auto-izoleze imediat.



## 9. Eliminați testul în siguranță

După finalizarea testului, puneți tot conținutul uzat în punga pentru deșeuri pusă la dispoziție și aruncați-o la coșul de gunoi menajer.

După eliminare, spălați-vă bine pe mâini.

Informațiile din această broșură sunt corecte la data de (29 septembrie 2021).  
Codul produsului: COVID19AGVCGS7  
Denumirea produsului: caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)

## Notați-vă rezultatele testelor

Acest formular este pentru uzul dvs. propriu. Aveți în continuare obligația de a raporta rezultatul la NHS (vezi pagina 15 pentru informații).

Accesați: [gov.uk/report-covid19-result](https://gov.uk/report-covid19-result)

Dacă locuiți în Scoția, accesați [covidtest.scot](https://covidtest.scot)

Persoana testată	Data	Ora	Rezultatul testului

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)

## Setul dvs. conține următoarele materiale

Articole	Set de 7
Instrucțiuni de utilizare (această broșură)	1
Casete de testare în pungi sigilate	7
Pliculețe cu lichid (flacoanele cu soluție tampon pentru extracție)	7
Tuburi de extracție	7
Bețișoare	7
Pungi de plastic pentru deșeuri	7

## Rezumatul informațiilor suplimentare

Material auxiliar privind auto-testarea Versiuni în alte limbi și demonstrații video Instrucțiuni de pregătire și testare a copiilor	<a href="https://www.gov.uk/covid19-self-test-help">gov.uk/covid19-self-test-help</a>
Instrucțiuni privind auto-izolarea și informații privind tratamentul	<a href="https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/">nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/</a>
Instrucțiunile NHS privind COVID-19	<a href="https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19">nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19</a>
Dacă aveți COVID-19, iar starea dvs. se înrautățește sau nu vă însănătoșiți după șapte zile, apălați la serviciul online 111 al NHS privind coronavirusul:	<a href="https://111.nhs.uk">111.nhs.uk</a> <b>Sau sunați la NHS 111 dacă nu aveți acces la internet</b>
Simptomele de COVID-19 la copii	<a href="https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children">nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children</a>
Dacă suferiți vătămări din cauza unui dispozitiv, raportați la	<a href="https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk">coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</a>
Raportați un rezultat online (Anglia, Țara Galilor sau Irlanda de Nord):	<a href="https://www.gov.uk/report-covid19-result">gov.uk/report-covid19-result</a>
Raportați un rezultat online (Scoția):	<a href="https://www.covidtest.scot">covidtest.scot</a>
Comandați un test recomandat în prezent	<a href="https://www.gov.uk/get-coronavirus-test">gov.uk/get-coronavirus-test</a>
Articole deteriorate, rupte sau lipsă Asistență în alte limbi (inclusiv limbajul britanic al semnelor) Raportați rezultatul (dacă nu aveți acces la internet)	<b>Apelați 119</b>

Această broșură face referire doar la caseta de test rapid antigen SureScreen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal)







Furnizarea acestui dispozitiv este permisă doar ca parte a implementării Departamentului de Sănătate și Asistență Socială (DHSC) din cadrul programului NHS Testare și Urmărire.



#### Producător:

SureScreen Diagnostics  
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park, Derby,  
DE1 3QB, United Kingdom (Regatul Unit).



Informații despre betașoare:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.  
Adresă: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020  
Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China (China)



sau



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD  
Adresă: Touqiao Town, Guangling District,  
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China (China)



#### Simboluri



A se păstra la  
2 – 30°C



Sterilizat cu  
oxid de etilenă



Producător

Nu folosiți  
produsul dacă  
ambalajul este  
deteriorat



Numărul lotului



Data expirării



Dispozitiv medical  
pentru diagnosti-  
care in vitro



Consultați  
instrucțiunile  
de utilizare



Conținut sufi-  
cient pentru  
7 teste



Nu refoșiți



Consultați sec-  
țiunea „Sfaturi  
privind efectu-  
area testului”  
pentru instrucți-  
uni și avertizări  
generale



Număr de catalog

Versiunea 5 Data intrării în vigoare: 29.09.2021

Aceste instrucțiuni de utilizare fac referire la caseta de test rapid antigen SARS-CoV-2 (exsudat nazal) (aur coloidal), producător: SureScreen Diagnostics și cod de produs: COVID19AGVCGS7