


Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte celý tento návod.
Tento test sa môže líšiť od testu, ktorý ste použili v minulosti.

Vaša podrobná príručka pre testovaciú kazetu SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (Výter z nosa) (zlatý)

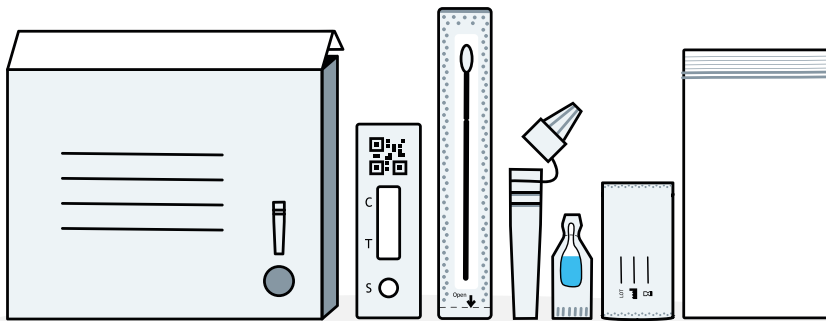

Pokyny sa týkajú testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý), kód výroby: COVID19AGVCGS7. Príručka vysvetľuje, ako môžete seba, svoje dieťa alebo inú osobu otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19 a ako oznámiť svoje výsledky.

Alternatívne jazykové verzie a videoukážky sú k dispozícii na adrese:
[gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Všetky výsledky testov nahláste NHS

Čo musíte urobiť

Vaša podrobná príručka

Prečítajte si pokyny a dodržujte kroky v správnom poradí. Príprava každého testu trvá približne 15 minút a výsledky budú k dispozícii po ďalších 10 minútach.



1	Pripravte si priestor na testovanie a skontrolujte obsah testovacej súpravy	strana 6
2	Pripravte si test	strana 8
3	Odoberte vzorku výteru	strana 10
4	Spracujte vzorku výteru	strana 12
5	Odčítajte výsledok	strana 14
6	Nahláste výsledok	strana 15
7	Čo znamenajú výsledky	strana 16
8	Vykonajte test	strana 17
9	Bezpečne zlikvidujte testovaciu súpravu	strana 17

Približne 1 z 3 ľudí s ochorením COVID-19 nevie o svojom ochorení.

Rady k vykonaniu testu

Skladovanie a manipulácia

- Zabalené skladujte pri izbovej teplote (2 – 30 °C). Nezmrazujte.
- Súprava by sa mala používať pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C). Ak ste súpravu skladovali na chladnom mieste (menej než 15 °C), pred použitím ju nechajte 20 minút pri izbovej teplote.
- Pre každú osobu použite samostatnú testovaciu súpravu. Každú súčasť testovacej súpravy môžete použiť len raz. Jednotlivé položky nepoužívajte opakovane. Výsledok každej osoby musíte hlásiť.
- Ak máte problémy s rukami alebo zrakom, možno budete pri odoberaní výteru a testovaní potrebovať pomoc inej osoby.
- Ak máte piercing v nose, piercing vyberte pred vykonaním testu.
- Vyhnite sa použitiu krvavých vzoriek. Ak ste za posledných 24 hodín krvácali z nosa, mali by ste pred vykonaním testu počkať 24 hodín.
- Pri manipulácii s tyčinkou sa nedotýkajte hlavičky tyčinky.
- Nedotýkajte sa testovacej súpravy a okna s výsledkami, kam sa pridáva vzorka.

Upozornenia

- Súpravu nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie. Dodržujte dátum expirácie na obale.
- Kazeta by mala zostať v uzavretom vrecku, až kým ju nepoužijete.
- Súpravy sú určené len na použitie u ľudí.
- 15 minút pred testovaním nepoužívajte žiadne nosové spreje.
- Výrobok nebol vyrobený z prírodného kaučukového latexu, prítomnosť alebo stopy prírodného kaučukového latexu vo výrobku dodanom koncovému používateľovi však nemožno úplne vylúčiť.

Pozorne dodržujte pokyny, tento test sa môže líšiť od testov, ktoré ste použili v minulosti.

O tomto teste

Prečo by ste si mali spraviť samotest

Samotestovacia súprava na ochorenie COVID-19 je test na výter z nosa. Súpravu možno použiť pre osoby, ktoré nemajú žiadne symptómy, na overenie vhodnosti typu testu by ste však mali postupovať podľa vnútroštátnych usmernení.

Ak máte pozitívny test na ochorenie COVID-19, mali by ste:

- pomôcť obmedziť šírenie ochorenia, vy a vaša domácnosť by ste mali riadiť aktuálnymi vládnymi usmerneniami: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- informovať ľudí, s ktorými ste boli v blízkom kontakte, a miesta, ktoré ste navštívili 48 hodín pred začiatkom príznakov, alebo odo dňa preukázania pozitívneho výsledku testu, ak nie sú prítomné žiadne príznaky, aby sa otestovali na možnú infekciu na COVID-19. Vždy sa riadte miestnymi a vnútroštátnymi usmerneniami.

Ak máte negatívny test na ochorenie COVID-19

Je pravdepodobné, že v čase vykonania testu ste neboli infekční. Negatívny výsledok testu však nezaručuje, že koronavírus nemáte. Mali by ste aj naďalej dodržiavať vládne usmernenia.

RADA

Ak máte obavy, vyhľadanie pomoci neodkladajte. Dôverujte svojim inštinktom.

Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste sa ochorením COVID-19 nakazili, postupujte podľa pokynov NHS: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)


Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 a váš stav sa zhoršuje alebo sa po siedmich dňoch nezlepší, využite online službu NHS 111 pre prípady nákazy koronavírusom 111.nhs.uk

Ak nemáte prístup na internet, zavolajte na **NHS 111**.

V prípade lekárskej pohotovosti volajte **999**.

Viac informácií o ochorení COVID-19 u detí nájdete na stránke [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/)

Pre koho je test vhodný

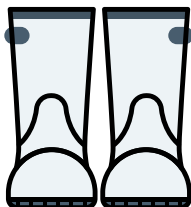

Dospelí vo veku nad 18 rokov

Samotest a hlásenie, v prípade potreby s asistenciou.



Dospievajúci vo veku 12 - 17

Samotest a hlásenie pod dohľadom dospeljej osoby. V prípade potreby môže vykonať test dospelá osoba.



Deti mladšie ako 12 rokov

Dospelá osoba by mala otestovať deti mladšie ako 12 rokov. Nevykonávajte test, ak sa necítite na testovanie dieťaťa. Nepokračujte v teste, ak dieťa pociťuje výrazné nepohodlie alebo bolesť.

Ako často sa testovať

Frekvencia testovania sa môže líšiť v závislosti od vašej situácie a súčasných vnútroštátnych alebo miestnych usmernení.

Kde nájdete ďalšiu podporu

Ďalšie informácie o samotestovaní nájdete na stránke: gov.uk/covid19-self-test-help

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý), kód výrobku: COVID19AGVCGS7.

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7

1. Pripravte si miesto testovania

DÔLEŽITÉ

Súprava by sa mala používať pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C). Ak ste súpravu skladovali na chladnom mieste (menej než 15 °C), pred použitím ju nechajte 20 minút pri izbovej teplote.




15 minút pred testovaním nepoužívajte žiadne nosové spreje



15 minút

Budete potrebovať: stopky (napríklad hodinky alebo nástenné hodiny), vreckovky, dezinfekčný prostriedok na ruky alebo mydlo a teplú vodu.

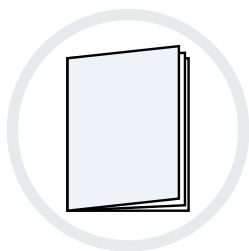

1 Pozorne si prečítajte príručku s pokynmi.



2 Bezprostredne pred začatím testu vyčistite a vysušte rovny povrch.




3 Dôkladne si umývajte ruky 20 sekúnd mydlom a teplou vodou alebo dezinfekčným prípravkom na ruky


Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý)

Skontrolujte obsah vašej súpravy

4 Vaša testovacia škatuľa by mala obsahovať:

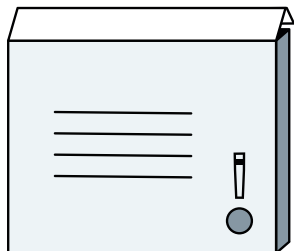

Vonkajšia škatuľka s držiakom skúmavky

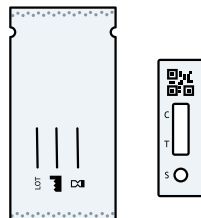


Testovacie kazety v zapečatenom vrecku




Vrecúška s tekutinou (ampulky s extrakčným pufrom)



Extrakčné skúmavky

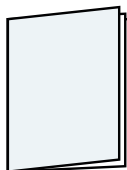

Návod na použitie (táto príručka)

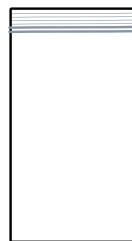

Plastové vrecká na odpad



Tyčinky

RADA

Čo robiť, ak je niečo poškodené, rozbité alebo chýba


Ak zistíte, že je niečo poškodené, rozbité alebo chýba, testovaciu súpravu nepoužívajte. Túto situáciu môžete telefonicky oznámiť na kontaktné centrum pre zákazníkov. Volat' môžete každý deň v čase od 7.00 do 23.00.

Zavolajte na číslo: **119** (bezplatný hovor z mobilných telefónov a pevných liniek). Ponúkame podporu v 200 jazykoch, ako aj v britskej posunkovej reči.

Ak vám zariadenie spôsobilo zranenie, nahláste to na:

[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

2. Pripravte si test

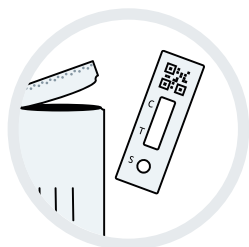


- 5** Vyberte testovaciu kazetu zo zapečateného vrečka a položte ju na vyčistený a čistý povrch.



VAROVANIE

Po otvorení použite súpravu do 1 hodiny, inak bude test neplatný. Zlikvidujte kazetu a obsah vrečka, ktorý bol mimo zapečateného vrečka dlhšie ako 1 hodinu.

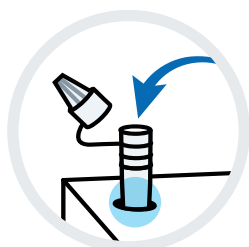

- 6** Umiestnite extrakčnú skúmavku do držiaka extrakčnej skúmavky (perforovaná kruhová oblasť na veku škatule), aby ste zabránili rozliatiu tekutiny.



- 7** Opatrne otočte a otvorte vrecúško s tekutinou. Pri otváraní ho nemajte v blízkosti tváre a dávajte si pozor, aby ste žiadnu tekutinu nevyliali.

VAROVANIE

Extrakčný pufor obsahuje materiály, ktoré môžu pri kontakte s tvárou alebo pokožkou spôsobiť podráždenie. Ak sa roztok dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, umyte ich dostatočným množstvom vody. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.



- 8** Otvorte extrakčnú skúmavku a z vrecúška s tekutinou do skúmavky jemne vytlačte všetku tekutinu.

Buďte opatrní a vložte prázdne vrecúško s tekutinou do priloženého plastového vrečka na odpad.




- 9** Jemne si vyfúkajte nos do vreckovky a vreckovku odhodte do uzavretého koša na odpad.

Ak pomáhate niekomu inému alebo testujete dieťa, pomôžte mu vyfúkať nos a vreckovku vyhodte do uzavretého koša.



- 10** Znovu si 20 sekúnd mydlom a teplou vodou umývajte ruky alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky.


Ak pomáhate niekomu inému alebo testujete dieťa, pomôžte mu umyť si ruky.

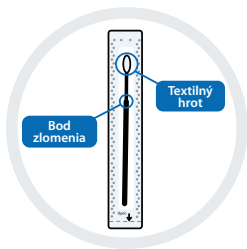

- 11** Tyčinku nájdete v zapečatenom obale. Nahmatajte mäkký textilný hrot tyčinky.

DÔLEŽITÉ

Nedotýkajte sa mäkkého textilného hrotu tyčinky. Ak ste sa dotkli textilného hrotu tyčinky, tyčinku zlikvidujte.

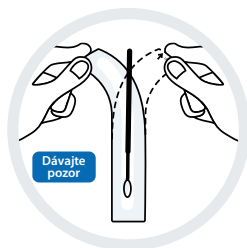


- 12** Jemne odlepte obal tyčinky z druhého konca, až keď budete pripravení na použitie.

3. Odoberte vzorku výteru


Ak testujete niekoho iného, pozrite si pokyny na strane 11.

DÔLEŽITÉ

Test by sa mal vykonať iba s použitím vzorky z nosa.

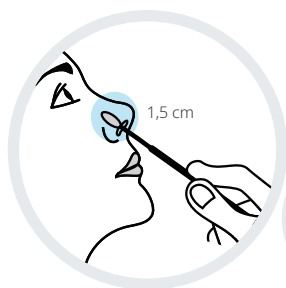


- 13** Vložte látkový hrot tyčinky do jednej nosnej diery (asi 1,5 cm nad nosom).

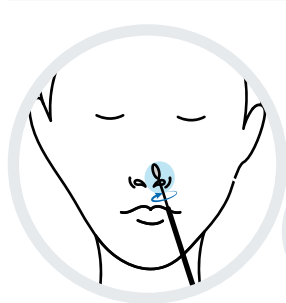

- 14** Krúživými pohybmi **5-krát** jemne pretrite tyčinkou vnútornú stranu nosovej diery aspoň na **5 sekúnd**.

Opatrne vyberte tyčinku. Nie je potrebná žiadna sila a nemusíte tlačiť hlboko do nosovej diery. Tyčinku nevracajte do pôvodného papierového obalu.

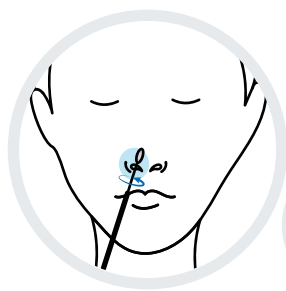

- 15** Použite tú istú tyčinku, vložte látkový hrot tyčinky do druhej nosovej diery (asi 1,5 cm nad nosom.)


Krúživými pohybmi **5-krát** jemne pretrite tyčinkou vnútornú stranu nosovej diery aspoň na **5 sekúnd**.




Testovanie inej osoby

RADA


Deti mladšie ako 12 rokov by mala testovať dospelá osoba. Postupujte podľa krokov o postupe prípravy a testovaní dieťaťa uvedených nižšie. Môžete si pozrieť ukázkové video na: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

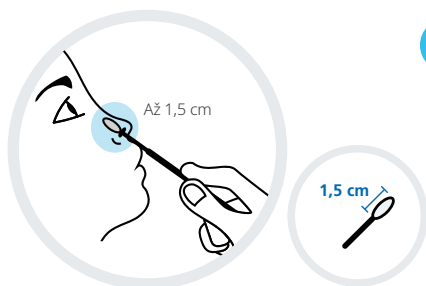

- 13** Ak testujete dieťa, ukážte mu testovaciu súpravu a povedzte mu, čo budete robiť. Ak je to možné, malo by si sadnúť niekomu na kolena alebo by ho mal niekto držať za ruku.

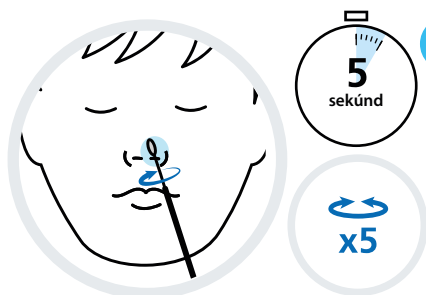

- 14** Vložte hrot tyčinky do nosovej dierky (do 1,5 cm) alebo kým nepocítite odpor. Krúživými pohybmi **5-krát** jemne pretrite tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky aspoň na **5 sekúnd**. Opatrne vyberte tyčinku. Nie je potrebná žiadna sila a nemusíte tlačiť hlboko do nosovej dierky. Tyčinku nevracajte do pôvodného papierového obalu.

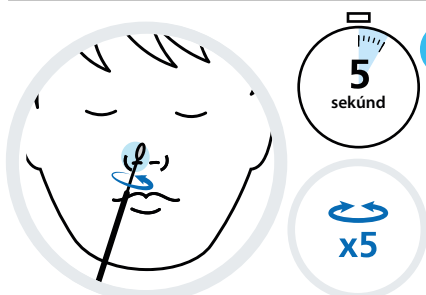


- 15** Použite tú istú tyčinku a vložte textilný hrot tyčinky do druhej nosovej dierky (do 1,5 cm) alebo kým nepocítite odpor. Krúživými pohybmi **5-krát** jemne pretrite tyčinkou vnútornú stranu nosovej dierky aspoň na **5 sekúnd**.

4. Spracujte vzorku výteru

TIP

Pre najlepší výsledok otestujte tyčinku čo najskôr po odbere vzorky.

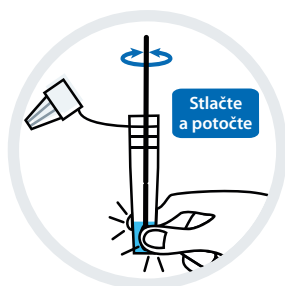


16

Vezmite si extrakčnú skúmavku a vložte textilný hrot tyčinky do extrakčnej skúmavky tak, aby bol ponorený do tekutiny.

Hlavičku tyčinky pevne pritlačte k vnútornej strane tela skúmavky tak, že palcom a prstami stlačíte spodnú časť skúmavky.


Počas stlačenia otáčajte tyčinkou aspoň 10 sekúnd.

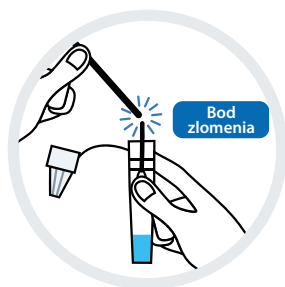

17


Mierne nadvihnite výterovú tyčinku, potom tyčinku zlomte v polohe „bod zlomenia“. Nechajte výterovú tyčinku v extrakčnej skúmavke.

Výterovú tyčinku vložte do priloženého plastového vrečka na odpad.

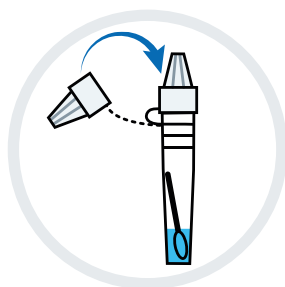


18

Uzáver kvapkadla pevne nasadíte na hornú časť extrakčnej skúmavky.

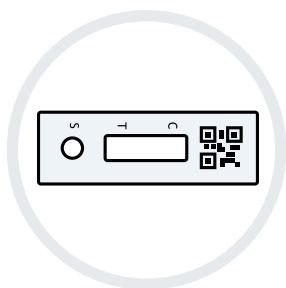

19

Uistite sa, že testovacia kazeta je na čistom a rovnom povrchu. Počas testu nehýbte testovacou kazetou.

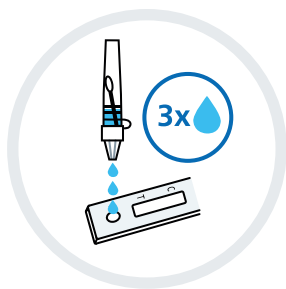


20

Extrakčnú skúmavku jemne stlačte, aby ste do jamky na vzorku (S) na testovacom prúžku kvapli 3 kvapky.

Uistite sa, že vytláčate tekutinu, nie vzduchovú bublinu.

Extrakčnú skúmavku vložte do plastového vrečka na odpad.

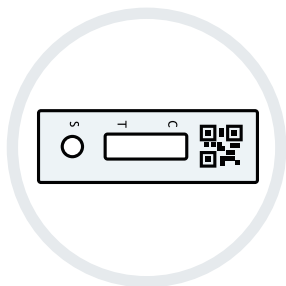

21

Spustíte stopy a pred odčítaním výsledku počkajte 10 minút.

Po spustení testovania nehýbte testom. Výsledok interpretujte po 10 minútach. Výsledok nečítajte po 20 minútach.

Pred odčítaním výsledku počkajte celých 10 minút.



5. Odčítajte výsledok


DÔLEŽITÉ



Počkajte 10 minút a pozrite si výsledok.



Nenechajte test pôsobiť viac ako **20 minút**.
Test by bol potom neplatný.

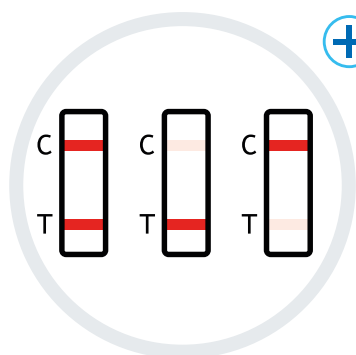


Pozitívny výsledok

Zobrazia sa dve čiarky. Jedna farebná čiarka by mala byť v oblasti kontrolnej čiarky (C) a druhá farebná čiarka by mala byť v oblasti testovacej čiarky (T).

Dve čiarky, jedna vedľa C a druhá vedľa T, znamenajú, že test je pozitívny, a to aj v prípade, ak ich je vidieť len slabo.


DÔLEŽITÉ

Ak je výsledok testu pozitívny, mali by ste sa izolovať a vaša domácnosť by sa mala riadiť vládnyimi usmerneniami týkajúce sa izolácie: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

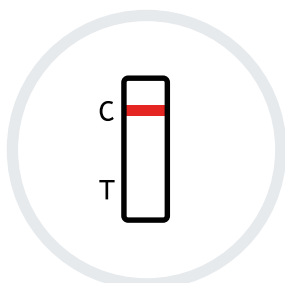

Negatívny výsledok

Objaví sa jedna farebná čiarka v oblasti kontrolnej čiarky (C). V oblasti testovacej čiarky (T) sa neobjaví žiadna čiarka.

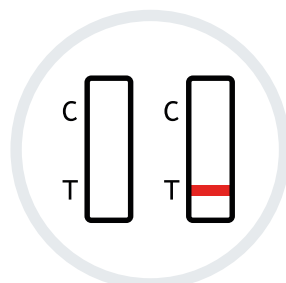


Neplatný výsledok

Kontrolná čiarka (C) sa neobjaví.

6. Nahláste výsledok

Svoje pozitívne, negatívne alebo neplatné výsledky by ste mali oznámiť NHS.

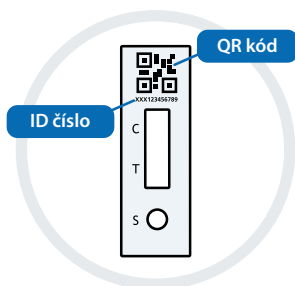


Zaznamenávanie všetkých výsledkov testov pomáha vedcom odhaliť nové ohniská výskytu vírusu a poradiť, ako reagovať.

Ak ľudia nahlasujú len pozitívne výsledky, počty prípadov sa zdajú vyššie, než v skutočnosti sú. Takže aj keď máte negatívny alebo neplatný výsledok, svojim konaním zabezpečíte presnosť informácií NHS. Na nahlásenie výsledku potrebujete QR kód alebo identifikačné číslo pod ním.



Nahlásenie výsledku online (najrýchlejšie)
Ak žijete v Anglicku, Walesu alebo Severnom Írsku, navštívte stránku [gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)

Ak žijete v Škótsku, navštívte stránku [covidtest.scot](https://www.covidtest.scot)

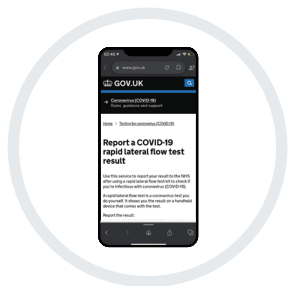

Alebo ho nahláste telefonicky.

Ak nemôžete nahlásiť výsledok online, zavolajte na číslo **119** (bezplatný hovor z mobilných telefónov a pevných liniek).

Na telefonické linky môžete volať každý deň, od 7.00 do 23.00.

7. Čo znamenajú výsledky

Test ste dokončili až po nahlásení výsledku

+ Pozitívny výsledok

Ak máte pozitívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v súčasnosti infikovaní vírusom COVID-19 a hrozí, že nakazíte aj ostatných. Mali by ste sa izolovať. Po nahlásení výsledku vám budú poskytnuté ďalšie informácie o ďalších krokoch.

VAROVANIE

Vy a všetky osoby, ktoré s vami žijú, by ste mali dodržiavať aktuálne vnútroštátne a miestne usmernenia. Nájdete ich na stránke: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

– Negatívny výsledok

Ak máte negatívny výsledok, je pravdepodobné, že ste v čase vykonania testu neboli infikční. Negatívny výsledok testu však **nezaručuje, že nie ste nakazení vírusom COVID-19.**

Ak máte negatívny test, musíte naďalej dodržiavať vnútroštátne a miestne pravidlá a usmernenia vrátane pravidelného umývania rúk, dodržiavania odstupu od iných ľudí a nosenia rúška na miestach, kde to je povinné.

Ak sa u vás objavia príznaky, mali by ste sa izolovať a získať aktuálne odporúčaný test na stránke: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) alebo zavolaním do zákazníkkeho kontaktného centra na číslo 119. Na telefonické linky môžete volať každý deň od 7.00 do 23.00.

Vy aj vaša domácnosť by ste mali dodržiavať vnútroštátne usmernenia.



Neplatný výsledok

Ak máte neplatný výsledok, znamená to, že test nebol vykonaný správne a nedá sa určiť, či ste v čase vykonania testu mali vírus. Musíte čo najskôr použiť iný test z balenia. Nepoužívajte nič z prvého testu a začnite postup testovania od kroku 1.

Ak problém pretrváva, okamžite prestaňte používať testovaciu súpravu. Objednajte si nový balík testovacích súprav na stránke: gov.uk/get-coronavirus-test, prostredníctvom aplikácie NHS COVID-19 alebo zavolaním do zákazníkneho kontaktného centra na číslo **119**. Na telefonické linky môžete volať každý deň od 7.00 do 23.00.

8. Vykonanie testu

Positívny výsledok testu je pravdepodobnejší, ak má testovaná osoba vysokú hladinu koronavírusu (COVID-19). Znamená to, že s najväčšou pravdepodobnosťou odhalí ľudí, ktorí sú v súčasnosti infekční a musia byť okamžite izolovaní.



9. Bezpečne zlikvidujte testovaciu súpravu

Po dokončení testu vložte všetky použité súčasti testovacej súpravy do poskytnutého vrečka na odpad, okrem plastového držáka na skúmvavku, a vyhoďte ho do komunálneho odpadu.

Po likvidácii si dôkladne umyte ruky.

Informácie v príručke sú správne ku dňu (29. september 2021).

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7

Názov výrobku: SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý)

Zaznačte si výsledok testu

Je to pre vaše vlastné záznamy. Výsledok by ste mali aj napriek tomu oznámiť NHS (informácie nájdete na strane 15).

Navštívte stránku: gov.uk/report-covid19-result

Ak žijete v Škótsku, navštívte stránku covidtest.scot

Kto absolvoval test	Dátum	Čas	Výsledok testu

Súprava obsahuje nasledujúce materiály

Položky	Balenie 7 kusov
Návod na použitie (táto príručka)	1
Testovacie kazety v zapečatenom vrecku	7
Vrecúška s tekutinou (ampulky s extrakčným pufrom)	7
Extrakčné skúmavky	7
Tyčinky	7
Plastové vrecká na odpad	7

Súhrn informácií

Alternatívne jazykové verzie a videoukážky Dodatočná podpora pri samotestovaní Návod na prípravu a testovanie dieťaťa	gov.uk/covid19-self-test-help
Návod na samoizoláciu a informácie o liečbe	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
Usmernenie NHS k ochoreniu COVID-19	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 a váš stav sa zhoršuje alebo sa po siedmich dňoch nezlepší, využite online službu NHS 111 pre prípady nákazy koronavírusom:	111.nhs.uk Alebo volajte NHS 111, ak nemáte prístup na internet
Príznaky ochorenia COVID-19 u detí	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children
Ak vám zariadenie spôsobilo zranenie, nahláste to na:	coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Nahláste výsledok online (Anglicko, Wales alebo Severné Írsko):	gov.uk/report-covid19-result
Nahláste výsledok online (Škótsko):	covidtest.scot
Objednajte si aktuálne odporúčaný test	gov.uk/get-coronavirus-test
Ak je niečo poškodené, pokazené alebo chýba jazyková podpora (vrátane britského posunkového jazyka) Nahláste svoj výsledok (ak nemáte prístup na internet)	Zavolajte na číslo 119

Poznámky:

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotesom (výter z nosa) (zlatý)

Lined area for recording test results, consisting of 20 horizontal dashed lines.

Kód výrobku: COVID19AGVCGS7

Dodanie tejto pomôcky je povolené len v rámci distribúcie ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí (DHSC) v programe NHS Testovanie a trasovanie.



Výrobca:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park, Derby,
DE1 3QB, United Kingdom (Spojené kráľovstvo).

Informácie o tyčinke:



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
Adresa: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020
Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China
(Čínska ľudová republika)



alebo



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adresa: Touqiao Town, Guangling District.
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China
(Čínska ľudová republika)



Symbols



Skladujte pri teplote
2 – 30 °C



Sterilizované
pomocou
etylénoxidu



Výrobca

Ak je balenie
poškodené,
produkt
nepoužívajte



Číslo šarže



Dátum
expirácie



Zdravotnícka
pomôcka na
diagnostiku in vitro



Prečítajte
si návod na
použitie



Obsah dostatočný
na 7 testov



Nepoužívajte
opakovane



Prečítajte si „Rady
o vykonaní testu“,
kde nájdete
všeobecné pokyny
a upozornenia



Katalógové číslo

Verzia 5 dátum platnosti 29.09.2021

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý), výrobca: SureScreen Diagnostics a kód výrobku: COVID19AGVCGS7

Táto príručka s pokynmi sa týka iba testovacej kazety SureScreen SARS-CoV-2 s antigénovým rýchlotestom (výter z nosa) (zlatý)