


Teste başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu test daha önce yaptıklarınızdan farklı olabilir.

SureScreen SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi Kullanım Kılavuzu (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın)

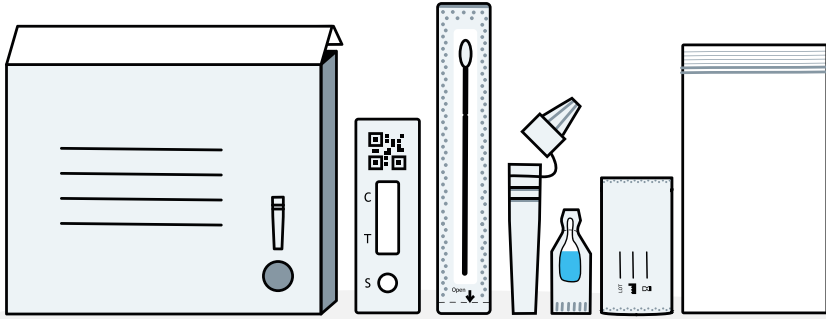

Bu kullanım talimatları COVID19AGVCGS7 ürün kodlu, SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın) için geçerli olup kendinize, çocuğunuza veya bir başkasına nasıl COVID-19 testi yapacağınızı ve sonuçları NHS'e nasıl bildireceğiniz açıklanmaktadır.

Talimatların farklı dillerdeki versiyonlarını ve örnek videoları [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) adresinde bulabilirsiniz.

Bütün test sonuçlarınızı NHS'e bildirin

Yapmanız gerekenler

Adım adım rehber

Talimatları dikkatle okuyun ve adımları sırasıyla takip edin. Her bir testin hazırlık süresi yaklaşık 15 dakika olup sonuçlar 10 dakikada hazır olmaktadır.



1	Test alanını hazırlayın ve test kitinin içeriğini kontrol edin	sayfa 6
2	Testi hazırlayın	sayfa 8
3	Sürüntü örneği alın	sayfa 10
4	Sürüntü örneğini işlemde geçirin	sayfa 12
5	Sonucu kontrol edin	sayfa 14
6	Sonucu bildirin	sayfa 15
7	Sonuçlar ne anlama geliyor?	sayfa 16
8	Test performansı	sayfa 17
9	Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın	sayfa 17

COVID-19 olan yaklaşık her 3 kişiden biri bunu bilmiyor.

Bu kullanım kılavuzu sadece SureScreen SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın) için geçerlidir.

Testle ilgili tavsiyeler

Saklama ve Kullanma Koşulları

- Ambalajı içerisinde, oda sıcaklığında (2 ila 30°C arasında) muhafaza edin. Dondurucuya koymayın.
- Test kiti oda sıcaklığında (15°C ila 30°C arasında) kullanılmalıdır. Eğer 15°C'nin altında saklanmışsa kullanmadan önce normal oda sıcaklığında 20 dakika bekletin.
- Test birden fazla kişiye yapılacaksa her biri için ayrı test kiti kullanın. Test kitinin içindeki malzemeler sadece bir kez kullanılabilir. İkinci kez kullanmayın. Test yapılan herkesin test sonuçları bildirilmelidir.
- Ellerinizle veya görmenizle ilgili bir sıkıntı varsa, örnek alma ve test etme aşamasında yardıma ihtiyacınız olabilir.
- Burnunuzda piercing varsa, teste başlamadan önce çıkartın.
- Kan bulaşmış örnekleri test etmeyin. Son 24 saat içerisinde burnunuz kanadıysa, test yapmadan önce 24 saat bekleyin.
- Sürüntü çubuğunun baş kısmına dokunmayın.
- Test kasetinde örneğin konulduğu ve sonuçların gösterildiği kısımlara dokunmaktan kaçının.

Uyarılar

- Ürünü son kullanım tarihinden sonra kullanmayın. Son kullanım tarihi kutunun üstünde yazılıdır.
- Kaset kullanıma hazır hale gelinceye kadar kapalı ambalajından çıkartılmamalıdır.
- Bu test kitleri sadece insanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Testten 15 dakika öncesine kadar burun spreyi kullanmayın.
- Bu ürün doğal kauçuk lateksten yapılmamakla birlikte son kullanıcıya teslim edilen ürünün içerisinde iz miktarda da olsa doğal kauçuk lateks bulunması ihtimali vardır.

Bu talimatları dikkatle okuyun. Bu test daha önce yaptıklarınızdan farklı olabilir.

Ürün Kodu: COVID19AGVCGS7

Test hakkında

Neden kendinize test yapmalısınız?

Bu COVID-19 kendi kendine test kiti, burundan sürüntü örneği alınarak kullanılır. Hiçbir belirtisi olmayan kimselere yapılmakla birlikte, hangi tür testin sizin için doğru olacağını kontrol etmek için ilgili ulusal yönergeleri takip etmelisiniz.

COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa yapmanız gerekenler:

- Hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için hem siz hem de aile üyeleriniz hükümetin evde izolasyonla ilgili güncel yönergelerine göre hareket etmelidir: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- Belirteleriniz başlamadan önceki son 48 saat içerisinde ya da belirti olmaması durumunda test sonucunun pozitif çıktığı gün itibariyle yakın temasta olduğunuz kişilere ve ziyaret ettiğiniz yerlere bilgi vererek her ihtimale karşı COVID-19 testi yaptırmalarını önerin. Yerel ve ulusal yönergelere mutlaka uyun.

COVID-19 testiniz negatif çıkarsa

Büyük olasılıkla testin yapıldığı sırada bulaşıcı değildiniz demektir. Bununla birlikte, test sonucunun negatif çıkması sizde koronavirüs olmadığını garanti etmez. Hükümetin konuyla ilgili yönergelerine uymaya devam etmelisiniz.

TAVSİYELER

Endişeliyseniz yardım almakta gecikmeyin. Sezgilerinize güvenin.

COVID-19 belirtileriniz varsa veya COVID-19 kaptıysanız lütfen NHS yönergelerini uygulayın: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/)


COVID-19 belirtileriniz varsa ve durumunuz kötüleşirse veya yedi gün geçmesine rağmen durumunuzda iyileşme olmazsa online yardım için NHS 111 sitesini ziyaret edin: 111.nhs.uk

İnternete erişiminiz yoksa **111'den NHS'i** arayın.

Acil tıbbi durumlarda **999'u** arayın.


Çocuklarda COVID-19 belirtileri hakkında bilgi ve tavsiye almak için: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/symptoms/coronavirus-in-children/)

Bu test kimlere yapılabilir?

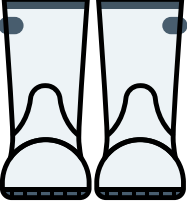

18 yaş ve üzeri yetişkinler

Kendi kendinize test yapın ve sonucu bildirin. Gerekirse yardım isteyin.

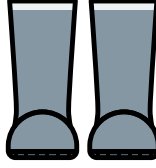

12-17 yaş arası gençler

Bir yetişkin gözetiminde kendi kendinize test yapın ve sonucu bildirin. Gerekirse test bir yetişkin tarafından yapılabilir.



12 yaşından küçük çocuklar

12 yaşından küçük çocuklara bir yetişkin tarafından test yapılmalıdır. Bir çocuğa test yapma konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız yapmayın. Test esnasında çocuğun canı önemli ölçüde yanarsa veya önemli ölçüde rahatsızlık yaşarsa teste devam etmeyin.

Test sıklığı

Ne sıklıkla test yapmanız gerektiği koşullarınıza ve güncel ulusal veya yerel yönergelere göre değişebilir.

Where to find extra support

Kendi kendine testle ilgili daha fazla bilgi için: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Bu kullanım kılavuzu sadece COVID19AGVCGS7 ürün kodlu, SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın) için geçerlidir. Ürün Kodu: COVID19AGVCGS7

Ürün Kodu: COVID19AGVCGS7

Bütün test sonuçlarınızı NHS'e bildirin

1. Test alanını hazırlayın

ÖNEMLİ

Test kiti oda sıcaklığında (15°C ila 30°C arasında) kullanılmalıdır. Eğer 15°C'nin altında saklanmışsa kullanmadan önce normal oda sıcaklığında 20 dakika bekletin.




Testten 15 dakika öncesine kadar burun spreyi kullanmayın.



15
dakika

İhtiyacınız olanlar: Zamanlayıcı (örn. saat), kâğıt mendil, el dezenfektanı veya sabun ve sıcak su.

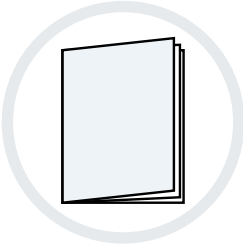

1 Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.



2 Testin yapılacağı alan düz ve boş olmalı; test yapılmadan hemen önce temizlenip kurulanmalıdır.




3 Ellerinizi sıcak su ve sabunla 20 saniye boyunca iyice yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.


Bu kullanım kılavuzu sadece SureScreen SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın) için geçerlidir.

Kitin içeriğini kontrol edin

4 Test kutusunun içinde olması gerekenler:

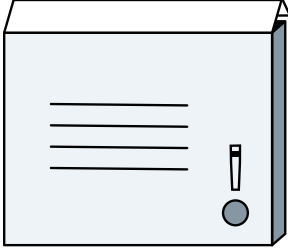

Üzerinde tüp standının bulunduğu kutu

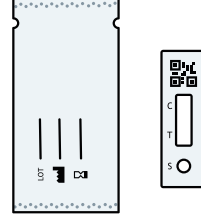


Kapalı ambalaj içerisinde test kasetleri




Saşe içerisinde test solüsyonu şişeleri



Örnek tüpleri

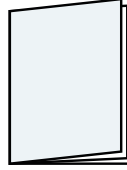

Kullanım talimatları (bu kitapçık)

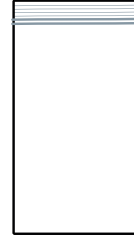

Plastik çöp poşetleri



Sürüntü çubukları

TAVSİYELER


Hasarlı, kırık veya eksik bir şey olması durumunda yapılması gerekenler

Test kitinin içerisinde hasarlı, kırık veya eksik bir parça tespit ederseniz lütfen kiti kullanmayın. Müşteri İletişim Merkezini arayarak durumu bildirebilirsiniz. Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açıktır.

119u arayın. (Sabit hatlardan ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilir.)
200 dilde ve İngiliz İşaret Dilinde hizmet verilmektedir.

Bir cihazdan zarar görmeniz halinde durumu [coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk) adresinden bildirin.

2. Testi hazırlayın

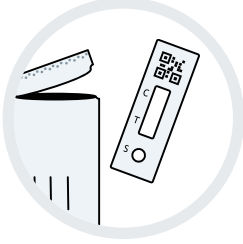


- 5 Test kasetini ambalajın içinden çıkartın ve temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.




UYARI

Test kaseti ambalajından çıkartıldıktan sonra 1 saat içerisinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde, test geçersiz olur. Bir saatten uzun bir süredir kapalı ambalajından çıkartılmış bir halde bekletilen kaseti ve ambalajın içindekileri atın.

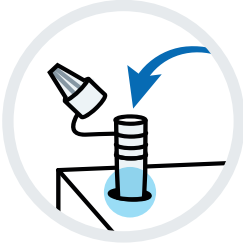

- 6 Örnek tüpünü, içine koyacağınız sıvının dökülmesini önlemek için, tüp standına (kutu kapağının üzerindeki perfore yuvarlak alana) yerleştirin.

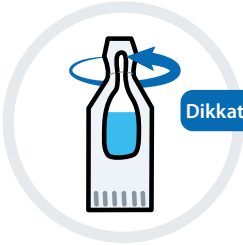

- 7 Saşe içerisindeki test solüsyonu şişesinin kapağını dikkatlice çevirip açın. Bu esnada solüsyon şişesini yüzünüzden uzak tutun ve içindeki sıvının dökülmemesine dikkat edin.

UYARI

Test solüsyonunun içerisinde yüze veya cilde temas etmesi halinde tahriş edebilecek maddeler bulunmaktadır. Solüsyonun cilt veya göze temas etmesi halinde, bol suyla yıkayın. Ciltte tahriş meydana gelirse tıbbi yardım isteyin.



- 8 Örnek tüpünün ağzını açıp sıvıyı içine boşaltın.

Bu işlem esnasında dikkatli olun ve boş şişeyi kitin içindeki plastik çöp poşetine yerleştirin.



9

Bir mendile nazikçe sümkürüp burnunuzu silin ve mendili kapalı bir çöp kutusuna atın.


Eğer bir başkasına yardımcı oluyorsanız veya testi bir çocuğa yapıyorsanız, sümkürmelerine yardım edin ve mendili kapalı bir çöp kutusuna atın.



10

Ellerinizi yeniden sıcak su ve sabunla 20 saniye boyunca iyice yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.

Aynı şekilde, yardımcı olduğunuz bir kimse varsa veya testi bir çocuğa yapıyorsanız, ellerini yıkamalarına yardım edin.

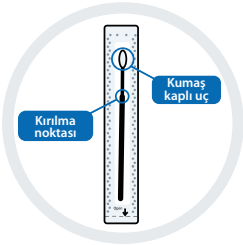


11

Kapalı ambalajın içerisindeki sürüntü çubuğunun yumuşak, kumaş kaplı ucunu elinizle tespit edin.

ÖNEMLİ

Çubuğun yumuşak, kumaş kaplı ucuna elinizle dokunmayın. Dokunmanız halinde, çubuğu kullanmayıp atın.

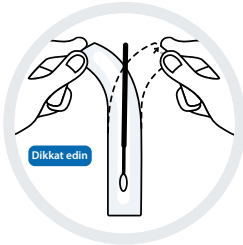

12


Çubuğu kullanmaya hazır olduğunuz zaman, ambalajı diğer ucundan tutarak yavaşça açın.

3. Sürüntü örneği alın

Başka birine test yapacaksanız 11. sayfadaki talimatlara bakın.


ÖNEMLİ

Test sadece burundan örnek alınarak yapılmalıdır.

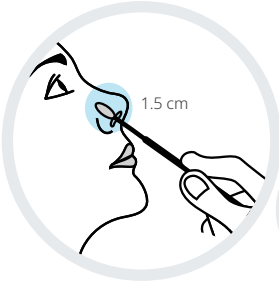

13


Sürüntü çubuğunun kumaş kaplı ucunu burun deliklerinden birine (1.5 cm kadar içeriye) yerleştirin.

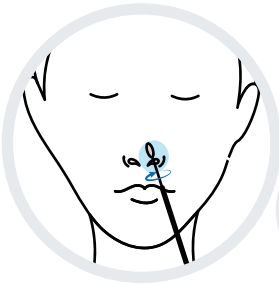

14

Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına dairesel hareketlerle ve **en az 5 saniye boyunca 5 kez** nazikçe sürtün ve yavaşça çıkartın.

Bastırmanız veya çubuğu çok derine itmeniz gerekmez. Çubuğu ambalajına geri koymayın.

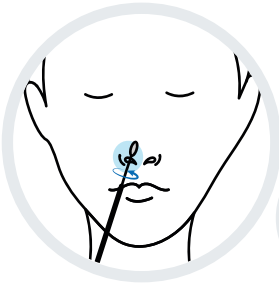

15

Aynı çubuğu bu kez diğer burun deliğine yerleştirin ve (yine yaklaşık 1.5 cm kadar) içeriye ittin.


Yine dairesel hareketlerle ve **en az 5 saniye boyunca** burun deliğinin iç kısımlarına **5 kez** nazikçe sürtün.



Testin başka birine yapılması


TAVSİYE

12 yaşından küçük çocuklara bir yetişkin tarafından test yapılmalıdır. Bir çocuğu teste nasıl hazırlayacağınıza ve testi nasıl yapacağınıza dair talimatlar aşağıda yazılıdır. Dilerseniz gov.uk/covid19-self-test-help adresindeki videoyu da seyredebilirsiniz.

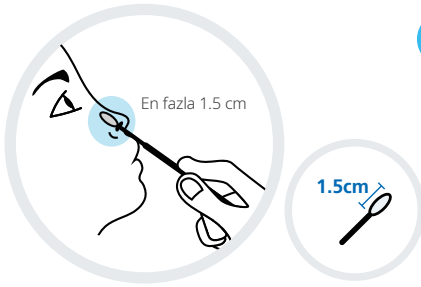


13

Bir çocuğa test yapacaksanız, onlara test kitini gösterin ve ne yapacağınıza anlatın. Mümkünse birinin kucağına oturtun veya birinden elini tutmasını isteyin.

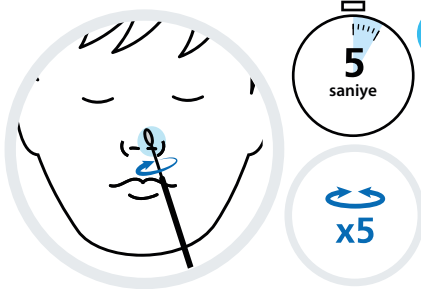

14

Sürüntü çubuğunun kumaş kaplı ucunu çocuğun burun deliklerinden birine yerleştirip en fazla 1.5 cm içeriye girecek şekilde veya direnç hissedinceye kadar ittirin. Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına dairesel hareketlerle ve **en az 5 saniye boyunca, 5 kez** nazıkçe sürütün ve yavaşça çıkartın. Bastırmanız veya çubuğu çok derine itmeniz gerekmez. Çubuğu ambalajına geri koymayın.

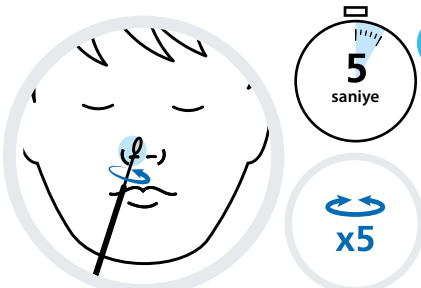

15


Aynı çubuğu bu kez diğer burun deliğine yerleştirin ve yine en fazla 1.5 cm kadar ya da direnç hissedene dek içeriye ittirin.

Çubuğu dairesel hareketlerle ve **en az 5 saniye boyunca** burun deliğinin iç kısımlarına **5 kez** nazıkçe sürütün.

4. Sürüntü örneğini işlemiden geçirin

İPUCU

En iyi performans için, burundan alınan örneği mümkün olan en kısa sürede test edin.

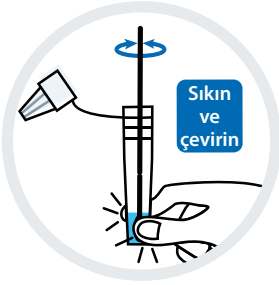

16

Örnek tüpünü alın ve sürüntü çubuğunu kumaş kaplı ucu aşağıya gelecek şekilde sıvının içine yerleştirin.

Çubuğun baş kısmını tüpün içerisine iyice bastırın ve bu esnada tüpün alt kısmını parmaklarınızın arasında sıktırın.


Bunu yaparken diğer elinizle çubuğu en az 10 saniye boyunca çevirin.



17


Çubuğu yavaşça yukarıya kaldırın ve "kırılma noktası"ndan tutarak kırın. Çubuğun baş kısmını tüpün içinde bırakın.

Kırdığınız ucu da kitin içindeki çöp poşetine koyun.

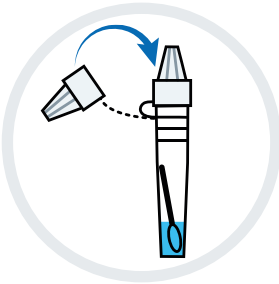


18

Damlalıklı kapağı örnek tüpünün üstüne sıkıca yerleştirip kapatın.

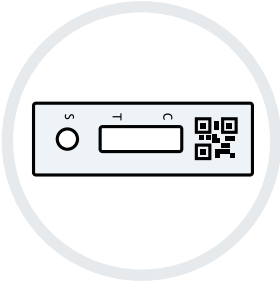

19

Test kasetini temiz ve düz bir yüzeye yerleştirdiğinizden emin olun. Test esnasında kaseti yerinden oynatmayın.

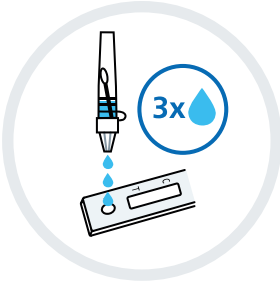


20

Örnek tüpünü nazıkçe sıkarak içindeki sıvıdan test kasetinin üzerindeki örnek haznesine (S) 3 damla damlatın.

Hava kabarcığı değil, sıvı damlattığınızdan emin olun.

Tüpü çöp poşetine yerleştirin.

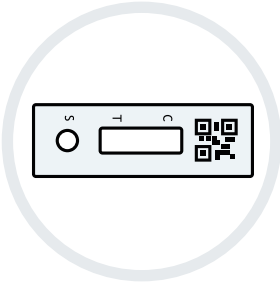

21

Zamanlayıcıyı ayarlayın ve sonuca bakmadan önce 10 dakika bekleyin.

Test esnasında kaseti yerinden oynatmayın. 10 dakika dolunca sonucu kontrol edin.

Test sonucuna bakmak için 10 dakika tamamen dolmalıdır. 20 dakikayı geçirmeyin.



5. Test sonucunu kontrol edin

ÖNEMLİ



Sonucu kontrol etmeden önce 10 dakika bekleyin.



Testi **20 dakikadan** fazla bekletmeyin, aksi takdirde sonuç geçersiz olur.



Pozitif sonuç


İki çizgi belirir. Renkli çizgilerden biri C işaretli kontrol çizgisi bölgesinde, diğer renkli çizgi de T işaretli test çizgisi bölgesinde belirmelidir.

Biri C, diğeri T'nin yanında olmak üzere görülen iki çizgi, silik olsa dahi, test sonucunun pozitif olduğunu gösterir.

ÖNEMLİ


Test sonucu pozitif çıkarsa evde kalıp kendinizi izole etmeniz, ev halkının da hükümetin bu konuyla ilgili yönergelerine uyması gerekmektedir:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

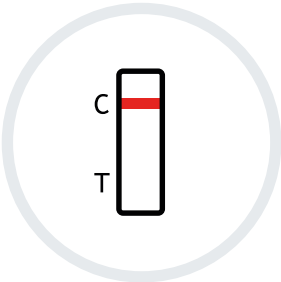

Negatif sonuç

C işaretli kontrol çizgisi bölgesinde bir renkli çizgi belirir. T işaretli test çizgisi bölgesinde hiçbir çizgi belirmez.

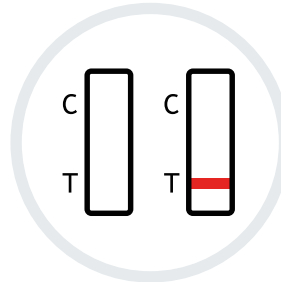


Geçersiz sonuç

Kontrol çizgisi (C) görünmez.

6. Sonucu bildirin

Pozitif, negatif ve geçersiz test sonuçlarınızı NHS'e bildirmeniz gerekmektedir.

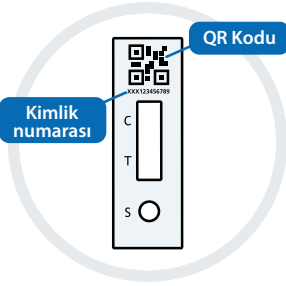

Bütün test sonuçlarının kayda geçirilmesi bilim insanlarının yeni virüs salgınlarını tespit etmesine ve nasıl müdahale edileceği konusunda tavsiye vermelerine yardımcı olmaktadır.

Sadece pozitif sonuçlar bildirilirse vaka sayıları olduğundan fazla görünür. Bu yüzden test sonucu negatif veya geçersiz çıksa bile NHS'in elinde doğru bilgiler olmasını sağlamış olacaksınız. Test sonucunu bildirmek için QR koduna ya da kodun altındaki kimlik numarasına ihtiyacınız olacak.



İnternette bildirin (en hızlı yöntem). İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda'da yaşıyorsanız [gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result) adresini ziyaret edin.

İskoçya'da yaşıyorsanız [covidtest.scot](https://www.covidtest.scot) adresine gidin.



Sonucu telefonla da bildirebilirsiniz.

Eğer internette bildiremezseniz, **119**u arayın.

Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açık olup sabit hatlar ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilir.

Ürün Kodu: COVID19AGVCGS7

Bütün test sonuçlarınızı NHS'e bildirin

7. Sonular ne anlama geliyor?

Testi ancak sonucu bildirdikten sonra tamamlamış sayılırsınız



Pozitif sonu

Test sonucunuz pozitif ıkarsa byk olasılıkla COVID-19'a yakalanmışsınız ve başkalarına da bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir. Evde kalıp kendinizi izole etmeniz gerekir. Sonucu bildirdiğiniz zaman, başka ne yapmanız gerektiği konusunda size bilgi verilecektir.

UYARI

Hem siz hem de varsa sizinle yaşıyan kimseler gncel ulusal ve yerel ynergelere uygun hareket etmelidir. Bu ynergeleri ğrenmek iin nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Negatif sonu

Test sonucunuzun negatif ıkması testin yapıldığı sırada byk olasılıkla bulaşıcı olmadığınız anlamına gelir. Bununla birlikte, negatif sonu **sizde COVID-19 olmadığının garantisidir.**

Test sonucunuz negatif ıksa bile dzenli el yıkama ve gerekli yerlerde sosyal mesafe ve maske dahil olmak zere yerel ve ulusal makamların belirlediği kural ve talimatlara uymaya devam etmelisiniz.

Hastalık belirtilerinin ıkması halinde evde kalıp kendinizi izole etmeli ve gov.uk/get-coronavirus-test adresini ziyaret ederek veya 119 numaralı Mşteri İletişim Merkezini arayarak tavsiye edilen testi edinmelisiniz. Hatlar her gn 07:00-23:00 arası hizmet vermektedir.

Hem siz hem de hane halkı ulusal ynergelere uymalıdır.



Geçersiz sonuç

Test sonucu geçersiz çıkarsa, test doğru yapılmamış demektir ve testin yapıldığı esnada virüs taşıyıp taşımadığınızı söylemek mümkün değildir. Mümkün olan en kısa sürede paketin içerisinde yeni bir test çıkarıp yapmanız gerekir. İlk testin içindeki hiçbir şeyi yeniden kullanmayın ve test prosedürünü 1. adımdan itibaren başlatın.

Problemin devam etmesi halinde test kitlerini kullanmayı derhal bırakın ve [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) adresinden, NHS COVID-19 uygulamasından ya da **119** numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayarak farklı bir test isteyin. Merkez her gün 07:00-23:00 arası hizmet vermektedir.

8. Test performansı

Test yapılan kişide yüksek düzeyde koronavirüs (COVID-19) bulunması halinde testin pozitif sonuç verme ihtimali çok daha yüksektir. Bu da halen bulaşıcı olan ve derhal kendini izole etmesi gereken kimselerin tespit edilmesi olasılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir.



9. Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın

Test tamamlandığı zaman, kullanılan bütün test malzemelerini kitle birlikte verilen çöp poşetine koyup evsel atıkları biriktirdiğiniz çöp kutusuna atın.

Sonra da ellerinizi iyice yıkayın.

Bu kitapçık içindeki bilgiler 29 Eylül 2021 itibarıyla doğrudur.

Ürün kodu: COVID19AGVCGS7

Ürün ismi: SureScreen SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın)

Test sonuçlarınızı not edin

Bu sizin kendiniz için tuttuđunuz bir kayıttır. Test sonucunu NHS'e mutlaka bildirmeniz gerekir. (Bilgi için bkz. Sayfa 15). Sonucu gov.uk/report-covid19-result adresinden bildirebilirsiniz.

İskoçya'da yaşıyorsanız covidtest.scot adresini ziyaret ediniz.

Testin yapıldığı kiři	Tarih	Saat	Test sonucu

Test kitinin içinde yer alan malzemeler aşağıdaki gibidir

İçindekiler	7'li paket
Kullanım talimatları (bu kitapçık)	1
Kapalı ambalaj içerisinde test kasetleri	7
Saşe içerisinde test solüsyonu şişeleri	7
Örnek tüpleri	7
Sürüntü çubukları	7
Plastik çöp poşetleri	7

Daha Fazla Bilgi İçin

Kendi kendine test yapma konusunda ek destek Alternatif dillerdeki versiyonlar ve örnek videolar Çocukları teste hazırlama ve test yapma	gov.uk/covid19-self-test-help
Evde izolasyon ve tedavi	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/
NHS'in COVID-19 yönergeleri	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
COVID-19 belirtileriniz varsa ve durumunuz kötüleşirse veya yedi gün geçmesine rağmen durumunuzda iyileşme olmazsa online yardım için NHS 111 sitesini ziyaret edin:	111.nhs.uk İnternete erişiminiz yoksa 111'i arayabilirsiniz
Çocuklarda COVID-19 belirtileri	nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children
Bir cihazdan zarar görmeniz halinde durumu bildirin	coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Test sonucunu internette bildirme (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda):	gov.uk/report-covid19-result
Test sonucunu internette bildirme (İskoçya):	covidtest.scot
Tavsiye edilen bir test için sipariş verme	gov.uk/get-coronavirus-test
Hasarlı, kırık veya eksik parçalar Dil desteği (İngiliz İşaret Dili dahil) İnternet erişiminiz yoksa sonucunuzu bildirmek için	119'u arayın

Bu kullanım kılavuzu sadece SureScreen SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın) için geçerlidir.

Bu cihazın tedarikine sadece NHS Test ve Takip programı uyarınca Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC) tarafından yapılacak dağıtım kapsamında izin verilmiştir.



Üretici:

SureScreen Diagnostics
1 Prime Parkway, Prime Enterprise Park,
Derby, DE1 3QB, United Kingdom [Birleşik Krallık]



Sürüntü çubuğu üreticisi:

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
Adres: No.10 Beiyuan Ave., Huangyan, 318020
Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China [Çin]
veya



Jiangsu ChangFeng Medical Industry Co., LTD
Adres: Touqiao Town, Guangling District,
Yangzhou, 225109 Jiangsu P.R. China [Çin]



Semboller



2-30°C arası
sıcaklıkta
saklayın



Etilen oksitle
sterilize edilmiştir



Üretici

Ambalajı zarar
görmüşse
kullanmayın



Parti numarası



Son kullanım
tarihi



In vitro tanı amaçlı
tıbbi cihaz



Kullanım
talimatlarına
bakın



İçindekiler 7 adet
test için yeterlidir



Tekrar kullanmayın



Genel tavsiye
ve uyarılar için
"Testle ilgili
tavsiyeler"
kısımına bakın



Katalog numarası

Versiyon: 5 Geçerlilik tarihi: 29/09/2021

Bu kullanım talimatları COVID19AGVCGS7 ürün kodlu, SureScreen Diagnostics SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın) için geçerlidir

Bu kullanım kılavuzu sadece SureScreen SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi (Burundan Sürüntü Testi) (Kolloidal Altın) için geçerlidir.