


Darllenwch y canllaw cyfan yn ofalus cyn dechrau'r prawf.
Efallai y bydd y prawf yma'n wahanol i'r un a ddefnyddioch yn flaenorol.

Eich canllaw cam wrth gam i'r Cerdyn Prawf Cyflym Antigenau MP Biomedicals SARS-CoV-2

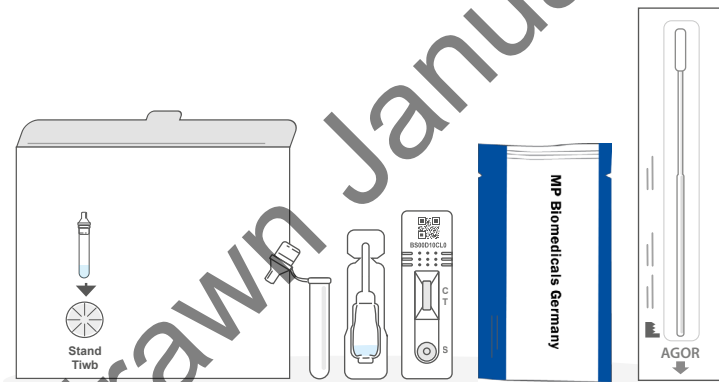

Mae'r cyfarwyddiadau defnydd hyn yn cyfeirio at y Cerdyn Prawf Cyflym Antigenau MP Biomedicals SARS-CoV-2, 07AG6007BS yn unig.

Mae'r canllaw hwn yn esbonio sut i brofi eich hun neu unigolyn arall am COVID-19, ac adrodd i'r GIG am y canlyniadau.

Mae fersiynau ar gael mewn **ieithoedd eraill** gan gynnwys Cymraeg, ynghyd ag arddangosiadau fideo [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Adroddwch eich holl ganlyniadau prawf i'r GIG

Beth sydd angen i chi ei wneud

Eich canllaw cam wrth gam

Darllenwch y cyfarwyddiadau defnydd yn ofalus a dilyn y camau yn y drefn gywir. Mae pob prawf yn cymryd tua 15 munud i baratoi a bydd y canlyniadau'n barod ar ôl 15 munud arall.



Cynnwys y llyfryn hwn

Rhan	Teitl	Tudalen
1	Paratoi eich ardal brawf	6
	Gwirio cynnwys eich pecyn profi	7
2	Paratoi eich prawf	8
3	Cymryd eich sampl swab	10
	Helpu rhywun arall	11
4	Prosesu'r sampl swab	12
5	Darllen eich canlyniad	14
6	Adrodd eich canlyniad	15
7	Beth mae eich canlyniadau'n ei olygu	16
8	Perfformiad y prawf	17
9	Gwaredu'ch pecyn profi yn ddiogel	17
	Gwnewch nodyn o ganlyniadau eich profion	18

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â COVID-19 yn gwybod ei fod ganddynt.

Gyda hunan-brofi rheolaidd gallwn arafu'r lledaeniad a helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein teuluoedd a'n cymunedau.

Cyngor ar gymryd y prawf

Mae yna awgrymau defnyddiol, cyngor a blychau rhybudd trwy gydol y canllaw i'ch helpu. Trwy ddilyn y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus gam wrth gam, byddwch yn llawer mwy tebygol o gael canlyniad dibynadwy.

Canllawiau a rhybuddion cyffredinol

- Os ydych chi wedi tyllu'ch trwyn, tynnwch y darn cyn swabio.
- Os bydd eich trwyn yn gwaedu yn ystod swabio, stopiwch swabio. Nid yw'n bosibl profi'r swab.
- Nid yw'r cynnyrch wedi ei greu gyda latecs rwber naturiol. Fodd bynnag ni ellir eithrio presenoldeb neu olion latecs rwber naturiol yn y cynnyrch fel y mae wedi ei ddarparu i'r defnyddiwr terfynol yn llwyr.
- Cadwch y pecyn profi i ffwrdd o blant ifanc.
- Dilynwch y camau samplu gyda swab yn ofalus iawn a defnyddio'r swabiau a ddarparwyd gyda'r pecyn hwn ar bob adeg. Gallai methiant i gasglu'r sampl yn gywir arwain at ganlyniadau prawf anghywir.
- Gall oedolyn arall gynorthwyo pobl sydd angen cymorth ychwanegol, yn arbennig y rhai gyda nam ar eu golwg. Talwch sylw arbennig i'r wybodaeth atodol ar Dudalen 11 wrth gyflawni'r prawf.

RHYBUDD

Peidiwch â defnyddio'r cynnyrch tu hwnt i'r dyddiad dod i ben.

CYNGOR

- Storiwch y pecyn profi mewn lleoliad sych, heb fod yn rhy gynnes (4°C i 30°C).
- Peidiwch â'i adael yng ngolau'r haul uniongyrchol a pheidiwch â storio mewn oergell neu rewgell gan y gall hyn arwain at ganlyniadau anghywir.
- Peidiwch â defnyddio'r cerdyn prawf os yw'r pecyn wedi selio wedi ei ddfrodi neu'r sêl wedi torri.
- Dylech ddefnyddio'r pecyn ar dymheredd ystafell (15°C i 30°C). Os yw'r pecyn wedi'i storio mewn ardal dan 15°C, gadewch ef ar dymheredd ystafell am 30 munud cyn ei ddefnyddio.

Ynglŷn â'r prawf hwn

Pam ddylech chi wneud hunan-brawf

Mae'r pecyn hunan-brawf COVID-19 yma yn brawf swab ar gyfer y trwyn i wirio os ydych yn heintus. Mae ar gyfer pobl sydd â symptomau yn ogystal â rhai heb unrhyw symptomau. Fodd bynnag, dylech ddilyn canllawiau cenedlaethol i wirio pa fath o brawf sy'n addas i chi.

Os byddwch yn dychwelyd prawf positif ar gyfer COVID-19 dylech:

- Helpu cyfyngu ar ledaeniad y clefyd, dylech chi a'ch aelwyd ddilyn canllawiau'r llywodraeth: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- Gyngori'r rhai rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw a lleoliadau rydych chi wedi ymweld â nhw yn ystod y 48awr cyn i'ch symptomau gychwyn, neu o'r diwrnod pan ddangosir canlyniad prawf positif os nad oes symptomau, y dylent gael prawf ar gyfer haint COVID-19 posibl. Dilynwch ganllawiau lleol a chenedlaethol ar bob adeg.

Os byddwch yn derbyn prawf negatif ar gyfer COVID-19

Mae'n debygol nad oeddech chi'n heintus pan wnaed y prawf. Fodd bynnag, nid yw canlyniad prawf negatif yn sicrwydd nad oes gennych y coronafeirws. Dylech barhau i ddilyn canllawiau'r llywodraeth.

CYNGOR

Os oes gennych chi neu eich plentyn/plant symptomau coronafeirws (COVID-19) neu os ydych wedi dal y coronafeirws (COVID-19), darllenwch ganllawiau'r GIG ar-lein: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

Os oes gennych chi neu eich plentyn/plant symptomau coronafeirws (COVID-19) ac mae'r cyflwr yn gwaethgu, neu os nad ydych chi/eich plentyn/plant yn gwella wedi 7 niwrnod, ewch i wasanaeth ar-lein **111** y GIG: 111.nhs.uk. Os nad oes gennych chi fynediad i'r rhynggrwyd, ffoniwch GIG **111**. Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch **999**.

Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help os ydych yn poeni. Dilynwch eich greddf.

Ar gyfer pwy mae'r prawf yma'n addas

Plant dan 14

Dylent gael cymorth gan oedolyn. Peidiwch â chynnal y prawf hwn os nad ydych yn teimlo'n hyderus yn helpu plentyn. (Gweler tudalen 11 am ragor o wybodaeth ar helpu plant)

Unigolion 14 oed neu hŷn

Gall pobl ifanc 14-17 oed hunan-brofi gyda goruchwyliaeth oedolyn. Dylai pawb arall hunan-brofi ac adrodd, gyda chymorth os oes angen.

Pa mor aml i brofi


Gall pa mor aml y dylech brofi amrywio yn ôl eich amgylchiadau a beth yw'r canllawiau cenedlaethol neu leol ar y pryd.

Ble i ddod o hyd i gymorth ychwanegol


Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hunan-brofi ar: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

1. Paratoi eich ardal brawf


Byddwch angen: amserydd fel oriawr neu gloc, hancesi papur glanhawr arwyneb, hylif diheintio dwylo neu sebon a mynediad at ddŵr cynnes.

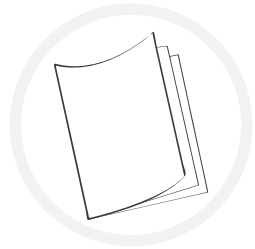

- 1 Darllenwch y ddogfen Cyfarwyddiadau Defnydd yma'n ofalus. Gallwch hefyd wyllo'r fideo prawf swab ar-lein os ydych chi angen rhagor o help: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

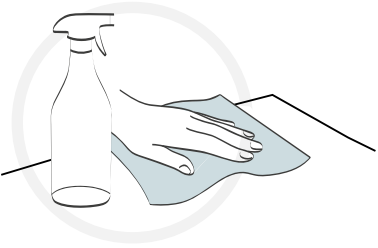


- 2 Yn syth cyn cychwyn y prawf, cliriwch, glanhewch a sychu arwyneb gwastad i roi'r pecyn profi arno.

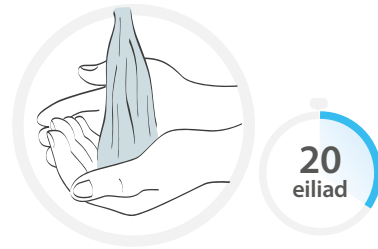

- 3 Golchwch eich dwylo'n dnylwyr am 20 eiliad, gan ddefnyddio sebon a dŵr cynnes, neu hylif diheintio dwylo. Os ydych chi'n profi mwy nag un person neu'n allatodd prawf annilys, golchwch eich dwylo eto rhwng pob prawf.

Gwiriwch gynnwys y pecyn


- 4 Yn eich blwch pecyn profi, fe ddylech weld yr holl gynnwys isod. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw beth wedi'i dorri na ddifrodi.

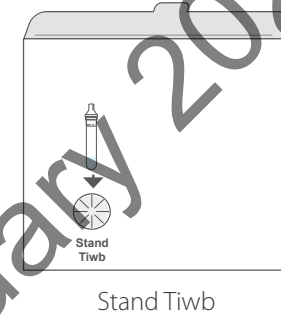


Stand Tiwb



Potel Byffer Echdynnu

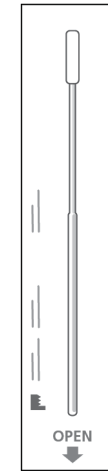

Swab Di-haint mewn Pecyn wedi ei Selio

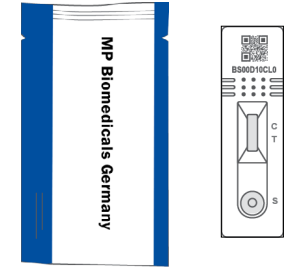

Cerdyn Profi mewn Pecyn wedi ei Selio



Tiwb Echdynnu

CYNGOR

Beth i'w wneud os yw rhywbeth wedi ei ddifrodi, torri neu ar goll


Os byddwch yn sylwi bod unrhyw beth wedi ei ddifrodi, torri neu ar goll, peidiwch â defnyddio'r pecyn profi. Gallwch roi adborth trwy ffonio'r ganolfan gyswllt i gwsmeriaid. Mae'r llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.

Ffoniwch: **119** (am ddim o ffonau symudol a llinellau tir).


Rydym yn cynnig cefnogaeth mewn 200 o ieithoedd, yn ogystal ag Iaith Arwyddion Prydain.

Os byddwch yn cael eich niweidio gan ddyfaes; gallai adrodd amdano helpu eraill. Ewch i: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. Paratoi eich prawf

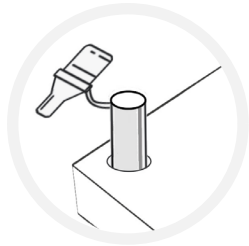


- 5 Rhowch y tiwb echdynnu yn stand y tiwb i osgoi arllwys yr hylif.

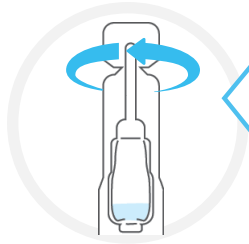

Cymerwch ofal

- 6 Trowch gaead y botel byffer echdynnu.
- RHYBUDD:** Agorwch y botel byffer echdynnu yn ddigon pell o'ch wyneb a gofalwch beidio â gollwng unrhyw hylif.

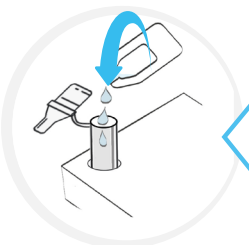


Cymerwch ofal

- 7 Gwasgwch yr holl doddiant byffer allan o'r botel byffer echdynnu i'r tiwb echdynnu.
- RHYBUDD:** Ceisiwch osgoi cyffwrdd y botel yn erbyn y tiwb.




- 8 Chwythwch eich trwyn yn ysgafn gan ddefnyddio hances bapur, a thafwch yr hances mewn bin wedi cau.
- Os ydych yn cynnal prawf ar blentyn helpwch ef neu hi i chwythu ei drwyn/thrwyn. Mae hyn er mwyn cael gwared ar lysnafedd gormodol.

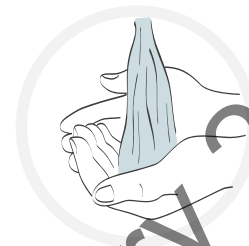


20 eiliad

- 9 Golchwch eich dwylo'n drylwyr eto am 20 eiliad, gan ddefnyddio sebon a dŵr cynnes.

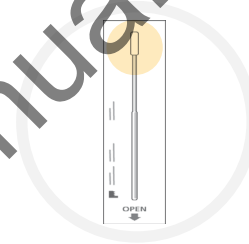

- 10 Chwiliwch am y swab yn y pecyn wedi ei selio. Nodwch ben ffabrig, meddal y swab.

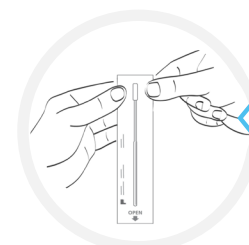

Cymerwch ofal

- 11 Agorwch becyn y swab a'i dynnu allan gyda gofal.
- RHYBUDD**
- Peidiwch â chyffwrdd blaen meddal, ffabrig y swab gyda'ch dwylo

3. Cymryd eich sampl swab

Helpu rhywun arall


RHYBUDD

Dylid cyflawni'r prawf yn defnyddio sampl swab o'r trwyn yn unig. Os na fyddwch chi'n dilyn cyfarwyddiadau'r swab yn ofalus, gallai hyn arwain at ganlyniadau prawf anghywir.

Os ydych yn helpu plentyn dan 14 neu rywun sydd angen cymorth, dilynwch y camau ar dudalen 11.

Dylai oedolyn helpu plant dan 14. Dilynwch y canllawiau isod ar sut i baratoi a helpu plentyn neu berson sydd angen cymorth. Gallwch wyllo fideo arddangos ar: gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help


Os ydych chi'n helpu plentyn, dangoswch y pecyn profi iddynt a thrafod beth fyddwch chi'n ei wneud. Gofynnwch i'r plentyn chwythu ei drwyn neu ei thrwyn mewn hances bapur. Rhowch yr hances mewn bin sy'n cau.

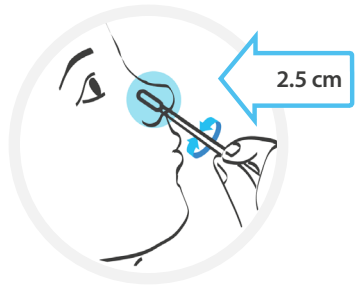

12 Rhowch y swab yn ofalus i mewn i un o'r ffroen. Dylid mewnosod blaen y swab dim llai na 2.5 cm o ymyl y ffroen.




12 Rhowch y swab yn ofalus i mewn i un o'r ffroenau. Dylid mewnosod blaen y swab nes y teimlir gwrthiant.

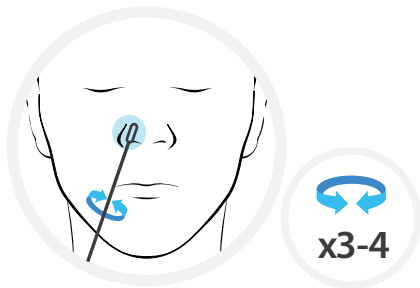

13 Rholiwch y swab yn ofalus o amgylch tu fewn eich ffroen mewn symudiad cylchol 3-4 o weithiau. Tynnwch y swab yn araf. Nid oes angen defnyddio grym a does dim rhaid i chi wthio'n rhy bell i'ch ffroen.

RHYBUDD: Gallai hyn deimlo'n anghyfforddus. Peidiwch â gosod y swab yn ddyfnach os teimlwch ei fod yn cyffwrdd â rhwystri neu'n peri poen.

Gan ddefnyddio'r un swab, ailadroddwch gamau 12 a 13 ar gyfer y ffroen arall.

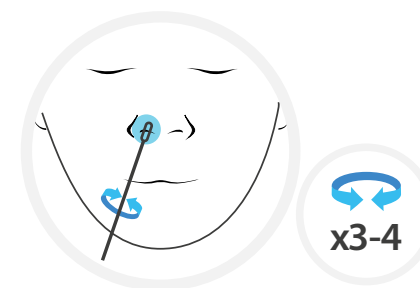

13 Rholiwch y swab yn ofalus o amgylch tu fewn i'w ffroen mewn symudiad cylchol 3-4 o weithiau. Tynnwch y swab yn araf. Nid oes angen defnyddio grym a does dim rhaid i chi wthio'n rhy bell i'w ffroen.


RHYBUDD: Gallai hyn deimlo'n anghyfforddus. Peidiwch â gosod y swab yn ddyfnach os yw'n teimlo ei fod yn cyffwrdd â rhwystri neu'n peri poen.

Gan ddefnyddio'r un swab, ailadroddwch gamau 12 a 13 ar gyfer y ffroen arall.


4. Prosesu'r sampl swab

Gair o gyngor


I gael y perfformiad gorau, profwch y swab trwynol cyn gynted â phosibl wedi swabio eich ffroenau.

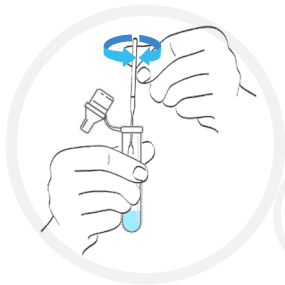

- 14 Codwch y tiwb echdynnu a gosodwch y swab gyda'r sampl i mewn i'r tiwb echdynnu. Trowch y swab 3-5 o weithiau. Gadewch y swab yn y tiwb echdynnu am 1 funud.

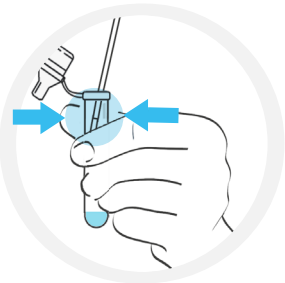


- 15 Pinsiwch y tiwb echdynnu gyda bysedd tra'n tynnu'r swab er mwyn gadael cymaint o doddiant â phosibl yn y tiwb. Rhowch y swab yn ôl yn neunydd pacio'r swab.

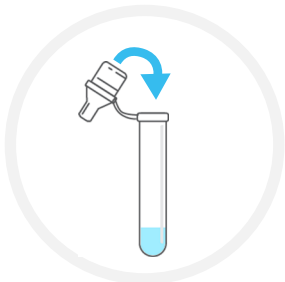

- 16 Gosodwch gaeaf y diferydd yn dyn ar ben y tiwb echdynnu.

CYNGOR

Golchwch eich dwylo eto wedi cwblhau'r cam yma.

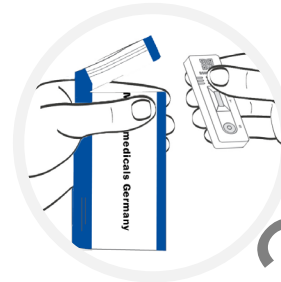

- 17 Agorwch y pecyn ffoil a thynnu'r cerdyn profi.


RHYBUDD

Wedi ei agor, rhaid defnyddio'r cerdyn profi ar unwaith.




- 18 Sicrhewch fod y pecyn profi ar arwyneb glân a gwastad.

Peidiwch â symud y cerdyn yn ystod y prawf.

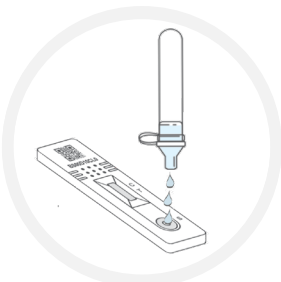

- 19 Gwasgwch y tiwb echdynnu yn ofalus i roi 3 ddiferyn o'r sbesimen profi yn y ffynnon (wedi ei labelu S) ar y cerdyn profi.

RHYBUDD: Gwnewch yn siŵr eich bod yn gollwng hylif ac nad yw'r ffynnon yn cynnwys unrhyw swigod aer.

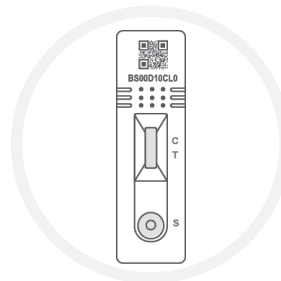

- 20 Gosodwch amserydd ac aros 15 munud cyn i chi ddarllen eich canlyniad. Gall canlyniad positif ymddangos unrhyw adeg, ond dylech aros am y 15 munud llawn i gofnodi canlyniad negatiff oherwydd gallai'r llinell brawf (T) gymryd cymaint o amser â hynny i ymddangos.


Dysgwch sut i ddarllen ac adrodd eich canlyniad ar y dudalen nesaf. >>

5. Darllen eich canlyniad

PWYSIG

Peidiwch â gadael i'r prawf ddatblygu am fwy na 20 munud gan y bydd hyn yn gwneud y canlyniad yn annilys.

20
munud

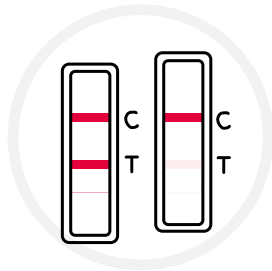


+ Canlyniad positif

Mae dwy linell yn ymddangos. Dylai un llinell lliw fod yn ardal y llinell reoli (C), a llinell lliw arall yn ardal y llinell brawf (T).

Mae dwy linell, un wrth ymyl C ac un wrth ymyl T, hyd yn oed os ydynt yn llinellau gwan, yn dangos bod canlyniad y prawf yn positif.


PWYSIG

Os bydd eich canlyniad yn positif, dylech hunanynysu a dylai eich aelwyd ddilyn canllawiau'r llywodraeth ar hunanynysu: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

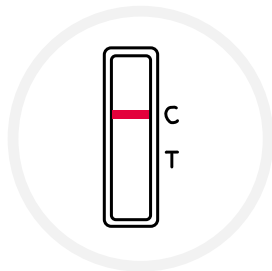

- Canlyniad negatif

Mae un llinell lliw yn ymddangos yn yr ardal llinell reoli (C). Does yna ddim llinell liw yn ymddangos yn y rhanbarth llinell brawf (T).

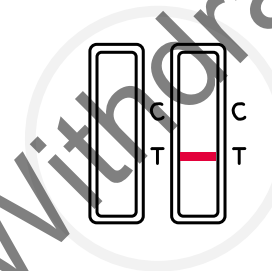


⊘ Canlyniad annilys

Nid yw'r llinell rheoli (C) yn ymddangos.

6. Adrodd eich canlyniad

Dylech adrodd eich canlyniadau positif, negatif ac annilys i'r GIG.

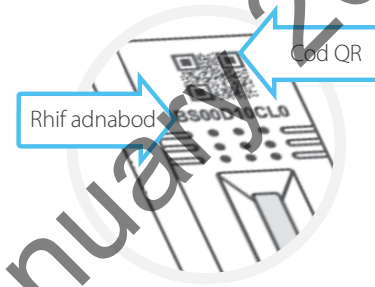

Mae cofnodi canlyniad pob prawf yn helpu gwyddonwyr i nodi achosion newydd o'r firws a chynghori ar sut i ymateb. Os mai dim ond canlyniadau positif a adroddir arnynt, mae lefelau achosion yn ymddangos i fod yn uwch nag ydynt mewn gwirionedd.

Felly hyd yn oed os yw'ch canlyniad yn negatif neu'n annilys, dylech sicrhau bod gwybodaeth y GIG yn gywir.

Mae angen y cod QR, neu'r rhif adnabod oddi tano i adrodd eich canlyniad.

Adrodd ar-lein (cyflymaf)


Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, ewch i: gov.uk/report-covid19-result

Os ydych chi'n byw yn yr Alban ewch i: covidtest.scot

Neu adrodd dros y ffôn

Ffoniwch **119**

Mae llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm, (am ddim o ffonau symudol a llinellau tir).

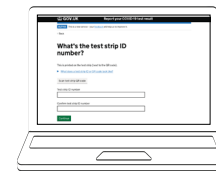

7. Beth mae eich canlyniadau'n ei olygu

Dim ond wedi i chi adrodd eich canlyniad fyddwch chi wedi cwblhau eich prawf

+ Canlyniad positif

Os byddwch yn cael canlyniad positif, mae'n debygol eich bod wedi eich heintio â COVID-19 ar hyn o bryd a bod perygl y byddwch yn heintio eraill. Dylech hunanynysu. Pan fyddwch yn adrodd eich canlyniad, byddwch yn cael rhagor o wybodaeth ar y camau nesaf i'w cymryd.

RHYBUDD

Dylech chi, ac unrhyw un sy'n byw gyda chi, ddilyn y canllaw cenedlaethol a lleol cyfredol. Gellir dod o hyd iddo yn: [nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/) neu trwy ffonio'r ganolfan gyswllt cwsmeriaid ar **119**. Mae llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.

- Canlyniad negatif

Os byddwch yn cael canlyniad negatif, mae'n debygol nad oeddech chi'n heintus pan wnaed y prawf. Fodd bynnag, nid yw canlyniad prawf negatif yn sicrwydd nad oes gennych COVID-19.

Os yw canlyniad y prawf yn negatif, dylech barhau i ddilyn rheolau a chanllawiau cenedlaethol a lleol, gan gynnwys golchi dwylo'n rheolaidd, cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb, lle mae angen gwneud hynny.

Os byddwch chi'n datblygu symptomau, dylech hunanynysu a chael y prawf a argymhellir ar hyn o bryd ar: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) neu trwy ffonio'r ganolfan gyswllt cwsmeriaid ar **119**. Mae llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.

Dylech chi a'ch aelwyd ddilyn canllawiau cenedlaethol.

⊘ Canlyniad annilys

Os byddwch yn cael canlyniad annilys, mae hyn yn golygu nad yw'n bosibl i ni ddweud a oedd y feirws arnoch pan gynhaliwyd y prawf. I wirio os oes gennych chi'r coronafeirws, cymerwch prawf arall cyn gynted â phosibl. Peidiwch ag ail-ddefnyddio unrhyw beth o'r pecyn profi a chychwynnwch weithdrefn y prawf o gam 1.

Os yw'r broblem yn parhau

Os yw'r broblem yn parhau, stopiwch ddefnyddio'r pecynnau profi ar unwaith. Os nad oes gennych chi brawf arall ar gael, gallwch gymryd gwahanol fath o brawf trwy ap COVID-19 y GIG neu trwy fynd i: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) neu trwy ffonio eich canolfan gyswllt cwsmeriaid ar **119**. Mae llinellau ar agor bob dydd, rhwng 7am ac 11pm.

8 Perfformiad y prawf

Mae'r prawf yn fwy tebygol o roi canlyniad positif os oes gan rywun lefelau uchel o goronafeirws (COVID-19).

Mae hyn yn golygu ei fod yn fwy tebygol o ddarganfod y bobl sy'n heintus ar hyn o bryd sydd angen hunanynysu ar unwaith.

9 Gwaredu'ch pecyn profi yn ddiogel



Pan fyddwch wedi cwblhau eich prawf, rhowch yr holl eitemau o'r pecyn profi a ddefnyddiwyd yng ngwastraff cyffredinol y cartref.

Golchwch eich dwylo'n drylwyr ar ôl gwaredu.

Gwnewch nodyn o ganlyniadau eich profion

Mae hyn ar gyfer eich cofnodion chi eich hun. Dylech adrodd i'r GIG am eich canlyniad hefyd (gweler tudalen 15 am ragor o wybodaeth).

Ewch i: gov.uk/report-covid19-result

Os ydych chi'n byw yn yr Alban ewch i: covidtest.scot

Cod QR / rhif adnabod y pecyn profi	Pwy gymerodd y prawf	Dyddiad	Amser	Canlyniad y prawf

Mae eich pecyn yn cynnwys y deunyddiau canlynol

Eitemau	Pecyn o 7
Cerdyn Profi mewn Pecyn wedi ei Sefio	7
Swab Di-haint wedi ei Sefio mewn Pecyn	7
Tiwb Echdynnu	7
Potel Byffer Echdynnu	7
Cyfarwyddiadau ar sut i'w defnyddio (sef y ddogfen hon)	1
Stand Tiwb	1

Withdrawn January 2024

Ni chaniateir cyflenwi'r ddyfais hon ond fel rhan o waith y DHSC dan raglen Profi ac Orlhain y GIG.



Gwneuthurwr:
MP Biomedicals Germany GmbH
Thueringer Str. 15 37269
Eschwege, Germany (Yr Almaen)

CE 0123



Gwneuthurwr y Swab:
Jiangsu Hanheng Medical Technology Co.,Ltd. 16-B4,#1 North Qingyang Road,
Tianning District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China (Tsiena)

CE 0197



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1, 47877, Willich, Germany (Yr Almaen)



Gwneuthurwr y Swab:
Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street,
Jinzhou District, Dalian, 116100 Liaoning, China (Tsiena)

CE 0197



CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Spain (Sbaen)

Mynegai i'r symbolau



Storiwch o fewn 4 – 30°C



Dihemtiwyd gan ddefnyddio ethylen ocsid



Gwneuthurwr



Cynhwysir digon ar gyfer 7 o brofion



Rhif lot



Dyddiad defnyddio erbyn



Dyfais feddygol ddiagnostig in vitro



Peidiwch â defnyddio os oes difrod i'r pecyn



Cadwch oddi wrth olau haul



Rhybudd



Peidiwch â'i aildefnyddio



Ailgylchadwy



Cadwch yn sych



Gweler y cyfarwyddiadau ar gyfer defnydd



Cydymffurfiaid Ewropeaidd



Rhif catalog



Cynrychiolydd Awdurdodedig

Mae'r holl wybodaeth a'r delweddau yn y ddogfen hon yn gywir ar 24/09/21. Fersiwn 0002



07AG6007BS