


قبل از اینکه تست را آغاز کنید، این راهنمای کامل را با دقت بخوانید.
این تست ممکن است با تستی که قبلاً استفاده کرده اید متفاوت باشد.

راهنمای مرحله به مرحله شما برای کارت تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2، MP Biomedicals

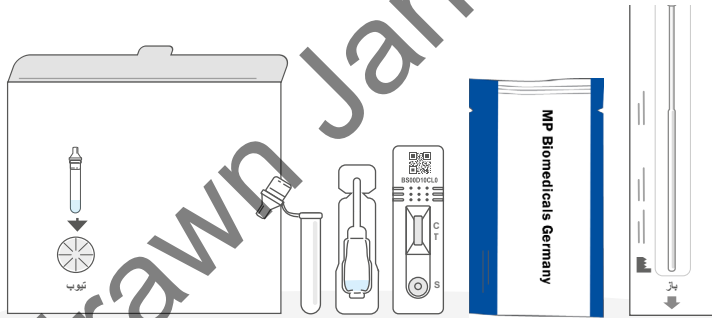

این دستورالعمل‌های استفاده فقط مربوط به کارت تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2، MP Biomedicals 07AG6007BS میباشد.

این راهنما توضیح میدهد که چگونه میتوانید خود یا شخص دیگر را تست COVID-19 کنید، و نتیجه آنرا به NHS گزارش دهید.

نسخه‌های زبان جایگزین از جمله نمایش ولزی و نمایش ویدیویی در [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) موجود است.

رهنمای مرحله به مرحله شما

لطفاً دستورالعمل استفاده را با دقت تعقیب کنید و مراحل را به ترتیب درست دنبال نمایید. راه اندازی هر تست حدود 15 دقیقه طول می کشد و نتایج بعد از 15 دقیقه دیگر آماده می شود.

محتویات این کتاب



بخش	عنوان	صفحه
1	ساخته تست خود را آماده کنید	6
	محتویات بسته تست خود را بررسی کنید	7
2	تست خود را تنظیم کنید	8
3	سمپل سواب (وسیله سمپل گیری از بینی) خود را بگیرید	10
	کمک به شخص دیگر	11
4	سمپل سواب خود را پروسس کنید	12
5	نتیجه خود را بخوانید	14
6	نتیجه خود را گزارش دهید	15
7	نتایج شما چی مفهوم میدهد	16
8	عملکرد تست	17
9	بسته (کیت) تست خود را در یک جای محفوظ دور بیندازید	17
	یک یادداشت از نتایج تست خود بسازید	18

توصیه در باره تست نمودن

نکات مفید، توصیه ها و چوکات های اخطار دهنده در امتداد راهنما برای کمک به شما نشر شده است. با رعایت دقیق این دستورالعمل ها قدم به قدم، چانس بسیار بیشتری برای به دست آوردن نتیجه ای قابل اطمینان خواهید داشت.

راهنمایی ها و اخطاریه های عمومی

- اگر میخک بینی دارید، قبل از سمپل گرفتن از بینی، آنرا بردارید.
- اگر هنگام سمپل گرفتن از بینی دچار خونریزی بینی شدید، لطفاً سمپل گرفتن را توقف دهید. سواب قابل تست کردن نیست.
- این محصول با لاستیک طبیعی ساخته نشده است. با این حال، وجود یا آثار لاستیک طبیعی در محصول تحویل داده شده به کاربر نهایی را نمی توان به طور کامل رد کرد.
- بسته تست را از اطفال خورد سال دور نگه دارید.
- مراحل سمپل گیری از طریق بینی را با دقت تعقیب کنید و همیشه از سواب های ارائه شده با این بسته استفاده کنید. عدم جمع آوری صحیح سمپل ممکن است منجر به نتایج نادرست تست شود.
- افرادی که به کمک های اضافی نیاز دارند، از جمله افرادی مشکلات بینایی دارند، ممکن است توسط یک فرد بزرگسال دیگر کمک شود. هنگام انجام تست به معلومات اضافی موجود در صفحه 11 توجه کنید.

اخطاریه

از محصول بیشتر از تاریخ انقضا استفاده نکنید.

توصیه

- بسته تست را در جای خشک و خنک نگهداری کنید (4 تا 30 درجه سانتی گراد).
- تحت شعاع مستقیم آفتاب قرار ندهید و در یخچال یا فریزر نگهداری نکنید زیرا این کار می تواند منجر به نتایج نادرست تست شود.
- اگر مهر و لاک کارت تست تخریب شده یا شکسته باشد پس از آن استفاده نکنید.
- بسته باید در حرارت اتاق (15 تا 30 درجه سانتی گراد) استفاده شود. اگر بسته در منطقه ای کمتر از 15 درجه سانتی گراد نگهداری شده است، قبل از استفاده آن را به مدت 30 دقیقه در حرارت معمولی اتاق بگذارید.

تقریباً 1 نفر از 3 نفر افراد مبتلا به COVID-19 نمی دانند که به آن مبتلا هستند.

با تست-خودی منظم می توانیم شیوع را کاهش داده و از آسیب پذیرترین افراد در خانواده ها و جوامع خود محافظت کنیم.

چرا باید تست-خودی انجام دهید

بسته تست- خودی COVID-19 یک تست سمپل گیری از بینی است تا بررسی شود که آیا شما مبتلا هستید یا نه. این برای افرادی که علائم دارند و همچنین برای افراد بدون علائم است. با این حال، باید دستورالعمل های ملی را تعقیب کنید تا بررسی کنید که کدام نوع تست برای شما مناسب است.

اگر تست COVID-19 شما مثبت باشد، شما باید:

- به محدود کردن شیوع بیماری کمک کنید، شما و خانواده تان باید از دستورالعمل های فعلی دولت پیروی کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- به افرادی که در تماس نزدیک با آنها بوده اید و جاهای که در 48 ساعت گذشته قبل از شروع علائم آنها مراجعه کرده اید، یا از روزی که نتیجه تست شما بدون کدام علائم مثبت نشان داده شده است، برای تست مبتلا بودن احتمالی COVID-19 توصیه کنید. همیشه از دستورالعمل های محلی و ملی پیروی کنید.

اگر تست COVID-19 شما منفی باشد

به احتمال زیاد در زمان انجام تست عفونی نبوده اید. با این حال، نتیجه تست منفی، تضمینی برای این نیست که شما ویروس کرونا ندارید. شما باید به تعقیب نمودن دستورالعمل های دولت ادامه دهید.

توصیه

اگر شما یا طفل/اطفال شما علائم ویروس کرونا (COVID-19) دارید یا به ویروس کرونا مبتلا شده اید، لطفاً به راهنمای آنلاین NHS مراجعه کنید:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

اگر شما یا طفل/اطفال تان علائم ویروس کرونا (COVID-19) دارید و وضعیت تان در حال بدتر شدن است، یا شما/طفل/اطفال شما بعد از 7 روز بهتر نمی شوید، به خدمات آنلاین **111 NHS**: 111.nhs.uk. مراجعه کنید اگر به انترنیت دسترسی ندارید به شماره **111 NHS** تماس بگیرید. برای وقایع عاجل طبی شماره **999** را دایر کنید.

اگر به تشویش هستید، دریافت کمک را به تأخیر نیندازید. به گزینه خود اعتماد کنید.

این تست برای چه کسانی مناسب است

اطفال زیر سن 14 سال

باید توسط یک فرد بزرگسال کمک شود. اگر از کمک به طفل مطمئن نیستید، این تست را انجام ندهید. (لطفاً برای معلومات بیشتر در مورد کمک به اطفال به صفحه 11 مراجعه کنید)

افراد 14 ساله به بالاتر از آن

نوجوانان 14 تا 17 ساله می توانند با نظارت بزرگسالان تست-خودی کنند. دیگران همه با دریافت کمک در صورت نیاز خود را تست کرده و گزارش می دهند.

چند بار باید تست نمود

تعداد دفعات تست شما ممکن است با در نظر داشت شرایط شما و دستورالعمل های کنونی ملی یا محلی متفاوت باشد.

در کجا می توان حمایت اضافی پیدا کرد


معلومات بیشتر تست خودی را در: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) دریافت کنید

1. ساحه تست خود را آماده کنید

محتویات بسته را بررسی کنید

شما نیاز دارید: یک زمان سنج مانند ساعت دستی یا ساعت مچی، دستمال کاغذی، پاک کننده سطح، ضدعفونی کننده دست یا صابون و دسترسی به آب گرم.

4 در صندوق تست خود باید تمام اجناس زیر را داشته باشید. مطمئن شوید که هیچ چیزی خراب یا شکسته نباشد.

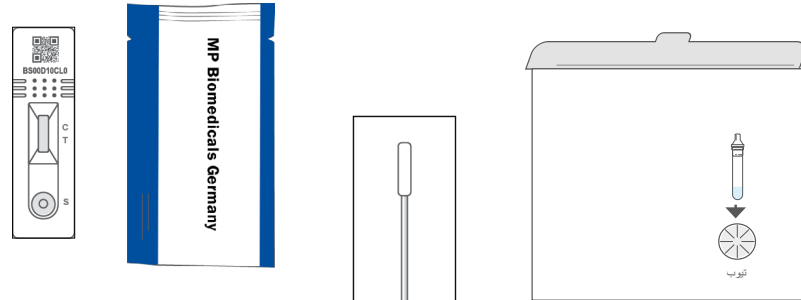


کارت تست در پاکت سر بسته


پایه تیوب



تیوب استخراج سمپل

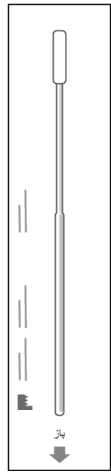

سواب استریل در پاکت سر بسته

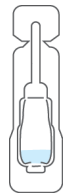

بوئل استخراج بافر


توصیه

اگر چیزی خراب، شکسته یا مفقود شده باشد چه باید کرد
اگر متوجه چیزی خراب، شکسته یا مفقود شده شدید، لطفاً از بسته تست استفاده نکنید. می توانید با تماس با مرکز تماس با مشتریان باز دهی خود را بدهید.
خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز است.

تماس به: 119 (از طریق تلفون های همراه و تلفون های ثابت رایگان میباشد).
ما به 200 زبان و همچنین زبان اشاره انگلیسی در خدمت هستیم.

اگر توسط کدام وسیله ای آسیب دیدید، گزارش دادن آن می تواند به دیگران کمک کند. لطفاً به:
[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk) مراجعه کنید.


1 این سند دستورالعمل استفاده را با دقت بخوانید. همچنین در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید فیلم تست سواب را بصورت آنلاین تماشا کنید:
[gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

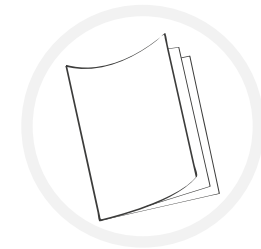


2 بلافاصله قبل از شروع تست، یک سطح هموار را صاف، پاک و خشک کنید تا بسته تست روی آن قرار گیرد.




3 دستان خود را به مدت 20 ثانیه، با صابون و آب گرم با ضدعفونی کننده دست ها بشویید.
اگر بیش از یک نفر را تست می کنید یا یک تست باطل را تکرار می کنید، بین هر تست دستان خود را دوباره بشویید.

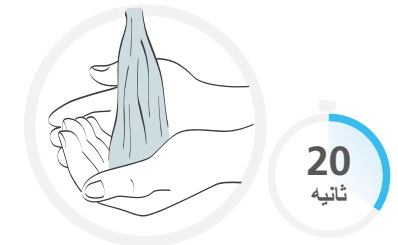


2. تست خود را تنظیم کنید

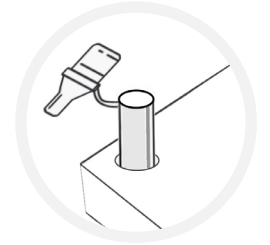


5 برای جلوگیری از ریختن مایع، تیوب استخراج سمپل را در پایه تیوب قرار دهید.

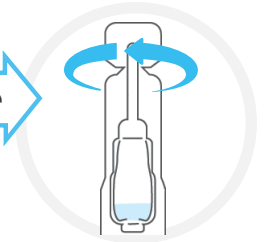

6 سرپوش بوتل بافر استخراج را بچرخانید.
احتیاط: بوتل بافر استخراج را دور از صورت خود باز کنید و مراقب باشید که هیچ گونه مایع نریزد.

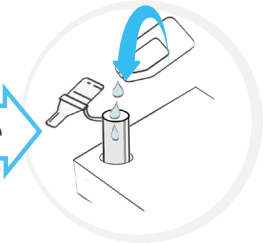

7 تمام محلول بافر را از بوتل بافر استخراج در تیوب استخراج سمپل فشار دهید.
احتیاط: از تماس بوتل به تیوب خودداری کنید.

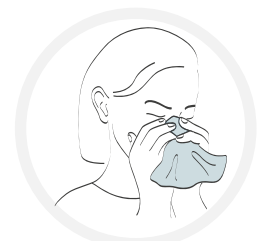


8 بینی خود را بشکل کامل در یک دستمال کاغذی پاک کرده و دستمال را در باطله دانی بیندازید.
اگر در حال تست یک طفل هستید، به او کمک کنید تا بینی خود را پاک کند. این به این دلیل است که شما مخاط اضافی را از بین می برید.

9 دستان خود را دوباره برای 20 ثانیه با صابون و آب گرم بشویید.



10 سواب را در پاکت سر بسته پیدا کنید. نوک نرم و تکه ای روی سواب را شناسایی کنید.

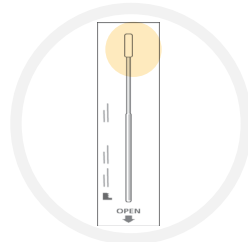

11 پاکت سواب را باز کرده و با دقت آنرا از داخل پاکت بیرون کنید.

اخطار

قسمت نرم و تکه ای سواب را با دست خود لمس نکنید.



3. سمپل سواب خود را بگیرید

کمک به شخص دیگر


اخطاریه

تست باید فقط با استفاده از سمپل سواب از بینی انجام شود. اگر دستور العمل سواب را به دقت رعایت نکنید، ممکن است نتایج تست نادرست باشد.


اگر به طفل زیر 14 سال کمک می کنید، یا فردی که به کمک نیاز دارد، مراحل صفحه 11 را دنبال کنید.

اطفال زیر سن 14 سال باید توسط یک بزرگسال کمک شوند. دستور العمل های زیر را در مورد نحوه آماده سازی و کمک به اطفال یا فردی که به کمک نیاز دارد دنبال کنید. می توانید ویدئوی نمایش را در: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help) تماشا کنید.


اگر به طفلی کمک می کنید، بسته تست را به او نشان دهید و در مورد کاری که قرار است انجام دهید با او صحبت کنید. از طفل بخواهید بینی خود را داخل دستمال پاک کند. دستمال را در باطله دانی سر بسته بیندازد.

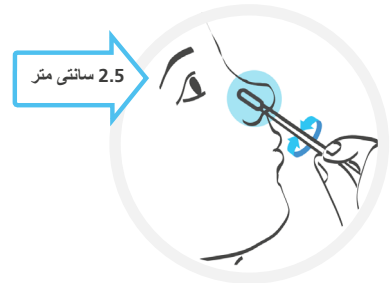


12 سواب را با دقت داخل یک سوراخ بینی قرار دهید. نوک سواب باید حداقل 2.5 سانتی متر از لبه سوراخ بینی وارد شود.

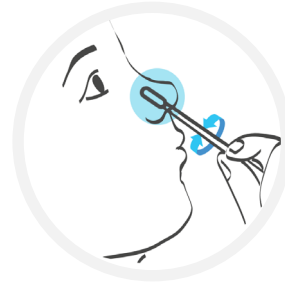

12 سواب را با دقت داخل یکی از سوراخ های بینی آنها قرار دهید. نوک سواب باید تا زمانی که بندش احساس شود داخل شود.

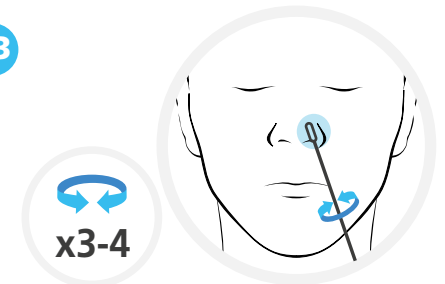

13 سواب را به آرامی 3-4 بار در داخل سوراخ بینی خود به صورت دورانی بچرخانید. به آرامی آن را بیرون کنید. ضرورت به فشار نیست و ضرورت نیست که زیاد به سوراخ بینی خود فشار بیاورید.

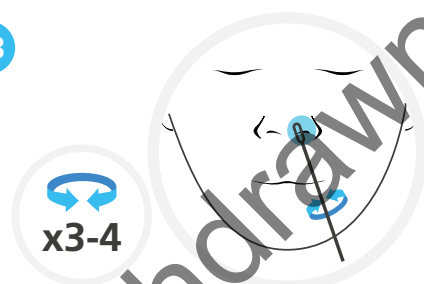

13 سواب را به آرامی 3-4 بار در داخل سوراخ بینی آنها به صورت دورانی بچرخانید. به آرامی آن را بیرون کنید. ضرورت به فشار نیست و ضرورت نیست که زیاد به سوراخ بینی آنها فشار بیاورید.

احتیاط: ممکن است احساس ناراحتی کنید. در صورت احساس بندش یا درد شدید، سواب را عمیق تر داخل بینی نکنید.

با استفاده از همان سواب، مراحل 12 و 13 را برای سوراخ بینی دیگر تکرار کنید.


احتیاط: ممکن است احساس ناراحتی کنید. در صورت احساس بندش یا درد شدید، سواب را عمیق تر داخل بینی نکنید.

با استفاده از همان سواب (وسيله سمپل گیری از بینی)، مراحل 12 و 13 را برای سوراخ بینی دیگر تکرار کنید.

4. سمپل سواب خود را پروسس کنید

نکته

برای نتیجه بهتر، سواب بینی را به زور ترین فرصت بعد از سواب زدن سوراخ های بینی خود تست کنید.

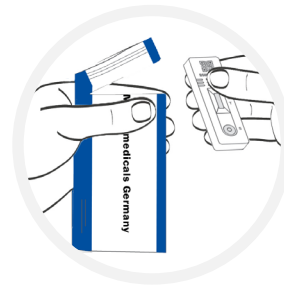

17

پاکت فویل را باز کرده و کارت تست را بردارید.


اخطاریه

بعد از باز شدن کارت تست باید هر چه عاجل استفاده شود.

18

اطمینان حاصل کنید که کارت تست روی یک سطح پاک، صاف و هموار قرار دارد.


در جریان تست کارت را تکان ندهید.

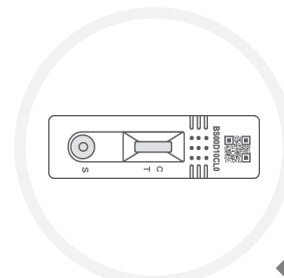

19

تیوب استخراج سمپل را خوب فشار دهید تا 3 قطره سمپل تست داخل سوراخ (لیبل S) بالای کارت تست قرار گیرد.


احتیاط: اطمینان حاصل کنید که مایع در حال ریختن است و سوراخ حباب هوا ندارد.

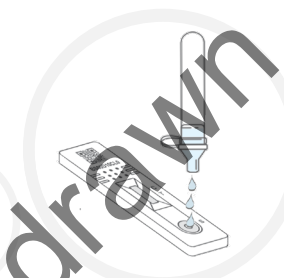

20

یک تایمر تنظیم کنید و قبل از خواندن نتیجه تان 15 دقیقه صبر کنید. یک نتیجه مثبت می تواند در هر زمان ظاهر شود، با این حال شما باید 15 دقیقه کامل منتظر بمانید تا نتیجه منفی را ثبت کنید زیرا ممکن است ظاهر شدن خط تست (T) همین اندازه طول بکشد.

15 دقیقه

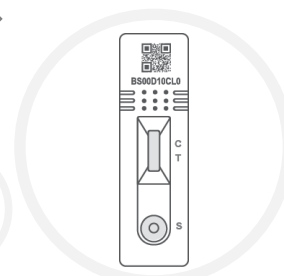


نحوه خواندن و گزارش نتیجه خود را در صفحه بعدی ببینید. <<

14


تیوب سمپل گیری را برداشته و سواب را با سمپل داخل تیوب استخراج سمپل قرار دهید. سواب را 3-5 بار بچرخانید. سواب را به مدت 1 دقیقه در محلول استخراج سمپل بگذارید.

1 دقیقه

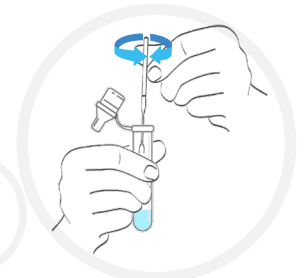

15

تیوب استخراج سمپل را با انگشتان خود در حالی که سواب را بیرون میکشید به هم بچسبانید تا جایی که ممکن است محلول در تیوب باقی بماند. سواب را دوباره داخل پاکت سواب قرار دهید.

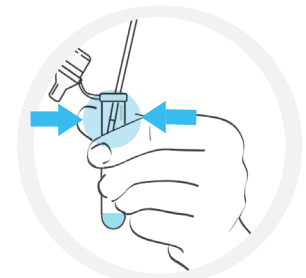

16

سرپوش قطره چکان را محکم بر بالای تیوب استخراج سمپل قرار دهید.

توصیه

دستان خود را بعد از تکمیل مرحله دوباره بشویید.



5. نتیجه خود را بخوانید

6. نتیجه خود را گزارش دهید

مهم

تست را بیش از 20 دقیقه به حال خود رها نکنید زیرا این کار نتیجه را باطل می کند.

20 دقیقه

شما باید نتایج مثبت، منفی و باطل خود را به NHS گزارش دهید.

ثبت تمام نتایج تست ها به دانشمندان کمک می کند تا شیوع ویروس های جدید را تشخیص داده و نحوه عکس العمل با آنها را توصیه نمایند. اگر افراد فقط تنها نتیجه مثبت را گزارش کنند، سطح موارد از آنچه واقعاً هستند بیشتر به نظر می رسد.

بنابراین حتی اگر نتیجه شما منفی یا باطل باشد، مطمئن می شوید که معلومات NHS دقیق است.

شما به کد QR یا نمبر شناسایی ضرورت دارید تا تحت آن نتیجه خود را گزارش دهید.

گزارش آنلاین (سریعترین)

اگر در انگلستان، ولز یا ایرلند شمالی زندگی می کنید، از gov.uk/report-covid19-result دیدن کنید

اگر در اسکاتلند زندگی می کنید، از سایت covidtest.scot دیدن کنید:

یا با تلفون گزارش دهید


با 119 تماس بگیرید

خطوط هر روز، از 7 صبح تا 11 شب (از تلفون های همراه و تلفون های ثابت) باز است.




کد QR

نمبر شناسایی

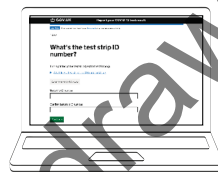

نتیجه مثبت


دو خط ظاهر می شود. یک خط رنگه بلید در ناحیه خط کنترل (C) و یک خط رنگه دیگر در ناحیه خط تست (T) باشد. دو خط، یکی در کنار C و دیگری در کنار T، حتی خطوط کم رنگ، نشان می دهد که تست مثبت است.

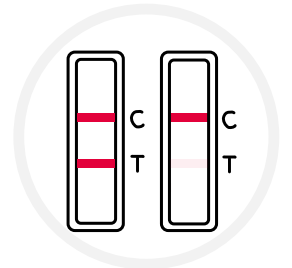

مهم


در صورت مثبت بودن تست، باید خود را قرنطینه کنید و خانواده شما باید از دستورالعمل های دولت در مورد خود قرنطینه شدن پیروی کنند:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

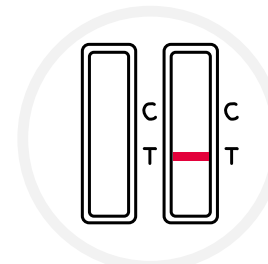

نتیجه باطل

خط کنترل (C) ظاهر نمیشود.

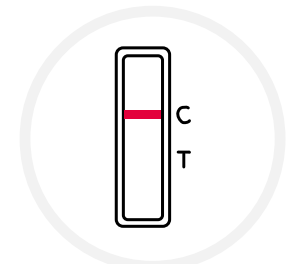

نتیجه منفی

یک خط رنگه در قسمت خط کنترل (C) ظاهر میشود اما در قسمت (T) ظاهر نمیشود.

7. نتیجه شما چی مفهوم میده

شما فقط زمانی تست خود را تکمیل کرده اید که نتیجه خود را گزارش نمایید

+ نتیجه مثبت

در صورتیکه نتیجه شما مثبت باشد، احتمالاً در حال حاضر به COVID-19 مبتلا شده اید و دیگران را در معرض خطر قرار می دهید. باید خود را قرنطینه کنید. هنگامی که نتیجه خود را گزارش می دهید، معلومات بیشتری در مورد اقدامات بعدی در اختیار شما قرار می گیرد.

اخطاریه

شما و هر کس که با شما زندگی می کند باید از راهنمایی های ملی و محلی فعلی پیروی کنید. آن را می توانید در آدرس: nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/ یا [self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/self-isolation-and-treatment/) با تماس به مرکز تماس مشتری در شماره 119 دریافت کنید. خطوط هر روز، از 7 صبح تا 11 شب باز است.

- نتیجه منفی

اگر نتیجه منفی گرفتید، احتمالاً در زمان انجام تست عفونی نبوده اید. با این حال، نتیجه تست منفی، تضمینی برای عدم ابتلا به COVID-19 نیست.

در صورت منفی بودن تست، باید از قوانین و دستورالعمل های ملی و محلی پیروی کنید، از جمله شستن مرتب دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک در صورت نیاز.

در صورت بروز علائم باید خود را قرنطینه کرده و تست توصیه شده فعلی را در: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://nhs.uk/get-coronavirus-test) یا با تماس به مرکز تماس با مشتری در شماره 119 دریافت کنید. خطوط هر روز از ساعت 7 صبح تا 11 شب باز می شوند.

شما و خانواده تان باید از دستورالعمل های ملی پیروی کنید.

نتیجه باطل

اگر نتیجه تست شما باطل باشد، این بدان معناست که نمی توان گفت هنگام انجام تست ویروس داشته اید یا نه. برای اینکه بدانید آیا ویروس کرونا دارید یا نه، به زود ترین فرصت تست دیگری را انجام دهید. از هیچ چیزی که در تست اول استفاده نموده بودید درین تست استفاده نکنید و روش تست را از مرحله 1 شروع کنید.

اگر مشکل همچنان ادامه داشت

اگر مشکل همچنان ادامه داشت، بلافاصله استفاده از بسته های تست را قطع کنید. اگر تست دیگری در دسترس ندارید، می توانید از طریق برنامه NHS COVID-19 یا با مراجعه به آدرس gov.uk/get-coronavirus-test، یا با تماس گرفتن به مرکز تماس با مشتریان 119 تست دیگری انجام دهید. خطوط همه روزه، از 7 صبح تا 11 شب باز است.

8 عملکرد تست

اگر فردی دارای سطح بالای ویروس کرونا (COVID-19) باشد، احتمالاً نتیجه مثبت خواهد داد. این بدان معناست که به احتمال زیاد افرادی را تشخیص می دهد که در حال حاضر عفونی هستند و باید فوراً خود را قرنطینه کنند.

9 بسته تست خود را در یکجای محفوظ دور بیندازید

بعد از پایان یافتن تست، تمام وسایل بسته تست استفاده شده را در باطله دانی های عمومی خانگی خود بیندازید.

بعد از دور انداختن دستان خود را کاملاً بشویید.

یک یادداشت از نتایج تست خود بسازید

این برای سوابق خود شماست. شما هنوز هم باید نتیجه خود را به NHS گزارش دهید (برای
معلومات به صفحه 15 مراجعه کنید).

مراجعه به سایت: gov.uk/report-covid19-result

اگر در اسکاتلند زندگی می کنید به سایت covidtest.scot مراجعه کنید

بسته شما دارای اجناس ذیل میباشد

7-بسته

اجناس

7	کارت تست در پاکت سر بسته
7	سوب (وسیله سمپل گیری از بینی) استریل در پاکت سر بسته
7	تیوب استخراج سمپل
7	بوئل استخراج بافر
1	رهنمایی ها برای استفاده (این سند)
1	پایه تیوب

نتیجه تست	زمان	تاریخ	شخص تست شونده	کود QR یا نمبر شناسایی بسته تست

Withdrawn January 2024

عرضه این دستگاه فقط به عنوان بخشی از استقرار دیپارتمنت صحت و مراقبت اجتماعی (DHSC) تحت برنامه تست و ردیابی NHS مجاز است.

تولید کننده:

CE 0123

MP Biomedicals Germany GmbH
Thuringer Str. 15 37269
Eschwege,
Germany (آلمان)



تولید کننده سوب:

CE 0197

Jiangsu Hanheng Medical Technology Co.,Ltd. 16-B4, #1 North
Qingyang Road, Tianning District, 213017, Changzhou, Jiangsu,
China (چین)
Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1, 47877, Willich,
Germany (آلمان)



EC REP

CE 0197

Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street, Jinzhou
District, Dalian, 116100 Liaoning,
China (چین)



تولید کننده سوب:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga,
Spain (هسپانیا)

EC REP

فهرست سمبول ها

حاوی 7 تست
کافی است



تولید کننده



استریل شده
با اکسید اتیلن

STERILEEO

در حرارت 30-4
درجه سانتی گراد
نگهداری شود



اگر پاکت تخریب
شده باشد استفاده
نکنید



دستگاه تشخیص
طبی آزمایشگاهی

IVD

استفاده به
اساس تاریخ



شماره لات

LOT

قابل بازیافت



دوباره استفاده
نکنید



احتیاط کردن
مشورت



از نور آفتاب دور
نگه دارید



شماره کاتالوگ

REF

مطابقت اروپایی

CE

دستورالعمل ها
برای استفاده



خشک نگارید



نماینده مجاز

EC REP

تمام معلومات و تصاویر موجود در این سند اعتبار از تاریخ 24/09/2021 صحیح است. نسخه 0002

07AG6007BS

REF