


Teste başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.  
Bu test daha önce yaptığınızdan farklı olabilir.

# MP Biomedicals Hızlı SARS-CoV-2 Antijen Testi Kullanım Kılavuzu

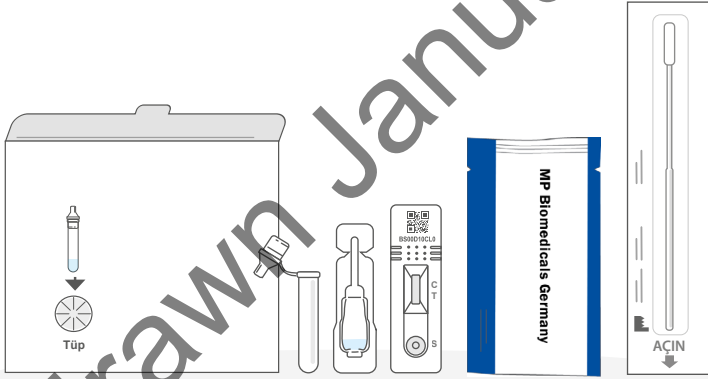

Bu kullanım talimatları sadece MP Biomedicals Hızlı SARS-CoV-2 Antijen Testi 07AG6007BS için geçerlidir.

Bu kılavuzda kendinize veya bir başkasına nasıl COVID-19 testi yapacağınız ve sonuçları NHS'e nasıl bildireceğiniz açıklanmaktadır.

Galce dahil olmak üzere **farklı dillerdeki** versiyonlarını ve videolarını [gov.uk/covid19-self-test-help](https://gov.uk/covid19-self-test-help) adresinde bulabilirsiniz.

**Bütün test sonuçlarınızı NHS'e bildirin**

# Yapmanız gerekenler

## Adım adım rehber

Lütfen kullanım talimatlarını dikkatle okuyun ve adımları sırasıyla takip edin. Her bir testin hazırlık süresi yaklaşık 15 dakika olup sonuçlar için bir 15 dakika daha beklenmesi gerekmektedir.



## İçindekiler

Bölüm	Başlık	Sayfa
1	Test alanını hazırlayın	6
	Test kitinin içeriğini kontrol edin	7
2	Testi hazırlayın	8
3	Kendinizden sürüntü örneği alın	10
	Başka birine yardım etme	11
4	Sürüntü örneğini işlemde geçirin	12
5	Sonucu kontrol edin	14
6	Sonucu bildirin	15
7	Sonuçlar ne anlama geliyor?	16
8	Test performansı	17
9	Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın	17
	Test sonuçlarınızı not edin	18

## COVID-19 olan yaklaşık her 3 kişiden 1'i bunu bilmiyor.

Düzenli olarak test yaparak hastalığın yayılmasını yavaşlatabilir ve ailemizdeki ve toplumdaki en hassas kişileri korumaya yardımcı olabiliriz.

## Testle ilgili tavsiyeler

Bu kılavuzda size faydalı olacak ipuçları, tavsiyeler ve uyarılar bulacaksınız. Yazılan talimatları adım adım ve dikkatli bir şekilde uygulayarak testten daha güvenilir bir sonuç elde etme şansınızı çok daha artırabilirsiniz.

## Genel tavsiye ve uyarılar

- Eğer burnunuzda bir piercing varsa, sürüntü örneği almadan önce çıkartın.
- Örnek alma esnasında burnunuz kanarsa lütfen işlemi durdurun ve kullandığınız çubuğu test etmeyin.
- Bu ürün doğal kauçuk lateksten yapılmamakla birlikte son kullanıcıya teslim edilen ürünün içerisinde iz miktarda da olsa doğal kauçuk lateks bulunma ihtimali vardır.
- Test kitini çocuklardan uzak tutun.
- Sürüntü örneği alma adımlarını çok dikkatli bir şekilde uygulayın ve her zaman bu kitle verilen çubukları kullanın. Örneğin doğru bir şekilde alınmaması test sonucunun hatalı çıkmasına neden olabilir.
- Görme sorunu olanlar dahil olmak üzere yardıma ihtiyacı olan kimselere test esnasında bir yetişkin tarafından yardımcı olunabilir. Bu kişilere test yaparken 11. sayfada yazılı ek bilgilere özellikle dikkat edin.

## UYARI

Ürünü son kullanım tarihinden sonra kullanmayın.

## TAVSİYELER

- Test kitini serin ve kuru bir yerde (4°C ila 30°C arasında) muhafaza edin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve buzdolabı veya dondurucuda saklamayın. Aksi takdirde, test sonuçları yanlış çıkabilir.
- Kapalı ambalajı hasar görmüş veya açılmış test kartlarını kullanmayın.
- Kit oda sıcaklığında (15°C ila 30°C arasında) kullanılmalıdır. Eğer 15°C'nin altında saklanmışsa kullanmadan önce normal oda sıcaklığında 30 dakika bekletin.

# Test hakkında

## Neden kendinize test yapmalısınız?

Bu COVID-19 kendine kendine test kiti, burundan alınan sürüntü örneğini test ederek bulaşıcı olup olmadığınızı tespit etmeye yarar. Belirti gösterenler kadar hiç belirtisi olmayanlara da yapılabilir. Bununla birlikte, hangi tür testin sizin için doğru olacağını kontrol etmek için ilgili ulusal yönergeleri takip etmelisiniz.

## COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa yapmanız gerekenler:

- Hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için hükümetin güncel talimatları doğrultusunda kendinizi ve aile üyelerini izole edin:  
[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)
- Belirtileriniz başlamadan önceki son 48 saat içerisinde ya da belirti olmaması durumunda test sonucunun pozitif çıktığı gün itibariyle yakın temasta olduğunuz kişilere ve ziyaret ettiğiniz yerlere bilgi vererek her ihtimale karşı COVID-19 testi yaptırmalarını önerin. Yerel ve ulusal makamların talimatlarına mutlaka uyun.

## COVID-19 testiniz negatif çıkarsa

Büyük olasılıkla testin yapıldığı sırada bulaşıcı değildiniz demektir. Bununla birlikte test sonucunun negatif çıkması, sizde koronavirüs olmadığını garanti etmez. Hükümet tarafından verilen talimatları yerine getirmeye devam etmelisiniz.

### TAVSİYELER

Siz veya çocuğunuzda koronavirüs (COVID-19) belirtileri varsa ya da COVID-19 kaptıysanız, lütfen NHS sitesindeki talimatlara uyun:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

Sizde veya çocuğunuzda koronavirüs (COVID-19) belirtileri varsa ve durumunuz kötüleşirse ya da yedi gün geçmesine rağmen durumunuzda iyileşme olmazsa NHS **111** online hizmet sayfasını ziyaret edin: [111.nhs.uk](https://111.nhs.uk). İnternete erişiminiz yoksa **111'den** NHS'i arayın. Acil tıbbi durumlarda **999'u** arayın.

**Endişeliyseniz yardım almakta gecikmeyin. Sezgilerinize güvenin.**

## Bu test kimlere yapılabilir?

### 14 yaşından küçük çocuklar

Bir yetişkin tarafından yardım edilmelidir. Bir çocuğa test yapma konusunda kendinize güvenmiyorsanız yapmayın. (Çocuklara yardım konusunda daha ayrıntılı bilgi için Sayfa 11'e bakınız.)

### 14 yaş ve üzerindeki kişiler

14-17 yaş arası gençler bir yetişkin gözetiminde kendi kendine test yapılabilir. Diğer herkes testi gerekirse yardım alarak kendi başına yapmalı ve sonucu bildirmelidir.

### Test sıklığı


Ne sıklıkla test yapmanız gerektiği koşullarınıza ve güncel ulusal veya yerel yönergelere göre değişebilir.

### Ekstra destek

Kendi kendine testle ilgili daha fazla bilgi için: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://gov.uk/covid19-self-test-help)

# 1. Test alanını hazırlayın


**İhtiyacınız olanlar:** saat gibi bir zamanlayıcı, kâğıt mendil, yüzey temizleyici, el dezenfektanı veya sabun ve sıcak su.

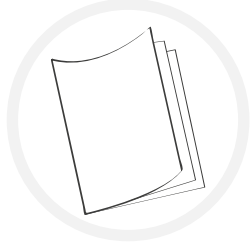

- 1 Bu kullanım talimatlarını dikkatle okuyun. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa sürüntü testinin nasıl yapıldığını gösteren videoyu internette seyredebilirsiniz: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)




- 2 Teste başlamadan hemen önce, test kitini koyacağınız düz bir yeri boşaltın, temizleyin ve kurulaştırın.

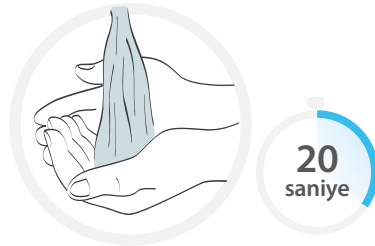

- 3 Ellerinizi sıcak su ve sabunla 20 saniye boyunca iyice yıkayın veya el dezenfektanı kullanın. Birden fazla kişiye test yapıyorsanız veya geçersiz çıkan bir testi tekrarlıyorsanız, her test öncesinde ellerinizi tekrar yıkayın.

# Kitin içeriğini kontrol edin


- 4 Test kutusunun içerisinde aşağıdakilerin hepsi bulunmalıdır. Hiçbir şeyin hasarlı veya kırık olmadığından emin olun.

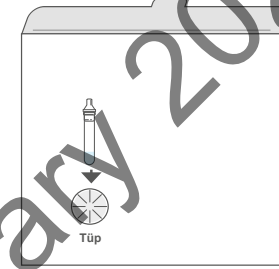


Tüp standı




Test solüsyonu şişesi

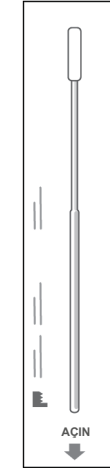

Kapalı ambalaj içinde steril sürüntü çubuğu

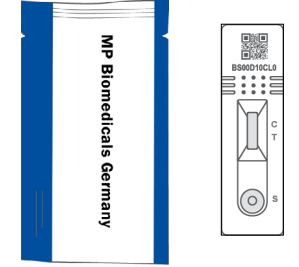

Kapalı ambalaj içinde test kartı

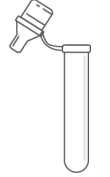

Örnek tüpü

## TAVSİYELER


### Hasarlı, kırık veya eksik bir şey olması durumunda yapılması gerekenler

Kitin içerisinde hasarlı, kırık veya eksik bir parça varsa test kitini kullanmayın. Durumu Müşteri İletişim Merkezini arayıp bildirebilirsiniz. Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açıktır.


**119'u** arayın. (Sabit hatlardan ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilir) 200 dilde ve İngiliz İşaret Dilinde hizmet verilmektedir.

Bir cihazdan zarar görmeniz halinde durumu bildirmeniz başkalarına yardımcı olabilir. Lütfen [coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk) adresini ziyaret edin.

## 2. Testi hazırlayın

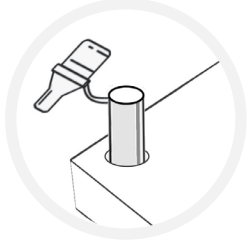


- 5 Örnek tüpünü, içine koyacağınız sıvının dökülmesini önlemek için, tüp standına yerleştirin.

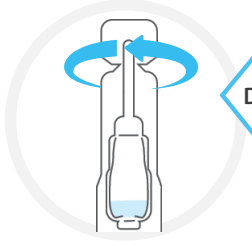

Dikkat edin

- 6 Test solüsyonu şişesinin kapağını çevirin.

**DİKKAT:** Solüsyon şişesini yüzünüzden uzak tutun ve içindeki sıvının dökülmemesine dikkat edin.

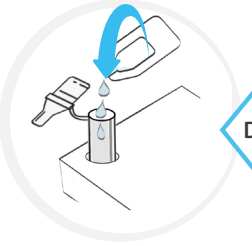

Dikkat edin


- 7 Şişeyi sıktırarak içindeki solüsyonun tamamını test tüpüne boşaltın.

**DİKKAT:** Şişeyi tüpe deđdirmemeye dikkat edin.




- 8 Bir mendile nazikçe sümürüp burnunuzu silin ve mendil kapalı bir çöp kutusuna atın.

Eđer testi bir çocuca yapıyorsanız, sümürmelerine yardım edin. Bunun amacı burundaki fazla mukusu temizlemektir.

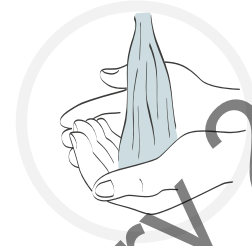


20 saniye

- 9 Ellerinizi sıcak su ve sabunla 20 saniye boyunca tekrar iyice yıkayın.

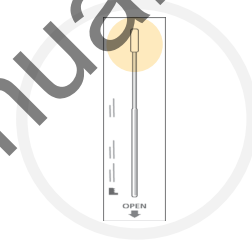

- 10 Kapalı ambalajın içerisindeki sürüntü çubuğunun yumuşak ve kumaş kaplı ucunu elinizle tespit edin.

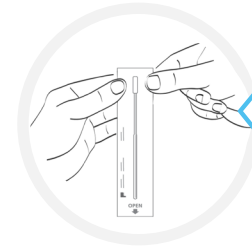

Dikkat edin

- 11 Ambalajı açın ve sürüntü çubuğunu dikkatlice çıkartın.

**UYARI**


Çubuğun yumuşak, kumaş kaplı ucuna elinizle dokunmayın.

### 3. Kendinizden sürüntü örneği alın


#### UYARI

Test sadece burundan örnek alınarak yapılmalıdır. Sürüntü örneği alma talimatlarını dikkatli bir şekilde uygulamazsanız, test sonuçları doğru çıkmayabilir.

**14 yaşın altında veya yardıma ihtiyacı olan birine test yapacaksanız 11. sayfadaki adımları takip edin.**

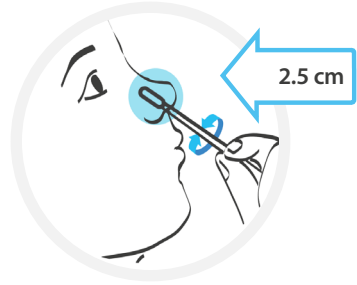

- 12** Sürüntü çubuğunu burun deliklerinden birine dikkatle yerleştirin. Çubuğun ucu, en az 2.5 cm içeriye sokulmalıdır.

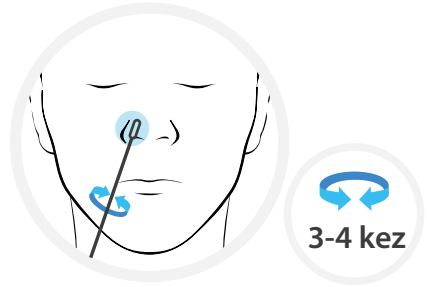

- 13** Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına dairesel hareketlerle 3-4 kez nazikçe sürtün ve yavaşça çıkartın. Bastırmanız veya çubuğu çok derine itmeniz gerekmez.

**DİKKAT:** Bu işlem rahatsızlık verebilir. Güçlü bir direnç veya acı hissederseniz çubuğu daha derine itmeyin.

**Aynı çubuğu diğer burun deliğine yerleştirip 12. ve 13. adımları tekrarlayın.**


### Testin başka birine yapılması

14 yaşından küçük çocuklara bir yetişkin tarafından yardım edilmelidir. Bir çocuğa veya yardıma ihtiyacı olan birine testi nasıl yapabileceğinize dair talimatlar aşağıda yazılıdır. Dilerseniz [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help) adresindeki videoyu da seyredebilirsiniz.

Bir çocuğa test yapacaksanız, onlara test kitini gösterin ve ne yapacağınızı anlatın. Çocuktan bir mendille sümürmesini isteyin ve kirli mendili kapalı bir çöp kutusuna atın.



- 12** Çubuğu burun deliklerinden birine dikkatlice yerleştirin. Çubuğun ucu dirençle karşılaşınca kadar içeriye doğru ittirilmelidir.

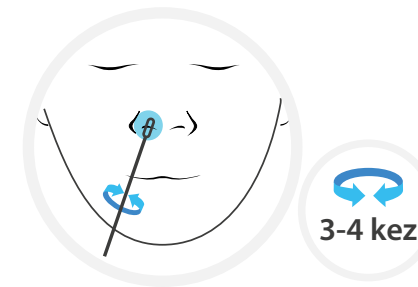

- 13** Çubuğu burun deliğinin iç kısımlarına dairesel hareketlerle 3-4 kez nazikçe sürtün ve yavaşça çıkartın. Bastırmanız veya çubuğu çok derine itmeniz gerekmez.


**DİKKAT:** Bu işlem rahatsızlık verebilir. Güçlü bir direnç veya acı hissedilmesi halinde çubuğu daha derine itirmeyin.

**Aynı çubuğu diğer burun deliğine yerleştirip 12. ve 13. adımları tekrarlayın.**

# 4. Sürüntü örneğini işlemden geçirin


## İpucu

En iyi performans için, burundan alınan örneği mümkün olan en kısa sürede test edin.

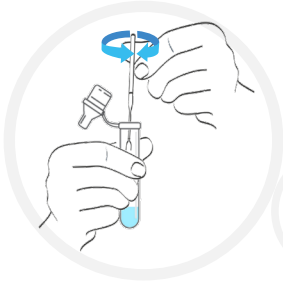

- 14 Örnek tüpünü alın ve sürüntü çubuğunu kumaş kaplı ucu aşağıya gelecek şekilde tüpün içine yerleştirin. Çubuğu 3-5 kez çevirdikten sonra test solüsyonunun içinde 1 dakika bekletin.

1  
dakika

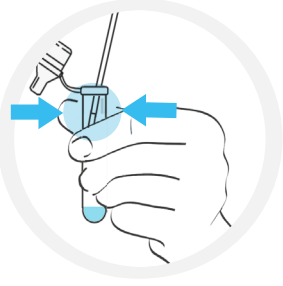


- 15 Çubuğu tüpün içinden tamamen çıkarmadan önce uç kısmını solüsyonun içinden çıkarıp tüpün iç kenarına bastırın ve parmaklarınızın arasında sıkıştırıp çubuğun emmiş olduğu sıvının mümkün olduğunca tüpe aktarılmasını sağlayın. Sonra çubuğu ambalajının içine geri koyun.



- 16 Damlalığın ucunu örnek tüpünün üstüne sıkıca yerleştirip kapatın.

## TAVSİYE


Bu adımı tamamladıktan sonra ellerinizi tekrar yıkayın.

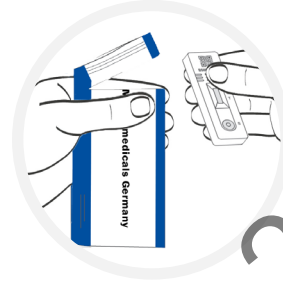

- 17 Folyo ambalajı açıp test kartını çıkartın.


## UYARI

Test kartı ambalajdan çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

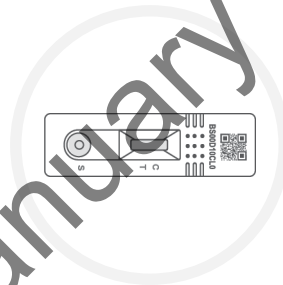

- 18 Test kartını temiz, dengeli ve düz bir yüzeye yerleştirdiğinizden emin olun.


Test esnasında kartı yerinden oynatmayın.

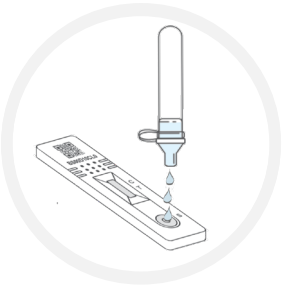

- 19 Test tüpünü nazıkçe sıkarak içindeki sıvıdan test kartının üstündeki örnek haznesine (S) 3 damla damlatın.

**UYARI:** Sıvı damlattığınızdan ve haznenin içinde hava kabarcığı olmadığından emin olun.

x3

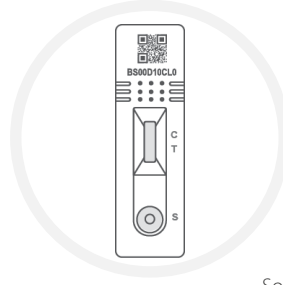

- 20 Saatinizi ayarlayın ve sonuca bakmadan önce 15 dakika bekleyin. Pozitif sonuç her an çıkabilir, ama negatif sonuç için 15 dakikanın dolmasını beklemeniz gerekmektedir. Zira test çizgisi (T) 15 dakikadan önce belirlemeyebilir.

15  
dakika


Sonucu nasıl kontrol edeceğinizi ve bildireceğinizi bir sonraki sayfada görebilirsiniz >>

## 5. Sonucu kontrol edin

### ÖNEMLİ

Testi 20 dakikadan fazla bekletmeyin, aksi takdirde sonuç geçersiz olur.

20  
dakika

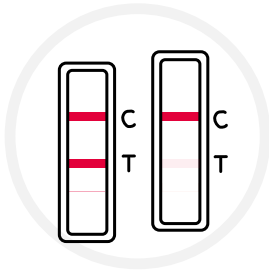


### + Pozitif sonuç

İki çizgi belirir. Renkli çizgilerden biri C işaretli kontrol çizgisi bölgesinde, diğer renkli çizgi de T işaretli test çizgisi bölgesinde belirmelidir. Biri C, diğeri T'nin yanında olmak üzere görülen iki çizgi, silik olsa dahi, test sonucunun pozitif olduğunu gösterir.

### ÖNEMLİ


Test sonucu pozitif çıkarsa kendinizi izole etmeniz, ev halkının da hükümetin bu konuyla ilgili yönergelerine uyması gerekmektedir:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

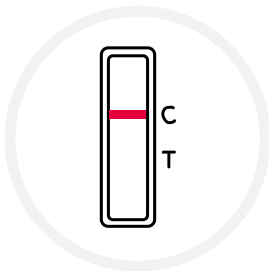

### - Negatif sonuç

C işaretli kontrol çizgisi bölgesinde bir renkli çizgi belirir. T işaretli test çizgisi bölgesinde hiçbir çizgi belirmez.

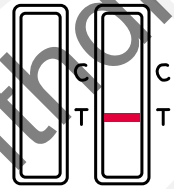


### ⊘ Geçersiz sonuç

Kontrol çizgisi (C) görünmez.

## 6. Sonucu bildirin

Pozitif, negatif ve geçersiz test sonuçlarınızı NHS'e bildirmeniz gerekmektedir.

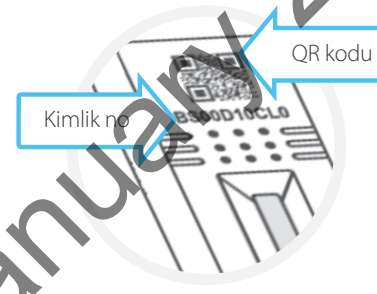

Bütün test sonuçlarının kayda geçirilmesi bilim insanlarının yeni virüs salgınlarını tespit etmesine ve nasıl müdahale edileceği konusunda tavsiye vermelerine yardımcı olmaktadır. Sadece pozitif sonuçlar bildirilirse vaka sayıları olduğundan fazla görünür.

Bu yüzden test sonucu negatif veya geçersiz çıksa bile NHS'in elinde doğru bilgiler olmasını sağlamış olacaksınız.

Test sonucunu bildirmek için QR koduna ya da kodun altındaki kimlik numarasına ihtiyacınız olacaktır.

### İnternette bildirin (en hızlı yöntem)

İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda'da yaşıyorsanız [gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result) adresini ziyaret edin.

İskoçya'da yaşıyorsanız [covidtest.scot](https://www.covidtest.scot) adresine gidin.

### Sonucu telefonla da bildirebilirsiniz

119'u arayın

Hatlar her gün 07:00-23:00 arası açık olup sabit hatlar ve cep telefonlarından ücretsiz aranabilir.





# 7. Sonuçlar ne anlama geliyor?

## Testi ancak sonucu bildirdikten sonra tamamlamış sayılırsınız

### + Pozitif sonuç

Test sonucunuz pozitif çıkarsa büyük olasılıkla COVID-19'a yakalanmışsınız ve başkalarına da bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir. Kendinizi izole etmeniz gerekir. Sonucu bildirdiğiniz zaman, başka ne yapmanız gerektiği konusunda size bilgi verilecektir.

#### UYARI

Hem siz hem de sizinle yaşayan kimseler güncel ulusal ve yerel yönergeler uygun hareket etmelidir. Bu yönergeleri öğrenmek için [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/) adresini ziyaret edebilir veya **119** numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayabilirsiniz. Hatlar her gün 07:00-23:00 arası hizmet vermektedir.

### - Negatif sonuç

Test sonucunuzun negatif çıkması testin yapıldığı sırada büyük olasılıkla bulaşıcı olmadığınız anlamına gelir. Bununla birlikte, negatif sonuç sizde COVID-19 olmadığına garanti değildir.

Test sonucunuz negatif çıksa bile düzenli el yıkama ve gerekli yerlerde sosyal mesafe ve maske dahil olmak üzere ulusal ve yerel makamların belirlediği kural ve talimatlara uymaya devam etmelisiniz.

Hastalık belirtilerinin çıkması halinde kendinizi izole etmeli ve [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) adresini ziyaret ederek veya **119** numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayarak tavsiye edilen testi edinmelisiniz. Hatlar her gün 07:00-23:00 arası hizmet vermektedir.

Hem siz hem de hane halkı ulusal yönergelere uymalıdır.

### Geçersiz sonuç

Test sonucu geçersiz çıkarsa, testin yapıldığı esnada virüs taşıyıp taşımadığınızı söylemek mümkün değil demektir. Koronavirüs olup olmadığını teyit etmek için, mümkün olan en kısa sürede yeni bir test yaptırın. İlk testin içindeki hiçbir şeyi yeniden kullanmayın ve test prosedürünü 1. adımdan itibaren başlatın.

### Problem devam ederse

Problemin devam etmesi halinde test kitlerini kullanmayı derhal bırakın. Elinizde kullanabileceğiniz başka bir test yoksa NHS COVID-19 uygulamasından, [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) adresinden veya **119** numaralı Müşteri İletişim Merkezini arayarak farklı bir test isteyebilirsiniz. Merkez her gün 07:00-23:00 arası hizmet vermektedir.

### 8 Test performansı

Test yapılan kişide yüksek düzeyde koronavirüs (COVID-19) bulunması halinde testin pozitif sonuç verme ihtimali çok daha yüksektir. Bu da halen bulaşıcı olan ve derhal kendini izole etmesi gereken kimselerin tespit edilmesi olasılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

### 9 Test kitini emniyetli bir şekilde elden çıkarın

Test tamamlandığı zaman, kullanılan bütün test malzemelerini evsel atıkları biriktirdiğiniz çöp kutusuna atın.

Sonra da ellerinizi iyice yıkayın.

## Test sonuçlarınızı not edin

Bu sizin kendiniz için tuttuğunuz bir kayıttır. Test sonucunu NHS'e mutlaka bildirmeniz gerekir. (Bilgi için bkz. Sayfa 15)

Sonucu [gov.uk/report-covid19-result](https://gov.uk/report-covid19-result) adresinden bildirebilirsiniz.

İskoçya'da yaşıyorsanız [covidtest.scot](https://covidtest.scot) adresini ziyaret ediniz.

Test kitinin QR kodu / kimlik numarası	Testin yapıldığı kişi	Tarih	Saat	Test sonucu

## Test kitinin içinde yer alan malzemeler aşağıdaki gibidir:

İçindekiler	7'li paket
Kapalı Ambalaj İçinde Test Kartı	7
Kapalı Ambalaj İçinde Steril Sürüntü Çubuğu	7
Test Tüpü	7
Test Solüsyonu Şişesi	7
Kullanım Talimatları (bu kitapçık)	1
Tüp Standı	1

Bu cihazın tedarikine sadece NHS Test and Takip programı uyarınca Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC) tarafından yapılacak dağıtım kapsamında izin verilmiştir.



Üretici:  
MP Biomedicals Germany GmbH  
Thueringer Str. 15 37269  
Eschwege, Germany (Almanya)

CE 0123



Sürüntü Çubuğu Üreticisi:  
Jiangsu Hanheng Medical Technology Co.,Ltd. 16-B4,#1 North Qingyang Road,  
Tianjing District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China (Çin)



Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr.1, 47877, Willich, Germany (Almanya)

CE 0197



Sürüntü Çubuğu Üreticisi:  
Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street,  
Jinzhou District, Dalian, 116100 Liaoning, China (Çin)

CE 0197



CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Spain (İspanya)

## Semboller ve anlamları



4-30°C arası  
sıcaklıkta  
saklayın



Etilen oksitle  
sterilize edilmiştir



Üretici



İçindekiler 7 test  
için yeterlidir



Parti no.



Son kullanım  
tarihi



In vitro tanı  
amaçlı tıbbi  
cihaz



Ambalajı zarar  
görmüşse  
kullanmayın



Güneş ışığından  
koruyun



Uyarı!



Tekrar  
kullanmayın



Geri  
dönüştürülebilir



Kuru bir  
yerde tutun



Kullanım  
talimatlarına  
bakın



Avrupa  
Uygunluk  
İşareti



Katalog  
numarası



Yetkili  
Temsilci

Bu belgede yer alan bütün bilgi ve görseller 24/09/2021 itibarıyla doğrudur. Versiyon: 0002



07AG6007BS

Bu kullanım talimatları sadece 07AG6007BS ürün kodlu MP Biomedicals Hızlı SARS-CoV-2 Antijen Testi için geçerlidir

**Bütün test sonuçlarınızı NHS'e bildirin**