


ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے اس پورے رہنما کو دھیان سے پڑھیں۔  
یہ ٹیسٹ اس سے مختلف ہوسکتا ہے جو آپ نے پہلے استعمال کیا ہے۔

# MP Biomedicals ریپڈ SARS-CoV-2 اینٹیجین ٹیسٹ کارڈ کے لیے آپ کا قدم بہ قدم رہنما

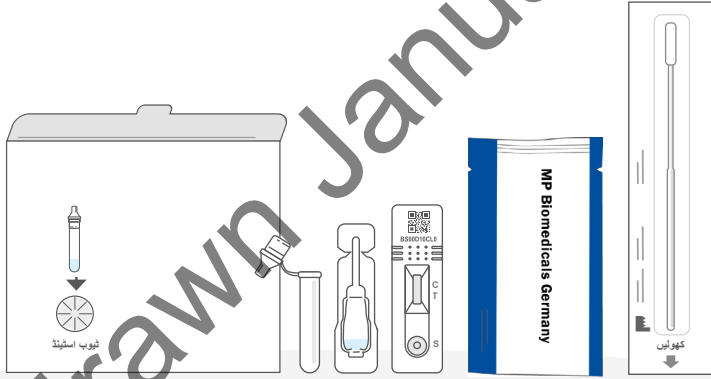

استعمال کی یہ ہدایات صرف MP Biomedicals ریپڈ SARS-CoV-2 اینٹیجین ٹیسٹ کارڈ 07AG6007BS،  
سے متعلق ہیں۔

یہ رہنما وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ COVID-19 کے مدنظر کس طرح خود کا یا دوسرے فرد کا ٹیسٹ کیا  
جائے، اور NHS کو نتائج کی رپورٹ کی جائے۔

متبادل زبان کے ورژن بشمول ویلش اور مظاہرے درج ذیل پر دستیاب ہیں

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://gov.uk/covid19-self-test-help)

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج کی رپورٹ NHS کو کریں

# آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے

15

منٹ کا  
سیٹ اپ

## آپ کا قدم بہ قدم رہنما

براہ کرم احتیاط سے استعمال کے لیے ہدایات پر عمل کریں۔ اور درست ترتیب میں اقدامات پر عمل کریں۔ ہر ٹیسٹ کو ترتیب دینے میں لگ بھگ 15 منٹ لگتے ہیں اور نتائج مزید 15 منٹ کے بعد تیار ہوں گے۔

## اس کتابچہ کے مشمولات

سیکشن	عنوان	صفحہ
1	اپنے ٹیسٹ کی جگہ تیار کریں	6
2	اپنے ٹیسٹ کٹ کے مشمولات کی پڑتال کریں	7
3	اپنا ٹیسٹ ترتیب دیں	8
4	اپنے سویب کا نمونہ لیں	10
5	کسی اور کی مدد کرنا	11
6	سویب کے نمونے پر کارروائی کریں	12
7	اپنا نتیجہ پڑھیں	14
8	اپنے نتیجے کی رپورٹ کریں	15
9	آپ کے نتائج کا کیا مطلب ہے	16
10	ٹیسٹ کی کارکردگی	17
11	اپنی ٹیسٹ کٹ بحفاظت ضائع کریں	17
12	اپنے ٹیسٹ کے نتائج کا ایک نوٹ بنائیں	18

## ٹیسٹ کرنے کے بارے میں مشورہ

آپ کی مدد کے لیے رہنما کے ساتھ مفید نکات، مشورے اور انتباہ والے خانے دیئے گئے ہیں۔ قدم بہ قدم ان ہدایات پر احتیاط سے عمل کرنے پر، آپ کے پاس معتبر نتیجہ حاصل کرنے کا زیادہ بہتر موقع ہوگا۔

## عمومی رہنمائی اور انتباہات

- اگر آپ نے ناک چھدوایا ہے تو سویب لینے سے پہلے ہینڈسنگ کو ہٹا دیں۔
- سویب لینے کے دوران اگر آپ کو ناک سے جریان خون کا سامنا ہوتا ہے تو، براہ کرم سویب لینا روک دیں۔
- سویب کا ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
- یہ پروڈکٹ فطری ربر لیٹیکس سے نہیں بنایا گیا ہے۔ تاہم اصل صارف کو جس طرح یہ پروڈکٹ ڈیلیور کیا گیا ہے اس میں فطری ربر لیٹیکس کی موجودگی یا سراغ کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا جا سکتا۔
- ٹیسٹ کٹ کو چھوٹے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
- سویب کے نمونے لینے کے اقدامات پر بہت احتیاط سے عمل کریں اور ہمیشہ اس کٹ کے ساتھ فراہم کردہ سویب استعمال کریں۔ نمونے کو صحیح طریقے سے اکٹھا کرنے میں ناکامی ٹیسٹ کے غلط نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔
- بصارتی نقص والے افراد سمیت جن افراد کو اضافی مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد کسی دوسرے بالغ فرد کے ذریعہ کی جا سکتی ہے۔ ٹیسٹ کرتے وقت صفحہ 11 کی اضافی معلومات پر خصوصی توجہ دیں۔

### انتباہ

تاریخ میعاد ختم ہونے کے بعد پروڈکٹ استعمال نہ کریں۔

### مشورہ

- ٹیسٹ کٹ کو ٹھنڈی خشک جگہ (4°C تا 30°C) میں رکھیں۔
- براہ راست دھوپ میں مت رکھیں اور فرج یا فریزر میں اسٹور مت کریں کیونکہ یہ ٹیسٹ کے غلط نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔
- اگر مہر بند ریپر خراب ہو گیا ہو یا سیل ٹوٹ گئی ہو تو ٹیسٹ کارڈ استعمال مت کریں۔
- کٹ کو کمرے کے درجہ حرارت (15°C تا 30°C) پر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کٹ کو 15°C سے کم والی جگہ پر اسٹور کیا گیا ہو تو استعمال کرنے سے پہلے اسے 30 منٹ تک کمرے کے معمول کے درجہ حرارت پر رہنے دیں۔

## COVID-19 میں مبتلا تقریباً 3 افراد میں سے 1 کو معلوم نہیں

ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہے۔

باقاعدہ از خود ٹیسٹنگ کی مدد سے ہم پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے خاندانوں اور سماج میں سب سے مصیبت زدہ افراد کا تحفظ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

## یہ ٹیسٹ کس کے لیے موزوں ہے

### 14 سال سے کم عمر کے بچے

بالغ فرد کے ذریعہ مدد کی جانی چاہیے۔ اگر آپ کسی بچے کی مدد کرنے میں پُر اعتماد محسوس نہیں کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ نہ کریں۔ (بچوں کی مدد کرنے سے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ کرم صفحہ 11 دیکھیں)

### 14 سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد

14-17 سال کی عمر کے جوان، بالغوں کی نگرانی میں خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو مدد کے ساتھ، دیگر تمام افراد از خود ٹیسٹ کریں اور رپورٹ کریں۔

### کتنی مرتبہ ٹیسٹ کرنا ہے

آپ کو کتنی بار ٹیسٹ کرنا چاہیے یہ آپ کے حالات اور موجودہ ملکی یا مقامی رہنما خطوط پر انحصار کرتے ہوئے مختلف ہو سکتا ہے۔

### اضافی مدد کہاں سے تلاش کریں

از خود ٹیسٹ کی مزید معلومات یہاں سے حاصل کریں:  
[gov.uk/covid19-self-test-help](https://gov.uk/covid19-self-test-help)

## آپ کو از خود ٹیسٹ کیوں کرنا چاہیے

یہ COVID-19 از خود ٹیسٹ کٹ ناک کے لیے ایک سویب ٹیسٹ ہے۔ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ آیا آپ انفیکشن پھیلانے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں علامات ہیں اور ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے جن میں علامات نہیں ہیں۔ تاہم آپ کو ملکی رہنما خطوط پر عمل کر کے چیک کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے کس قسم کا ٹیسٹ ٹھیک ہے۔

### اگر COVID-19 کے لیے آپ کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے:

• بیماری کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں تعاون کریں، آپ اور آپ کے گھرانے کو حکومت کے حالیہ رہنما خطوط پر عمل کرنا چاہیے:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

• اپنی علامات شروع ہونے کے بعد سے پچھلے 48 گھنٹوں میں یا اگر کوئی علامت نہیں ہے تو ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ دکھائی دینے کے دن سے آپ جن لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں یا جن مقامات پر گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ممکنہ COVID-19 کے انفیکشن کے لیے ٹیسٹ کر وایا جاسکے۔ مقامی اور ملکی رہنما خطوط پر ہمیشہ عمل کریں۔

### اگر COVID-19 کے مدنظر آپ کی جانچ منفی ہے

اس امر کا امکان ہے کہ ٹیسٹ کیے جانے کے وقت آپ متعدی نہیں تھے۔ تاہم، ٹیسٹ کا منفی نتیجہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ میں کورونا وائرس نہیں ہے۔ آپ کو حکومت کے رہنما خطوط پر عمل کرنا جاری رکھنا چاہیے۔

### مشورہ

اگر آپ یا آپ کے بچے/بچوں کو کورونا وائرس (COVID-19) کی علامات ہوں یا کورونا وائرس (COVID-19) کی زد میں آئے ہوں تو، براہ کرم آن لائن NHS کی رہنمائی سے رجوع کریں:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)


اگر آپ یا آپ کے بچے/بچوں کو کورونا وائرس (COVID-19) کی علامات ہوں اور کیفیت بگڑ جائے، یا 7 دنوں کے بعد آپ یا آپ کے بچے/بچوں کی طبیعت بہتر نہ ہو تو، NHS آن لائن سروس: [111.nhs.uk](https://111.nhs.uk) ملاحظہ کریں۔ اگر آپ کی رسائی انٹرنیٹ تک نہ ہو تو، NHS 111 کو کال کریں۔ طبی ایمرجنسی کے لیے 999 ڈائل کریں۔

اگر آپ کو فکر لاحق ہو تو مدد حاصل کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اپنے وجدان پر بھروسہ کریں۔

# کٹ کے مشمولات کی پڑتال کریں


# 1. اپنے ٹیسٹ کی جگہ تیار کریں

4 آپ کے ٹیسٹ باکس میں درج ذیل تمام مشمولات ہونے چاہئیں۔ یقینی بنائیں کہ کوئی بھی چیز خراب یا ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔

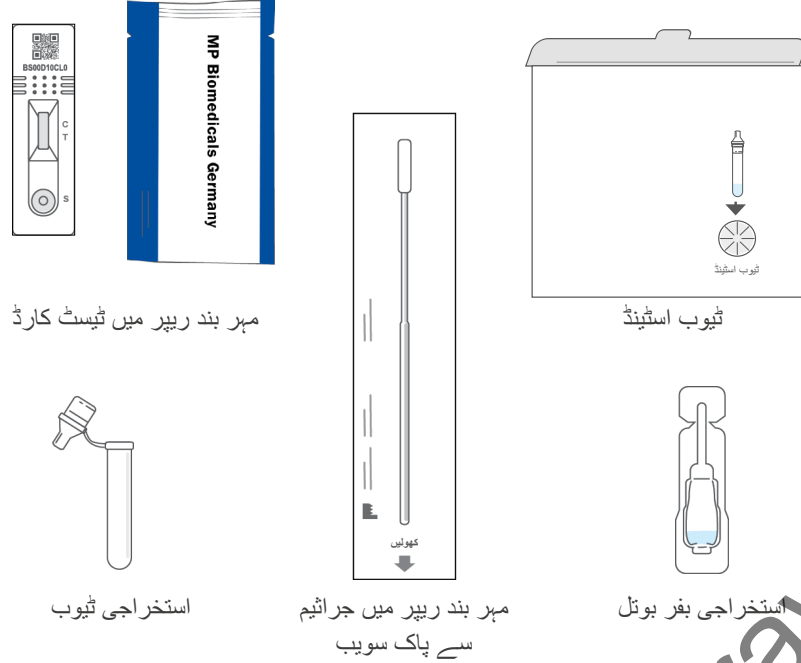

آپ کو ضرورت ہوگی: ایک گھڑی یا دیوار گھڑی، ٹشو، سطح کی صفائی والا مواد، ہینڈ سینیٹائزر یا صابن اور گرم پانی تک رسائی۔


1 دستاویز کو استعمال کرنے کے لیے ان ہدایات کو غور سے پڑھیں۔  
اگر آپ کو مزید مدد درکار ہو تو آپ سویب ٹیسٹ کی ویڈیو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

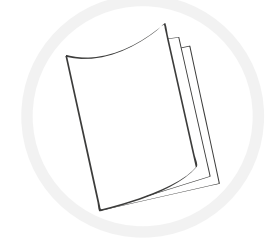

2 ٹیسٹ شروع کرنے سے عین قبل، ٹیسٹ کٹ کو رکھنے کے لیے ایک سپاٹ سطح کو صاف، صفائی اور خشک کریں۔



3 صابن اور گرم پانی، یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کر کے، 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔  
اگر آپ ایک سے زیادہ افراد کا ٹیسٹ کر رہے ہیں یا باطل ٹیسٹ دہرا رہے ہیں تو ہر ٹیسٹ کے درمیان اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھوئیں۔

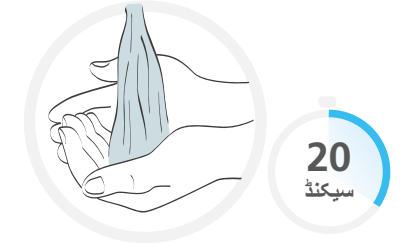

## مشورہ


اگر کوئی چیز خراب، ٹوٹی ہوئی یا غائب ہو تو، کیا کریں  
اگر آپ کو کوئی چیز خراب شدہ، ٹوٹی ہوئی یا غائب نظر آتی ہے تو، براہ کرم ٹیسٹ کٹ استعمال نہ کریں۔ آپ کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر پر کال کر کے فیڈ بیک فراہم کر سکتے ہیں۔  
لاٹھیں روزانہ، 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔  
کال کریں: 119 (موبائل اور لینڈ لائنوں سے مفت)۔  
ہم 200 زبانوں نیز برطانوی اشاراتی زبان میں تعاون پیش کرتے ہیں۔

اگر آپ کو ڈیوائس سے ایسا ضرر پہنچتا ہے جس کی رپورٹ کرنے سے دوسروں کو مدد مل سکتی ہے، تو براہ کرم اس پر جانیں:


[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

## 2. اپنا ٹیسٹ ترتیب دیں

5 مائع کے چھلکنے سے بچنے کے لیے استخراجی ٹیوب کو ٹیوب اسٹیٹ میں رکھیں۔

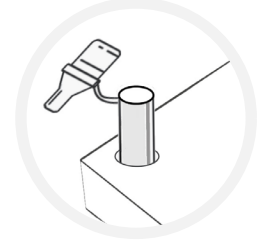


6 استخراجی بفر بوتل کے ڈھکن کو گھمائیں۔

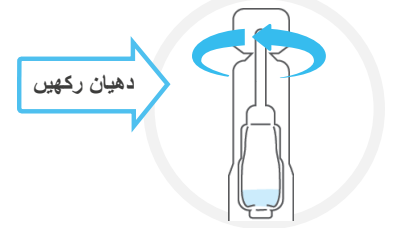

احتیاط: استخراجی بفر بوتل کو اپنے چہرے سے دور رکھ کر کھولیں اور دھیان رکھیں کہ ذرا بھی مائع باہر نہ چھلکے۔

7 استخراجی بفر بوتل سے تمام بفر محلول کو استخراجی ٹیوب میں نچوڑ لیں۔

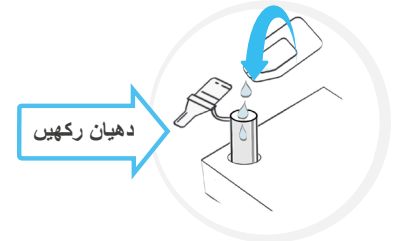

احتیاط: بوتل کو ٹیوب کے ساتھ ٹچ ہونے سے بچائیں۔

8 ٹٹو میں آہستگی سے اپنی ناک صاف کریں اور ٹٹو کو بند کوڑے دان میں پھینک دیں۔




اگر آپ کسی بچے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کی ناک صاف کرنے میں ان کی مدد کریں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ زائد بلغم سے چھٹکارا پا جائیں۔


9 صابن اور گرم پانی استعمال کر کے دوبارہ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔



10 مہر بند ریپر میں سویب کو تلاش کریں۔ سویب پر نرم، فیبرک والے سرے کی پہچان کریں۔

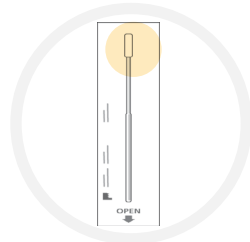

11 ادھیڑ کر سویب ریپر کو کھولیں اور سویب کو احتیاط سے باہر نکالیں۔

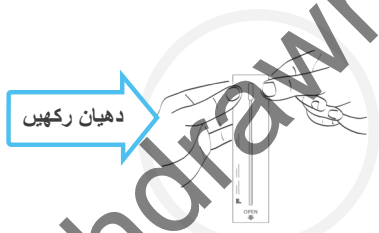

انتباہ

سویب کے نرم، فیبرک والے سرے کو اپنے ہاتھوں سے مت چھوئیں

## 3. اپنے سویب کا نمونہ لیں

## کسی اور کی مدد کرنا

### انتباہ

ٹیسٹ صرف ناک سے سویب نمونے کا استعمال کر کے انجام دیا جانا چاہئے۔ اگر آپ سویب کی ہدایات پر احتیاط سے عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کے غلط نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔

اگر 14 سال سے کم عمر کے بچے کی، یا جس فرد کو اعانت درکار ہو اس کی مدد کر رہے ہیں تو، صفحہ 11 پر درج مراحل پر عمل کریں۔

14 سال سے کم عمر کے بچوں کی مدد کسی بالغ فرد کو کرنی چاہیے۔ تیاری اور بچے یا تعاون کے ضرورت مند شخص کی مدد کرنے کے طریقے سے متعلق ذیل کی رہنمائی پر عمل کریں۔ آپ ایک مظاہرہ ویڈیو [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help) پر دیکھ سکتے ہیں۔

اگر آپ کسی بچے کی مدد کر رہے ہیں تو، انہیں ٹیسٹ کٹ دکھائیں اور ان سے بات کریں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹشو میں بچے سے اپنی ناک صاف کرنے کے لیے کہیں۔ ٹشو کو بند کوڑے دان میں پھینک دیں۔


12 سویب کو احتیاط سے ان کے ایک نٹھنے میں داخل کریں۔ سویب کے سرے کو مزاحمت محسوس ہونے تک داخل کیا جانا چاہئے۔



12 سویب کو احتیاط سے ایک نٹھنے میں داخل کریں۔ سویب کے سرے کو نٹھنے کے کنارے سے 2.5 سنٹی میٹر سے کم داخل نہیں کیا جانا چاہئے۔




13 ان کے نٹھنے میں چاروں طرف مدور حرکت میں 3-4 بار سویب کو آہستگی سے گھمائیں۔ اسے آہستگی سے نکالیں۔ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ان کے نٹھنے میں کافی اندر تک نہیں دھکیلنا ہے۔

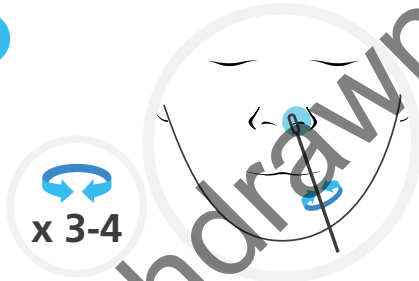

احتیاط: یہ تکلیف دہ محسوس ہوسکتا ہے۔ اگر وہ تیز مزاحمت یا درد محسوس کریں تو سویب کو گہرائی تک مت داخل کریں۔

اسی سویب کا استعمال کرتے ہوئے، دوسرے نٹھنے کے لیے 12 اور 13 والے مراحل دہرائیں۔

13 اپنے نٹھنے کے اندر چاروں طرف مدور حرکت میں 3-4 بار سویب کو آہستگی سے گھمائیں۔ اسے آہستگی سے نکالیں۔ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اپنے نٹھنے میں کافی اندر تک نہیں دھکیلنا ہے۔

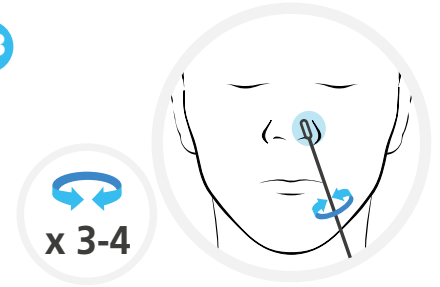


احتیاط: یہ تکلیف دہ محسوس ہوسکتا ہے۔ اگر آپ تیز مزاحمت یا درد محسوس کریں تو سویب کو گہرائی تک مت داخل کریں۔

اسی سویب کا استعمال کرتے ہوئے، دوسرے نٹھنے کے لیے 12 اور 13 والے مراحل دہرائیں۔

# 4. سویب کے نمونے پر کارروائی کریں

مشورہ

بہترین کارکردگی کے لیے، اپنے نتھنوں کو سویب کرنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو ناک کے سویب کا ٹیسٹ کریں۔

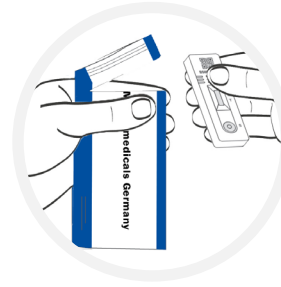

17

فوائل پاؤچ کھولیں اور ٹیسٹ کارڈ کو نکالیں۔


انتباہ

ایک بار کھولنے کے بعد، ٹیسٹ کارڈ کو فوراً استعمال کر لینا چاہیے۔

18

یقینی بنائیں کہ ٹیسٹ کارڈ صاف، ہموار اور سپاٹ سطح پر ہو۔


ٹیسٹ کے دوران کارڈ کو نہ ہلائیں۔

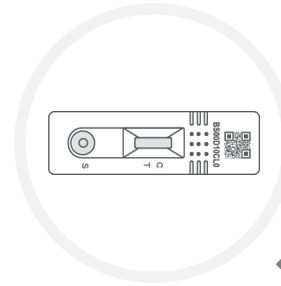

19

ٹیسٹ کے نمونے کے 3 قطروں کو ٹیسٹ کارڈ پر ویل (S کے ساتھ نشان زد) کے اندر رکھنے کے لیے استخراجی ٹیوب کو آہستگی سے دبائیں۔  
احتیاط: یقینی بنائیں کہ آپ مائع ٹپکار رہے ہیں اور ویل میں ہوا کے بلبلے شامل نہ ہوں۔


x3

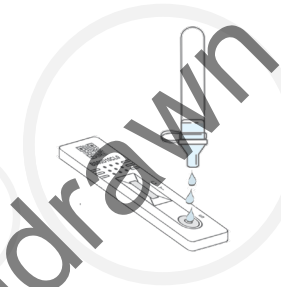

20

ٹائمز سیٹ کریں اور اپنا نتیجہ پڑھنے سے قبل 15 منٹ انتظار کریں۔ مثبت نتیجہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے، مگر منفی نتیجہ ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو پورے 15 منٹ تک انتظار کرنا چاہیے کیونکہ ٹیسٹ لائن (T) کو ظاہر ہونے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے۔

15 منٹ

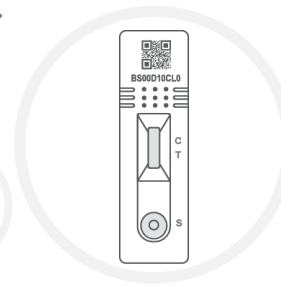


اگلے صفحہ پر اپنے نتیجے کو پڑھنے اور اس کی رپورٹ کرنے کا طریقہ معلوم کریں۔ <<

یہ ہدایاتی کتابچہ صرف MP Biomedicals ریپڈ SARS-CoV-2 اینٹیجین ٹیسٹ کارڈ سے متعلق ہے، پروڈکٹ کوڈ: 07AG6007BS.

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج کی رپورٹ NHS کو کریں

14 استخراجی ٹیوب لیں اور نمونے کے ساتھ سویب کو استخراجی ٹیوب میں رکھیں۔ 3-5 بار سویب کو گھمائیں۔ سویب کو استخراجی محلول میں 1 منٹ کے لیے چھوڑیں۔


14

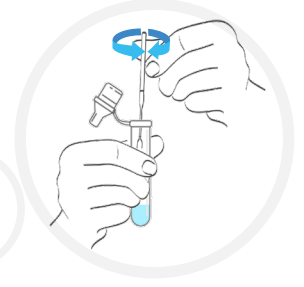

1 منٹ

15 ٹیوب میں زیادہ سے زیادہ محلول رکھنے کے لیے سویب کو نکالتے وقت انگلیوں کے سہارے استخراجی ٹیوب کو بھینچیں۔ سویب کو واپس سویب ریپر میں رکھ دیں۔

15

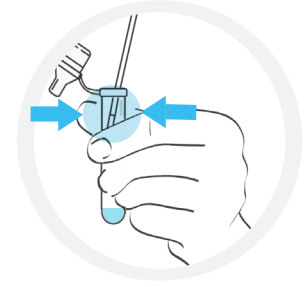

16 ڈراپر کیپ کو استخراجی ٹیوب کے اوپر مضبوطی سے فٹ کریں۔

16

مشورہ

اس مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔



یہ ہدایاتی کتابچہ صرف MP Biomedicals ریپڈ SARS-CoV-2 اینٹیجین ٹیسٹ کارڈ سے متعلق ہے، پروڈکٹ کوڈ: 07AG6007BS.

اپنے تمام ٹیسٹ کے نتائج کی رپورٹ NHS کو کریں


اہم

20  
منٹ

ٹیسٹ کو 20 منٹ سے زیادہ دیر تک تیار ہونے کے لیے مت چھوڑیں کیونکہ اس سے نتیجہ غلط ہو جائے گا۔

آپ کو چاہیے کہ NHS کو اپنے مثبت، منفی اور باطل نتائج کی رپورٹ کریں۔

تمام ٹیسٹ کے نتائج کو ریکارڈ کرنے سے سائنس دانوں کو وائرس کی نئی ابتلاء کا پتہ لگانے اور اس پر جوابی اقدام کرنے کا طریقہ بتانے میں مدد ملتی ہے۔ اگر لوگ صرف مثبت نتیجے کی ہی رپورٹ کریں تو، کیسز کی سطحیں اس سے زیادہ نظر آتی ہیں جتنی واقعتاً وہ ہیں۔

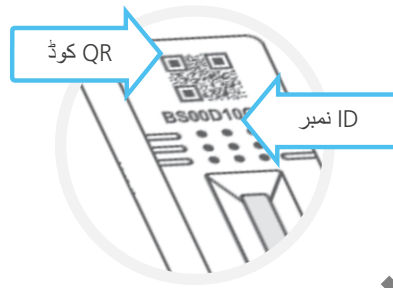

QR کوڈ

ID نمبر


لہذا یہاں تک کہ آپ کا نتیجہ منفی یا باطل ہو تو، آپ NHS کی معلومات درست رہنے کو یقینی بنائیں گے۔

آپ کو اپنے نتیجے کی رپورٹ کرنے کے لیے درج QR کوڈ، یا اس کے نیچے موجود ID نمبر درکار ہوتا ہے۔

آن لائن رپورٹ کریں (جلد سے جلد)

اگر آپ انگلینڈ، ویلز یا شمالی آئرلینڈ میں رہتے ہیں تو ملاحظہ کریں:

[gov.uk/report-covid19-result](https://gov.uk/report-covid19-result)

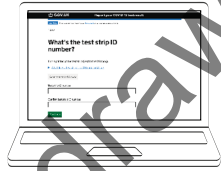

اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں تو ملاحظہ کریں:

[covidtest.scot](https://covidtest.scot)

یا بذریعہ ٹیلیفون رپورٹ کریں

119 پر کال کریں


لانٹیں روزانہ، 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں، (موبائل اور لینڈ لائنوں سے مفت)۔



مثبت نتیجہ




دو لکیریں نمودار ہوتی ہیں۔ ایک رنگین لکیر کنٹرول لائن والے حصہ (C) میں ہونی چاہیے، اور دوسری رنگین لکیر ٹیسٹ لائن والے حصہ (T) میں ہونی چاہیے۔  
دو لائنیں، ایک C سے آگے اور ایک T سے آگے، حتیٰ کہ دھندلی لائنیں ظاہر کرتی ہیں کہ ٹیسٹ مثبت ہے۔

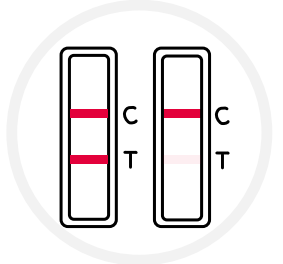

اہم

اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ خود کو انسولیٹ کریں اور آپ کے گھرانے کو چاہیے کہ خود کو انسولیٹ کرنے سے متعلق حکومت کے رہنما خطوط پر عمل کریں:


[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

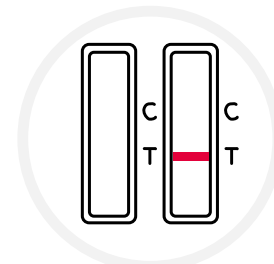

باطل نتیجہ



کنٹرول لائن (C) نمودار ہونے میں ناکام ہوتی ہے۔

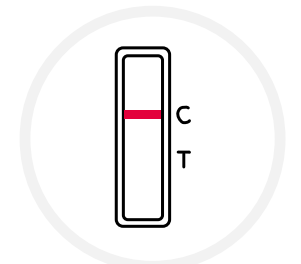

منفی نتیجہ

ایک رنگین لکیر کنٹرول لائن والے حصہ (C) میں نمودار ہوتی ہے۔ ٹیسٹ لائن والے حصہ (T) میں کوئی لکیر نمودار نہیں ہوتی ہے۔



# 7. آپ کے نتائج کا کیا مطلب ہے

آپ کا ٹیسٹ صرف اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب آپ نے اپنے نتیجے کی رپورٹ کر دی ہو

## مثبت نتیجہ

اگر آپ کو مثبت نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو، اس کا امکان ہے کہ آپ فی الحال COVID-19 سے متاثر ہیں۔ اور دوسروں کو متاثر کرنے کے خطرے کی زد ہیں۔ آپ کو خود کو انسولیٹ کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے نتیجے کی رپورٹ دیں گے، تو آپ کو اگلے مراحل انجام دینے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔

## انتباہ

آپ، اور جو بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، اسے موجودہ ملکی اور مقامی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے۔ اسے [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/) پر معلوم کیا جاسکتا ہے یا 119 پر کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر کو کال کر کے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لائنیں روزانہ 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔

## منفی نتیجہ

اگر آپ کو منفی نتیجہ ملتا ہے تو، اس امر کا امکان ہے کہ ٹیسٹ کیے جانے کے وقت آپ متعدی نہیں تھے۔ تاہم، ٹیسٹ کا منفی نتیجہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ میں COVID-19 نہیں ہے۔

اگر آپ کا ٹیسٹ منفی ہے تو، آپ پر لازم ہے کہ ملکی اور مقامی اصولوں اور رہنما خطوط پر عمل کرتے رہیں، جس میں باقاعدگی سے ہاتھ دھونا، سماجی دوری بنانا اور ضرورت پڑنے پر فیس کورنگس پہننا شامل ہے۔

اگر آپ میں علامات فروغ پاتی ہیں تو آپ کو خود کو انسولیٹ کرنا چاہیے اور یہاں سے موجودہ تجویز کردہ ٹیسٹ حاصل کرنا چاہیے: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) یا 119 کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر کو کال کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لائنیں روزانہ 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔

آپ کو اور آپ کے گھرانے کو قومی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

## باطل نتیجہ

اگر آپ کو باطل نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ کیا گیا تھا تو کیا آپ کو وائرس تھا۔ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو کورونا وائرس ہے یا نہیں، جلد از جلد دوسرا ٹیسٹ کروائیں۔ پہلے ٹیسٹ سے کسی بھی چیز کا دوبارہ استعمال نہ کریں، اور مرحلہ 1 سے ٹیسٹ کا طریقہ کار شروع کریں۔

## اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے

اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو، ٹیسٹ کٹ کا استعمال فوری طور پر بند کر دیں۔ اگر آپ کے پاس دوسرا ٹیسٹ دستیاب نہیں ہے تو، آپ NHS COVID-19 ایپ کی معرفت یا:

[gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) کو ملاحظہ کر کے یا کسٹمر کنٹیکٹ سنٹر کو 119 پر کال کر کے مختلف قسم کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لائنیں روزانہ 7 بجے صبح سے 11 بجے رات تک کھلی رہتی ہیں۔

## ٹیسٹ کی کارکردگی

اگر کسی کو اعلیٰ درجے کا کورونا وائرس (COVID-19) ہے تو ٹیسٹ سے مثبت نتیجہ ملنے کا زیادہ امکان ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایسے لوگوں کا پتہ لگنے کا سب سے زیادہ امکان ہے جو فی الحال متعدی ہیں اور جنہیں فوری طور پر خود کو انسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

## اپنی ٹیسٹ کٹ بحفاظت ضائع کریں

آپ کا ٹیسٹ مکمل ہو جانے پر، استعمال شدہ کٹ کے تمام مواد اپنے عمومی گھریلو کچرے میں ڈالیں۔

تلف کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔



اس ڈیوائس کی سپلائی کی صرف NHS ٹیسٹ اینڈ ٹریس پروگرام کے تحت ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر (DHSC) کی تعیناتی کے حصے کے بطور اجازت ہے۔

مینوفیکچرر:

MP Biomedicals Germany GmbH  
Thuringer Str. 15 37269  
Eschwege,  
(جرمنی) Germany



CE 0123

CE 0197

CE 0197

سویڈ مینوفیکچرر:

Jiangsu Hanheng Medical Technology Co.,Ltd. 16-B4, #1 North Qingyang  
Road, Tianning District, 213017, Changzhou, Jiangsu,  
(چین) China  
Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr.1, 47877, Willich,  
(جرمنی) Germany

EC REP

سویڈ مینوفیکچرر:

Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street, Jinzhou  
District, Dalian, 116100 Liaoning,  
(چین) China

EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga,  
(اسپین) Spain

## علامات کا اشاریہ

7 ٹیسٹ کے لیے  
کافی ہے



مینوفیکچرر



ایٹھلین آکسائیڈ کا  
استعمال کر کے  
جرائیم سے پاک کیا ہوا

STERILE/EO

30°C - 4  
اندروں استور کریں



اگر پیکج خراب  
شدہ ہو تو استعمال  
مت کریں



ان وٹرو ڈائگنوسٹک  
میڈیکل ڈیوائس

IVD

اس تاریخ تک  
استعمال کریں



لاٹ نمبر

LOT

ری سائیکل  
کے قابل



دوبارہ استعمال  
مت کریں



احتیاط



دھوپ سے  
دور رکھیں



کیٹلاگ نمبر

REF

یورپی مطابقت

CE

ہدایات برائے  
استعمال سے  
رجوع کریں



خشک رکھیں



مجاز نمائندہ

EC REP

اس دستاویز میں درج تمام معلومات اور تصاویر 24/09/2021 تک درست ہیں۔ ورژن 0002

07AG6007BS

REF