


Ghidul dvs. pas cu pas privind testul rapid antigen ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 (auto-testare)

Avertizare Nu amestecați și combinați componente de la alte seturi de testare


Citiți cu atenție întregul ghid înainte de a începe.

Acest test poate fi diferit de celelalte teste folosite înainte.

Test doar pentru nas

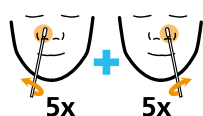


**1. Recoltați probe
din ambele nări**

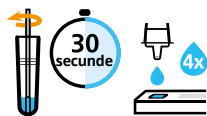

2. Prelucrați proba




3. Așteptați

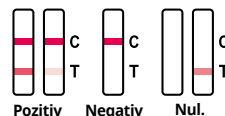

4. Rezultate

Raportați
NHS
rezultatul
testului dvs

5. Raportați

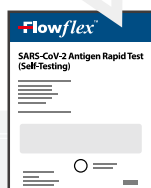

Aceste instrucțiuni se referă doar la testul rapid antigen ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 (auto-testare), cod de produs: L031-118Y5.

Acest ghid vă explică cum să vă testați pe dvs. sau o altă persoană împotriva COVID-19 și cum să raportați rezultatele la NHS. Sunt disponibile versiuni în alte limbi, inclusiv în galeză, alături de demonstrații video la [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)

Ce trebuie să faceți

Ghidul dvs. pas cu pas

Testul rapid antigen ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 (auto-testare) este un test rapid pentru detectarea COVID-19 acolo unde utilizatorii își recoltează probe cu bețișorul cu tampon din nas.

Acesta este destinat doar auto-testării și diagnosticării *in vitro*.

Citiți instrucțiunile integral și urmați pașii în ordinea corectă.

De ce trebuie să vă auto-testați

Acest set de auto-testare împotriva COVID-19 este un set de auto-testare cu bețișor cu tampon cu recoltare din nas, pentru a verifica dacă sunteți infectați. Acesta vă poate spune dacă aveți virusul, chiar fără simptome. Totuși, trebuie să respectați instrucțiunile la nivel național pentru a verifica ce tip de test vi se potrivește.

Ce găsiți în această broșură

| | |
|---|----|
| Ce trebuie să faceți | 2 |
| Instrucțiuni și depozitare | 3 |
| Despre acest test | 4 |
| Pregătiți zona de testare | 5 |
| Verificați conținutul setului dvs | 6 |
| Organizarea pentru test | 7 |
| Atunci când testați pe altcineva | 8 |
| Recoltați propriile probe | 9 |
| Prelucrați proba recoltată cu bețișorul | 10 |
| Citiți rezultatele | 12 |
| Raportați rezultatul | 14 |

Instrucțiuni și depozitare

Avertizare

Depozitați testele separat pentru a vă asigura că nu le amestecați componentele. Lichidul de la un tip de test nu va funcționa pe un alt test.

- Dacă aveți un piercing în nas, scoateți-l înainte de recoltarea probei.
- Dacă aveți sângerări nazale la recoltarea probei, opriți recoltarea. Bețișorul cu proba nu poate fi folosit și trebuie să o luați de la capăt.
- Produsul nu a fost realizat cu cauciuc natural (latex). Totuși, există posibilitatea introducerii unor cantități infime în timpul transportului și manipulării.
- Nu consumați alimente, băuturi, și nu fumați în zona unde sunt prelucrate probele sau seturile.
- Nu folosiți testul dacă oricare parte a acestuia prezintă deteriorări.
- Toate materialele de testare folosite trebuie să fie eliminate în siguranță în deșeurile menajere.
- Spălați-vă bine pe mâini înainte și după utilizare.
- Evitați utilizarea probelor care conțin sânge.
- Persoanele cu probleme de vedere și ale mâinilor pot avea nevoie de ajutor la recoltarea probelor și în cadrul procesului de testare.
- Nu folosiți sprayuri nazale cu cel puțin 30 minute înainte de recoltarea unei probe nazale.

Depozitare și manipulare

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.
- Setul de testare trebuie păstrat la temperaturi între 2 și 30 °C. **NU CONGELAȚI.**
- Nu folosiți testul după data expirării imprimată pe punga etanșă.
- Testul trebuie efectuat la temperaturi între 15 și 30 °C.



Eliminați setul de testare în condiții de siguranță.

După finalizarea testului, aruncați tot conținutul setului de testare folosit la deșeurile menajere. După eliminare, spălați-vă bine pe mâini.

Despre acest test

Cui îi este destinat acest test



Adulți

18 ani și peste

Auto-testați-vă și raportați, apălați la ajutor dacă este cazul.



Adolescenți

12 până la 17 ani

Auto-testați-vă și raportați cu supravegherea unui adult. Dacă este nevoie, adultul poate efectua testul.



Copii

Testul trebuie efectuat de către un adult. Nu efectuați testul dacă nu sunteți încrezători că puteți testa un copil.

Dacă aveți noi simptome de COVID-19

Accesați nhs.uk/coronavirus pentru indicațiile cele mai recente.

Solicitați testul actual recomandat:

accesați gov.uk/get-coronavirus-test sau sunați la centrul de contact pentru clienți la numărul **119**. Liniile sunt deschise de la 07:00 la 23:00 în fiecare zi (număr apelabil gratuit de pe fix și de pe mobil).

Dacă aveți motive de îngrijorare, nu amânați să apălați la ajutor. Aveți încredere în propriile instincte.



Avertizare



Dacă vă îngrijorează simptomele dvs.,

sau dacă acestea se agravează, contactați medicul generalist, accesați serviciul online ale NHS **111** la 111.nhs.uk sau sunați la **111** pentru a vorbi direct cu cineva.

În cazul unei urgențe medicale, sunați imediat la **999**.



Pregătiți zona de testare

Veți avea nevoie de: un cronometru cum ar fi un ceas de mână, de masă sau un dispozitiv mobil, șervețele, agent de curățare a suprafețelor, dezinfectant pentru mâini sau săpun și apă caldă.



- 1 Citiți cu atenție acest ghid de instrucțiuni. Dacă aveți nevoie de mai multă asistență, urmăriți clipul video online despre recoltarea de probe: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)



- 2 Imediat înainte de începerea testului, curățați și uscați o suprafață plană pe care să puneți setul de testare.



- 3 Spălați-vă bine pe mâini timp de 20 secunde cu săpun și apă caldă sau dezinfectant de mâini.

Dacă efectuați mai mult de un test, curățați suprafața și spălați-vă pe mâini din nou după fiecare test.

Verificați conținutul setului dvs


Avertizare

Nu amestecați și combinați componente de la alte seturi de testare

În cutia testului trebuie să aveți:

1x

Cutie cu orificiu pt. suportul cu soluție tampon pentru extracție

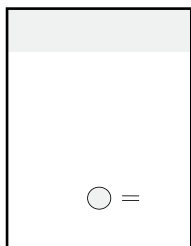


7x

Pungă de deșeuri




7x

Bețișor de unică folosință în ambalaj etanș

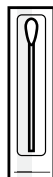


7x

Casetă de testare în pachet etanș

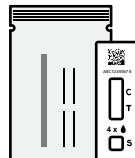

7x

Tub cu soluție tampon pt. extracție

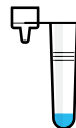

Sfat

Oferiți informații despre setul de testare sau raportați vătămrile

Dacă orice parte a setului dvs. de testare este deteriorat sau lipsește, nu folosiți setul de testare. În schimb, puteți folosi celelalte seturi de testare din pachet.

Dacă ați suferit vătămări sau ați avut o reacție la utilizarea acestui set de testare, raportați-le. Pentru a oferi informații despre setul dvs. de testare sau a raporta o vătămare corporală, accesați:

gov.uk/covid-19-test-feedback

Sau sunați la **119** (număr gratuit pentru mobil și fix). Liniiile sunt deschise zilnic, de la 07:00 la 23:00.


119 oferă asistență în 200 limbi dar și în limbajul britanic al semnelor.

119



Organizarea pentru test


Important

Verificați data expirării () imprimată pe pachetul sigilat. Nu folosiți testul după data expirării.




- 4 Scoateți caseta de testare din pachetul sigilat și puneți-o pe o suprafață curată și plană.

Avertizare După deschidere, începeți testarea în maximum 30 minute.

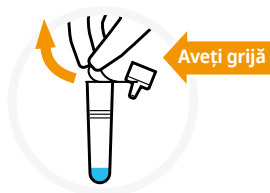

- 5 Țineți soluția tampon pentru extracție la distanță de față, scoateți cu grijă pelicula de etanșare de pe tub pentru a evita să vărsați din lichid.

Avertizare Dacă lichidul din tubul cu soluția tampon pentru extracție ajunge pe piele sau în ochi, spălați imediat și apelați la medic dacă este cazul.

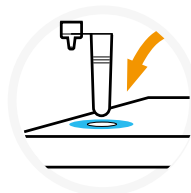

- 6 Introduceți tubul cu soluția tampon pentru extracție în suport pentru a evita vărsarea soluției tampon.



- 7 Găsiți bețișorul de unică folosință în interiorul ambalajului sigilat și identificați vârful moale din vată. Desfaceți ambalajul bețișorului doar când sunteți gata de utilizare. Scoateți cu atenție bețișorul.



- 8 Nu atingeți vârful de vată.

Avertizare Nu atingeți niciodată vârful moale din vată al bețișorului, în caz contrar trebuie să o luați de la capăt cu un alt bețișor.

Atunci când testați pe altcineva



Dacă testați copii sub 12 ani


Copiii sub 12 ani trebuie testați de un adult. Respectați instrucțiunile de mai jos privind pregătirea și testarea unui copil sau a unei persoane care are nevoie de ajutor. Puteți urmări un videoclip demonstrativ la: [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help)



Dacă testați copii, arătați-le setul de testare și spuneți-le ce urmează să faceți. Dacă se poate, așezați-i în brațele cuiva sau luați-i de mână. Cereți-le să își sufle nasul într-un șervețel. Aruncați șervețelul la coș, apoi spălați-vă bine pe mâini timp de **20 secunde**, cu săpun și apă caldă sau dezinfectant de mâini.



- 9 Introduceți ușor vârful cu vată al bețișorului într-o nară până când simțiți o anumită rezistență.

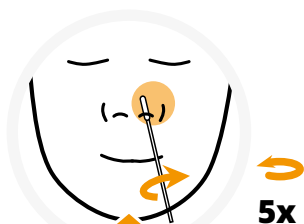

- 10 Rotiți bețișorul de 5 ori și atingeți interiorul nării.



- 11 Scoateți bețișorul și introduceți același bețișor în cealaltă nară. Repetați pașii 9 și 10.

Recoltați propriile probe

Sfat


Pentru cele mai bune rezultate, puneți bețișorul de unică folosință în tubul cu soluție tampon pentru extracție cât mai repede posibil după recoltarea probelor din nări.




Suflați-vă nasul într-un șervețel. Aruncați șervețelul la coș, apoi spălați-vă bine pe mâini timp de **20 secunde** cu săpun și apă caldă sau cu dezinfectant de mâini.



- 12** Introduceți tot vârful cu vată al bețișorului într-o nară. Rotind ușor, împingeți bețișorul la maximum 2,5 cm de la marginea nării. Puteți simți un disconfort. Nu introduceți bețișorul mai adânc dacă simțiți rezistență sau durere.

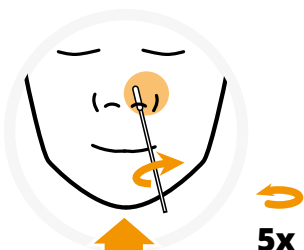

Recoltați din ambele nări

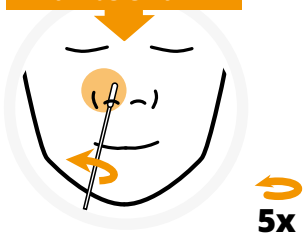


- 13** Rotiți bețișorul de 5 ori și frecați de interiorul nării.
- 14** Scoateți bețișorul și introduceți-l (același bețișor) în cealaltă nară. Repetați pașii 12 și 13.


Prelucrați proba recoltată cu bețișorul

Avertizare


Nu lăsați testul la prelucrat mai mult de 30 minute deoarece acest lucru va duce la anularea rezultatului.

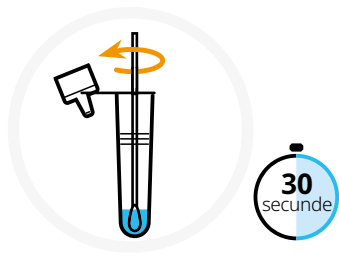


- 15** Luați tubul cu soluția tampon pentru extracție și puneți vârful de vată al bețișorului în tub, să intre în lichid. Apăsați cu forță vârful de marginea tubului cu soluția tampon pentru extracție, în timp ce îl rotiți în jurul tubului timp de 30 secunde.
Pentru cele mai bune rezultate, introduceți bețișorul în tubul cu soluție tampon pentru extracție cât mai repede posibil după recoltarea probelor din nări.

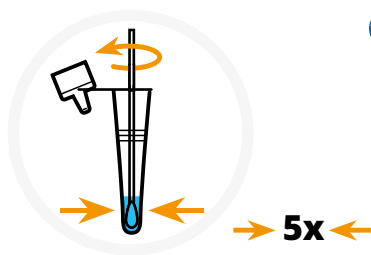


- 16** Rotiți bețișorul de 5 ori în timp ce strângeți cu degetele de părțile laterale ale tubului, pentru a introduce probele în lichid.

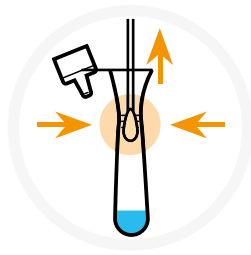


- 17** Pe măsură ce îl scoateți, strângeți bețișorul prin tubul cu soluția de extracție. Asigurați-vă că scoateți tot lichidul din vârful de vată al bețișorului. Puneți bețișorul în pungă de deșeuri pusă la dispoziție.

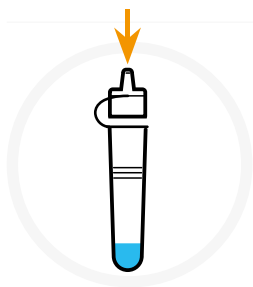

- 18** Puneți bine dopul picurător pe tubul cu soluția tampon de extracție. Amestecați bine răsucind sau agitând fundul tubului.

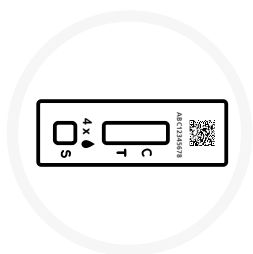


- 19** Asigurați-vă că așezați setul de testare pe o suprafață curată și plată. În timpul testului, nu mișcați caseta.

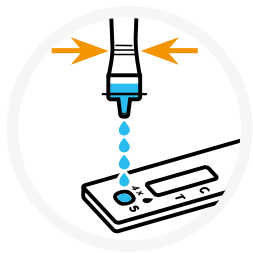

Doar de
4 x

- 20** Stoarceți ușor tubul cu soluția tampon pentru extracție și puneți 4 picături de lichid în alveola pentru probe (S) de pe caseta de testare. Asigurați-vă că picurați lichid și nu bule de aer. Puneți tubul cu soluție tampon pentru extracție în punga de deșeuri.

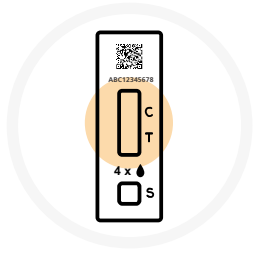


15-30
minute

- 21** Vedeți cât este ceasul și porniți un cronometru. Așteptați 15 minute înainte de a verifica rezultatul. Citiți rezultatul când cronometrul ajunge la 15-30 minute. Nu citiți după mai mult de 30 minute.


Citiți rezultatele

+ Dacă sunteți testat pozitiv

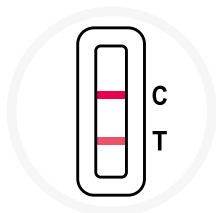

Apar două linii.

O linie colorată trebuie să apară în regiunea liniei de control (**C**), iar o altă linie colorată trebuie să fie în regiunea liniei de testare (**T**).

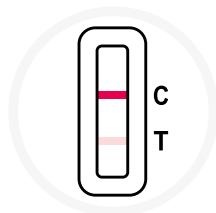

Două linii, una lângă **C** și una lângă **T**, chiar și mai slab colorate, arată că testul este pozitiv.

Dacă aveți un rezultat pozitiv, puteți fi foarte infecțioși.

Ce trebuie să faceți:

- Respectați instrucțiunile și stați acasă și evitați contactul cu alte persoane [nhs.uk/stay-at-home](https://www.nhs.uk/stay-at-home)
- Raportați rezultatul (mergeți la pagina 14 și respectați instrucțiunile). Serviciul pentru raportarea rezultatelor vă va oferi cele mai recente instrucțiuni privind lucrurile pe care trebuie să le faceți în continuare.
- Dacă puteți, informați persoanele cu care ați avut contact apropiat cu privire la rezultatul pozitiv al testului dvs.




Ce trebuie să facă ceilalți membri ai gospodăriei dvs.:

- Persoanele care locuiesc cu dvs. trebuie să respecte instrucțiunile privind evitarea infectării și răspândirii de COVID-19 de la: [nhs.uk/stay-at-home](https://www.nhs.uk/stay-at-home)



➔ Dacă aveți un test negativ

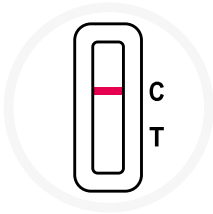


O linie colorată apare în regiunea liniei de control (**C**). Nu apare nicio linie în regiunea liniei de testare (**T**). Dacă aveți un rezultat negativ, este posibil să nu fi fost infectați în momentul efectuării testului.

Totuși, rezultatul negativ al testului nu este o garanție că nu aveți COVID-19. Dvs. și membrii gospodăriei dvs. trebuie să respectați instrucțiunile privind evitarea infectării cu COVID-19 și răspândirii acestuia
[nhs.uk/how-to-avoid-covid](https://www.nhs.uk/how-to-avoid-covid)




⊘ Rezultat nul

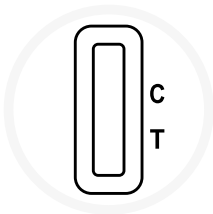

Raportarea rezultatelor negative și nule ajută NHS să afle câte teste au fost făcute și dacă sunt probleme cu testele.

Dacă nu apare linia de control (**C**) sau dacă apare o singură bară roșie (**T**), înseamnă că testul este nul.

Dacă aveți un rezultat nul, acest lucru înseamnă că nu se poate spune dacă ați avut virusul în momentul efectuării testului. Pentru a vedea dacă aveți coronavirusul, faceți un alt test cât mai repede posibil.

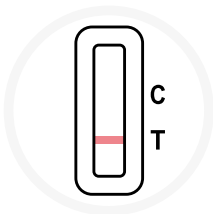

Nu refolosiți nimic de la primul test și începeți procedura de testare de la pasul 1.

Dacă problema persistă, opriți imediat utilizarea seturilor de testare.


Dacă nu aveți un alt test la dispoziție, puteți face un test diferit dacă:

- accesați [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test)
- sunați la centrul de contact pentru clienți la **119**.
Liniile sunt deschise zilnic, între 07:00 și 23:00.



Raportați rezultatul

Trebuie să raportați rezultatele pozitive, negative sau nule

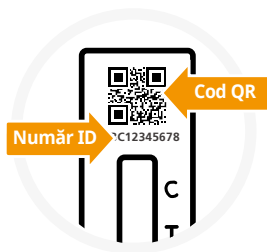

Înregistrarea tuturor rezultatelor testelor ajută oamenii de știință să depisteze noile izbucniri epidemice ale virusului și să ofere instrucțiuni privind măsurile de aplicat.

Dacă oamenii raportează doar rezultatele pozitive, nivelul cazurilor pare mai mare decât este în realitate.

Așadar, chiar dacă aveți rezultate **negative** sau **nule**, vă asigurați că informațiile NHS sunt exacte.

Aveți nevoie de **codul QR** sau **numărul ID** pentru a vă raporta rezultatul.

Cum să raportați rezultatele



Raportați online (cel mai repede)

Dacă locuiți în Anglia, Țara Galilor sau Irlanda de Nord, accesați:

gov.uk/report-covid19-result

Dacă locuiți în **Scotia**, accesați:

covidtest.scot



119



Raportați telefonic

Sunați la **119**

Liniile sunt deschise zilnic, de la 07:00 la 23:00, (cu apel gratuit de pe mobil și fix)

Simboluri folosite



Producător



Conține suficient pt. $<n>$ teste



Limită de temperatură



Dispozitiv medical pentru diagnosticare *in vitro*



Data expirării



A nu se reutiliza



Consultați instrucțiunile de utilizare



Numărul lotului



Număr de catalog



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană



Data fabricației



A se păstra la loc uscat



Nu folosiți dacă ambalajul este deteriorat



A nu se resteriliza



A se feri de soare



Sterilizat cu oxid de etilenă



Reciclabil



Atenție, consultați instrucțiunile

Nu finalizați testul decât după ce raportați rezultatul



Raportați
rezultatul
testului


Furnizarea acestui dispozitiv este permisă doar ca parte a implementării Agenției pentru siguranță în domeniul sănătății din Regatul Unit (UKHSA) din cadrul programului NHS Test and Trace.

Test rapid antigen Flowflex™ SARS-CoV-2 (auto-testare)



ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R. China (R.P. Chineză), 310030
Site web: www.aconbio.com
E-mail: COVID19selftest@aconlab.com.cn

EC REP

MedNet EC-REP GmbH  0123
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany (Germania)



Bețișoare de unică folosință



Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd.
Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou 225109, Jiangsu, P.R. China (R.P. Chineză)

EC REP

Llins Service & Consulting GmbH
Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany (Germania)

 0197

OR



Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District, Changzhou, 213017 Jiangsu P.R. China (R.P. Chineză)

EC REP

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1, 47877, Willich, Germany (Germania)

 0197

Versiunea 1151414701 Data intrării în vigoare 22.03.2022

Toate informațiile și imaginile din acest document sunt corecte, conform ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Test rapid antigen Flowflex™ SARS-CoV-2 (auto-testare), cod de produs: L031-118Y5

Această broșură cu instrucțiuni se referă doar la testul rapid antigen ACON Flowflex™ SARS-CoV-2 (auto-testare), L031-118Y5